



Manuale d'uso Tecnico

Sistema Automatizzato di Erogazione di Insulina **Omnipod® 5**



Contatti e informazioni importanti

Assistenza clienti - 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Sito web: omnipod.com

Indirizzo: Insulet Corporation, 100 Nagog Park, Acton MA 01720, USA

Modello Controller: PDM-M001-G-MG

Numero di serie: _____

Sistema Automatizzato di Erogazione di Insulina Omnipod® 5

Data di avvio: _____

© 2024 Insulet Corporation. Insulet, Omnipod, il logo Omnipod e SmartAdjust sono marchi commerciali o marchi registrati di Insulet Corporation. Tutti i diritti riservati. Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Insulet Corporation è concesso in licenza. Dexcom e Dexcom G6 sono marchi commerciali registrati di Dexcom, Inc. e il loro utilizzo è autorizzato. L'involucro del sensore, FreeStyle, Libre e i marchi correlati sono marchi di Abbott e il loro utilizzo è autorizzato. Tutti gli altri marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari. L'utilizzo di marchi commerciali di terze parti non costituisce un'approvazione o implica alcuna relazione o altri tipi di affiliazione.

PT-001887-AW REV 01 09/24

Sommario

Sezione 1: Prima di iniziare	1
Capitolo 1: Introduzione	3
1.1 Benvenuti nel Sistema Omnipod® 5	4
1.2 Informazioni su questo Manuale d'uso tecnico	6
1.3 Indicazioni per l'uso	6
1.4 Insuline compatibili	8
1.5 Avvertenze generali	8
1.6 Precauzioni generali	12
Sezione 2: Caratteristiche del microinfusore Omnipod 5	17
Importanti informazioni di sicurezza relative al microinfusore Omnipod 5	19
Capitolo 2: Terminologia del sistema e navigazione	31
2.1 Terminologia	32
2.2 Uso del touchscreen e immissione delle informazioni	36
Capitolo 3: Panoramica del Sistema Omnipod 5	41
3.1 Comunicazione tra Sensore e App Omnipod 5	43
3.2 App Omnipod 5	45
3.3 Blocco schermo e sicurezza	46
3.4 Barra di stato	48
3.5 Schermata Home	49
3.6 Menu principale della schermata Home	57
3.7 Notifiche e messaggi	58
3.8 Panoramica delle Modalità Manuale e Automatizzata	60
Capitolo 4: Configurazione dell'applicazione Omnipod 5	63
4.1 Configurazione di un account	64
4.2 Prepararsi alla formazione	64
4.3 Impostazioni generali sul Controller fornito da Insulet	66
4.4 Impostazioni basali	71
4.5 Impostazioni dei boli	75
4.6 La configurazione dell'App è completata	79
4.7 Salvataggio delle impostazioni come riferimento	80
Capitolo 5: Attivazione e sostituzione del Pod	81
5.1 Avvio del processo di attivazione del Pod	82
5.2 Configurazione di un nuovo Pod	85
5.3 Riempimento della siringa con insulina	85

5.4 Riempimento, attivazione, applicazione e avvio del Pod	86
5.5 Controllo del sito di infusione	95
5.6 Passaggio alla Modalità Automatizzata	96
5.7 Disattivazione di un Pod attivo	96
5.8 Ulteriori informazioni sull'utilizzo del Pod.....	98
Capitolo 6: Programmi Basale	101
6.1 Informazioni sui Programmi Basale	102
6.2 Revisione di tutti i Programmi Basale.....	103
6.3 Creazione di nuovi Programmi Basale.....	103
6.4 Modifica di un Programma Basale	104
6.5 Eliminazione di un Programma Basale	105
6.6 Passaggio a un Programma Basale diverso	105
6.7 Erogazione di insulina basale.....	106
Capitolo 7: Velocità Basali Temporanee	109
7.1 Informazioni sulle Velocità Basali Temporanee.....	110
7.2 Avvio di una Basale Temporanea.....	111
7.3 Annullamento di una Basale Temporanea	113
7.4 Erogazione di Velocità Basali Temporanee	113
Capitolo 8: Letture della glicemia	119
8.1 Informazioni sulle letture della glicemia	120
8.2 Immissione della lettura della glicemia	121
8.3 Letture della glicemia alta e bassa.....	122
Capitolo 9: Sospensione e avvio dell'erogazione di insulina	125
9.1 Sospensione dell'erogazione di insulina	126
9.2 Metodi per sospendere temporaneamente l'erogazione di insulina in Modalità Manuale	127
9.3 Avvio dell'erogazione di insulina	128
Capitolo 10: Modifica delle impostazioni	131
10.1 Impostazioni generali	132
10.2 Impostazioni dei promemoria	137
10.3 Impostazioni di Basale e Basale Temporanea.....	139
Capitolo 11: Visualizzazione di cronologia e registri.	141
11.1 Informazioni sulla cronologia recente e sui registri precedenti ...	142
11.2 Visualizzazione del Grafico sensore	142
11.3 Stati del Grafico sensore.....	143
11.4 Panoramica delle informazioni sulla cronologia.....	145
11.5 Calcoli per i sommari della cronologia	148
11.6 Sezione Dettagli Cronologia	149

Capitolo 12: Gestione degli aggiornamenti del software	155
12.1 Controller fornito da Insulet	156
Capitolo 13: Allarmi, azioni e notifiche di promemoria	159
13.1 Tipi di allarmi e notifiche	161
13.2 Schermata di allarmi e notifiche	162
13.3 Suoni e vibrazioni	163
13.4 Suoni e vibrazioni informativi	164
13.5 Risposta agli allarmi	166
13.6 Elenco degli Allarmi di Pericolo	168
13.7 Elenco degli Allarmi di Notifica.....	177
13.8 Elenco delle notifiche Elemento di Azione	182
13.9 Silenziamento degli allarmi non risolti.....	190
13.10 Risposta alle notifiche di promemoria.....	191
13.11 Elenco notifiche di promemoria.....	192
Capitolo 14: Cura e manutenzione di Controller e Pod	195
14.1 Conservazione e cura del Pod e dell'insulina	196
14.2 Conservazione e manutenzione del Controller.....	197
14.3 Manutenzione della batteria del Controller.....	200
Capitolo 15: Convivere con il diabete	205
15.1 Controlli del sito di infusione.....	206
15.2 Prestare attenzione ai livelli di glucosio	207
15.3 Viaggi e vacanze.....	208
15.4 Come evitare valori bassi, alti e chetoacidosi diabetica	211
15.5 Gestione delle situazioni speciali.....	219
Sezione 3: Suggeritore SmartBolus	223
Importanti informazioni di sicurezza del Suggeritore SmartBolus	225
Capitolo 16: Erogazione di un bolo	227
16.1 Erogazione di un bolo manuale.....	228
16.2 Erogazione di boli immediati e Boli prolungati	229
16.3 Monitoraggio del progresso di un bolo.....	230
16.4 Annullamento dell'erogazione di un bolo in corso	231
Capitolo 17: Erogazione di un bolo con il Suggeritore SmartBolus	233
17.1 Informazioni sul Suggeritore SmartBolus.....	234
17.2 Immissione delle informazioni del pasto	236
17.3 Creazione di un Alimento Personalizzato.....	237
17.4 Modifica degli Alimenti Personalizzati	237

17.5	Immissione delle informazioni del pasto con Alimenti Personalizzati	238
17.6	Inserimento di una lettura glicemica o utilizzo di un valore glicemico del sensore	238
17.7	Insulina Attiva (IOB)	241
17.8	Regolazioni al calcolo	242
17.9	Erogazione di un bolo immediato	242
17.10	Erogazione di un Bolo prolungato.....	244
17.11	Impostazioni dei boli.....	245
Capitolo 18: Comprensione dei calcoli del Suggeritore SmartBolus		253
18.1	Il Suggeritore SmartBolus	254
18.2	Esempi del Suggeritore SmartBolus	268
Utilizzo di un SENSORE con Omnipod 5		273
Importanti informazioni di sicurezza relative al Sensore		275
Capitolo 19: Utilizzo di un Sensore Dexcom G6 con Omnipod 5 .		277
19.1	Panoramica di Dexcom G6.....	278
19.2	Posizionamento del Sensore Dexcom G6	279
19.3	Utilizzo del Dexcom G6 con Omnipod 5.....	280
19.4	Valori glicemici del sensore.....	281
19.5	Frecce della tendenza glicemica del sensore	282
19.6	Messaggi di comunicazione	283
19.7	Informazioni sulla connessione del Dexcom G6 al Pod.....	285
19.8	Connessione del Dexcom G6 durante la configurazione iniziale del Pod	286
19.9	Connessione del Trasmettitore del Dexcom G6	286
19.10	Disconnessione del Trasmettitore dal Pod	287
19.11	Passaggio a Dexcom G6 da un altro Sensore.....	288
Capitolo 20: Utilizzo di un Sensore FreeStyle Libre 2 Plus con Omnipod 5		291
20.1	Panoramica del Sensore FreeStyle Libre 2 Plus	293
20.2	Applicazione e posizionamento del Sensore FreeStyle Libre 2 Plus.....	295
20.3	Utilizzo del Sensore FreeStyle Libre 2 Plus con l'App Omnipod 5	298
20.4	Tendenze glicemiche del sensore e indicatori	304
20.5	Messaggi di comunicazione e problemi del Sensore FreeStyle Libre 2 Plus.....	306

20.6	Informazioni sulla connessione di un Sensore FreeStyle Libre 2 Plus al Pod.....	314
20.7	Connessione di un Sensore FreeStyle Libre 2 Plus durante la configurazione iniziale del Pod	315
20.8	Rimozione del Sensore: scadenza ed eliminazione.....	319
20.9	Passaggio a FreeStyle Libre 2 Plus da un altro Sensore	322

Sezione 5: Modalità Automatizzata 325

Importanti informazioni di sicurezza relative alla Modalità Automatizzata 327

Capitolo 21: Informazioni sulla Modalità Automatizzata 329

21.1	Informazioni sulla Modalità Automatizzata.....	330
21.2	Informazioni sul Sensore in Modalità Automatizzata.....	333
21.3	Impostazioni del bolo e importanza di un bolo	335
21.4	Adattabilità del Pod	335
21.5	Informazioni sulla Modalità Automatizzata: Limitata.....	337
21.6	Limitazioni all'erogazione automatica	339

Capitolo 22: Passaggio dalla Modalità Manuale alla Modalità Automatizzata 341

22.1	Passaggio dalla Modalità Manuale alla Modalità Automatizzata	342
22.2	Passaggio dalla Modalità Automatizzata alla Modalità Manuale.....	344

Capitolo 23: Funzione Attività fisica..... 345

23.1	Informazioni sulla Funzione Attività fisica	346
23.2	Avvio della Funzione Attività fisica.....	347
23.3	Annullamento della Funzione Attività fisica	348

Capitolo 24: Allarmi della Modalità Automatizzata..... 349

24.1	Elenco degli Allarmi di Notifica.....	350
------	---------------------------------------	-----

Capitolo 25: Informazioni aggiuntive 355

25.1	Studi su bambini, adolescenti e adulti con diabete di tipo 1	356
25.2	Studi in bambini molto piccoli con diabete di tipo 1	370

Sezione 6: Informazioni aggiuntive 379

Capitolo 26: Risoluzione dei problemi..... 381

26.1	Domande frequenti sul microinfusore Omnipod 5.....	382
26.2	Domande frequenti sul Suggestore SmartBolus.....	388
26.3	Domande frequenti sul Sensore	389

26.4	Domande frequenti relative alla Modalità Automatizzata.....	396
26.5	Problemi di comunicazione del Pod –“Riprova”	398
26.6	Informazioni su come mantenere il Controller Omnipod 5 nelle vicinanze.....	401
26.7	Reclami sui dispositivi	402
26.8	Modalità di Fabbrica e Modalità di Avvio	403
Appendice	405
Indice	433
Le mie impostazioni	438

PRIMA DI INIZIARE

- 1** Introduzione



Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

CAPITOLO 1

Introduzione

Sommario

1.1 Benvenuti nel Sistema Omnipod® 5	4
Le caratteristiche del Sistema Omnipod 5	4
1.2 Informazioni su questo Manuale d'uso tecnico	6
1.3 Indicazioni per l'uso	6
Indicazioni per l'uso	6
Controindicazioni	7
1.4 Insuline compatibili	8
1.5 Avvertenze generali	8
1.6 Precauzioni generali	12
Rischi potenziali	14
Importanti informazioni per l'utilizzatore	15
Kit di emergenza	16

1.1 Benvenuti nel Sistema Omnipod® 5

Il Sistema Omnipod® 5 è il primo dispositivo indossabile, a contatto con il corpo, senza catetere e automatizzato per l'erogazione di insulina quando utilizzato in combinazione con il Sistema di Monitoraggio Continuo del Glucosio Dexcom G6® o con il Sistema di Monitoraggio Flash del Glucosio FreeStyle Libre 2 Plus per adattare continuamente ed erogare automaticamente l'insulina in base alle specifiche esigenze personali. Il Sistema Omnipod 5 è composto da un Pod di insulina senza catetere e dall'App Omnipod® 5 su un Controller fornito da Insulet.

Le caratteristiche del Sistema Omnipod 5

- **Pod:** il Pod fornisce un'erogazione continua di insulina sottocutanea. Può essere indossato per un massimo di 3 giorni e riempito con fino a 200 unità di insulina ad azione rapida U-100 (minimo 85 unità).
- **Senza catetere:** il Pod è privo di catetere, il che consente di posizionarlo quasi in qualsiasi punto si desideri effettuare un'iniezione. Il Pod è impermeabile fino a 7,6 metri (25 piedi) e per un massimo di 60 minuti (IP28).
- **App Omnipod® 5:** l'App Omnipod 5 consente di selezionare un profilo basale, impostazioni di bolo e target glicemico, attivare e disattivare il Pod, connettersi a un Sensore di glucosio compatibile e selezionare la modalità di erogazione dell'insulina. L'App Omnipod 5 è installata sul Controller fornito da Insulet.
- **Due Sensori del glucosio compatibili:** il Sistema Omnipod 5 è progettato per funzionare con il Sistema di Monitoraggio Continuo del Glucosio (CGM) Dexcom G6 o con il Sistema di Monitoraggio Flash del Glucosio FreeStyle Libre 2 Plus. I due sistemi devono essere ottenuti separatamente. Le tendenze glicemiche e i valori glicemici del sensore vengono utilizzati per l'erogazione di insulina automatizzata in Modalità Automatizzata, nonché per il calcolo del bolo in entrambe le Modalità Automatizzata e Manuale.
 - Il Trasmettitore Dexcom G6 deve essere connesso e attivo all'interno dell'app Dexcom G6 per poter inviare i valori glicemici del sensore al Pod.
 - Il Sensore FreeStyle Libre 2 Plus deve essere avviato, connesso e attivo all'interno dell'App Omnipod 5 per poter inviare i valori glicemici del sensore al Pod.
- **Due modalità di funzionamento:** il Sistema Omnipod 5 permette le seguenti modalità di funzionamento: Automatizzata e Manuale. Il Sistema Omnipod 5 consente di passare da una modalità all'altra

quando vengono soddisfatte le condizioni richieste. Il Sistema si comporta in modo diverso a seconda della modalità selezionata.

- **Modalità Automatizzata:** ogni Pod è dotato della tecnologia SmartAdjust™ che regola l'insulina ogni 5 minuti per allineare il valore del glucosio al target glicemico personalizzato o Target Glicemico. L'aggiustamento si basa su una previsione dei valori del glucosio dopo 60 minuti e considera la tendenza e il valore glicemici del sensore, la Velocità Basale Adattiva e l'insulina ancora attiva nell'organismo.
- **Modalità Manuale:** il Sistema Omnipod 5 eroga l'insulina in base a Programmi Basale definiti dall'utilizzatore. In Modalità Manuale, non è prevista alcuna regolazione automatica dell'erogazione di insulina.
- **Funzione Attività fisica:** in Modalità Automatizzata, è possibile attivare la Funzione Attività fisica nei momenti in cui è necessaria meno insulina, ad esempio quando ci si prepara a svolgere attività fisica. Quando la Funzione Attività fisica è abilitata, il sistema eroga meno insulina e punta a un Target Glicemico di 8,3 mmol/L (150 mg/dL).
- **Suggeritore SmartBolus:** se si ha intenzione di mangiare o se il glucosio è elevato, il Suggeritore SmartBolus può suggerire una quantità di bolo di insulina in base alle impostazioni personali, ai valori immessi, alla tendenza e al valore glicemici del sensore, se disponibili. Il Suggeritore SmartBolus consente l'erogazione immediata del bolo di insulina sia in Modalità Automatizzata sia Manuale. In Modalità Manuale, il Suggeritore SmartBolus consente anche un Bolo prolungato. Il Bolo prolungato può essere personalizzato per erogare la dose in bolo in un determinato lasso di tempo.
- **Monitoraggio dei valori glicemici del Sensore e dell'insulina:** il Sistema Omnipod 5 registra fino a 90 giorni di informazioni, tra cui erogazione basale, dosi di bolo, carboidrati, allarmi e dati relativi al glucosio. In Modalità Automatizzata, il sistema registra l'erogazione di insulina automatizzata e i corrispondenti valori glicemici del sensore ogni 5 minuti. La schermata Home presenta un Grafico sensore che consente di fare riferimento ai valori glicemici del sensore e visualizza alcune informazioni sull'erogazione di insulina.
- **Monitoraggio Siti Pod:** quando si attiva un nuovo Pod, il Sistema consente di monitorare il sito su cui è stato applicato un Pod. Ciò consente di fare riferimento ai siti di applicazione dei Pod precedenti quando si decide dove posizionare il Pod successivo.

1.2 Informazioni su questo Manuale d'uso tecnico

Lo scopo di questo *Manuale d'uso tecnico* è di fornire assistenza per le caratteristiche e le funzioni del Sistema Omnipod 5. Fornisce istruzioni dettagliate su come utilizzare correttamente il Sistema, nonché importanti avvertenze e precauzioni per garantire la sicurezza dell'utilizzatore durante l'uso.

Nota: il presente *Manuale d'uso tecnico* è destinato all'uso esclusivamente con il Controller fornito da Insulet con l'App Omnipod 5, modello PDM-M001-G-MG. Per individuare la versione del proprio Controller fornito da Insulet, girarlo. Se sul retro del Controller è presente la dicitura "PDM-M001-G-MG", questo è il *Manuale d'uso tecnico* corretto. In caso contrario, contattare l'Assistenza clienti. Il riferimento a un *Manuale d'uso tecnico* non corretto può causare un uso improprio del Sistema Omnipod 5.

Nota: le immagini delle schermate riportate nel presente *Manuale d'uso tecnico* hanno uno scopo puramente illustrativo e non devono essere considerate come indicazioni per le impostazioni da parte dell'utilizzatore. Consultare sempre l'operatore sanitario di riferimento per determinare le impostazioni più adatte alla propria condizione.

Le cure e i trattamenti sanitari sono un ambito complesso che richiede i servizi di operatori sanitari qualificati. Il presente *Manuale d'uso tecnico* ha uno scopo puramente informativo e non deve essere considerato fonte di raccomandazioni o consigli medici o sanitari destinati alla diagnosi, al trattamento o a qualsiasi altra esigenza individuale. Il *Manuale d'uso tecnico* non sostituisce in alcun modo le raccomandazioni, i consigli e/o i servizi medici o sanitari forniti da un operatore sanitario qualificato. Non fare in alcun modo affidamento sul presente *Manuale d'uso tecnico* per questioni relative alla propria salute personale e alle decisioni e le cure associate. Tutte le decisioni e tutti i trattamenti devono essere discussi con un operatore sanitario qualificato che conosce bene le esigenze individuali dell'utilizzatore.

1.3 Indicazioni per l'uso

Indicazioni per l'uso

Il **Sistema Automatizzato di Erogazione di Insulina Omnipod 5** è un sistema di erogazione di insulina a singolo ormone per la somministrazione di insulina U-100 per via sottocutanea per la gestione del diabete di tipo 1 in soggetti che abbiano almeno 2 anni di età che necessitano di tale terapia.

Il Sistema Omnipod 5 funziona come Sistema Automatizzato di Erogazione di Insulina se utilizzato con dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) compatibili.

In Modalità Automatizzata, il sistema Omnipod 5 è un ausilio per soggetti affetti da diabete di tipo 1 per raggiungere i target glicemici stabiliti dai loro operatori sanitari. È destinato alla modulazione (aumento, diminuzione o sospensione) della somministrazione di insulina nel rispetto di valori limite predefiniti utilizzando i valori glicemici attuali e previsti del sensore per mantenere la glicemia a livelli di Target Glicemico variabili, riducendo in tal modo la variabilità glicemica. Questa diminuzione della variabilità è finalizzata alla riduzione di frequenza, gravità e durata sia nei casi di iperglicemia sia in quelli di ipoglicemia.

Il Sistema Omnipod 5 può inoltre essere utilizzato in Modalità Manuale erogando insulina a velocità impostate o regolate manualmente.

Il Sistema Omnipod 5 è destinato all'uso da parte di un singolo paziente. Il Sistema Omnipod 5 è indicato per l'uso con l'insulina U-100 dei marchi NovoLog®/NovoRapid®, Humalog®, Admelog®/Insulin lispro Sanofi®, Trurapi®/Insulin aspart Sanofi® e Kirsty®.

Controindicazioni

Il Sistema Omnipod 5 NON è consigliato a coloro che:

- non riescono a monitorare il glucosio come raccomandato dall'operatore sanitario di riferimento
- non riescono a mantenersi in contatto con l'operatore sanitario di riferimento
- non riescono a usare il Sistema Omnipod 5 come da istruzioni
- assumono idrossiurea e utilizzano Dexcom G6, condizione che può portare a valori glicemici del sensore falsamente elevati e a una somministrazione eccessiva di insulina che, a sua volta, può dare luogo a episodi di ipoglicemia grave
- NON presentano udito e/o vista adeguati per riconoscere tutte le funzioni del Sistema Omnipod 5, inclusi avvisi, allarmi e promemoria

I componenti del dispositivo, tra cui il Pod, il Sensore Dexcom G6, il Trasmettitore Dexcom G6 e il Sensore FreeStyle Libre 2 Plus, devono essere rimossi prima della risonanza magnetica (RM). Inoltre, il Controller deve essere collocato all'esterno della sala operatoria. L'esposizione alla RM può danneggiare i componenti.

1.4 Insuline compatibili

Il Sistema Omnipod 5 è compatibile con i seguenti marchi di insulina U-100: NovoLog®/NovoRapid®, Humalog®, Admelog®/Insulin lispro Sanofi®, Trurapi®/Insulin aspart Sanofi® e Kirsty®.

1.5 Avvertenze generali

Avvertenza: leggere tutte le istruzioni fornite in questo *Manuale d'uso tecnico* prima di utilizzare il Sistema Omnipod 5. Monitorare i livelli di glucosio sotto la guida dell'operatore sanitario di riferimento. Senza un monitoraggio adeguato, le condizioni di iperglicemia o ipoglicemia potrebbero passare inosservate.

Avvertenza: NON iniziare a utilizzare il sistema o modificare le impostazioni senza aver prima ricevuto formazione e indicazioni appropriate da parte dell'operatore sanitario di riferimento. Un avvio e una regolazione delle impostazioni non corretti possono comportare un'erogazione eccessiva o insufficiente di insulina, con conseguente ipoglicemia o iperglicemia. Le impostazioni che influiscono principalmente sull'erogazione di insulina sono le seguenti: Spegnimento Pod, velocità basali, Velocità basale massima, Bolo massimo, Fattore/i di Correzione, Rapporto Insulina/Carboidrati (IC), Glicemia Minima per il Suggestore di Bolo, Target Glicemico, Correggi se superiore a e Durata dell'azione dell'insulina.

Avvertenza: NON fare in alcun modo affidamento sul *Manuale d'uso tecnico* in relazione alla propria salute personale e alle decisioni e le cure associate. Il presente *Manuale d'uso tecnico* ha uno scopo puramente informativo e non deve essere considerato fonte di raccomandazioni o consigli medici o sanitari destinati alla diagnosi, al trattamento o a qualsiasi altra esigenza individuale. Il *Manuale d'uso tecnico* non sostituisce in alcun modo le raccomandazioni, i consigli e/o i servizi medici o sanitari forniti da un operatore sanitario qualificato. Tutte le decisioni e tutti i trattamenti devono essere discussi con un operatore sanitario qualificato che conosce bene le esigenze individuali dell'utilizzatore.

Avvertenza: NON utilizzare il Sistema Omnipod 5 se non si è in grado o non si è disposti a utilizzarlo come indicato nel *Manuale d'uso tecnico* e dall'operatore sanitario di riferimento. La mancata adesione alle indicazioni può determinare un'erogazione eccessiva o insufficiente di insulina, con conseguente ipoglicemia o iperglicemia.

Avvertenza: tenere SEMPRE a portata di mano un kit di emergenza per reagire tempestivamente a qualsiasi emergenza diabetica o nell'eventualità in cui il Sistema Omnipod 5 smetta di funzionare. Portare sempre con sé i materiali di consumo per la sostituzione del Pod, nel caso in cui si rendesse necessario effettuarla.

Avvertenza: smaltire SEMPRE il Pod in conformità alle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. Il Pod è considerato a rischio biologico dopo l'uso e può eventualmente trasmettere malattie infettive.

Avvertenza: NON utilizzare la tecnologia SmartAdjust in donne in gravidanza, pazienti in condizioni critiche e soggetti in dialisi. La sicurezza della tecnologia SmartAdjust non è stata valutata in queste popolazioni. In presenza di una di queste condizioni, rivolgersi all'operatore sanitario di riferimento prima di utilizzare la tecnologia SmartAdjust.

Avvertenza: NON utilizzare il Sistema Omnipod 5 se non si è dotati di vista e/o udito adeguati per riconoscere tutte le funzioni del Sistema Omnipod 5, compresi avvisi, allarmi e promemoria secondo le istruzioni.

Avvertenza: nel Sistema Omnipod 5 utilizzare ESCLUSIVAMENTE insulina U-100 ad azione rapida dei marchi NovoLog®/NovoRapid® (insulina aspart), Humalog® (insulina lispro), Admelog®/Insulin lispro Sanofi® (insulina lispro), Trurapi®/Insulin aspart Sanofi® (insulina aspart) e Kirsty® (insulina aspart) in quanto sono stati testati e ritenuti sicuri per l'impiego con questo sistema. NovoLog®/NovoRapid®, Humalog®, Admelog®/Insulin lispro Sanofi®, Trurapi®/Insulin aspart Sanofi® e Kirsty® sono compatibili con il Sistema Omnipod 5 per un impiego fino a 72 ore (3 giorni). Attenersi alle indicazioni dell'operatore sanitario di riferimento per quanto riguarda la frequenza di sostituzione del Pod.

Avvertenza: EVITARE la somministrazione di insulina, ad esempio tramite iniezione o inalazione, mentre si indossa un Pod attivo per evitare il rischio di ipoglicemia. Il Sistema Omnipod 5 non è in grado di monitorare l'insulina erogata al di fuori del sistema. Consultare l'operatore sanitario di riferimento per conoscere il tempo di attesa dopo l'erogazione manuale dell'insulina prima di avviare la Modalità Automatizzata.

Avvertenza: prima di rivolgersi all'operatore sanitario di riferimento, EVITARE di modificare le impostazioni del Suggeritore SmartBolus. Modifiche non corrette possono comportare un'erogazione eccessiva o insufficiente di insulina, con conseguente ipoglicemia o iperglicemia. Le impostazioni che influiscono principalmente sui calcoli del bolo sono le seguenti: Bolo massimo, Glicemia minima per il Suggeritore di Bolo, Correggi se superiore a, Fattore/i di Correzione, Rapporto/i insulina/carboidrati (IC), Durata dell'azione dell'insulina e Target Glicemico.

Avvertenza: per evitare che si verifichino episodi di iperglicemia e ipoglicemia, attenersi SEMPRE alle indicazioni dell'operatore sanitario di riferimento in merito all'appropriato monitoraggio del glucosio.

1 Introduzione

Avvertenza: un valore del glucosio inferiore a 3,9 mmol/L (70 mg/dL) può indicare ipoglicemia (glucosio basso). Un valore del glucosio superiore a 13,9 mmol/L (250 mg/dL) può indicare iperglicemia (glucosio elevato). Rispettare le indicazioni dell'operatore sanitario di riferimento in merito al trattamento.

Avvertenza: trattare SEMPRE tempestivamente l'ipoglicemia. Un valore del glucosio pari o inferiore a 3,1 mmol/L (55 mg/dL) indica ipoglicemia significativa (glicemia molto bassa). Se non trattata, può causare crisi convulsive, perdita di coscienza o morte. Attenersi alle raccomandazioni dell'operatore sanitario per il trattamento.

Avvertenza: trattare SEMPRE tempestivamente livelli di glucosio inferiori a 3,9 mmol/L (70 mg/dL) (ipoglicemia) in base alle raccomandazioni dell'operatore sanitario di riferimento. I sintomi dell'ipoglicemia includono debolezza, sudorazione, nervosismo, cefalea o confusione. Se non trattata, l'ipoglicemia può avere come conseguenza crisi convulsive, perdita di coscienza o morte.

Avvertenza: NON aspettare per trattare l'ipoglicemia (glucosio basso) o i relativi sintomi. Anche se non è possibile controllare il valore del glucosio, attendere per trattare i sintomi manifestati potrebbe portare a un'ipoglicemia grave, che a sua volta può sfociare in crisi convulsive, perdita di coscienza o morte.

Avvertenza: trattare SEMPRE tempestivamente l'iperglicemia (glicemia alta) in base alle raccomandazioni dell'operatore sanitario di riferimento. I sintomi di iperglicemia includono stanchezza, sete, eccessiva minzione o visione annebbiata. Se non trattata, l'iperglicemia può sfociare in chetoacidosi diabetica (DKA) o morte.

Avvertenza: NON aspettare per trattare la DKA. Se non trattata, la DKA può sfociare rapidamente in respirazione difficoltosa, shock, coma o morte.

Avvertenza: trattare SEMPRE i valori glicemici del sensore e i valori della lettura del glucosio "BASSO" o "ALTO" in base alle raccomandazioni dell'operatore sanitario di riferimento. Questi valori possono indicare condizioni potenzialmente gravi che è necessario curare immediatamente. Se non trattate, queste situazioni possono sfociare rapidamente in chetoacidosi diabetica (DKA), shock, coma o morte.

Avvertenza: se si necessita di cure mediche di emergenza, non mettersi MAI alla guida verso il pronto soccorso, ma farsi accompagnare da un amico o da un parente oppure chiamare un'ambulanza.

Avvertenza: prestare SEMPRE attenzione al valore glicemico attuale del sensore, affidarsi alle sensazioni del proprio corpo e non ignorare i sintomi di glicemia alta e bassa. Anche se l'erogazione di insulina si regola

automaticamente in Modalità Automatizzata con l'obiettivo di portare il livello di glucosio al Target Glicemico definito, possono comunque verificarsi eventi di ipoglicemia o iperglicemia grave.

Se i valori glicemici del sensore non corrispondono ai sintomi, controllare SEMPRE il glucosio con un glucometro e, se necessario, prendere in considerazione il trattamento e/o la calibrazione del Sensore. Passare SEMPRE alla Modalità Manuale se si ritiene che i valori glicemici del sensore siano imprecisi.

- Valori glicemici del sensore erroneamente elevati possono causare un'erogazione eccessiva di insulina, con conseguente ipoglicemia grave, crisi convulsive, perdita di coscienza o morte.
- Valori glicemici del sensore erroneamente bassi possono causare sospensioni prolungate dell'erogazione di insulina con conseguenti iperglicemia, DKA o morte.

Se si avvertono sintomi che non sono congruenti con le letture del glucosio e ci si è attenuti alle istruzioni descritte nel presente *Manuale d'uso tecnico*, contattare immediatamente l'operatore sanitario.

Avvertenza: utilizzare SEMPRE il Sensore secondo le istruzioni del produttore. Non utilizzarlo oltre la durata raccomandata e non avviarlo dopo la scadenza. Per determinare il fabbisogno insulinico, il Sistema Omnipod 5 si basa sui valori glicemici del sensore aggiornati e accurati. L'uso scorretto del Sensore potrebbe comportare un'erogazione eccessiva o insufficiente di insulina, con conseguente ipoglicemia o iperglicemia.

Avvertenza: NON utilizzare il Sistema Omnipod 5 con il Sensore Dexcom G6 se si assume idrossiurea, un farmaco utilizzato nel trattamento di malattie tra cui il cancro e l'anemia a cellule falciformi. I valori glicemici del Sensore Dexcom G6 possono essere falsamente elevati e causare un'erogazione eccessiva di insulina con conseguente ipoglicemia grave.

Avvertenza: rispondere SEMPRE agli Allarmi di Pericolo non appena si verificano. Gli Allarmi di Pericolo emessi dal Pod segnalano un'interruzione nell'erogazione di insulina. La mancata risposta a un Allarme di Pericolo può comportare un'erogazione insufficiente di insulina, con conseguente iperglicemia.

Avvertenza: monitorare SEMPRE il glucosio e, quando si interrompe l'erogazione di insulina a causa di un'ostruzione (occlusione), attenersi alle linee guida terapeutiche dell'operatore sanitario di riferimento. Il mancato intervento tempestivo può comportare una somministrazione insufficiente di insulina con conseguente iperglicemia o chetoacidosi diabetica (DKA)

(vedere “ Rilevata ostruzione” a pagina 169).

1 Introduzione

Avvertenza: non lasciare MAI incustodito il Controller, tenerlo SEMPRE sotto controllo per garantire che altri non possano apportare modifiche alla propria terapia insulinica. Modifiche accidentali all'erogazione di insulina possono comportare un'erogazione eccessiva o insufficiente di insulina, con conseguente ipoglicemia o iperglicemia. Prestare attenzione nella condivisione del PIN del proprio Controller.

Avvertenza: NON utilizzare il Sistema Omnipod 5 a pressioni atmosferiche basse (inferiori a 700 hPA), riscontrabili ad esempio da chi pratica arrampicata o chi vive ad altitudini superiori a 3.000 metri (10.000 piedi). La variazione della pressione atmosferica può verificarsi anche durante il decollo in caso di viaggi aerei. L'erogazione non intenzionale di insulina può verificarsi in presenza di un'espansione di minuscole bolle d'aria eventualmente presenti all'interno del Pod. Questo può dare luogo a ipoglicemia. Per evitare uno stato prolungato di ipoglicemia, è importante controllare frequentemente il glucosio per l'intera durata del volo.

Avvertenza: NON utilizzare il Sistema Omnipod 5 in ambienti ricchi di ossigeno (superiore al 25%), tra cui aree domestiche o chirurgiche in cui si impiegano ossigeno supplementare e camere iperbariche. Le camere iperbariche, o ad alta pressione, vengono talvolta utilizzate per favorire la guarigione delle ulcere diabetiche o per trattare l'intossicazione da monossido di carbonio, alcune infezioni di ossa e tessuti e la malattia da decompressione. L'esposizione ad ambienti ricchi di ossigeno può causare la combustione del Pod o del Controller Omnipod 5, con conseguenti gravi ustioni al corpo.

Avvertenza: NON utilizzare il Sistema Omnipod 5 in ambienti a pressioni atmosferiche elevate (superiori a 1.060 hPA), come quelle riscontrabili in una camera iperbarica. Le camere iperbariche, o ad alta pressione, vengono talvolta utilizzate per favorire la guarigione delle ulcere diabetiche o per trattare l'intossicazione da monossido di carbonio, alcune infezioni di ossa e tessuti e la malattia da decompressione. L'esposizione ad ambienti a pressione atmosferica elevata può danneggiare il Pod e il Controller Omnipod 5, con conseguente erogazione insufficiente di insulina e, di conseguenza, iperglicemia.

1.6 Precauzioni generali

Attenzione: qualora si sospettino danni in seguito a un evento imprevisto, come ad esempio una caduta o un impatto su una superficie dura, NON utilizzare alcun componente del Sistema Omnipod 5 (Controller, Pod). L'uso di componenti danneggiati può mettere a rischio la salute dell'utilizzatore, in quanto il sistema potrebbe non funzionare

correttamente. Se non si ha la certezza che uno o più componenti siano danneggiati, interrompere l'utilizzo del sistema e contattare l'Assistenza clienti.

Attenzione: utilizzare il Sistema Omnipod 5 ESCLUSIVAMENTE con dispositivi autorizzati (App Omnipod 5, Controller e Pod e Sensori compatibili). NON tentare di utilizzare il Sistema Omnipod 5 con dispositivi non autorizzati. Tentare di utilizzare il Sistema Omnipod 5 con dispositivi non autorizzati può interrompere l'erogazione di insulina e mettere a rischio la salute e la sicurezza dell'utilizzatore.

Attenzione: connettere il Controller ESCLUSIVAMENTE a reti Wi-Fi attendibili, non pubbliche, come ad esempio quelle presenti negli aeroporti, nei bar, ecc., in quanto non sicure e possono esporre il Controller a malware. NON connettersi a reti Wi-Fi pubbliche durante la configurazione iniziale del Sistema Omnipod 5.

Attenzione: attivare SEMPRE un nuovo Pod in modo tempestivo. Un'attesa eccessiva tra le sostituzioni del Pod può comportare un'erogazione insufficiente di insulina, con conseguente iperglicemia. Se non è disponibile un altro Pod, adottare un metodo alternativo di erogazione dell'insulina.

Attenzione: NON allontanarsi dall'App Omnipod 5 durante il processo di modifica delle impostazioni di erogazione dell'insulina. Se si esce dall'app prima che la modifica delle impostazioni venga implementata, il sistema continuerà a utilizzare le ultime impostazioni salvate. Questo significa che si rischia di proseguire con delle impostazioni terapeutiche diverse da quelle che si intendeva immettere. Se non si è sicuri che le modifiche siano state salvate, rivedere le impostazioni.

Attenzione: EVITARE di lasciare il Controller in un luogo che impedisce di sentire allarmi e notifiche dell'App Omnipod 5. Se ci si allontana dal Controller, l'erogazione di insulina in Modalità Manuale o Modalità Automatizzata prosegue come da programma.

Attenzione: rispondere SEMPRE ai Segnali di Notifica Pod scaduto, Insulina nel Pod in esaurimento e Spegnimento Pod nel momento in cui si verificano. Se non si intraprende alcuna azione, questi segnali diventano Allarmi di Pericolo. Quando si verificano Allarmi di Pericolo, l'erogazione di insulina si interrompe.

Attenzione: prestare SEMPRE attenzione ai possibili cambi di fuso orario quando si viaggia. Se il fuso orario non viene aggiornato, la terapia insulinica verrà erogata in base a quello precedente, con conseguenti interruzioni nel programma di erogazione dell'insulina e registri della cronologia imprecisi. Parlare con l'operatore sanitario di riferimento di come gestire l'erogazione di insulina mentre si viaggia tra fusi orari diversi.

1 Introduzione

Attenzione: non è possibile utilizzare il ricevitore Dexcom G6 con il Sistema Omnipod 5 in quanto quest'ultimo è compatibile con l'app G6 solo su smartphone.

Attenzione: non è possibile utilizzare un altro dispositivo per eseguire la scansione, leggere i valori o ricevere allarmi dal Sensore FreeStyle Libre 2 Plus con il Sistema Omnipod 5. L'App Omnipod 5 è compatibile solo con un Sensore avviato da e associato direttamente all'App Omnipod 5 sul Controller.

Attenzione: controllare SEMPRE con frequenza il glucosio se si sale su attrazioni di parchi divertimenti e durante i voli o in altre situazioni in cui possono verificarsi cambiamenti improvvisi o estremi di pressione dell'aria, altitudine o gravità. Sebbene sia sicuro usare il Sistema Omnipod 5 alle pressioni atmosferiche tipiche delle cabine degli aerei durante i voli, la pressione atmosferica al loro interno può variare nel corso del volo e avere effetti sull'erogazione di insulina da parte del Pod. Rapide variazioni di altitudine e gravità, come quelle che di solito avvengono sulle attrazioni dei parchi divertimenti o in fase di decollo e atterraggio dei voli, possono avere effetti sull'erogazione di insulina, con conseguenti possibili episodi di ipoglicemia o lesioni. Se necessario, attenersi alle indicazioni dell'operatore sanitario di riferimento.

Rischi potenziali

- Il Sistema Omnipod 5 utilizza le tendenze e i valori glicemici del sensore per calcolare l'erogazione di insulina. Se i valori glicemici del sensore non sono precisi, il Sistema potrebbe erogare una dose imprecisa di insulina con conseguente possibilità di provocare eventi di ipoglicemia o iperglicemia.
- Il Sistema Omnipod 5 utilizza le informazioni e le impostazioni immesse dall'utilizzatore per calcolare e regolare l'erogazione di insulina. Se le informazioni inserite non sono accurate o se non vengono fornite al Sistema informazioni su carboidrati e glucosio, questo potrebbe erogare una dose imprecisa di insulina con conseguente ipoglicemia o iperglicemia.
- Indossare un Pod può causare infezioni. Prestare attenzione ai segni di infezione, tra cui sanguinamento, dolore e irritazione cutanea (compreso arrossamento). In caso di irritazione, consultare l'operatore sanitario di riferimento.
- Eventuali pieghe nella cannula o il suo spostamento possono interrompere l'erogazione di insulina. La mancata diminuzione del glucosio dopo un bolo o livelli elevati di glucosio inspiegabili sono indicativi di un'ostruzione (occlusione) e di un'interruzione dell'erogazione di insulina.

- La presenza di bolle d'aria nel Pod o nella cannula può influire sull'erogazione di insulina. In presenza di una quantità elevata di aria nel Pod, il Sistema potrebbe erogare una dose imprecisa di insulina con conseguente possibilità di provocare eventi di ipoglicemia o iperglicemia.
- Le complicanze nel sito di infusione, come ad esempio la presenza di tessuto cicatriziale e infezioni, possono rendere l'erogazione di insulina meno efficace. La mancata diminuzione del glucosio dopo un bolo o livelli elevati di glucosio inspiegabili sono indicativi di erogazione di insulina inefficace.
- Difetti hardware, anomalie del software e guasti al Pod possono causare un'interruzione dell'erogazione di insulina. Un guasto al Pod può determinare iperglicemia o chetoacidosi diabetica. Tenere il Controller Omnipod 5 e lo smartphone accesi e nelle vicinanze per essere certi di non perdere le notifiche relative alla recente erogazione di insulina nonché allarmi e messaggi importanti.

Importanti informazioni per l'utilizzatore

Prestare particolare attenzione alle avvertenze e alle precauzioni contenute nel presente *Manuale d'uso tecnico*. Le parole “**Avvertenza**” e “**Attenzione**” vengono visualizzate in rosso in grassetto.

Il Sistema Omnipod 5 è progettato per funzionare con i sistemi di monitoraggio basati su Sensore CGM Dexcom G6 e FreeStyle Libre 2 Plus.

- Per utilizzare il CGM Dexcom G6 con il Sistema Omnipod 5, è necessario ottenere il Sensore Dexcom G6, il Trasmettitore e le Istruzioni per l'uso, oltre a scaricare l'app Dexcom G6 sul proprio smartphone personale.
- Per utilizzare il Sensore FreeStyle Libre 2 Plus con il Sistema Omnipod 5, è necessario ottenere i Sensori FreeStyle Libre 2 Plus e le Istruzioni per l'uso di FreeStyle Libre 2 Plus. Non è possibile utilizzare un altro dispositivo per eseguire la scansione, leggere i valori o ricevere allarmi dal Sensore FreeStyle Libre 2 Plus con il Sistema Omnipod 5. Se non si è mai utilizzato un sensore di glucosio, continuare a utilizzare il glucometro fino a quando non si avrà familiarità con l'uso del Sensore.

Anche qualora si utilizzi il sistema senza Sensore, o si abbia familiarità con l'utilizzo di un Sensore, è molto importante leggere tutte le istruzioni contenute nelle Istruzioni per l'uso prima di utilizzare il sistema.

In caso di ulteriori domande dopo la consultazione delle Istruzioni per l'uso, contattare l'Assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Kit di emergenza

Avvertenza: tenere SEMPRE a portata di mano un kit di emergenza per reagire tempestivamente a qualsiasi emergenza diabetica o nell'eventualità in cui il Sistema Omnipod 5 smetta di funzionare. Portare sempre con sé i materiali di consumo per la sostituzione del Pod, nel caso in cui si rendesse necessario effettuarla.

Avvertenza: se si necessita di cure mediche di emergenza, non mettersi MAI alla guida verso il pronto soccorso, ma farsi accompagnare da un amico o da un parente oppure chiamare un'ambulanza.

Preparare e tenere sempre a portata di mano un kit di emergenza. Il kit deve includere:

- alcuni Pod Omnipod 5 nuovi, ancora sigillati
- una fiala di insulina U-100 ad azione rapida (vedere “1.5 Avvertenze generali” a pagina 8 per i tipi di insulina approvati per l'uso nel Pod del Sistema Omnipod 5)
- siringhe o penne per l'iniezione di insulina
- compresse di glucosio o altra fonte di carboidrati ad azione rapida
- materiali di consumo per il sensore di glucosio
 - Sensori Dexcom G6, Trasmettitore Dexcom G6 e app Dexcom G6
 - Sensori FreeStyle Libre 2 Plus
- strisce reattive per glicemia
- glucometro
- strisce reattive per chetoni
- dispositivo a lancetta e lancette
- tamponi disinfettanti imbevuti di alcol
- istruzioni dell'operatore sanitario di riferimento in merito alla quantità di insulina da iniettare in caso di interruzione dell'erogazione dal Pod
- una copia della lettera firmata dell'operatore sanitario di riferimento che attesti l'esigenza di portare con sé scorte di insulina e il Sistema Omnipod 5
- numeri di telefono dell'operatore sanitario di riferimento e/o del medico in caso di emergenza
- kit di glucagone e istruzioni scritte per l'erogazione della dose in caso di incoscienza del/della paziente (vedere “15.4 Come evitare valori bassi, alti e chetoacidosi diabetica” a pagina 211)

Consiglio: chiedere consiglio all'operatore sanitario di riferimento per determinare insieme come gestire le emergenze e come agire nel caso in cui l'operatore sanitario non sia raggiungibile.

CARATTERISTICHE DEL MICROINFUSORE OMNIPOD 5

Microinfusore Omnipod 5
Importanti informazioni di sicurezza

- 2 Terminologia del sistema e navigazione
- 3 Panoramica del Sistema Omnipod 5
- 4 Configurazione dell'applicazione Omnipod 5
- 5 Attivazione e sostituzione del Pod
- 6 Programmi Basale
- 7 Velocità Basali Temporanee
- 8 Letture della glicemia
- 9 Sospensione e avvio dell'erogazione di insulina
- 10 Modifica delle impostazioni
- 11 Visualizzazione di cronologia e registri
- 12 Gestione degli aggiornamenti del software
- 13 Allarmi, azioni e notifiche di promemoria
- 14 Cura e manutenzione di Controller e Pod
- 15 Convivere con il diabete

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

Importanti informazioni di sicurezza relative al microinfusore Omnipod 5

Avvertenze relative al microinfusore

Impostazioni del Sistema Omnipod 5 e formazione

Avvertenza: NON iniziare a utilizzare il sistema o modificare le impostazioni senza aver prima ricevuto formazione e indicazioni appropriate da parte dell'operatore sanitario di riferimento. Un avvio e una regolazione delle impostazioni non corretti possono comportare un'erogazione eccessiva o insufficiente di insulina, con conseguente ipoglicemia o iperglicemia. Le impostazioni che influiscono principalmente sull'erogazione di insulina sono le seguenti: Spegnimento Pod, velocità basali, Velocità basale massima, Bolo massimo, Fattore/i di Correzione, Rapporto Insulina/Carboidrati (IC), Glicemia Minima per il Suggestore di Bolo, Target Glicemico, Correggi se superiore a e Durata dell'azione dell'insulina.

Insulina

Avvertenza: nel Sistema Omnipod 5 utilizzare ESCLUSIVAMENTE insulina U-100 ad azione rapida dei marchi NovoLog®/NovoRapid® (insulina aspart), Humalog® (insulina lispro), Admelog®/Insulin lispro Sanofi® (insulina lispro), Trurapi®/Insulin aspart Sanofi® (insulina aspart)

e Kirsty® (insulina aspart) in quanto sono stati testati e ritenuti sicuri per l'impiego con questo sistema. NovoLog®/NovoRapid®, Humalog®, Admelog®/Insulin lispro Sanofi®, Trurapi®/Insulin aspart Sanofi® e Kirsty® sono compatibili con il Sistema Omnipod 5 per un impiego fino a 72 ore (3 giorni). Attenersi alle indicazioni dell'operatore sanitario di riferimento per quanto riguarda la frequenza di sostituzione del Pod.

Avvertenza: essere SEMPRE pronti all'iniezione di insulina con un metodo alternativo nell'eventualità in cui l'erogazione di insulina dal Pod si interrompa. Il rischio di sviluppare iperglicemia aumenta se l'erogazione di insulina viene interrotta, in quanto il Pod utilizza solo insulina U-100 ad azione rapida. La mancata adozione di un metodo alternativo di erogazione dell'insulina può determinare livelli glicemici molto elevati o chetoacidosi diabetica (DKA). Gestire l'interruzione dell'erogazione di insulina chiedendo istruzioni in merito all'operatore sanitario di riferimento.

Avvertenza: non utilizzare MAI insulina scaduta o torbida nel Pod in quanto può danneggiarlo. L'impiego di insulina non ottimale o scaduta può causare iperglicemia

e mettere a rischio la salute del paziente.

Avvertenza: EVITARE la somministrazione di insulina, ad esempio tramite iniezione o inalazione, mentre si indossa un Pod attivo per evitare il rischio di ipoglicemia. Il Sistema Omnipod 5 non è in grado di monitorare l'insulina erogata al di fuori del sistema. Consultare l'operatore sanitario di riferimento per conoscere il tempo di attesa dopo l'erogazione manuale dell'insulina prima di avviare la Modalità Automatizzata.

Sistema Omnipod 5

Avvertenza: i componenti del dispositivo, tra cui il Pod, il Sensore Dexcom G6, il Trasmettitore Dexcom G6 e il Sensore FreeStyle Libre 2 Plus, possono risentire dell'esposizione a forti radiazioni o campi magnetici. I componenti del dispositivo devono essere rimossi (e il Pod e il Sensore devono essere smaltiti) prima di eseguire radiografie, risonanza magnetica (RM) o tomografia computerizzata (TC) (o qualsiasi test o procedura simile). Inoltre, il Controller deve essere collocato all'esterno della sala operatoria. L'esposizione a raggi X, RM, TC o al trattamento può danneggiare questi componenti. Per conoscere le linee guida per la rimozione del Pod, rivolgersi all'operatore sanitario di riferimento.

Avvertenza: NON esporre i prodotti o i materiali di consumo del Sistema Omnipod 5 a temperature estreme poiché ne impediscono il corretto

funzionamento. Conservare tutti i prodotti e i materiali di consumo del Sistema Omnipod 5, compresi i Pod sigillati, in un luogo fresco e asciutto.

Pod

Avvertenza: in caso di sensibilità o allergie agli adesivi acrilici o se la cute è delicata o facilmente danneggiabile, NON utilizzare il Pod. L'applicazione di un Pod in queste circostanze può mettere a rischio la salute dell'utilizzatore.

Avvertenza: smaltire SEMPRE il Pod in conformità alle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. Il Pod è considerato a rischio biologico dopo l'uso e può eventualmente trasmettere malattie infettive.

Avvertenza: NON consentire ai bambini di accedere a parti di piccole dimensioni, come il Pod e i relativi accessori, compresa la linguetta, in quanto possono essere ingerite e rappresentare un pericolo di soffocamento, con conseguenti lesioni interne o infezioni.

Avvertenza: durante il riempimento del Pod con insulina, fare in modo di non iniettare MAI bolle di grandi dimensioni o creare sacche d'aria. L'aria all'interno del sistema occupa spazio destinato invece all'insulina e questo può comprometterne l'erogazione, con il rischio di un'erogazione eccessiva o insufficiente di insulina e conseguente ipoglicemia o iperglicemia.

Avvertenza: non utilizzare MAI un Pod se, mentre lo si riempie, si avverte una resistenza significativa

alla pressione dello stantuffo della siringa di riempimento. Non tentare di forzare l'insulina nel Pod. Una resistenza significativa può indicare un difetto meccanico del Pod. L'utilizzo di un Pod difettoso può comportare un'erogazione insufficiente di insulina con conseguente iperglicemia.

Avvertenza: NON applicare il Pod se, dopo averne rimosso la linguetta, la cannula si estende oltre la pellicola adesiva. In questo caso non è possibile inserire la cannula, con conseguente erogazione insufficiente di insulina e iperglicemia.

Avvertenza: controllare SEMPRE con frequenza il sito di infusione per confermare che la cannula sia correttamente inserita e fissata al Pod. Verificare che il sito non sia bagnato o che non si avverta odore di insulina, condizioni che possono indicare lo spostamento della cannula. Una cannula inserita in modo errato, allentata o dislocata può comportare un'erogazione insufficiente di insulina con conseguente iperglicemia.

Avvertenza: non iniettare MAI insulina (o altro) nel foro di riempimento con il Pod applicato sul corpo, onde evitare un'erogazione eccessiva o insufficiente di insulina con conseguente ipoglicemia o iperglicemia.

Avvertenza: NON applicare un nuovo Pod finché non si è disattivato e rimosso il precedente. Un Pod non correttamente disattivato può continuare a erogare insulina come programmato,

esponendo l'utilizzatore al rischio di un'erogazione eccessiva di insulina con conseguente ipoglicemia.

Avvertenza: NON continuare a utilizzare un Pod attivato che non emetta segnali acustici nel corso di un esame diagnostico. Il Pod deve essere sostituito immediatamente. Se nel corso di un esame diagnostico l'App Omnipod 5 non emette alcun segnale acustico, contattare immediatamente l'Assistenza clienti. Continuando a utilizzare il Sistema Omnipod 5 in queste situazioni, si potrebbe mettere a rischio la salute e la sicurezza dell'utilizzatore.

Avvertenza: NON esporre il Pod alla luce solare diretta per lunghi periodi di tempo. Rimuovere il Pod prima di entrare in vasche con acqua riscaldata, idromassaggio o saune. Nelle suddette condizioni è infatti possibile che il Pod venga esposto a temperature estreme, che potrebbero inoltre alterare l'insulina contenuta al suo interno con conseguente iperglicemia.

Avvertenza: NON immergere il Pod in acqua a profondità superiori a 7,6 metri (25 piedi) o per un periodo di tempo superiore a 60 minuti onde evitare di danneggiarlo e causare un'erogazione eccessiva o insufficiente di insulina, con conseguente ipoglicemia o iperglicemia.

Avvertenza: NON utilizzare il Sistema Omnipod 5 a pressioni atmosferiche basse (inferiori a 700 hPa), riscontrabili ad esempio da chi pratica arrampicata o chi vive ad altitudini superiori a 3.000 metri

(10.000 piedi). La variazione della pressione atmosferica può verificarsi anche durante il decollo in caso di viaggi aerei. L'erogazione non intenzionale di insulina può verificarsi in presenza di un'espansione di minuscole bolle d'aria eventualmente presenti all'interno del Pod. Questo può dare luogo a ipoglicemia. Per evitare uno stato prolungato di ipoglicemia, è importante controllare frequentemente il glucosio per l'intera durata del volo.

Avvertenza: NON utilizzare il Sistema Omnipod 5 in ambienti ricchi di ossigeno (superiore al 25%), tra cui aree domestiche o chirurgiche in cui si impiegano ossigeno supplementare e camere iperbariche. Le camere iperbariche, o ad alta pressione, vengono talvolta utilizzate per favorire la guarigione delle ulcere diabetiche o per trattare l'intossicazione da monossido di carbonio, alcune infezioni di ossa e tessuti e la malattia da decompressione. L'esposizione ad ambienti ricchi di ossigeno può causare la combustione del Pod o del Controller Omnipod 5, con conseguenti gravi ustioni al corpo.

Avvertenza: NON utilizzare il Sistema Omnipod 5 in ambienti a pressioni atmosferiche elevate (superiori a 1.060 hPA), come quelle riscontrabili in una camera iperbarica. Le camere iperbariche, o ad alta pressione, vengono talvolta utilizzate per favorire la guarigione delle ulcere diabetiche o per trattare l'intossicazione da monossido di carbonio, alcune infezioni di ossa e tessuti e la malattia da decompressione. L'esposizione ad

ambienti a pressione atmosferica elevata può danneggiare il Pod e il Controller Omnipod 5, con conseguente erogazione insufficiente di insulina e, di conseguenza, iperglicemia.

Controller

Avvertenza: è importante identificare SEMPRE l'App Omnipod 5 come propria prima di utilizzarla. L'utilizzo dell'App Omnipod 5 appartenente ad altri può comportare un'erogazione di insulina errata per entrambi.

Avvertenza: non lasciare MAI incustodita l'App Omnipod 5, tenerla SEMPRE sotto controllo per garantire che altri non possano apportare modifiche alla propria terapia insulinica con conseguente rischio di ipoglicemia o iperglicemia. Non condividere il PIN del Controller con nessuno.

Avvertenza: contattare l'Assistenza clienti OGNI VOLTA che il Controller del Sistema Omnipod 5 si danneggia e non funziona correttamente. Se è necessario sostituire il Controller, consultare SEMPRE l'operatore sanitario di riferimento per ricevere istruzioni sull'utilizzo di altri metodi di erogazione di insulina alternativi, come ad esempio le iniezioni. Assicurarsi di misurare con frequenza il glucosio.

Avvertenza: NON sarà possibile utilizzare l'App Omnipod 5 nei seguenti casi:

- Non è stato installato un aggiornamento richiesto per l'App Omnipod 5.

- Non è ancora disponibile un aggiornamento per risolvere un problema noto con l'App Omnipod 5.

Utilizzare un altro metodo di erogazione dell'insulina. La mancata disattivazione del Pod e l'utilizzo di un'altra forma di erogazione di insulina può comportare un'erogazione eccessiva o insufficiente di insulina, con conseguente ipoglicemia o iperglicemia.

Allarmi

Avvertenza: l'App Omnipod 5 va utilizzata entro 15 minuti dall'attivazione dell'Allarme di Notifica di Spegnimento Pod. Se non si risponde a questo allarme entro questo lasso di tempo, l'App Omnipod 5 e il Pod emettono un Allarme di Pericolo e il Pod interrompe l'erogazione di insulina, con conseguente iperglicemia.

Avvertenza: rispondere SEMPRE agli Allarmi di Pericolo non appena si verificano. Gli Allarmi di Pericolo emessi dal Pod segnalano un'interruzione nell'erogazione di insulina. La mancata risposta a un Allarme di Pericolo può comportare un'erogazione insufficiente di insulina, con conseguente iperglicemia.

Avvertenza: monitorare SEMPRE il glucosio e, quando si interrompe l'erogazione di insulina a causa di un'ostruzione (occlusione), attenersi alle linee guida terapeutiche dell'operatore sanitario di riferimento. Il mancato intervento tempestivo può comportare una somministrazione insufficiente di insulina con

conseguente iperglicemia o chetoacidosi diabetica (DKA)

(vedere “ Rilevata ostruzione” a pagina 169).

Monitoraggio del glucosio

Avvertenza: per evitare che si verifichino episodi di iperglicemia e ipoglicemia, attenersi SEMPRE alle indicazioni dell'operatore sanitario di riferimento in merito all'appropriato monitoraggio del glucosio.

Avvertenza: se si necessita di cure mediche di emergenza, non mettersi MAI alla guida verso il pronto soccorso, ma farsi accompagnare da un amico o da un parente oppure chiamare un'ambulanza.

Avvertenza: un valore del glucosio inferiore a 3,9 mmol/L (70 mg/dL) può indicare ipoglicemia (glucosio basso). Un valore del glucosio superiore a 13,9 mmol/L (250 mg/dL) può indicare iperglicemia (glucosio elevato). Rispettare le indicazioni dell'operatore sanitario di riferimento in merito al trattamento.

Avvertenza: trattare SEMPRE tempestivamente livelli di glucosio inferiori a 3,9 mmol/L (70 mg/dL) (ipoglicemia) in base alle raccomandazioni dell'operatore sanitario di riferimento. I sintomi dell'ipoglicemia includono debolezza, sudorazione, nervosismo, cefalea o confusione. Se non trattata, l'ipoglicemia può avere come conseguenza crisi convulsive, perdita di coscienza o morte.

Avvertenza: NON aspettare per trattare l'ipoglicemia (glucosio basso) o i relativi sintomi. Anche se non è possibile controllare il valore del glucosio, attendere per trattare i sintomi manifestati potrebbe portare a un'ipoglicemia grave, che a sua volta può sfociare in crisi convulsive, perdita di coscienza o morte.

Avvertenza: trattare SEMPRE tempestivamente l'iperglicemia (glicemia alta) in base alle raccomandazioni dell'operatore sanitario di riferimento. I sintomi di iperglicemia includono stanchezza, sete, eccessiva minzione o visione annebbiata. Se non trattata, l'iperglicemia può sfociare in chetoacidosi diabetica (DKA) o morte.

Avvertenza: trattare SEMPRE i valori glicemici del sensore e i valori della lettura del glucosio "BASSO" o "ALTO" in base alle raccomandazioni dell'operatore sanitario di riferimento. Questi valori possono indicare condizioni potenzialmente gravi che è necessario curare immediatamente. Se non trattate, queste situazioni possono sfociare rapidamente in chetoacidosi diabetica (DKA), shock, coma o morte.

Avvertenza: prestare SEMPRE attenzione al valore glicemico attuale del sensore, affidarsi alle sensazioni del proprio corpo e non ignorare i sintomi di glicemia alta e bassa. Anche se l'erogazione di insulina si regola automaticamente in Modalità Automatizzata con l'obiettivo di portare il livello di glucosio al Target Glicemico definito, possono comunque

verificarsi eventi di ipoglicemia o iperglicemia grave.

Se i valori glicemici del sensore non corrispondono ai sintomi, controllare SEMPRE il glucosio con un glucometro e, se necessario, prendere in considerazione il trattamento e/o la calibrazione del Sensore. Passare SEMPRE alla Modalità Manuale se si ritiene che i valori glicemici del sensore siano imprecisi.

- Valori glicemici del sensore erroneamente elevati possono causare un'erogazione eccessiva di insulina, con conseguente ipoglicemia grave, crisi convulsive, perdita di coscienza o morte.
- Valori glicemici del sensore erroneamente bassi possono causare sospensioni prolungate dell'erogazione di insulina con conseguenti iperglicemia, DKA o morte.

Se si avvertono sintomi che non sono congruenti con le letture del glucosio e ci si è attenuti alle istruzioni descritte nel presente Manuale d'uso tecnico, contattare immediatamente l'operatore sanitario.

Precauzioni relative al microinfusore

Sistema Omnipod 5

Attenzione: qualora si sospettino danni in seguito a un evento imprevisto, come ad esempio una caduta o un impatto su una

superficie dura, NON utilizzare alcun componente del Sistema Omnipod 5 (Controller, Pod). L'uso di componenti danneggiati può mettere a rischio la salute dell'utilizzatore, in quanto il sistema potrebbe non funzionare correttamente. Se non si ha la certezza che uno o più componenti siano danneggiati, interrompere l'utilizzo del sistema e contattare l'Assistenza clienti.

Attenzione: non utilizzare MAI un asciugacapelli o aria calda per asciugare il Controller o il Pod. Il calore eccessivo può danneggiare i componenti elettronici.

Attenzione: prima di installare un aggiornamento del software, verificare SEMPRE che la batteria sia sufficientemente carica.

Attenzione: controllare SEMPRE con frequenza il glucosio se si sale su attrazioni di parchi divertimenti e durante i voli o in altre situazioni in cui possono verificarsi cambiamenti improvvisi o estremi di pressione dell'aria, altitudine o gravità. Sebbene sia sicuro usare il Sistema Omnipod 5 alle pressioni atmosferiche tipiche delle cabine degli aerei durante i voli, la pressione atmosferica al loro interno può variare nel corso del volo e avere effetti sull'erogazione di insulina da parte del Pod. Rapide variazioni di altitudine e gravità, come quelle che di solito avvengono sulle attrazioni dei parchi divertimenti o in fase di decollo e atterraggio dei voli, possono avere effetti sull'erogazione di insulina, con conseguenti possibili episodi di ipoglicemia o

lesioni. Se necessario, attenersi alle indicazioni dell'operatore sanitario di riferimento.

Attenzione: controllare SEMPRE con frequenza il glucosio quando si utilizzano velocità basali molto basse. Il controllo regolare del glucosio può essere utile nel rilevamento della presenza di un'ostruzione (occlusione). Le ostruzioni possono provocare iperglicemia.

Attenzione: toccare SEMPRE AVVIA INSULINA per avviare l'erogazione di insulina al termine di un periodo di sospensione durante l'uso in Modalità Manuale. L'erogazione di insulina non si avvia automaticamente dopo una sospensione. In caso di mancato avvio, può manifestarsi iperglicemia.

Attenzione: prestare SEMPRE attenzione ai possibili cambi di fuso orario quando si viaggia. Se il fuso orario non viene aggiornato, la terapia insulinica verrà erogata in base a quello precedente, con conseguenti interruzioni nel programma di erogazione dell'insulina e registri della cronologia imprecisi. Parlare con l'operatore sanitario di riferimento di come gestire l'erogazione di insulina mentre si viaggia tra fusi orari diversi.

Attenzione: NON reimpostare l'App Omnipod 5 prima di aver consultato l'operatore sanitario di riferimento. Questa operazione cancellerà tutte le impostazioni, la Velocità Basale Adattiva e la cronologia e richiederà la modifica del Pod attivo. Prima di procedere,

Importanti informazioni di sicurezza

verificare di disporre di una registrazione aggiornata delle impostazioni e di un nuovo Pod con i materiali di consumo da utilizzare al riavvio dell'app.

Attenzione: EVITARE di conservare i componenti e i materiali di consumo del Sistema Omnipod 5 in luoghi accessibili a bambini, animali domestici o infestanti. Un accesso accidentale può provocare danni a parti del sistema o comprometterne la sterilità.

Pod

Attenzione: NON utilizzare un Pod se la confezione sterile è aperta o danneggiata, se il Pod è caduto dopo essere stato estratto dalla confezione o se è scaduto, in quanto potrebbe non funzionare correttamente e aumentare di conseguenza il rischio di infezione.

Attenzione: inserire SEMPRE la siringa di riempimento nell'apposito foro di riempimento sul Pod e non altrove. Non inserire la siringa più di una volta nel foro di riempimento. Utilizzare esclusivamente la siringa e l'ago di riempimento in dotazione con il Pod. La siringa di riempimento è esclusivamente monouso e deve essere utilizzata solo con il Sistema Omnipod 5. La mancata osservanza delle istruzioni riportate sopra può danneggiare il Pod.

Attenzione: non riutilizzare MAI il Pod o la siringa di riempimento, né provare a utilizzare una siringa di riempimento non in dotazione. Smaltire sempre il Pod usato e la siringa di riempimento in

conformità alle normative vigenti in materia di smaltimento. A ogni sostituzione del Pod, utilizzare esclusivamente uno nuovo con la siringa di riempimento in dotazione. Portare sempre con sé i materiali di consumo per la sostituzione del Pod, nel caso in cui si rendesse necessario effettuarla.

Attenzione: per preparare il sito, procedere SEMPRE come segue. Se il sito non è adeguatamente pulito o se le mani dell'utilizzatore sono sporche, il rischio di infezione è maggiore.

- Lavarsi le mani.
- Pulire la parte superiore della fiala di insulina con un tampone disinfettante imbevuto di alcool.
- Pulire il sito di infusione con acqua e sapone o con un tampone disinfettante imbevuto di alcool; lasciarlo asciugare completamente.
- Conservare i materiali sterili lontano da ogni possibile fonte di contaminazione.

Attenzione: applicare SEMPRE il Pod come indicato. Se si applica il Pod in un sito con scarso tessuto adiposo, afferrare la pelle attorno al Pod fino all'inserimento della cannula. Se non si utilizza questa tecnica in tali siti, possono verificarsi ostruzioni (occlusioni).

Attenzione: ruotare SEMPRE i siti di infusione di insulina per prevenire complicanze nel sito di infusione quali ad esempio tessuto cicatriziale e infezioni. La rotazione dei siti di infusione dell'insulina riduce il rischio di cicatrici. La

presenza di tessuto cicatriziale in un sito può portare a problemi di assorbimento dell'insulina.

Attenzione: controllare SEMPRE con frequenza l'eventuale presenza di segni di infezione. Se il sito di infusione presenta segni di infezione:

- Rimuovere immediatamente il Pod e applicarne uno nuovo in un sito di infusione diverso.
- Contattare l'operatore sanitario di riferimento, e procedere a curare l'infezione seguendo le istruzioni ricevute.

Se si nota del sangue nella cannula, controllare il glucosio con maggiore frequenza per accertarsi che l'insulina venga erogata correttamente. Qualora si rilevasse glicemia inaspettatamente alta, sostituire il Pod.

Attenzione: prestare attenzione durante la pulizia del Pod indossato. Afferrare saldamente il Pod in modo che la cannula non si pieghi e il Pod non si stacchi dalla pelle.

Attenzione: NON utilizzare spray, detergenti aggressivi o solventi sul Pod o nelle sue vicinanze. L'uso di creme solari spray, repellenti spray contenenti DEET, spray per l'igiene personale e altri aerosol, detergenti e sostanze chimiche aggressive sul Pod può irritare il sito di infusione o danneggiare il Pod, aumentando il rischio di rotture del suo involucro. Eventuali danni al Pod possono provocare l'ingresso di liquidi esterni che possono compromettere il suo corretto funzionamento, con conseguenti erogazione eccessiva o insufficiente di insulina e ipoglicemia o iperglicemia.

Controller

Attenzione: EVITARE di disattivare il Fuso orario automatico sul Controller. Se lo si disattiva, il Controller non sarà in grado di rilevare la non corrispondenza tra il fuso orario per il dispositivo e quello per l'erogazione di insulina. L'erogazione di insulina in base a un fuso orario diverso da quello locale può generare errori nell'erogazione di insulina e nella registrazione dei dati, con conseguente ipoglicemia o iperglicemia.

Attenzione: OGNI VOLTA che viene visualizzato il messaggio di batteria scarica, collegare e ricaricare il Controller. Quando la carica della batteria scende a un livello critico, il Controller si spegne e non si riceve l'Allarme di Pericolo di batteria scarica. Senza l'uso del Controller, non sarà possibile modificare l'erogazione di insulina, con conseguenti erogazione eccessiva o insufficiente di insulina e ipoglicemia o iperglicemia.

Attenzione: NON esporre la batteria del Controller a calore elevato > 30°C (86°F) nel periodo di conservazione e > 40°C (104°F) durante l'uso. Non forare o schiacciare né esercitare pressione sulla batteria. La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare esplosioni, incendi, scosse elettriche, danni al Controller o alla batteria o perdite da quest'ultima.

Attenzione: NON esporre il Controller a temperature estreme in fase di conservazione o utilizzo. Caldo o freddo eccessivo possono determinare il malfunzionamento del Controller. Per calore eccessivo

Importanti informazioni di sicurezza

si intendono temperature > 30°C (86°F) in fase di conservazione e > 40°C (104°F) durante l'uso. Per freddo eccessivo si intendono temperature < 0°C (32°F) in fase di conservazione e < 5°C (41°F) durante l'uso.

Attenzione: utilizzare ESCLUSIVAMENTE il cavo caricabatterie e l'adattatore in dotazione nella confezione con il Controller. EVITARE l'uso di cavi di ricarica alternativi o altri accessori, in quanto possono danneggiare il Controller o avere effetti sulla ricarica in futuro. Se è necessario utilizzare un altro tipo di cavo, utilizzare solo cavi di lunghezza inferiore o uguale a 1,2 metri (4 piedi).

Attenzione: NON immergere il Controller né collocarlo in prossimità di acqua in quanto non è un dispositivo impermeabile. La mancata osservanza di questa precauzione può danneggiare il Controller.

Attenzione: NON utilizzare solventi per pulire il Controller. NON immergerlo in acqua in quanto non è un dispositivo impermeabile. L'uso di solventi o l'immersione in acqua può danneggiarlo.

Attenzione: durante la pulizia del Controller, NON lasciar penetrare residui o liquidi nella porta USB, nell'altoparlante, nel pulsante Suoneria/Vibrazione o nel pulsante di accensione. La mancata osservanza di questa precauzione può danneggiare il Controller.

Comunicazione

Attenzione: in assenza di comunicazione tra il Pod e il Controller, il primo continua a erogare insulina in base alle impostazioni attive sul secondo prima di perdere la comunicazione. Ad esempio, l'erogazione automatica di insulina dal Pod continuerà in Modalità Automatizzata. Il ripristino della comunicazione è necessario per visualizzare lo stato del sistema, le notifiche e per inviare nuove istruzioni al Pod. Per ripristinare la comunicazione, provare a spostare il Controller entro 1,5 metri (5 piedi) dal Pod. Vedere "26.5 Problemi di comunicazione del Pod – "Riprova"" a pagina 398.

Attenzione: NON utilizzare apparecchiature di comunicazione portatili in radiofrequenza (RF) (comprese periferiche come cavi antenna e antenne esterne) a una distanza inferiore a 30 cm (12 pollici) da qualsiasi parte del Sistema Omnipod 5, in quanto in caso contrario tale azione può ripercuotersi sulla comunicazione tra il Controller e il Pod.

Allarmi e suoni

Attenzione: rispondere SEMPRE ai Segnali di Notifica Scadenza Pod, Insulina nel Pod in esaurimento e Spegnimento Pod nel momento in cui si verificano. Se non si intraprende alcuna azione, questi segnali diventano Allarmi di Pericolo. Quando si verificano Allarmi di Pericolo, l'erogazione di insulina si interrompe.

Attenzione: per silenziare definitivamente un allarme, è necessario rimuovere il Pod dal corpo. Dopo averlo rimosso ed eliminato, attivare immediatamente un nuovo Pod per evitare di rimanere a lungo senza insulina, con conseguente rischio di iperglicemia.

Attenzione: se si sospetta un problema con i suoni del Pod, controllare SEMPRE la funzione di allarme quando lo si sostituisce per assicurarsi di non perdere allarmi importanti durante l'uso (vedere "Controllo allarmi" a pagina 168).

Attenzione: EVITARE di impostare il Controller su Silenzioso, Vibrazione o qualsiasi altra impostazione impedisca di sentire allarmi e notifiche dell'App Omnipod 5. Se non si avvertono allarmi e notifiche dal Controller, si corre il rischio di non apportare tempestivamente le modifiche necessarie alla terapia insulinica. Il Pod continuerà a emettere segnali acustici e sarà possibile visualizzare l'allarme o la notifica sull'App Omnipod 5. Vedere "13.3 Suoni e vibrazioni" a pagina 163 per indicazioni su come gestire suoni e vibrazioni.

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

CAPITOLO 2

Terminologia del sistema e navigazione

Sommario

2.1 Terminologia	32
2.2 Uso del touchscreen e immissione delle informazioni	36
Nozioni fondamentali relative al touchscreen	36
Toccare e scorrere	36
Luminosità e timeout dello schermo	36
Immissione di numeri e testo	36
Utilizzo di una tastiera	37
Utilizzo di un tastierino numerico	37
Utilizzo di una rotella di scorrimento	38
Selezione, aggiunta ed eliminazione di elementi	38
Interruttori	38
Pulsanti Aggiungi ed Elimina	38
Pulsanti di navigazione e notazione abbreviata per la navigazione	39
Pulsante Opzioni	39
Notazione abbreviata per la navigazione del Manuale d'uso tecnico	39

2.1 Terminologia

Termine	Descrizione
Allarme di Notifica	Un allarme che segnala alcuni aspetti del Sistema Omnipod 5 che, nel breve termine, richiedono l'attenzione dell'utilizzatore, come una bassa quantità di insulina residua nel Pod.
Allarme di Pericolo	Un allarme che segnala un problema del Sistema Omnipod 5 che richiede attenzione immediata, ad esempio un'interruzione dell'erogazione di insulina.
Applicazione Omnipod 5 (App)	Software del Controller che rappresenta l'interfaccia utente principale del Sistema Omnipod 5.
Attivazione	La procedura di attivazione di un Pod e la configurazione di una comunicazione esclusiva con l'App Omnipod 5 che lo ha attivato.
BG	Glicemia
Bolo manuale	Quantità di bolo scelta dall'utilizzatore (non calcolata mediante il Suggeritore SmartBolus).
Cannula	Un tubicino sottile inserito sotto la pelle utilizzato dal Pod per erogare l'insulina.
Carboidrati	Zuccheri e amidi consumati e che il corpo scompone in glucosio.
Chetoacidosi (chetoacidosi diabetica o DKA)	La chetoacidosi diabetica (DKA) è una condizione molto grave in cui la glicemia molto alta e una grave mancanza di insulina causano la degradazione dei lipidi da parte del corpo che li utilizza a fini energetici. La degradazione dei lipidi rilascia i chetoni nel sangue e nell'urina. La DKA impiega ore o anche giorni a svilupparsi, con sintomi che includono mal di stomaco, nausea, vomito, alito acetone (che odora di frutta marcia) e respiro affannoso.

Chetoni	Sottoprodotti acidi derivanti dalla degradazione dei lipidi per uso energetico. La presenza di chetoni indica che il corpo sta utilizzando i lipidi immagazzinati (invece del glucosio) per le sue esigenze energetiche.
Connessione in corso	In Omnipod 5, “connessione in corso” si riferisce all’impostazione della comunicazione wireless tra i componenti del sistema. Omnipod 5 utilizza la tecnologia wireless Bluetooth® per comunicare con il Pod e dal Sensore al Pod.
Controller	Dispositivo Omnipod 5, fornito da Insulet, che contiene l’App Omnipod 5 da utilizzare per controllare il Sistema Omnipod 5.
Disattivazione	Metodo preferito per arrestare il Pod. La disattivazione disattiva l’erogazione di insulina nel Pod e consente all’App Omnipod 5 di attivare un nuovo Pod.
Dispositivo	In Omnipod 5, “dispositivo” si riferisce al Controller Omnipod 5 utilizzato per controllare l’App Omnipod 5.
Insulina attiva (IOB)	Insulina che è ancora attiva (disponibile per l’abbassamento del glucosio) nell’organismo.
Insulina basale	Una piccola quantità di insulina erogata sia di giorno sia di notte per mantenere stabile il glucosio.
Insulina bolo	Una dose di insulina erogata per i pasti con carboidrati e/o per correggere la glicemia alta.
Iperglicemia	Glicemia alta. Un livello di glicemia superiore al normale; generalmente superiore a 13,9 mmol/L (250 mg/dL).
Ipoglicemia	Glicemia bassa. Un livello di glicemia inferiore al normale; generalmente inferiore a 3,9 mmol/L (70 mg/dL).
Ipoglicemia inavvertita	Una condizione nella quale una persona non si rende conto di essere in ipoglicemia o non ne riconosce i sintomi.

2 Terminologia del sistema e navigazione

Linea di vista	Come indossare il Pod e il Sensore sullo stesso lato del corpo in modo che i due dispositivi possano “vedersi” l’un l’altro senza che il corpo ne ostacoli la comunicazione.
Microbolo	Una piccola quantità di insulina calcolata mediante la tecnologia SmartAdjust ed erogata automaticamente dal Pod ogni 5 minuti durante la Modalità Automatizzata.
Modalità Automatizzata	Un metodo di erogazione dell’insulina che utilizza la cronologia dell’erogazione di insulina, il valore glicemico e la tendenza glicemica del sensore per aumentare, diminuire e sospendere automaticamente l’erogazione dell’insulina in base ai valori di glucosio attuali e previsti utilizzando un target glicemico personalizzabile o Target Glicemico.
Modalità Automatizzata: Limitata	L’erogazione di insulina automatizzata viene utilizzata quando i valori glicemici del sensore non sono disponibili. L’erogazione di insulina si basa sulle impostazioni e sulla cronologia recente.
Modalità Manuale	Metodo di erogazione dell’insulina che eroga la quantità di insulina in base alle velocità basali del Programma Basale.
Programma Basale	Programma di erogazione dell’insulina utilizzato per l’erogazione dell’insulina in Modalità Manuale. In alcuni casi è stato presa in considerazione anche per la Modalità Automatizzata.
Scarta Pod	Quando un problema di comunicazione impedisce di disattivare un Pod, l’opzione SCARTA consente a Omnipod 5 di attivare un nuovo Pod senza arrestare quello in uso. Rimuovere sempre un Pod “scartato” dal corpo, poiché potrebbe continuare a erogare insulina.
Sensore	Componente di un sistema di monitoraggio dei valori glicemici del sensore inserito sotto la pelle per misurare il glucosio nel fluido interstiziale.

Sistema di monitoraggio dei valori glicemici del sensore	Sistema per monitorare il glucosio sia di giorno sia di notte, fornito da un produttore di dispositivi medici terzo. Noto anche come sistema di monitoraggio continuo del glucosio (CGM).
Sito di infusione	Il punto sul corpo in cui viene inserita la cannula del Pod per l'erogazione dell'insulina.
Target Glicemico	Il target glicemico personalizzabile dall'utilizzatore, impiegato sia dalla tecnologia SmartAdjust sia dal Suggeritore SmartBolus Omnipod 5 per calcolare la quantità di insulina necessaria in base sia alle letture della glicemia inserite manualmente sia ai valori glicemici del sensore. Il Target Glicemico può essere impostato tra 6,1–8,3 mmol/L (110–150 mg/dL) in 0,55 mmol/L o (incrementi di 10 mg/dL).
Tecnologia SmartAdjust™	Software del Pod utilizzato per calcolare l'erogazione di insulina automatizzata ogni 5 minuti per allineare il valore del glucosio al target glicemico personalizzato o Target Glicemico.
Trasmettitore	Componente di un sistema di monitoraggio dei valori glicemici del sensore che invia i valori glicemici del Sensore al Pod.
Unità	Come viene misurata l'insulina.
Valore glicemico del sensore	Glucosio misurato da un Sensore. I valori glicemici del sensore includono la tendenza, che indica se i livelli di glucosio sono in crescita, in calo o stabili.
Velocità basale	Il numero di unità di insulina erogate in un'ora (U/h).
Velocità Basale Adattiva	L'erogazione di insulina, in unità all'ora, calcolata con la tecnologia SmartAdjust™ per allineare il valore del glucosio al target. Tale quantità varia nel tempo in base alla cronologia dell'erogazione di insulina.

2.2 Uso del touchscreen e immissione delle informazioni



Questa sezione spiega come utilizzare il touchscreen, come immettere numeri o testo nell'App Omnipod 5 e come il presente *Manuale d'uso tecnico* descrive gli spostamenti tra le schermate dell'App Omnipod 5.

Nozioni fondamentali relative al touchscreen

L'App Omnipod 5 visualizza messaggi e opzioni per l'utilizzatore sul touchscreen.

Toccare e scorrere

Le istruzioni di base per l'interazione con il touchscreen sono disponibili qui.

	Toccare	Toccare lo schermo, quindi sollevare il dito.
	Scorrere	Toccare un punto di partenza e spostare il dito verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra. Nota: si parla di "scorrimento" sia per l'azione compiuta dall'utilizzatore sia per il risultato di tale azione. Quando si scorre con il dito verso l'alto, il display dello schermo scorre verso l'alto per visualizzare gli elementi non visibili.

Nota: Un protetti-schermo può causare una diminuzione della sensibilità del touchscreen.

Luminosità e timeout dello schermo

Lo schermo del Controller si disattiva (timeout) dopo un periodo di inattività. Per controllare le impostazioni relative alla luminosità e al timeout dello schermo, vedere "Display schermo" a pagina 133. La luminosità dello schermo si attenua 6–10 secondi prima del timeout. Se la luminosità dello schermo si attenua, toccare brevemente lo schermo per impedirne il timeout.

Immissione di numeri e testo

Toccano all'interno di un campo modificabile può comparire una tastiera o un tastierino numerico.

Utilizzo di una tastiera



Utilizzo di un tastierino numerico




2 Terminologia del sistema e navigazione

Utilizzo di una rotella di scorrimento



Toccano un campo modificabile può comparire una rotella di scorrimento. Posizionare il dito sulla rotella di scorrimento. Scorrere verso l'alto o verso il basso per selezionare il valore desiderato. La velocità di scorrimento della rotella aumenta all'aumentare della velocità con cui si muove il dito.

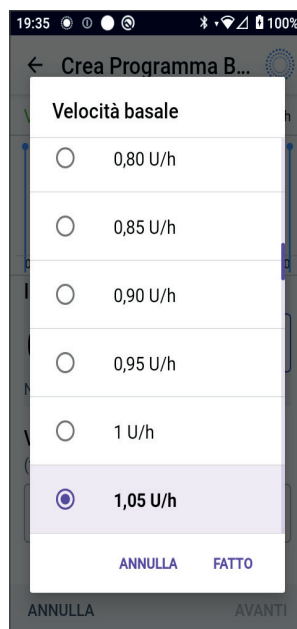Quando si raggiunge la selezione desiderata, selezionare il valore toccando il pulsante di opzione accanto ad esso, quindi toccare FATTO.





Selezione, aggiunta ed eliminazione di elementi

Interruttori

-  Toccare un interruttore per cambiare la selezione da un lato all'altro.
-  Gli interruttori consentono di attivare o disattivare una funzione. L'interruttore è a destra e viola quando una funzione è attiva, mentre è a sinistra e grigio quando una funzione non è attiva.

Pulsanti Aggiungi ed Elimina

-  Un simbolo + in un cerchio indica che è possibile aggiungere un elemento a un elenco. Toccare il simbolo + per aggiungere l'elemento all'elenco.
-  Una x rossa in un cerchio indica che è possibile rimuovere un elemento da un elenco. Per rimuovere l'elemento, toccare la x rossa.

Pulsanti di navigazione e notazione abbreviata per la navigazione

Pulsante Opzioni



Il pulsante Opzioni (⋮) viene visualizzato nella parte destra di determinati elenchi. Toccando il pulsante Opzioni viene visualizzato un elenco di opzioni relative all'elemento su quella riga.

Notazione abbreviata per la navigazione del Manuale d'uso tecnico

Nel *Manuale d'uso tecnico* viene utilizzato il simbolo “>” per indicare lo spostamento da una schermata a un'altra. Ad esempio:

- pulsante Menu (≡) > Pod > SOSTITUISCI POD
indica all'utente di compiere le seguenti azioni:
 1. Toccare il pulsante Menu (≡) in alto a sinistra nella schermata Home.
 2. Toccare Pod per aprire la schermata Pod.
 3. Toccare SOSTITUISCI POD.

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

CAPITOLO 3

Panoramica del Sistema Omnipod 5

Sommario

3.1 Comunicazione tra Sensore e App Omnipod 5	43
Comunicazione tra Dexcom G6 e App Omnipod 5	43
Comunicazione tra Sensore FreeStyle Libre 2 Plus e App Omnipod 5 ...	44
3.2 App Omnipod 5	45
Il Controller Omnipod 5	45
3.3 Blocco schermo e sicurezza	46
Sicurezza dell'App Omnipod 5 sul Controller	46
Sblocco del Controller	46
Blocco del Controller	47
PIN dimenticato?	47
3.4 Barra di stato	48
3.5 Schermata Home	49
Scheda DASHBOARD	50
Senza Trasmettitore Dexcom G6 o Sensore FreeStyle Libre 2 Plus associato	50
Con Trasmettitore Dexcom G6 o Sensore FreeStyle Libre 2 Plus associato	51
Scheda INSULINA	52
Modalità Manuale	52
Basale Temporanea	53
Modalità Automatizzata	53
Funzione Attività fisica	53
Scheda INFO POD	54
Banner INFO POD	55
Informazioni sul bolo e pulsante Bolo	56
Tra un bolo e l'altro	56
Durante l'erogazione di un bolo	56
Informazioni sul bolo in assenza di comunicazione con il Pod	56
Quantità di bolo stimate e non confermate	56
Pulsante Bolo	56
3.6 Menu principale della schermata Home	57

3 Panoramica del Sistema Omnipod 5

Schermata Informazioni su	58
3.7 Notifiche e messaggi.....	58
Notifiche Omnipod 5.....	58
Allarmi.....	58
Notifiche Elemento di Azione.....	59
Notifiche di promemoria.....	59
Stato.....	59
Messaggi di conferma.....	59
3.8 Panoramica delle Modalità Manuale e Automatizzata.....	60
Attività disponibili in ciascuna modalità	60
Identificazione delle modalità del sistema.....	62

3.1 Comunicazione tra Sensore e App Omnipod 5

La comunicazione tra i componenti del Sistema Omnipod 5 varia a seconda del Sensore scelto.

Comunicazione tra Dexcom G6 e App Omnipod 5

Il Sistema Omnipod 5 comunica con il Sistema di Monitoraggio Continuo del Glucosio (CGM) Dexcom G6.


- Il Pod eroga insulina al corpo, riceve i comandi dall'App Omnipod 5, riceve i valori glicemici del sensore dal Trasmettitore Dexcom, invia i valori glicemici del sensore all'App Omnipod 5 e regola automaticamente l'erogazione di insulina in Modalità Automatizzata.
- Il Trasmettitore Dexcom G6 invia i valori glicemici del sensore al Pod e all'app Dexcom G6. L'App Omnipod 5 non comunica direttamente con l'app Dexcom G6. Per informazioni specifiche su Dexcom, fare riferimento alle *Istruzioni per l'uso del sistema CGM Dexcom G6*.
- Il Controller consente di controllare il Pod tramite l'App Omnipod 5.



Comunicazione tra Sensore FreeStyle Libre 2 Plus e App Omnipod 5

Il Sistema Omnipod 5 comunica con il Sensore FreeStyle Libre 2 Plus.

- Il Pod eroga insulina al corpo, riceve i comandi dall'App Omnipod 5, riceve i valori glicemici del sensore dal Sensore FreeStyle Libre 2 Plus, invia i valori glicemici del sensore all'App Omnipod 5 e regola automaticamente l'erogazione di insulina in Modalità Automatizzata.
- Il Sensore FreeStyle Libre 2 Plus invia i valori glicemici del sensore al Pod e all'App Omnipod 5. Per informazioni specifiche sul Sensore, fare riferimento al *Manuale d'uso di FreeStyle Libre 2 Plus*.
- Il Controller consente di controllare il Pod e il Sensore utilizzando l'App Omnipod 5.
- L'App Omnipod 5 attiva il Pod, invia i comandi del bolo al Pod, riceve le informazioni relative all'erogazione di insulina e al Sensore dal Pod quando si trova nelle vicinanze, visualizza il valore glicemico e la tendenza glicemica del sensore dal Pod, esegue la risoluzione dei problemi, aggiunge un Sensore e riceve e visualizza informazioni e allarmi direttamente dal Sensore solo quando non è attivo alcun Pod.

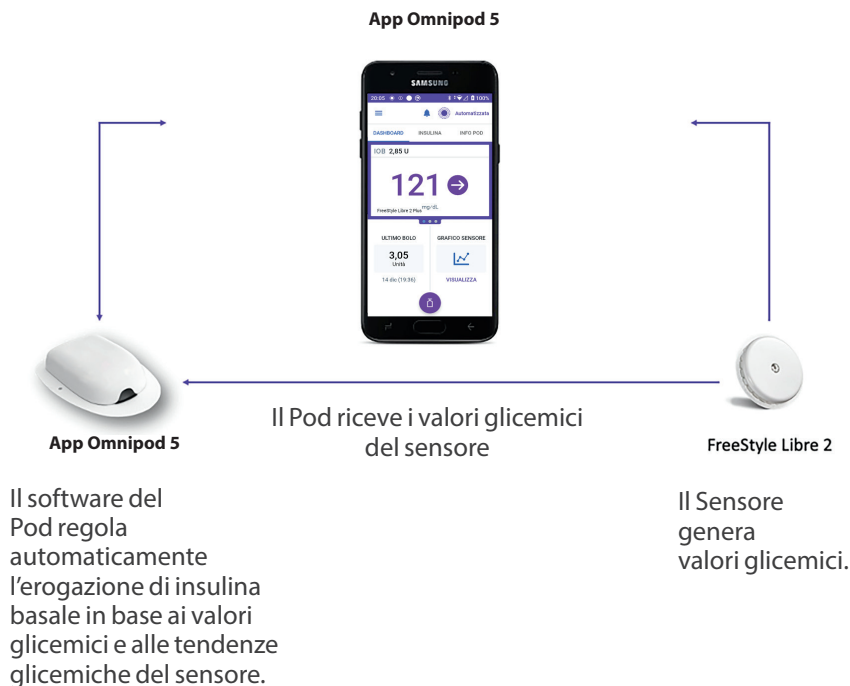

3.2 App Omnipod 5

È possibile utilizzare l'App Omnipod 5 per controllare e monitorare il funzionamento del Pod utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth®.

Attenzione: EVITARE di lasciare il Controller in un luogo che impedisce di sentire allarmi e notifiche dell'App Omnipod 5. Se ci si allontana dal Controller, l'erogazione di insulina in Modalità Manuale o Modalità Automatizzata prosegue come da programma.

Il Controller Omnipod 5



3.3 Blocco schermo e sicurezza

Avvertenza: è importante identificare SEMPRE l'App Omnipod 5 come propria prima di utilizzarla. L'utilizzo dell'App Omnipod 5 appartenente ad altri può comportare un'erogazione di insulina errata per entrambi.

Avvertenza: non lasciare MAI incustodito il Controller, tenerlo SEMPRE sotto controllo per garantire che altri non possano apportare modifiche alla propria terapia insulinica. Modifiche accidentali all'erogazione di insulina possono comportare un'erogazione eccessiva o insufficiente di insulina, con conseguente ipoglicemia o iperglicemia. Prestare attenzione nella condivisione del PIN del proprio Controller.

Sicurezza dell'App Omnipod 5 sul Controller

Dopo aver configurato il Controller in dotazione, vengono visualizzate le schermate Blocco e PIN a ogni riattivazione del Controller.

Il blocco schermo visualizza i seguenti elementi:

- l'immagine di sfondo selezionata
- la data e l'ora della giornata odierna
- il messaggio personalizzato
- la modalità in cui è attualmente impostato il sistema
- la quantità di insulina attiva
- eventuali messaggi di allarme o notifica

Sblocco del Controller

Nel resto di questo *Manuale d'uso tecnico*, le istruzioni che indicano di "riattivare" o "sbloccare" il Controller sono da intendersi nel modo seguente:

1. Premere e rilasciare il pulsante di accensione.
2. Sbloccare la schermata scorrendo da sinistra a destra o dal basso verso l'alto. Viene visualizzata la schermata PIN.
3. Immettere il PIN a 4 cifre.
4. Toccare OK. Viene visualizzata la schermata Home o quella più recente.

Blocco del Controller

Per bloccare il Controller al termine del suo utilizzo:

- Premere brevemente il pulsante di accensione, in modo da bloccare il Controller mettendolo in modalità di sospensione.

Nota: conservare il Controller in un luogo sicuro e accessibile.

Attenzione: premere il pulsante di accensione sul Controller **ESCLUSIVAMENTE** per meno di 1 secondo onde evitare di spegnerlo accidentalmente. Se il Controller visualizza un messaggio che chiede se si desidera procedere allo spegnimento, toccare all'esterno del messaggio per annullarlo. In caso di spegnimento accidentale del Controller, è possibile perdere notifiche e allarmi importanti dall'App Omnipod 5. Se non si avvertono allarmi e notifiche dal Controller, si corre il rischio di non apportare tempestivamente le modifiche necessarie alla terapia insulinica. Il Pod emetterà un allarme indipendentemente dal fatto che il Controller sia acceso o spento.

PIN dimenticato?

In caso di problemi con il PIN, contattare l'Assistenza clienti. Per le informazioni di contatto, fare riferimento alla scheda Assistenza clienti all'inizio del presente *Manuale d'uso tecnico*.

3.4 Barra di stato

Nella parte superiore della schermata è presente una barra di stato che mostra le icone sia per l'App Omnipod 5 sia per il Controller. Se applicabile, verranno visualizzate le seguenti icone:

- icona dello stato di Omnipod 5
- livello della batteria
- indicazione di ricarica della batteria
- ora corrente

Definizioni delle icone della barra di stato:

	Stato di Omnipod 5 – Modalità Automatizzata
	Stato di Omnipod 5 – Modalità Manuale
	Allarme di Pericolo
	Allarme di Notifica
	Notifica Elemento di Azione
	Promemoria
	Vibrazione/Silenzioso
	Modalità aereo attivata
	Impostazione della tecnologia wireless Bluetooth attivata
	Connettività cellulare
	Wi-Fi


Nota: scorrere verso il basso dalla barra di stato per ulteriori dettagli sugli elementi attualmente visualizzati sulla barra di stato. Quindi, scorrere verso l'alto per chiudere.

Nota: le icone specifiche del dispositivo, come Wi-Fi e vibrazione/silenzioso, possono variare nell'aspetto.



3.5 Schermata Home

In questa sezione vengono illustrate le informazioni visualizzate sulla schermata Home dell'App Omnipod 5. Vengono visualizzate informazioni diverse a seconda della modalità di sistema attivata.

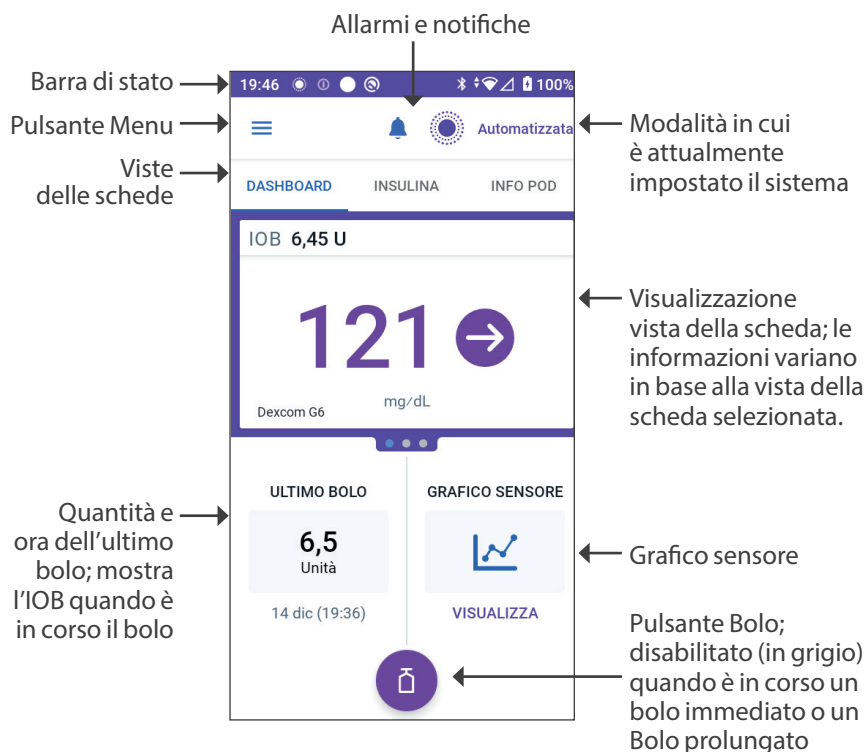

La vista delle schede della schermata Home selezionata determina quali informazioni vengono visualizzate sullo schermo. Per modificare le informazioni visualizzate:

- Toccare DASHBOARD, INSULINA o INFO POD.
- Far scorrere il dito verso destra o verso sinistra nella parte centrale dello schermo (direttamente sotto le schede della schermata Home) per spostarsi tra le viste delle schede.
- Se è in corso un bolo immediato, nella schermata Home vengono visualizzate una barra di avanzamento del bolo e un pulsante per annullare il bolo. Le tre schede non sono visibili se è in corso un bolo immediato (vedere “17.9 Erogazione di un bolo immediato” a pagina 242).

Scheda DASHBOARD

La scheda DASHBOARD visualizza le seguenti informazioni.

Nota: la scheda DASHBOARD mostra contenuti diversi se un Trasmettitore Dexcom G6 o un Sensore FreeStyle Libre 2 Plus è associato all'App Omnipod 5.

Senza Trasmettitore Dexcom G6 o Sensore FreeStyle Libre 2 Plus associato

- INSULINA ATTIVA (IOB): il valore viene visualizzato quando l'IOB è disponibile.
- INSULINA ATTIVA (IOB): è visualizzata sotto forma di trattini quando l'IOB non è disponibile o non è presente alcuna comunicazione con il Pod. Toccare **ULTERIORI INFORMAZIONI** per i possibili motivi.



Con Trasmettitore Dexcom G6 o Sensore FreeStyle Libre 2 Plus associato

- INSULINA ATTIVA (IOB)
- Valore glicemico del sensore (con freccia di tendenza): quando è disponibile un valore glicemico del sensore.
- Valore glicemico del sensore (senza freccia): quando il Sensore fornisce un valore glicemico del sensore ma non è in grado di segnalare la tendenza glicemica del sensore.
- ALTO: quando il valore glicemico ricevuto dal Sensore è superiore al valore visualizzato massimo del Sensore:
 - Dexcom G6: 22,2 mmol/L (400 mg/dL)
 - FreeStyle Libre 2 Plus: 27,8 mmol/L (500 mg/dL)
- BASSO: quando il valore glicemico ricevuto dal Sensore è inferiore a 2,2 mmol/L (40 mg/dL).



La scheda DASHBOARD visualizza anche le informazioni relative a potenziali problemi di comunicazione del Sensore.

Viene visualizzata una barra di avanzamento quando è in corso un bolo (vedere “16.3 Monitoraggio del progresso di un bolo” a pagina 230).


Scheda INSULINA

L'etichetta della scheda INSULINA cambia in ATTIVITÀ quando la Funzione Attività fisica è abilitata in Modalità Automatizzata o in TEMP ATTIVA quando è in esecuzione un Basale Temporanea in Modalità Manuale.

Modalità Manuale

Per impostazione predefinita, in Modalità Manuale, la scheda INSULINA mostra il nome e il grafico del Programma Basale definito dall'utente. Un'etichetta sotto il nome del Programma Basale indica se il Programma Basale elencato è:

- In corso: questo programma è in esecuzione sul Pod attivo.
- Sospeso: questo programma verrà ripreso quando si avvia l'erogazione di insulina.
- Corrente: non è presente alcun Pod attivo. Questo programma verrà inviato al Pod successivo durante l'attivazione.

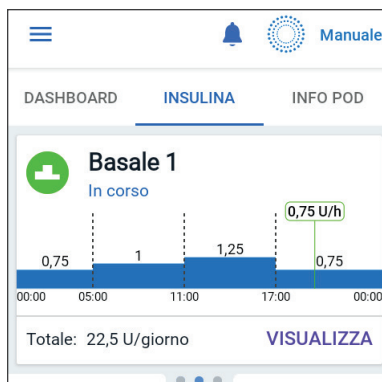

In presenza di un Programma Basale in corso, una linea verde verticale indica l'ora corrente. I numeri sopra il grafico indicano la velocità basale per ciascun segmento temporale.


La quantità totale giornaliera di insulina basale in Modalità Manuale è mostrata sotto il grafico. Questo totale è la quantità di insulina prevista dal Programma Basale in corso per l'erogazione in un periodo di 24 ore. Non tiene conto delle Basali Temporanee o dei boli.

Per vedere la quantità totale di insulina che il Pod ha effettivamente erogato, incluse le Basali Temporanee e i boli, vedere "Visualizzazione di cronologia e registri" a pagina 141.

Toccare VISUALIZZA per visualizzare i dettagli degli altri Programmi Basale.


Basale Temporanea

Quando è in esecuzione una Basale Temporanea, l'etichetta della scheda INSULINA cambia in TEMP ATTIVA ed è evidenziata in azzurro. Visualizza il grafico della Basale Temporanea e consente di annullare la Basale Temporanea. Vedere pagina 110

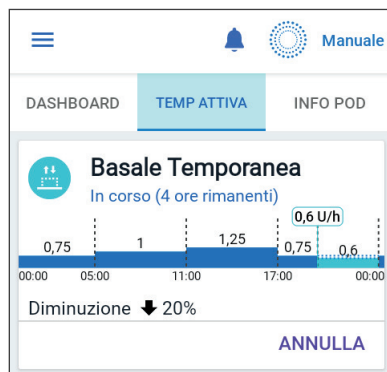


Modalità Automatizzata

In Modalità Automatizzata, la scheda INSULINA mostra MODALITÀ AUTOMATIZZATA: ATTIVA e visualizza ULTIMO BOLO e INFO SENSORE. Per ulteriori informazioni sull'uso della Modalità Automatizzata, vedere “Informazioni sulla Modalità Automatizzata” a pagina 329.

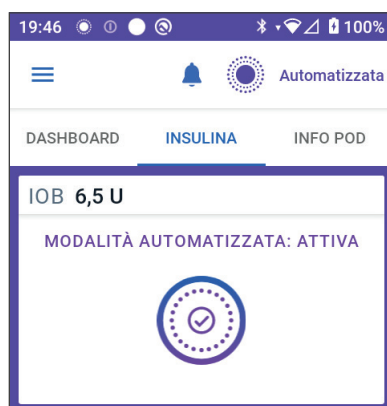

Funzione Attività fisica


In Modalità Automatizzata, quando la Funzione Attività fisica è abilitata, l'etichetta della scheda INSULINA cambia in ATTIVITÀ FISICA, evidenziata in verde, e mostra il messaggio Attività fisica attivata. Vedere “23.1 Informazioni sulla Funzione Attività fisica” a pagina 346 per ulteriori informazioni.

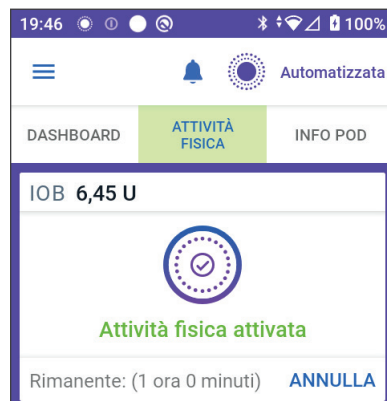

Scheda INFO POD

La scheda INFO POD mostra se è presente un Pod attivo e, in tal caso, la quantità di insulina rimasta nel Pod e la data di scadenza del Pod.

Se l'App Omnipod 5 non riesce a comunicare con un Pod attivo, la scheda INFO POD mostra il messaggio "Nessuna comunicazione con il Pod". Toccare **ULTERIORI INFORMAZIONI** per i dettagli.

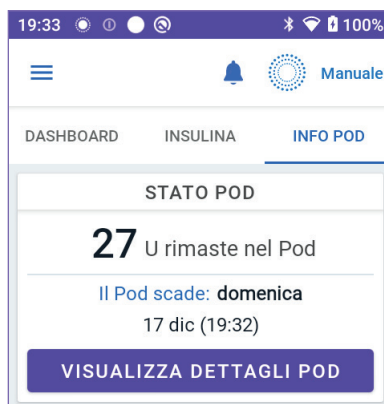

Attenzione: in assenza di comunicazione tra il Pod e il Controller, il primo continua a erogare insulina in base alle impostazioni attive sul secondo prima di perdere la comunicazione. Ad esempio, l'erogazione automatica di insulina dal Pod continuerà in Modalità Automatizzata. Il ripristino della comunicazione è necessario per visualizzare lo stato del sistema, le notifiche e per inviare nuove istruzioni al Pod. Per ripristinare la comunicazione, provare a spostare il Controller entro 1,5 m (5 piedi) dal Pod. Vedere "26.5 Problemi di comunicazione del Pod – "Riprova"" a pagina 398.

In assenza di un Pod attivo, la scheda INFO POD mostra il messaggio "Nessun Pod attivo". Per configurare un nuovo Pod, vedere "Attivazione e sostituzione del Pod" a pagina 81.

Se è presente un Pod attivo, toccare **VISUALIZZA DETTAGLI POD** per visualizzare una schermata che consente di disattivare o modificare il Pod.

Nella schermata **VISUALIZZA DETTAGLI POD** sono riportate le seguenti informazioni:

- quantità di insulina nel Pod.
- ora dell'ultima comunicazione tra l'App Omnipod 5 e il Pod.
- data e ora di scadenza del Pod.
- promemoria.
- un pulsante **SOSTITUISCI POD**.

Consiglio: è possibile accedere a questa schermata toccando il pulsante Menu (☰) > Pod.



Banner INFO POD

Quando il Pod sta per scadere, viene visualizzato il banner giallo SOSTITUISCI POD PRESTO nella scheda INFO POD. Il banner giallo appare 12 ore prima della scadenza del Pod o al momento del promemoria relativo alla scadenza del Pod, a seconda di quale dei due si verifichi per prima.

SOSTITUISCI POD PRESTO

20 U rimaste nel Pod

Il Pod scade: **Domani**
15 dic (05:09)

VISUALIZZA DETTAGLI POD

6 ore prima della scadenza del Pod, viene visualizzato il banner rosso SOSTITUISCI POD nella scheda INFO POD.

SOSTITUISCI POD

15 U rimaste nel Pod

Il Pod scade: **Oggi**
14 dic (19:49)

VISUALIZZA DETTAGLI POD

Quando nel Pod rimangono meno di 5 unità di insulina, viene visualizzato il banner rosso INSULINA NEL POD IN ESAURIMENTO nella scheda INFO POD. Quando il Pod sta per scadere e nel Pod sono presenti meno di 5 unità di insulina, viene visualizzato il banner rosso INSULINA NEL POD IN ESAURIMENTO nella scheda INFO POD.

INSULINA NEL POD IN ESAURIMENTO

Meno di 5 unità

Il Pod scade: **Oggi**
14 dic (19:53)

VISUALIZZA DETTAGLI POD

Nota: se si modifica il fuso orario, l'ora di scadenza del Pod viene regolata in base al nuovo fuso orario selezionato.

Informazioni sul bolo e pulsante Bolo

Nella sezione inferiore sinistra della schermata Home sono riportate le informazioni relative al bolo. Il pulsante Bolo si trova in fondo.

Tra un bolo e l'altro

Quando non è presente alcun bolo in erogazione, la sezione è etichettata come **ULTIMO BOLO** e mostra la quantità e l'ora del bolo più recente.

Durante l'erogazione di un bolo

Quando un bolo è in erogazione, le informazioni relative all'ultimo bolo vengono sostituite con una stima dell'Insulina Attiva (IOB):

- Durante l'erogazione di un bolo immediato, l'IOB stimata viene aggiornata una volta al secondo.
- Durante l'erogazione di un Bolo prolungato, l'IOB stimata viene aggiornata in base a:
 - boli precedenti
 - quantità di insulina già erogata dal bolo in corso
 - quantità di insulina che si prevede venga erogata entro il periodo di tempo definito dall'impostazione Durata dell'azione dell'insulina



Informazioni sul bolo in assenza di comunicazione con il Pod

Se il Pod non è entro la distanza di comunicazione del Controller e non può confermare la quantità di bolo recente, viene visualizzata una quantità di bolo stimata. Una volta che il Pod è di nuovo a distanza di comunicazione e l'erogazione del bolo è confermata, viene visualizzata la quantità di bolo confermata.

Quantità di bolo stimate e non confermate

L'App Omnipod 5 stima le quantità di bolo durante un bolo attivo e quando il Pod non è a distanza di comunicazione. Un'icona grigia (ⓘ) contrassegna le quantità di bolo stimate. Un'icona gialla (!) contrassegna le quantità di bolo non confermate (vedere "Quando il Pod non conferma l'erogazione del bolo" a pagina 152).

Pulsante Bolo

Il pulsante Bolo consente di accedere al Suggeritore SmartBolus. Il pulsante Bolo non è disponibile durante l'erogazione di un bolo immediato o Bolo prolungato o quando non è presente un Pod attivo.



3.6 Menu principale della schermata Home

Il menu principale della schermata Home consente di accedere alla maggior parte delle funzioni dell'App Omnipod 5. Per accedere al menu principale:

- Toccare il pulsante Menu (≡) nell'angolo in alto a sinistra della schermata Home
oppure
- posizionare il dito sull'estrema sinistra dell'App Omnipod 5 e scorrere verso l'estremità destra dello schermo. Scorrere verso sinistra per nascondere il menu.

Toccare un'opzione nel menu per visualizzare la schermata associata.

Consiglio: il menu si estende oltre la parte inferiore dello schermo. Scorrere verso l'alto o verso il basso per vedere tutte le parti del menu.

Le opzioni del menu disponibili variano a seconda della modalità corrente: Manuale o Automatizzata. Le opzioni del menu in grigio sono disabilitate in base alla modalità o alle impostazioni correnti.

La tabella riportata di seguito mostra le opzioni del menu e la loro disponibilità in ciascuna modalità:

Opzioni del menu	Modalità Manuale	Modalità Automatizzata
Attività frequenti		
Cambia modalità	✓	✓
Imposta Basale Temporanea	✓	
Attività fisica		✓
Pod	✓	✓
Gestisci Sensore	✓	✓
Immetti glicemia	✓	✓
Sospendi insulina	✓	
Gestisci programmi e preimpostazioni		
Programmi Basale	✓	
Alimento Personalizzato	✓	✓
Cronologia		
Dettagli Cronologia	✓	✓
Notifiche	✓	✓

3 Panoramica del Sistema Omnipod 5

Opzioni del menu	Modalità Manuale	Modalità Automatizzata
Impostazioni		
Generale	✓	✓
Promemoria	✓	✓
Obiettivo glicemico	✓	✓
Basale e Basale Temporanea	✓	
Bolo	✓	✓

Schermata Informazioni su

La schermata Informazioni su visualizza i dettagli relativi al Sistema Omnipod 5, come il numero di versione dell'App Omnipod 5, le informazioni di contatto dell'Assistenza clienti, il numero di serie del Controller (se visualizzato sul Controller), il numero di versione del Pod, l'ora della comunicazione più recente tra App Omnipod 5 e Pod e altre informazioni legali e relative al Controller.

3.7 Notifiche e messaggi

Attenzione: EVITARE di impostare il Controller su Silenzioso, Vibrazione o qualsiasi altra impostazione impedisca di sentire allarmi e notifiche dell'App Omnipod 5. Se non si avvertono allarmi e notifiche dal Controller, si corre il rischio di non apportare tempestivamente le modifiche necessarie alla terapia insulinica. Il Pod continuerà a emettere segnali acustici e sarà possibile visualizzare l'allarme o la notifica sull'App Omnipod 5. Vedere "13.3 Suoni e vibrazioni" a pagina 163 per indicazioni su come gestire suoni e vibrazioni.


L'App Omnipod 5 è in grado di inviare notifiche e messaggi di conferma per Omnipod 5.


Notifiche Omnipod 5

Le notifiche vengono visualizzate in ordine di importanza e secondariamente in base all'ordine in cui sono state ricevute, a partire dalla più recente. Gli Allarmi di Pericolo sono prioritari, seguiti dai Segnali di Notifica, dalle Notifiche Elemento di Azione e infine dai Promemoria.

Allarmi

Gli allarmi richiedono attenzione immediata da parte dell'utilizzatore (vedere pagina 166). Se si ignora un allarme, si potrebbe andare incontro a ipoglicemia o iperglicemia. Quando si verifica un allarme, il Pod emette un segnale acustico e l'App Omnipod 5 emette un segnale acustico o una vibrazione se la funzione suoneria/vibrazione è attiva.


Gli Allarmi di Pericolo () segnalano un problema relativo all'erogazione di insulina, al Pod o all'App Omnipod 5 che richiede attenzione immediata per essere risolto. Gli Allarmi di Pericolo sono accompagnati da un segnale acustico continuo emesso dal Pod e da un segnale acustico/una vibrazione emessi dal Controller. Gli Allarmi di Pericolo interrompono qualsiasi altra operazione eseguita dall'App Omnipod 5, ad eccezione di un altro Allarme di Pericolo. Ad esempio, viene emesso un Allarme di Pericolo se il Pod esaurisce l'insulina.

I Segnali di Notifica () avvisano l'utilizzatore di alcuni aspetti dell'App Omnipod 5 o del Pod che richiedono attenzione nel breve termine. Ad esempio, se il livello di insulina nel Pod sta diminuendo, l'App Omnipod 5 emette un Allarme di Notifica.

Notifiche Elemento di Azione

Le Notifiche Elemento di Azione (vedere pagina 182) si riferiscono alle attività tecniche del sistema a cui è necessario rispondere il prima possibile. Le Notifiche Elemento di Azione sono correlate alle modifiche apportate all'App Omnipod 5 che potrebbero influire sull'uso sicuro del sistema. Ad esempio, un Elemento di Azione Attiva Bluetooth indica che la tecnologia wireless Bluetooth è stata disattivata e che l'App non comunica più con il Pod.

Notifiche di promemoria

Le notifiche di promemoria () ricordano all'utilizzatore le azioni di gestione del diabete che potrebbe dover eseguire (vedere "13.11 Elenco notifiche di promemoria" a pagina 192).

Stato

Le notifiche di stato vengono visualizzate sul blocco schermo e mostrano la modalità di sistema corrente e l'IOB, se disponibile.

Messaggi di conferma

In alcune situazioni, l'App Omnipod 5 visualizza un banner verde nella parte inferiore della schermata che conferma lo stato di un'azione. Il messaggio di conferma scompare dopo alcuni secondi.

Consiglio: scorrere verso destra sul messaggio per eliminarlo subito.

Se un comando non è andato a buon fine, l'App Omnipod 5 visualizza un messaggio di errore di comunicazione (vedere "26.1 Domande frequenti sul microinfusore Omnipod 5" a pagina 382).

3.8 Panoramica delle Modalità Manuale e Automatizzata

Attività disponibili in ciascuna modalità

La tabella seguente definisce le attività che possono essere eseguite in Modalità Manuale e Modalità Automatizzata.

	Modalità Manuale	Modalità Automatizzata
Come funziona		
Erogazione di insulina basale	L'insulina viene erogata in base al Programma Basale attivo.	L'insulina viene erogata e regolata automaticamente in base ai valori glicemici del sensore e alle previsioni.
Erogazione bolo di insulina	L'insulina viene erogata utilizzando il Suggeritore SmartBolus o viene immessa manualmente.	L'insulina viene erogata utilizzando il Suggeritore SmartBolus o viene immessa manualmente.
Sensore connesso	Non necessario. Se connesso, i valori glicemici del sensore vengono visualizzati, memorizzati nella cronologia e sono disponibili per l'uso con il Suggeritore SmartBolus.	Obbligatorio. I valori glicemici del sensore utilizzati per l'erogazione di insulina automatizzata, vengono visualizzati, memorizzati nella cronologia e sono disponibili per l'uso nel Suggeritore SmartBolus.
Possibili azioni		
Programmi Basale	Modificare, creare nuovo, attivare i Programmi Basale (non influisce sulla Modalità Automatizzata).	Modificare il Target Glicemico per variare l'erogazione di insulina automatizzata. Non è possibile modificare i Programmi Basale in Modalità Automatizzata.
Erogazione di insulina basale	Avviare e annullare la Velocità Basale Temporanea.	Avviare e annullare la Funzione Attività fisica.
Impostazioni del Suggeritore SmartBolus	Modificare le impostazioni del bolo.	Modificare le impostazioni del bolo.





	Modalità Manuale	Modalità Automatizzata
Erogazione bolo di insulina	Erogare e annullare boli immediati e Boli prolungati.	Erogare e annullare i boli immediati.
Possibili azioni		
Sostituzioni del Pod	Attivare e disattivare i Pod.	Disattivare i Pod. Una volta disattivato, il sistema passa alla Modalità Manuale. L'attivazione del Pod avviene in Modalità Manuale (dopo l'attivazione, viene visualizzata la richiesta di passaggio alla Modalità Automatizzata).
Gestione del Sensore	Visualizzare e modificare il Numero di serie (NS) del Trasmettitore Dexcom G6. Passare da marca e modello di un sensore all'altro (quando si sostituiscono i Pod). Avviare o eliminare un Sensore FreeStyle Libre 2 Plus, visualizzare la durata di utilizzo e configurare le impostazioni di allarme.	Visualizzare il Numero di serie (NS) del Trasmettitore Dexcom G6. Visualizzare la durata di utilizzo del Sensore FreeStyle Libre 2 Plus e configurare gli allarmi.
Sospendere e avviare l'insulina	Sospendere manualmente l'insulina per una durata specificata di massimo 2 ore. Avviare manualmente l'insulina.	Il sistema sospende automaticamente l'erogazione automatizzata di insulina in base al valore glicemico del sensore/ alla previsione. Passare alla Modalità Manuale per sospendere manualmente l'erogazione di insulina.
Dettagli Cronologia	Rivedere i Dettagli Cronologia.	Rivedere i Dettagli Cronologia.

3 Panoramica del Sistema Omnipod 5

	Modalità Manuale	Modalità Automatizzata
Immissione valore glicemico	Immettere i valori della lettura della glicemia da salvare in Dettagli Cronologia.	Immettere i valori della lettura della glicemia da salvare in Dettagli Cronologia.
Modalità di notifica	Vedere “Allarmi, azioni e notifiche di promemoria” a pagina 159 per un elenco dettagliato degli allarmi e delle notifiche.	

Identificazione delle modalità del sistema

L'indicatore della modalità mostra la modalità di funzionamento corrente del Sistema Omnipod 5.

Grafico	Descrizione
 ---	Viene visualizzato quando non è presente alcuna comunicazione con il Pod o nessun Pod attivo.
 Automatizzata	Viene visualizzato quando il Sistema Omnipod 5 è in Modalità Automatizzata e il Pod fornisce l'erogazione di insulina automatizzata.
 Limitata	Viene visualizzato quando il Sistema Omnipod 5 è in Modalità Automatizzata: Stato Limitata. Il motivo più comune è che il Pod non riceve i valori glicemici del sensore. In risposta, il sistema confronta costantemente la Velocità Basale Adattiva automatizzata e il Programma Basale manuale e utilizza il valore più basso. Controllare il Sensore per assicurarsi che funzioni. Anche la posizione del Pod e del Sensore può contribuire alla perdita di connettività tra i dispositivi.
 Manuale	Viene visualizzato quando il Sistema Omnipod 5 è in Modalità Manuale ed è in corso l'erogazione del Programma Basale attivo.

CAPITOLO 4

Configurazione dell'applicazione Omnipod 5

Sommario

4.1 Configurazione di un account.....	64
4.2 Prepararsi alla formazione	64
Contenuto del kit introduttivo Omnipod 5.....	65
Elementi necessari per la formazione.....	65
4.3 Impostazioni generali sul Controller fornito da Insulet	66
Accensione e accesso al Controller	66
Impostazione della formazione.....	68
Configurazione del Controller	69
Personalizzazione del Controller.....	69
Impostazione del PIN sul Controller	69
Attivazione di notifiche e suoni sul Controller	70
4.4 Impostazioni basali	71
Impostare la Velocità basale massima	71
Creazione di un Programma Basale.....	72
Denominazione del Programma Basale	72
Definizione dei segmenti	72
Revisione del Programma Basale	73
Configurazione Basali Temporanee	74
4.5 Impostazioni dei boli	75
Valori Target Glicemico e Correggi se superiore a	75
Definizione dei segmenti	75
Rapporto Insulina/Carboidrati (IC).....	76
Definizione dei segmenti	76
Fattore di Correzione	77
Definizione dei segmenti	77
Durata dell'azione dell'insulina.....	78
Bolo massimo	79
Bolo prolungato.....	79
4.6 La configurazione dell'App è completata	79

4 Configurazione dell'applicazione Omnipod 5

Avvertenza: NON iniziare a utilizzare il sistema o modificare le impostazioni senza aver prima ricevuto formazione e indicazioni appropriate da parte dell'operatore sanitario di riferimento. Un avvio e una regolazione delle impostazioni non corretti possono comportare un'erogazione eccessiva o insufficiente di insulina, con conseguente ipoglicemia o iperglicemia. Le impostazioni che influiscono principalmente sull'erogazione di insulina sono le seguenti: Spegnimento Pod, velocità basali, Velocità basale massima, Bolo massimo, Fattore/i di Correzione, Rapporto Insulina/Carboidrati (IC), Glicemia Minima per il Suggestore di Bolo, Target Glicemico, Correggi se superiore a e Durata dell'azione dell'insulina.

4.1 Configurazione di un account

Per utilizzare Omnipod 5, occorre accedere a Omnipod.com per completare l'onboarding. Se si dispone già di un account Omnipod, utilizzare lo stesso ID Omnipod e la stessa password.

Se è necessario creare un ID Omnipod:

1. Accedere a <https://Omnipod.com/setup>.
2. Seguire le istruzioni sullo schermo per configurare l'account.

4.2 Prepararsi alla formazione

Per le persone che si apprestano a utilizzare Omnipod per la prima volta, potrebbe essere necessario incontrare il formatore Omnipod 5 per la configurazione dell'App Omnipod 5, del primo Pod e del Sensore. L'operatore sanitario di riferimento fornirà assistenza per coordinare e definire un piano di formazione appropriato.

Per iniziare ad acquisire familiarità con il Sistema Omnipod 5, consultare il *Manuale d'uso*.

Nota: Per informazioni sulla formazione relativa al Dexcom G6, fare riferimento alle *istruzioni per l'uso del sistema CGM Dexcom G6*. Per informazioni sulla formazione relativa al Sensore FreeStyle Libre 2 Plus, consultare il *Manuale d'uso di FreeStyle Libre 2 Plus*.

Contenuto del kit introduttivo Omnipod 5

La spedizione iniziale contiene gli articoli necessari per iniziare a utilizzare il Sistema Omnipod 5.

Il kit introduttivo Omnipod 5 fornito da Insulet contiene:

- controller Omnipod 5
- cavo caricabatterie e adattatore
- *manuale d'uso*

Dopo aver disimballato la spedizione, utilizzare l'etichetta "Contenuto" sul lato della scatola per assicurarsi di avere tutto.

Il sistema CGM Dexcom G6 e i relativi materiali di consumo devono essere ottenuti da Dexcom o da un distributore autorizzato. Fare riferimento alle *Istruzioni per l'uso del sistema CGM Dexcom G6*.

Il Sistema di Monitoraggio Flash del Glucosio FreeStyle Libre 2 Plus e i materiali di consumo devono essere ottenuti da Abbott Diabetes Care o da un distributore autorizzato. Per le istruzioni per l'uso, fare riferimento al *Manuale d'uso del sistema FreeStyle Libre 2 Plus*.

Elementi necessari per la formazione

- Il Controller con l'App Omnipod 5 e il cavo di ricarica e adattatore
- I materiali di consumo del sensore di glucosio
 - Per Dexcom G6, il Sensore Dexcom G6, il Trasmettitore e l'app Dexcom G6
 - Per FreeStyle Libre 2 Plus, il Sensore FreeStyle Libre 2 Plus
- Due Pod
- Il *Manuale d'uso tecnico* e/o il *Manuale d'uso*
- Glucometro
- Strisce reattive e un dispositivo a lancetta (acquistabile in farmacia)
- Fiala di insulina U-100 ad azione rapida (vedere pagina 8 per informazioni sui tipi di insulina approvati per l'utilizzo con il Pod).
- Tamponi disinfettanti imbevuti di alcol
- Le istruzioni dell'operatore sanitario di riferimento con le impostazioni dell'App Omnipod 5 personalizzate in base alle proprie esigenze. Tali impostazioni comprendono il Programma Basale, il Rapporto Insulina/Carboidrati (IC), il Fattore di Correzione, il Target Glicemico e la Durata dell'azione dell'insulina.

4 Configurazione dell'applicazione Omnipod 5

Nota: assicurarsi che il Controller sia carico prima di iniziare la formazione. Per ricaricare il Controller, vedere “Ricarica della batteria del” a pagina 202.

4.3 Impostazioni generali sul Controller fornito da Insulet

Avvertenza: NON iniziare a utilizzare il sistema o modificare le impostazioni senza aver prima ricevuto formazione e indicazioni appropriate da parte dell'operatore sanitario di riferimento. Un avvio e una regolazione delle impostazioni non corretti possono comportare un'erogazione eccessiva o insufficiente di insulina, con conseguente ipoglicemia o iperglicemia. Le impostazioni che influiscono principalmente sull'erogazione di insulina sono le seguenti: Spegnimento Pod, velocità basali, Velocità basale massima, Bolo massimo, Fattore/i di Correzione, Rapporto Insulina/Carboidrati (IC), Glicemia Minima per il Suggeritore di Bolo, Target Glicemico, Correggi se superiore a e Durata dell'azione dell'insulina.

Nota: toccando la freccia indietro sullo schermo, l'utilizzatore torna alla schermata precedente. Tuttavia, se si tocca il pulsante ANNULLA in uno qualsiasi di questi passaggi di configurazione, si accede alla prima schermata di ogni sezione e si cancellano eventuali voci in quella sezione. Una schermata a comparsa avverte che queste voci potrebbero andare perse.

Accensione e accesso al Controller

Attenzione: connettere il Controller ESCLUSIVAMENTE a reti Wi-Fi attendibili, non pubbliche, come ad esempio quelle presenti negli aeroporti, nei bar, ecc., in quanto non sicure e possono esporre il Controller a malware. NON connettersi a reti Wi-Fi pubbliche durante la configurazione iniziale del Sistema Omnipod 5.

1. Tenere premuto il pulsante di accensione sul lato destro finché non viene visualizzato il logo del produttore del dispositivo.
2. Selezionare la lingua.
3. Il Controller esegue una serie di controlli. Se richiesto, concedere le autorizzazioni necessarie e connettersi al Wi-Fi. Vedere pagina 183 per ulteriori dettagli.

Nota: la scheda SIM sul Controller Omnipod 5 consente l'invio e la ricezione dei dati tramite la rete cellulare quando il Controller

non è connesso a una rete Wi-Fi. Se si interrompe l'utilizzo dell'App Omnipod 5 su una rete cellulare del Controller, Insulet potrebbe disattivare la scheda SIM. Tenere presente che il Controller funziona ancora tramite Wi-Fi. Se si torna a utilizzare l'App Omnipod 5 sul Controller dopo un periodo di tempo prolungato, contattare l'Assistenza clienti per richiedere la riattivazione della scheda SIM per la copertura completa tramite rete cellulare e Wi-Fi. Su richiesta, la scheda SIM viene riattivata.

4. Accedere con il proprio ID Omnipod:
 - a. Immettere il nome utente.
 - b. Immettere la password.
 - c. Toccare ACCEDI.

Consiglio: il nome utente e la password distinguono tra maiuscole e minuscole.

Impostazione della formazione

Dopo aver effettuato l'accesso al Controller, verrà richiesto di pianificare o confermare la formazione per il Sistema Omnipod 5. La formazione è fondamentale per l'uso sicuro ed efficace del Sistema Omnipod 5.

1. Toccare la casella di controllo se si comprende e si riconosce l'importanza del completamento della formazione.
2. Toccare CONTINUA.



NON PROCEDERE

È necessario completare la formazione prima di poter utilizzare questo prodotto.

La formazione include:

- Configurare e sostituire il Pod
 - Creare e modificare il Programma Basale
 - Calcolare il bolo
 - Sospendere l'erogazione di insulina
 - Rispondere agli allarmi e alle notifiche del sistema
 - Configura l'App Omnipod 5
 - Connetti il Sensore all'App Omnipod 5
- configurazione e/o i uso impropri di Omnipod 5 possono causare un'erogazione insufficiente o eccessiva di insulina, che può portare a ipoglicemia o iperglicemia, mettendo a rischio la salute e la sicurezza dell'utente e potrebbe portare alla morte.

- Comprendo e accetto i termini di cui sopra.

CONTINUA

Configurazione del Controller

Avvertenza: è importante identificare SEMPRE l'App Omnipod 5 come propria prima di utilizzarla. L'utilizzo dell'App Omnipod 5 appartenente ad altri può comportare un'erogazione di insulina errata per entrambi.

Personalizzazione del Controller

Seguire i passaggi riportati di seguito per personalizzare il Controller.

1. Immettere un messaggio personalizzato da mostrare su display (almeno due caratteri) e toccare **Fatto**, quindi toccare **CONTINUA**.
Viene visualizzata una schermata con varie immagini di sfondo.
2. Scorrere verso destra o verso sinistra per vedere più immagini. Toccare l'immagine desiderata, quindi toccare **CONTINUA**.

Nota: quando si attiva il Controller, vengono visualizzati il messaggio personalizzato e l'immagine di sfondo. Verificare sempre che si tratti del proprio Controller prima di usarlo.

Impostazione del PIN sul Controller

Per evitare che lo schermo venga toccato o utilizzato in modo non intenzionale, è necessario creare un numero di identificazione personale o PIN di 4 cifre.

Per impostare un PIN:

1. Scegliere 4 numeri per il PIN.
Questo numero PIN verrà utilizzato ogni volta che si attiva il Controller. È consigliabile conservare il PIN in un luogo sicuro.

Consiglio: per mantenere visibile il PIN, toccare l'icona a forma di occhio situata a destra dei campi di immissione del PIN. Per nascondere il numero, toccare di nuovo l'icona a forma di occhio.

2. Toccare un campo per visualizzare il tastierino numerico. Immettere il PIN a 4 cifre. Toccare **Fatto**.
3. Immettere di nuovo gli stessi 4 numeri per confermare il PIN. Toccare **Fatto**.

Se il secondo PIN immesso non corrisponde al primo, è necessario ripetere i passaggi precedenti.



Attivazione di notifiche e suoni sul Controller

1. Leggere il messaggio che spiega l'importanza dell'attivazione delle notifiche dell'App Omnipod 5. Non è possibile accedere o utilizzare l'app se si disattivano le notifiche.

➤ Toccare HO CAPITO.

2. Leggere il messaggio che spiega l'importanza di attivare l'audio sull'App Omnipod 5. Se l'audio non è attivato, si potrebbero perdere messaggi importanti.

➤ Toccare HO CAPITO.

Se si silenzia il dispositivo, l'App Omnipod 5 sarà comunque in grado di emettere segnali acustici per avvisi e allarmi importanti, ad esempio Ipoglicemia urgente. Il Pod non sarà silenziato.

Notifiche

Per utilizzare l'App Omnipod 5, mantenere attivate le notifiche. Le notifiche avvisano l'utente quando un problema richiede la sua attenzione. Non è possibile utilizzare l'app se si disattivano le notifiche.

HO CAPITO

Suoneria

Evitare di impostare il controller o lo smartphone su silenzioso, vibrazione o qualsiasi altra impostazione che impedisca di sentire gli allarmi o le notifiche dall'App Omnipod 5.

Il Pod continuerà a suonare e sarà possibile vedere l'allarme o la notifica nell'App.

HO CAPITO

4.4 Impostazioni basali

Avvertenza: NON iniziare a utilizzare il sistema o modificare le impostazioni senza aver prima ricevuto formazione e indicazioni appropriate da parte dell'operatore sanitario di riferimento. Un avvio e una regolazione delle impostazioni non corretti possono comportare un'erogazione eccessiva o insufficiente di insulina, con conseguente ipoglicemia o iperglicemia. Le impostazioni che influiscono principalmente sull'erogazione di insulina sono le seguenti: Spegnimento Pod, velocità basali, Velocità basale massima, Bolo massimo, Fattore/i di Correzione, Rapporto Insulina/Carboidrati (IC), Glicemia Minima per il Suggestore di Bolo, Target Glicemico, Correggi se superiore a e Durata dell'azione dell'insulina.

Successivamente, si dovranno definire le impostazioni basali che verranno utilizzate per l'erogazione dell'insulina basale in Modalità Manuale.

1. Toccare CONFIGURA PROFILO.
2. Toccare la freccia (>) nella schermata Basale per passare alla schermata successiva.

Impostare la Velocità basale massima

La Velocità basale massima imposta il limite superiore di qualsiasi velocità di insulina basale che è possibile utilizzare in Modalità Manuale.

1. Toccare il campo Velocità basale massima.
2. Far scorrere la rotella fino alla Velocità basale massima desiderata. Quando il numero corretto si trova al centro della rotella di scorrimento, toccare il numero per selezionarlo.

Consiglio: in alternativa, toccare all'esterno della rotella di scorrimento per selezionare il valore al centro della rotella.

3. Toccare AVANTI.

Nota: la Velocità basale massima può essere modificata in un secondo momento in base alle esigenze individuali. Vedere "Velocità basale massima" a pagina 140.

← Configurazione: basale

Imposta Velocità basale massima

Limite superiore per velocità basale in un Programma Basale o una basale temporanea.

È possibile regolare questa velocità in un secondo momento se le esigenze cambiano.

Velocità basale massima
(da 0,05 a 30 U/h)

3 U/h

Creazione di un Programma Basale


Il passaggio successivo è quello di creare un Programma Basale. Per una descrizione delle velocità basali, dei segmenti di basale e dei Programmi Basale, vedere “Programmi Basale” a pagina 101.

- Toccare AVANTI nella schermata di descrizione Crea Programma Basale per continuare.

Denominazione del Programma Basale

Il nome predefinito per il Programma Basale è Basale 1.

1. Per modificare il nome, toccare il campo Nome programma e immettere il nuovo nome, quindi toccare Fatto.
2. Toccare AVANTI.

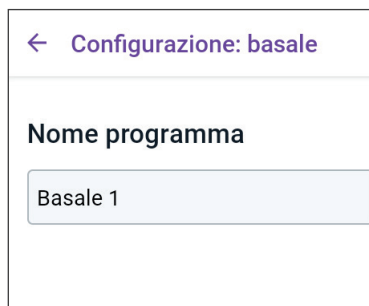

← Configurazione: basale

Nome programma

Basale 1

Definizione dei segmenti

È possibile creare fino a 24 segmenti nel Programma Basale da mezzanotte a mezzanotte. L'Or di inizio per il primo segmento è sempre 00:00 (mezzanotte).

1. Toccare il campo Ora di fine e scorrere per selezionare l'ora di fine desiderata.
2. Toccare il campo Velocità basale e scorrere per selezionare la velocità basale per il segmento.

Nota: la Velocità basale massima immessa in precedenza viene visualizzata sotto il testo Velocità basale. Non è possibile immettere una velocità basale superiore a questo numero.

Nota: le due linee blu verticali nel grafico vicino alla parte superiore dello schermo mostrano l'ora di inizio e di fine del segmento di basale. La velocità basale per il segmento è indicata tra le due linee verticali.



← Configurazione: basale

Basale 1: Segmento 1 Grafico: U/h

00:00 00:00

Inizio **Fine**

00:00 - ---

Notte

Velocità basale
(fino a 3 U/h)

--- U/h

ANNULLA AVANTI

3. Controllare i valori dell'ora di inizio e di fine e la velocità basale. Quindi toccare AVANTI.
4. Se il Programma Basale non copre il periodo da 00:00 (mezzanotte) a 00:00 (mezzanotte), è necessario aggiungere ulteriori segmenti. Ripetere i passaggi da 1 a 3 come necessario finché il segmento finale non termina a mezzanotte.

Revisione del Programma Basale

La schermata successiva riepiloga l'ora di inizio, l'ora di fine e la velocità basale per ciascun segmento del Programma Basale.

1. Toccare CONTINUA per rivedere il Programma Basale.
2. Verificare che il grafico e i singoli valori dei segmenti siano corretti.
La quantità totale giornaliera di insulina basale erogata da questo Programma Basale è indicata sotto il grafico.



3. Per modificare l'ora di fine o la velocità basale per un segmento:
 - a. Toccare la riga contenente il segmento da modificare.
 - b. Toccare il campo Ora di fine e immettere la nuova ora di fine per il segmento.
 - c. Toccare il campo Velocità basale e immettere la velocità basale desiderata.
 - d. Toccare AVANTI.
- e. Quindi definire l'ora di fine e la velocità basale per eventuali segmenti successivi, se necessario.
4. Quando il Programma Basale è corretto, toccare SALVA.
5. Per aggiungere un nuovo segmento:
 - a. Toccare la riga contenente l'ora di inizio del nuovo segmento.
 - b. Toccare il campo Ora di fine e immettere l'ora di inizio del nuovo segmento come ora di fine di questo segmento.
 - c. Modificare la velocità basale, se necessario.
 - d. Toccare AVANTI.

4 Configurazione dell'applicazione Omnipod 5

- e. Quindi definire l'ora di fine e la velocità basale per eventuali segmenti successivi, se necessario.
6. Per eliminare un segmento:
 - a. Controllare l'ora di fine del segmento da eliminare.
 - b. Toccare il segmento che precede il segmento da eliminare.
 - c. Toccare il campo Ora di fine e immettere l'ora di fine del segmento da eliminare. Questa operazione “sovrascrive” il segmento da eliminare.
 - d. Toccare AVANTI.
 - e. Quindi definire l'ora di fine e la velocità basale per eventuali segmenti successivi, se necessario.
7. Quando il Programma Basale è corretto, toccare SALVA.

Nota: se la velocità basale per un segmento è 0 U/h, l'App Omnipod 5 visualizza un messaggio per attirare l'attenzione dell'utilizzatore. Toccare OK se il valore 0 U/h è corretto. Altrimenti, toccare ANNULLA e modificare il segmento con il valore 0 U/h.

Nota: per creare altri Programmi Basale al termine della configurazione, iniziare a pagina 103 e ricominciare a eseguire i passaggi.

Configurazione Basali Temporanee

Per una descrizione delle Velocità Basali Temporanee, chiamate anche Basali Temporanee, vedere pagina 110.

Nota: Basale Temporanea è disponibile solo in Modalità Manuale.

1. Per poter utilizzare le Basali Temporanee, toccare l'interruttore e portarlo in posizione attiva. L'interruttore è in posizione attiva quando è a destra e di colore viola.

Se si attivano le Basali Temporanee, vengono utilizzate le percentuali per impostazione predefinita. Per indicare la Basale Temporanea come una velocità fissa (U/h), vedere “Basale Temporanea” a pagina 140.

2. Toccare AVANTI.



4.5 Impostazioni dei boli

Quindi, occorre definire le impostazioni del bolo che verranno utilizzate per calcolare un bolo nel Suggestore SmartBolus. È possibile modificare le impostazioni del bolo in un secondo momento, se le esigenze cambiano (vedere “17.11 Impostazioni dei boli” a pagina 245 per ulteriori informazioni).

1. Toccare la freccia (>) nella schermata Bolo per passare alla schermata di descrizione Target Glicemico e Correggi se superiore a.
2. Toccare AVANTI per passare alla schermata del segmento.

Valori Target Glicemico e Correggi se superiore a

I valori Target Glicemico e Correggi se superiore a vengono utilizzati in entrambe le Modalità Automatizzata e Manuale.

- In Modalità Automatizzata, l'erogazione di insulina viene regolata automaticamente per allineare il valore del glucosio al Target Glicemico.
- Sia in Modalità Automatizzata sia in Modalità Manuale, il Suggestore SmartBolus è inteso ad allineare il valore del glucosio al Target Glicemico. Il Suggestore SmartBolus eroga un bolo di correzione se il valore di glucosio attuale è superiore al valore Correggi se superiore a.

Definizione dei segmenti

È possibile impostare fino a otto Target Glicemici diversi per diversi momenti della giornata. Per impostare i valori di Target Glicemico e Correggi se superiore a per ciascun segmento:

1. Toccare il campo Ora di fine e specificare l'ora di fine per il segmento.
2. Toccare il campo Target Glicemico e specificare il Target Glicemico per quel segmento.
3. Toccare il campo Correggi se superiore a e specificare il valore Correggi se superiore a per quel segmento.
4. Rivedere e toccare AVANTI.

← Configurazione: bolo

Segmento 1

Inizio	-	Fine
00:00		09:00
Notte		Mattina

Target Glicemico
(da 110 a 150 mg/dL)

110
mg/dL

Correggi se superiore a
(Target Glicemico a 200 mg/dL)

120
mg/dL

ANNULLA
AVANTI

4 Configurazione dell'applicazione Omnipod 5

- Ripetere i passaggi precedenti, se necessario, finché non vengono specificati i valori per il segmento che termina a mezzanotte.
- Rivedere i segmenti per il profilo completo di 24 ore.
- Per modificare le voci:
 - Toccare la riga contenente il valore da modificare e immettere il valore corretto.
 - Controllare e correggere come necessario eventuali segmenti rimanenti.
- Quando i segmenti e i valori sono corretti, toccare SALVA.

← Configurazione: bolo

Rivedere i valori di Target Glicemico e Correggi se superiore a immessi per ciascun segmento temporale.

Segmenti temporali	Totale: 3
Segmento 1: 00:00 – 09:00 Target Glicemico: 110 mg/dL Correggi se superiore a: 120 mg/dL	
Segmento 2: 09:00 – 12:00 Target Glicemico: 120 mg/dL Correggi se superiore a: 120 mg/dL	
Segmento 3: 12:00 – 00:00	

ANNULLA SALVA

Rapporto Insulina/Carboidrati (IC)

Il Rapporto Insulina/Carboidrati (IC) definisce la quantità di carboidrati coperti da un'unità di insulina.

Il Suggeritore SmartBolus utilizza il Rapporto Insulina/Carboidrati (IC) per calcolare la porzione pasto di un bolo consigliato. È possibile creare fino a otto segmenti temporali al giorno per il Rapporto Insulina/Carboidrati (IC).

- Toccare AVANTI nella schermata di descrizione Imposta Rapporti Insulina/Carboidrati (IC) per passare alla schermata del segmento Rapporto Insulina/Carboidrati (IC).

Definizione dei segmenti

- Toccare il campo Ora di fine e specificare l'ora di fine per il segmento.
- Toccare il campo 1 Unità di insulina copre e specificare il valore del Rapporto Insulina/Carboidrati (IC) per il segmento.

← Configurazione: bolo

Segmento 1

Inizio	Fine
00:00	- <input type="text"/>

Notte

1 Unità di insulina copre
(da 1 a 150 g di carboidrati)

g

3. Toccare FATTO per chiudere il tastierino numerico.
4. Rivedere e toccare AVANTI.
5. Ripetere i passaggi precedenti, se necessario, finché non vengono specificati i valori per il segmento che termina a mezzanotte.
6. Esaminare i segmenti del Rapporto Insulina/Carboidrati (IC) a 24 ore.
7. Per modificare le voci:
 - a. Toccare la riga contenente il valore da modificare e immettere il valore corretto.
 - b. Controllare e correggere come necessario eventuali segmenti rimanenti.
8. Quando i segmenti e i valori sono corretti, toccare SALVA.

← Configurazione: bolo

Rivedere i valori di Rapporto insulina/ carboidrati (IC) immessi per ciascun segmento temporale.

Segmenti temporali	Totale: 4
Segmento 1: 00:00 – 06:00 1 U di insulina copre: 10 g di carboidrati	✎
Segmento 2: 06:00 – 11:00 1 U di insulina copre: 8 g di carboidrati	✎
Segmento 3: 11:00 – 17:00 1 U di insulina copre: 9 g di carboidrati	✎
Segmento 4: 17:00 – 00:00	
ANNULLA	SALVA

Fattore di Correzione

Il Fattore di Correzione definisce di quanto viene abbassato il valore del glucosio da un'unità di insulina. Se, ad es., il Fattore di Correzione è 2,8 (50), un'unità di insulina abbasserà il valore del glucosio di 2,8 mmol/L (50 mg/dL).

Il Suggestore SmartBolus utilizza il Fattore di Correzione per calcolare la porzione di correzione di un bolo consigliato. È possibile creare fino a otto segmenti temporali al giorno per il Fattore di Correzione.

- Toccare AVANTI nella schermata di descrizione Imposta Fattori di Correzione per passare alla schermata del segmento.

Definizione dei segmenti

1. Toccare il campo Ora di fine e specificare l'ora di fine per il segmento.
2. Toccare il campo 1 Unità di insulina abbassa il glucosio di e specificare il Fattore di Correzione per questo segmento.

← Configurazione: bolo

Segmento 1


Inizio	-	Fine
00:00		<input style="width: 100%;" type="text" value="---"/>
Notte		
1 Unità di insulina abbassa il glucosio di (da 1 a 400 mg/dL)		
<input style="width: 100%;" type="text" value="---"/>		mg/dL

4 Configurazione dell'applicazione Omnipod 5

3. Rivedere e toccare AVANTI.
4. Ripetere i passaggi precedenti, se necessario, finché non vengono specificati i valori per il segmento che termina a mezzanotte.
5. Rivedere i segmenti per il profilo completo di 24 ore.
6. Per modificare le voci:
 - a. Toccare la riga contenente il valore da modificare e immettere il valore corretto.
 - b. Controllare e correggere come necessario eventuali segmenti rimanenti.
7. Quando i segmenti e i valori sono corretti, toccare SALVA.

← Configurazione: bolo

Rivedere i valori di Fattore di correzione immessi per ciascun segmento temporale.

Segmenti temporali	Totale: 1
Segmento 1: 00:00 – 00:00	
1 U di insulina abbassa il glucosio di: 	
50 mg/dL	

ANNULLA SALVA

Durata dell'azione dell'insulina

La Durata dell'azione dell'insulina indica il periodo di tempo durante il quale l'insulina rimane attiva all'interno dell'organismo. Il Suggeritore SmartBolus utilizza questa impostazione per determinare la quantità di insulina che rimane nel corpo dai boli precedenti (chiamata anche Insulina Attiva o IOB).

1. Toccare il campo Durata dell'azione dell'insulina e scorrere per selezionare la Durata dell'azione dell'insulina.
2. Toccare AVANTI.

← Configurazione: bolo

Imposta Durata dell'azione dell'insulina

Il periodo di tempo in cui l'insulina rimane attiva e disponibile nell'organismo dopo un bolo di correzione o un bolo pasto.

Durata dell'azione dell'insulina

(da 2 a 6 ore)

ore

ANNULLA AVANTI

Bolo massimo

L'App Omnipod 5 non consente di richiedere un bolo al di sopra dell'impostazione "Bolo massimo". Se il Suggestore SmartBolus calcola un bolo superiore a questa quantità, viene visualizzato un messaggio.

1. Toccare il campo **Bolo massimo** e immettere il nuovo valore del bolo massimo. Toccare **FATTO** per chiudere il tastierino numerico.
2. Toccare **AVANTI**.

← Configurazione: bolo

Imposta Bolo massimo

La quantità massima di insulina che si può richiedere in un singolo bolo.

Bolo massimo
(da 0,05 a 30 U)

-- U

Bolo prolungato

Il prolungamento di un bolo consente di erogare una parte della dose di bolo all'inizio del pasto insieme alla parte restante della dose di bolo somministrata in un determinato intervallo di tempo.

Nota: il Bolo prolungato è disponibile solo in Modalità Manuale.

1. Utilizzare il pulsante **Bolo prolungato** per attivare (ON) o disattivare (OFF) la funzione di Bolo prolungato.
2. Toccare **AVANTI**.

← Configurazione: bolo

Consentire Bolo prolungato?

Prolungare un bolo significa che un bolo pasto può essere erogato per un periodo di tempo più lungo.

Bolo prolungato

Attivo

4.6 La configurazione dell'App è completata

Congratulazioni! La configurazione dell'App Omnipod 5 è completata.

Quando si è pronti per attivare il primo Pod, andare a "5.1 Avvio del processo di attivazione del Pod" a pagina 82.

4 Configurazione dell'applicazione Omnipod 5

Dopo aver attivato correttamente il Pod, verrà richiesto di connettere il Sensore al Sistema Omnipod 5. Vedere e i capitoli 19 e 20 per indicazioni sulla connessione del Sensore al sistema.

4.7 Salvataggio delle impostazioni come riferimento

Attenzione: NON reimpostare l'App Omnipod 5 prima di aver consultato l'operatore sanitario di riferimento. Questa operazione cancellerà tutte le impostazioni, la Velocità Basale Adattiva e la cronologia e richiederà la modifica del Pod attivo. Prima di procedere, verificare di disporre di una registrazione aggiornata delle impostazioni e di un nuovo Pod con i materiali di consumo da utilizzare al riavvio dell'app.

Prima di iniziare a utilizzare l'App Omnipod 5, annotare o scattare foto di tutte le impostazioni e conservarle in un luogo sicuro a cui poter accedere in futuro. Questo elenco è utile se si deve ripetere la procedura di configurazione e reimmettere le impostazioni della terapia insulinica.

Se si esegue una delle azioni elencate di seguito, si perderanno tutte le impostazioni della terapia insulinica e la cronologia dell'insulina:

- Richiedere un nuovo Controller.
- Reimpostare il Controller.

Consiglio: utilizzare le apposite pagine alla fine di questo *Manuale d'uso tecnico* per prendere nota di tutte le impostazioni. Questo elenco è utile se si deve sostituire il Controller o reimpostare l'App Omnipod 5.

CAPITOLO 5

Attivazione e sostituzione del Pod

Sommario

5.1	Avvio del processo di attivazione del Pod	82
5.2	Configurazione di un nuovo Pod	85
5.3	Riempimento della siringa con insulina	85
5.4	Riempimento, attivazione, applicazione e avvio del Pod	86
	Riempimento del Pod con l'insulina	87
	Attivazione del Pod	88
	Preparazione del sito del Pod	89
	Linee guida per la selezione del sito del Pod	89
	Esempi di siti del Pod	90
	Mappa del sito del Pod (opzionale)	90
	Preparazione del sito di infusione	92
	Rimozione della linguetta del Pod	92
	Applicazione del Pod	93
	Avvio dell'erogazione di insulina	94
	Verificare che il Pod sia fissato saldamente	94
5.5	Controllo del sito di infusione	95
5.6	Passaggio alla Modalità Automatizzata	96
5.7	Disattivazione di un Pod attivo	96
5.8	Ulteriori informazioni sull'utilizzo del Pod	98
	Come evitare infezioni nel sito di infusione	98
	Informazioni aggiuntive	99

5.1 Avvio del processo di attivazione del Pod

Avvertenza: in caso di sensibilità o allergie agli adesivi acrilici o se la cute è fragile o facilmente danneggiabile, NON indossare il Pod. L'applicazione di un Pod in queste circostanze può mettere a rischio la salute dell'utilizzatore.

Avvertenza: essere SEMPRE pronti all'iniezione di insulina con un metodo alternativo nell'eventualità in cui l'erogazione di insulina dal Pod si interrompa. Il rischio di sviluppare iperglicemia aumenta se l'erogazione di insulina viene interrotta, in quanto il Pod utilizza solo insulina U-100 ad azione rapida. La mancata adozione di un metodo alternativo di erogazione dell'insulina può determinare livelli glicemici molto elevati o chetoacidosi diabetica (DKA). Gestire l'interruzione dell'erogazione di insulina chiedendo istruzioni in merito all'operatore sanitario di riferimento.

Avvertenza: NON consentire ai bambini di accedere a parti di piccole dimensioni, come il Pod e i relativi accessori, compresa la linguetta, in quanto possono essere ingerite e rappresentare un pericolo di soffocamento, con conseguenti lesioni interne o infezioni.

Avvertenza: non utilizzare MAI insulina scaduta o torbida nel Pod in quanto può danneggiarlo. L'impiego di insulina non ottimale o scaduta può causare iperglicemia e mettere a rischio la salute del paziente.

Attenzione: per preparare il sito, procedere SEMPRE come segue. Se il sito non è adeguatamente pulito o se le mani dell'utilizzatore sono sporche, il rischio di infezione è maggiore.

- Lavarsi le mani.
- Pulire la parte superiore della fiala di insulina con un tampone disinfettante imbevuto di alcool.
- Pulire il sito di infusione con acqua e sapone o con un tampone disinfettante imbevuto di alcool; lasciarlo asciugare completamente.
- Conservare i materiali sterili lontano da ogni possibile fonte di contaminazione.

Attenzione: NON utilizzare un Pod se la confezione sterile è aperta o danneggiata, se il Pod è caduto dopo essere stato estratto dalla confezione o se è scaduto, in quanto potrebbe non funzionare correttamente e aumentare di conseguenza il rischio di infezione.

Attenzione: qualora si sospettino danni in seguito a un evento imprevisto, come ad esempio una caduta o un impatto su una superficie dura, NON utilizzare alcun componente del Sistema Omnipod 5 (Controller, Pod). L'uso di componenti danneggiati può mettere a rischio la salute dell'utilizzatore, in quanto il sistema potrebbe non funzionare correttamente. Se non si ha la certezza che uno o più componenti siano danneggiati, interrompere l'utilizzo del sistema e contattare l'Assistenza clienti.

Attenzione: ruotare SEMPRE i siti di infusione di insulina per prevenire complicanze nel sito di infusione quali ad esempio tessuto cicatriziale e infezioni. La rotazione dei siti di infusione dell'insulina riduce il rischio di cicatrici. La presenza di tessuto cicatriziale in un sito può portare a problemi di assorbimento dell'insulina.

Dopo la configurazione iniziale dell'App Omnipod 5, si attiverà il primo Pod. Sostituire il Pod almeno una volta ogni 48–72 ore (2–3 giorni) o fino all'esaurimento dell'insulina nel Pod. Rivolgersi al proprio operatore sanitario di riferimento e attenersi all'etichetta sul flacone dell'insulina in merito alla frequenza di sostituzione del Pod.


Prima di attivare un Pod, procedere come indicato di seguito:

1. Procurarsi quanto segue:
 - una fiala di insulina U-100 ad azione rapida approvata per l'uso nel Sistema Omnipod 5. Vedere "1.4 Insuline compatibili" a pagina 8 per un elenco dei tipi di insulina approvati che possono essere utilizzati con il Sistema Omnipod 5.
 - un Pod Omnipod 5 sigillato
 - tamponi disinfettanti imbevuti di alcol
 - Controller con l'App Omnipod 5

5 Attivazione e sostituzione del Pod

2. Lavarsi le mani prima di iniziare e assicurarsi che rimangano pulite durante tutto il processo di sostituzione del Pod.
3. Verificare che l'insulina non presenti segni di deterioramento secondo le istruzioni per l'uso del produttore.
4. Verificare che la confezione del Pod non sia danneggiata. Se non è danneggiata, aprirla e ispezionare il Pod per verificare che non presenti danni di alcun tipo.
5. Se la temperatura dell'insulina o del Pod è inferiore a 10°C (50°F), attendere che torni a temperatura ambiente prima di procedere.

Prima di iniziare l'attivazione del Pod, verificare di utilizzare un Pod Omnipod 5. Cercare il logo Omnipod 5 sul coperchio dell'alloggiamento del Pod e la dicitura "Omnipod® 5" sul Pod. Verificare la compatibilità del coperchio dell'alloggiamento del Pod e della scatola del Pod con il sensore che verrà utilizzato con Omnipod 5.

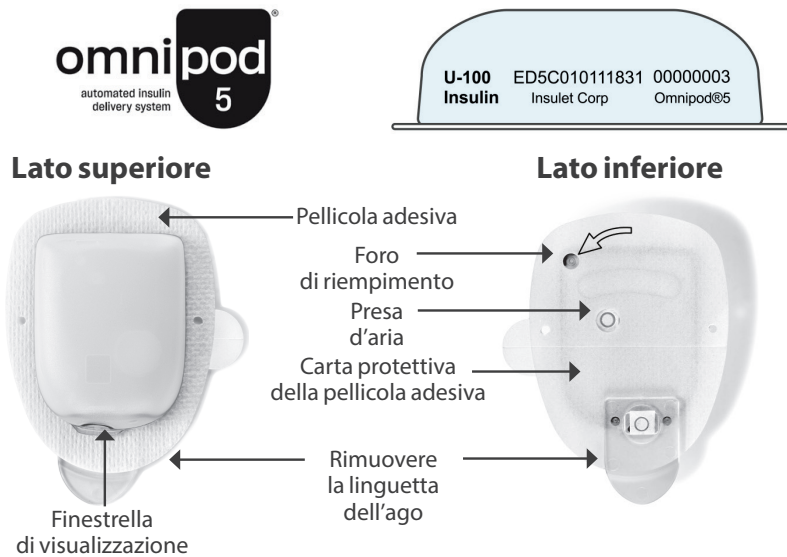

5.2 Configurazione di un nuovo Pod

1. Accedere a: pulsante Menu (☰) > Pod oppure Home > INFO POD.
2. Toccare CONFIGURA NUOVO POD.




5.3 Riempimento della siringa con insulina

Avvertenza: durante il riempimento del Pod con insulina, fare in modo di non iniettare MAI bolle di grandi dimensioni o creare sacche d'aria. L'aria all'interno del sistema occupa spazio destinato invece all'insulina e questo può comprometterne l'erogazione, con il rischio di un'erogazione eccessiva o insufficiente di insulina e conseguente ipoglicemia o iperglicemia.

Il passaggio successivo consiste nel riempire con insulina la siringa fornita con il Pod o "siringa di riempimento":


1. Pulire la sommità della fiala di insulina con un tampone disinfettante imbevuto di alcol.
2. Avvitare saldamente l'ago sulla siringa di riempimento.
3. Tirare verso l'esterno il cappuccio protettivo per rimuoverlo dall'ago.
4. Calcolare la quantità di insulina da inserire nel Pod. Se, ad esempio, si dovrà utilizzare il Pod per 72 ore, caricare una quantità di insulina necessaria a coprire le 72 ore. Chiedere consiglio al proprio operatore sanitario di riferimento per determinare la quantità corretta di insulina.

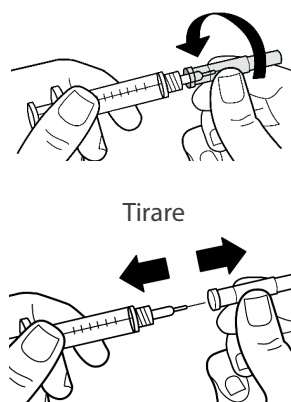

Nota: per poter iniziare a funzionare, il Pod necessita di almeno 85 unità di insulina U-100. Il Pod può erogare fino a 200 unità di insulina U-100.

5 Attivazione e sostituzione del Pod

- Aspirare nella siringa di riempimento un volume di aria pari alla quantità di insulina da usare.
- Inserire l'ago nella fiala di insulina e iniettare l'aria. Così facendo si facilita il prelievo dell'insulina dalla fiala.
- Capovolgere la fiala di insulina U-100 e la siringa. Tirare verso il basso lo stantuffo della siringa per prelevare la quantità di insulina desiderata dalla fiala.
 - Riempire la siringa almeno fino al livello minimo (MIN).
 - Per riempire il Pod con una quantità di insulina sufficiente a erogare 200 unità, tirare lo stantuffo verso il basso finché non si ferma, ovvero in corrispondenza del segno 200.
- Con l'ago sempre inserito nella fiala, dare dei leggeri colpetti con la punta del dito lungo le pareti della siringa per far risalire eventuali bolle d'aria fino alla sommità della siringa. Quindi, spingere lo stantuffo della siringa per trasferire l'aria dalla siringa alla fiala di insulina. Se necessario, tirare nuovamente verso il basso lo stantuffo per riempire nuovamente la siringa con la quantità di insulina desiderata.
- Estrarre l'ago dalla fiala.

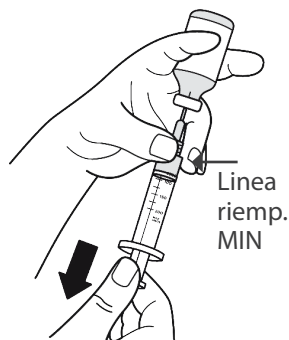

5.4 Riempimento, attivazione, applicazione e avvio del Pod

Avvertenza: non utilizzare MAI un Pod se, mentre lo si riempie, si avverte una resistenza significativa alla pressione dello stantuffo della siringa di riempimento. Non tentare di forzare l'insulina nel Pod. Una resistenza significativa può indicare un difetto meccanico del Pod. L'utilizzo di un Pod difettoso può comportare un'erogazione insufficiente di insulina con conseguente iperglicemia.

Avvertenza: durante il riempimento del Pod con insulina, fare in modo di non iniettare MAI bolle di grandi dimensioni o creare sacche d'aria. L'aria all'interno del sistema occupa spazio destinato invece all'insulina e questo può comprometterne l'erogazione, con il rischio di un'erogazione eccessiva o insufficiente di insulina e conseguente ipoglicemia o iperglicemia.

Attenzione: inserire SEMPRE la siringa di riempimento nell'apposito foro di riempimento sul Pod e non altrove. Non inserire la siringa più di una volta nel foro di riempimento. Utilizzare esclusivamente la siringa e l'ago di riempimento in dotazione con il Pod. La siringa di riempimento è esclusivamente monouso e deve essere utilizzata solo con il Sistema Omnipod 5. La mancata osservanza delle istruzioni riportate sopra può danneggiare il Pod.

Riempimento del Pod con l'insulina

Per riempire il Pod con l'insulina (passaggio ① sullo schermo):


1. Sul lato inferiore del Pod individuare la freccia. La freccia indica il foro di riempimento dell'insulina.
Consiglio: lasciare il Pod nel suo alloggiamento durante la procedura di riempimento e di attivazione.
2. Inserire la siringa nel foro di riempimento senza inclinarla.
3. Premere lo stantuffo della siringa in modo da trasferire l'insulina nel Pod.

Il Pod emette due segnali acustici durante il processo di riempimento (passaggio ② nella schermata):

4. Assicurarsi di svuotare completamente il contenuto della siringa (anche se tale operazione dovesse prolungarsi dopo l'emissione dei due segnali acustici).

Nota: per poter funzionare, il Pod necessita di almeno 85 unità di insulina. Il Pod emette i due segnali acustici solo se è stato riempito con almeno 85 unità di insulina. Se il Pod è stato riempito con più di 85 unità di insulina e non si sentono i due segnali acustici, contattare l'Assistenza clienti.

Nota: una volta riempito il Pod, procedere immediatamente al passaggio successivo. Se passano due ore prima dell'attivazione del Pod riempito, questo diventa inutilizzabile.

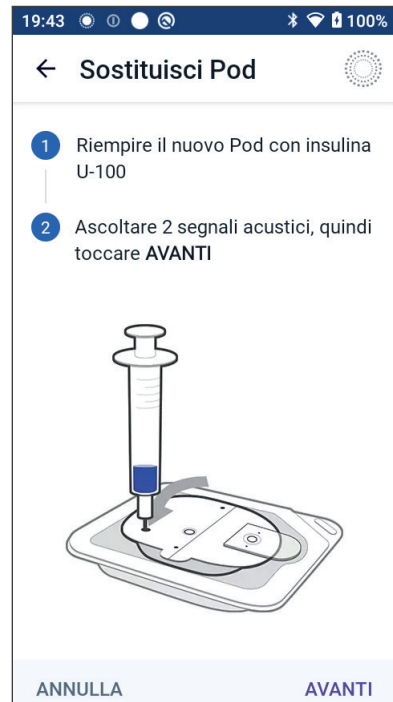

5 Attivazione e sostituzione del Pod


5. Rimuovere l'ago dal foro di riempimento dell'insulina. Il foro è autosigillante, pertanto l'insulina non fuoriesce una volta estratto l'ago.
6. Smaltire l'ago di riempimento in un contenitore per oggetti taglienti.

Attivazione del Pod

Per attivare il Pod:

1. Avvicinare il Controller al Pod in modo che si tocchino. Il Pod deve essere lasciato nel proprio alloggiamento durante questa operazione.

Nota: assicurarsi SEMPRE che non vengano attivati altri Pod entro 6 metri (20 piedi) dall'App Omnipod 5 prima di riempire un Pod. Se l'App rileva più di un Pod, non sarà possibile procedere.

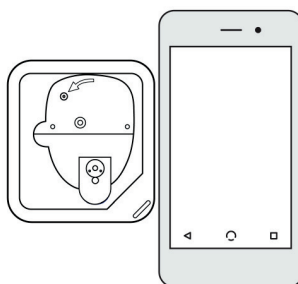

2. Toccare AVANTI.

- Se più di un Pod Omnipod 5 non abbinato e riempito si trova nel raggio d'azione, l'App Omnipod 5 informa l'utilizzatore e impedisce di completare l'attivazione. Allontanarsi di almeno 6 metri (20 piedi) da qualsiasi altro Pod Omnipod 5 riempito e toccare RIPROVA.
- Solo i Pod Omnipod 5 sono compatibili con il Sistema Omnipod 5. Se si tenta di utilizzare un Pod meno recente che non è in grado di comunicare con il sistema, l'App Omnipod 5 informa l'utilizzatore e impedisce di completare l'attivazione. Toccare SCARTA POD e ricominciare l'attivazione del Pod con un Pod Omnipod 5.
- Se l'App Omnipod 5 è in grado di comunicare con il Pod ma rileva un Pod incompatibile, l'App Omnipod 5 informa l'utilizzatore e impedisce di completare l'attivazione. Toccare SCARTA POD e ricominciare l'attivazione del Pod con un Pod Omnipod 5.

Trovato più di un Pod

Allontanarsi da altri Pod e riprovare.

[ANNULLA](#) [RIPROVA](#)

Errore di comunicazione con il Pod

Se il problema persiste, scartare questo Pod e configurarne uno nuovo.

[RIPROVA](#) [SCARTA POD](#)

Pod non compatibile

Il Pod non è compatibile.

Scartare questo Pod.

[SCARTA POD](#)

3. Attendere l'emissione del tono dell'App Omnipod 5 che indica che il Pod è attivato e pronto per essere applicato.

Nota: dopo l'attivazione di un Pod, l'App Omnipod 5 deve essere sempre in grado di comunicare con un Pod distante fino a 1,5 metri (5 piedi). A seconda della posizione, l'App Omnipod 5 può essere in grado di comunicare con un Pod distante fino a 15 metri (50 piedi).

Nota: dopo l'attivazione, il Pod emette un segnale acustico ogni 5 minuti fino a quando non viene applicato. Se non viene applicato e non inizia l'erogazione di insulina entro 60 minuti dall'attivazione, il Pod diventa inutilizzabile.

Se viene visualizzato un messaggio di errore di comunicazione quando si tenta di attivare il Pod, e non è in uso un Pod precedente, vedere "Errore durante l'attivazione di un Pod" a pagina 401.

Preparazione del sito del Pod

Attenzione: ruotare SEMPRE i siti di infusione di insulina per prevenire complicanze nel sito di infusione quali ad esempio tessuto cicatriziale e infezioni. La rotazione dei siti di infusione dell'insulina riduce il rischio di cicatrici. La presenza di tessuto cicatriziale in un sito può portare a problemi di assorbimento dell'insulina.

Selezionare il sito di infusione del Pod (passaggio **3** sullo schermo):

Linee guida per la selezione del sito del Pod

La scelta del sito dove posizionare il Pod deve essere fatta dopo aver consultato il proprio operatore sanitario di riferimento e attenendosi alle seguenti linee guida:

- Posizionare ad almeno 8 cm (3 pollici) di distanza dal punto di applicazione del Sensore, come indicato nelle *Istruzioni per l'uso del sistema CGM Dexcom G6*.
- Posizionare ad almeno 2,5 cm (1 pollice) di distanza dal Sensore FreeStyle Libre 2 Plus, come indicato nel *Manuale d'uso di FreeStyle Libre 2 Plus*.
- Per una connettività ottimale, posizionare entro la linea di vista del Sensore.


Nota: per linea di vista si intende che il Pod e il sensore vengono indossati sullo stesso lato del corpo in modo che i due dispositivi possano "vedersi" l'un l'altro senza che il corpo ne ostacoli la comunicazione.

- I siti ideali presentano uno strato di tessuto adiposo.
- I siti ideali garantiscono facilità di accesso e di visualizzazione.

5 Attivazione e sostituzione del Pod

- Il sito di applicazione deve trovarsi ad almeno 2,5 cm (1 pollice) dal sito precedente per evitare irritazioni alla pelle.
- Il sito deve trovarsi ad almeno 5 cm (2 pollici) di distanza dall'ombelico.
- Evitare i punti in cui cinture, fasce per la vita o indumenti stretti possono sfregare contro il Pod o spostarlo.
- Non applicare il Pod in punti interessati da pieghe cutanee.
- Non applicare il Pod su nei, tatuaggi o cicatrici, dove l'assorbimento di insulina può essere ridotto.
- Evitare le aree della pelle che presentano un'infezione.



Esempi di siti del Pod

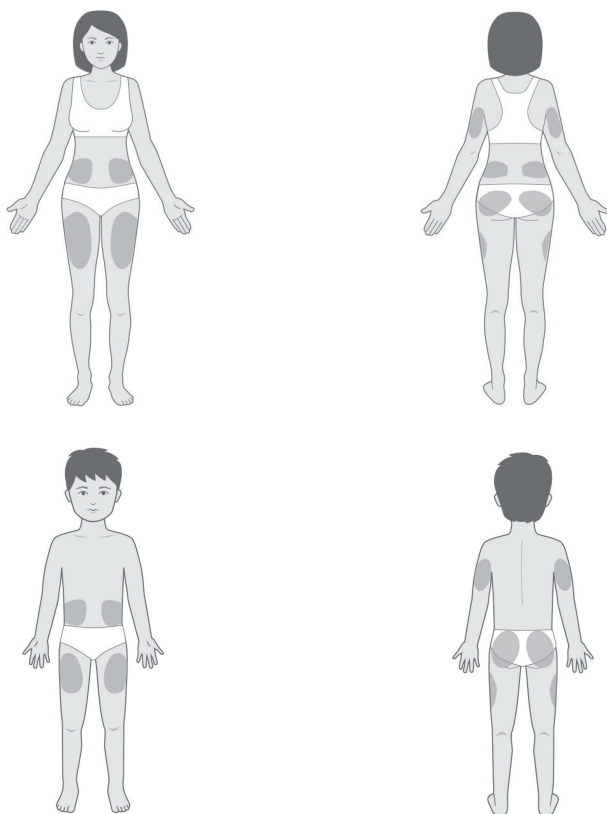

Mapa del sito del Pod (opzionale)

La mapa del sito del Pod è una funzione opzionale che aiuta a tenere traccia della posizione corrente e di quelle recenti del sito del Pod.

1. Toccare REGISTRA SITO POD per visualizzare la schermata Registra sito Pod.
2. Toccare la scheda PARTE ANTERIORE o PARTE POSTERIORE per selezionare un'area del corpo per il Pod. Per aiutare l'utilizzatore a evitare i siti del Pod recenti, il display mostra le due date più recenti in cui ogni sito è stato selezionato.
3. Toccare un cerchio per indicare la posizione del nuovo Pod sul corpo. Viene visualizzato un punto blu all'interno del cerchio. Toccare di nuovo per deselegionare la posizione.

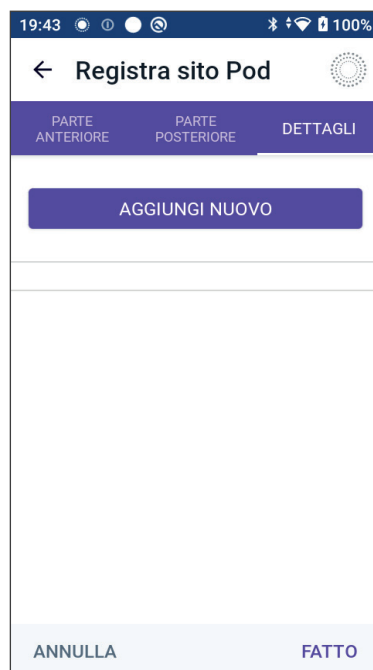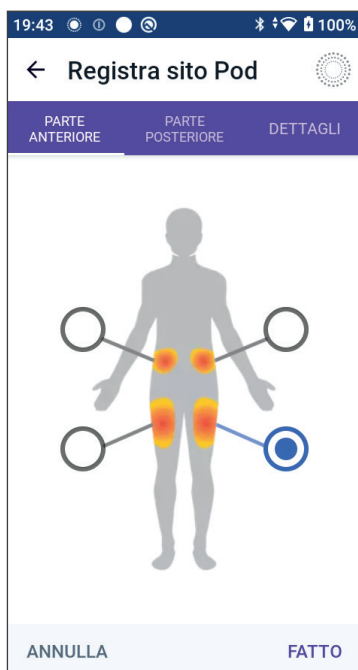

4. Toccare la scheda DETTAGLI per aggiungere un dettaglio sulla posizione di questo Pod. Ad esempio, è possibile aggiungere un dettaglio indicante “Rivolto verso l’alto” o “Rivolto verso il basso” per descrivere l’orientamento del Pod.
 - a. Per aggiungere un nuovo dettaglio, toccare AGGIUNGI NUOVO e aggiungere il nuovo dettaglio. Al termine, toccare AGGIUNGI. Il nuovo dettaglio viene aggiunto all’elenco.
 - b. Selezionare un dettaglio per il nuovo Pod toccando il cerchio accanto a quel dettaglio. È possibile aggiungere un solo dettaglio per ciascun Pod. Toccare di nuovo per deselegionare il dettaglio.

Nota: per eliminare un dettaglio del sito, toccare  accanto al dettaglio.

5 Attivazione e sostituzione del Pod

5. Al termine, toccare **FATTO** per tornare alla schermata Sostituisci Pod.

Preparazione del sito di infusione

Per ridurre il rischio di infezioni al sito di infusione:

1. Lavarsi le mani con acqua e sapone.
2. Lavare il sito di infusione selezionato con acqua e sapone.

Nota: il sapone antibatterico potrebbe irritare la pelle, specialmente in corrispondenza del sito di infusione. Rivolgersi all'operatore sanitario di riferimento per consigli sul trattamento delle irritazioni della pelle.

3. Asciugare il sito di infusione con una salvietta pulita.
4. Disinfettare il sito di infusione con un tampone disinfettante imbevuto di alcol. Partendo dal centro del sito, strofinare delicatamente verso l'esterno con un movimento circolare.
5. Lasciare asciugare completamente il sito di infusione all'aria. Non soffiare sul sito per asciugarlo.


Rimozione della linguetta del Pod

Avvertenza: NON applicare il Pod se, dopo averne rimosso la linguetta, la cannula si estende oltre la pellicola adesiva. In questo caso non è possibile inserire la cannula, con conseguente erogazione insufficiente di insulina e iperglicemia.

Rimuovere la linguetta del Pod (passaggio 4 nella schermata):

1. Ribaltare il Pod in modo che la linguetta sia rivolta verso l'alto e verso l'utilizzatore.
2. Appoggiare il pollice sulla parte inferiore (bordo piatto) della linguetta e tirare verso l'alto. La linguetta si staccherà. Gettare via la linguetta.

Quando si rimuove la linguetta, si può notare una goccia di insulina all'estremità della cannula o nel pozzetto.

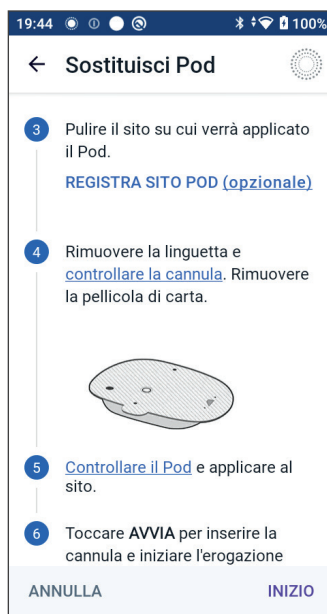


3. In presenza di una qualsiasi delle seguenti condizioni, toccare **ANNULLA** e ricominciare da capo con un nuovo Pod:
 - Il Pod è caduto accidentalmente, poiché ciò potrebbe comportare una compromissione della sterilità.
 - Il Pod o il suo cerotto adesivo è bagnato, sporco o danneggiato.
 - La cannula sporge oltre la pellicola adesiva quando viene rimossa la linguetta.
4. Rimuovere la carta bianca che ricopre il cerotto adesivo tirandola per le linguette. Fare attenzione a non rimuovere il cerotto adesivo. Non lasciare che l'adesivo si ripieghi su se stesso.

Applicazione del Pod

Controllare e applicare il Pod (passaggio 5 sullo schermo):

1. Esaminare il Pod. Toccare **ANNULLA** e scartare il Pod se il cerotto adesivo è piegato, strappato o danneggiato e iniziare da capo con un nuovo Pod.

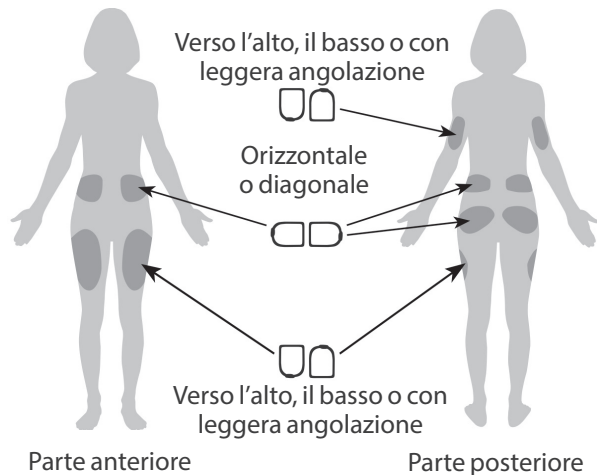

2. Quando si applica il Pod, orientarlo come segue:
 - orizzontalmente o con una leggera angolazione sull'addome, sul fianco, sulla zona lombare o sulle natiche.
 - rivolto verso l'alto o verso il basso o con una leggera angolazione sulla parte superiore del braccio o sulla coscia.
 - Per una connettività ottimale, il Pod deve essere posizionato entro la linea di vista del Sensore. La connessione Bluetooth tra il Sensore e il Pod non passa bene attraverso il corpo. Mantenere entrambi i dispositivi entro la linea di vista consente una comunicazione costante tra Sensore e Pod.

Nota: per linea di vista si intende che il Pod e il sensore vengono indossati sullo stesso lato del corpo in modo che i due dispositivi possano “vedersi” l'un l'altro senza che il corpo ne ostacoli la comunicazione.

5 Attivazione e sostituzione del Pod


3. Applicare il Pod sul sito di infusione selezionato premendo con decisione per farlo aderire alla pelle.

L'adesivo è progettato per essere usato una sola volta. Una volta applicato sul corpo, non rimuovere e riapplicare il Pod su un sito di infusione diverso.

Nota: l'adesivo mantiene il Pod saldamente in posizione per un massimo di 3 giorni. Tuttavia, in caso di bisogno, sono disponibili diversi prodotti per facilitare la rimozione dell'adesivo. Per informazioni sui prodotti in questione, chiedere all'operatore sanitario di riferimento. Evitare di usare lozioni, creme, oli o spray vicino al sito di infusione, in quanto tali prodotti potrebbero causare il distacco dell'adesivo.

Avvio dell'erogazione di insulina

Attenzione: applicare SEMPRE il Pod come indicato. Se si applica il Pod in un sito con scarso tessuto adiposo, afferrare la pelle attorno al Pod fino all'inserimento della cannula. Se non si utilizza questa tecnica in tali siti, possono verificarsi ostruzioni (occlusioni).

Avviare l'erogazione di insulina (passaggio  nella schermata):

1. Se il Pod è stato applicato su un'area magra, pizzicare la pelle attorno al Pod.
2. Toccare **AVVIA** per inserire la cannula.

Verificare che il Pod sia fissato saldamente

1. Verificare che il Pod sia stato applicato saldamente sul corpo, quindi toccare **SÌ**.
2. Se si sta pizzicando la pelle, rilasciarla quando l'App Omnipod 5 chiede se la cannula è stata inserita correttamente.

5.5 Controllo del sito di infusione

Avvertenza: controllare SEMPRE con frequenza il sito di infusione per confermare che la cannula sia correttamente inserita e fissata al Pod. Verificare che il sito non sia bagnato o che non si avverta odore di insulina, condizioni che possono indicare lo spostamento della cannula. Una cannula inserita in modo errato, allentata o dislocata può comportare un'erogazione insufficiente di insulina con conseguente iperglicemia.

Avvertenza: non tentare MAI di iniettare insulina (o altro) nel foro di riempimento con il Pod applicato sul corpo, con il rischio di un'erogazione eccessiva o insufficiente di insulina e conseguente ipoglicemia o iperglicemia.

Dopo l'inserimento della cannula, controllare il Pod e il sito di infusione:

1. Guardare attraverso la finestrella di visualizzazione sul bordo del Pod per verificare che la cannula sia inserita sotto pelle. La cannula è di colore azzurro.
2. Verificare che sulla parte superiore del Pod sia riconoscibile il colore rosa. Si tratta di un'ulteriore verifica che consente di essere sicuri che la cannula sia stata inserita.
3. Verificare che il sito di infusione non sia bagnato e che non vi sia odore di insulina, poiché ciò può indicare lo spostamento della cannula.
4. Se la cannula non è inserita correttamente, toccare NO. Quindi toccare DISATTIVA POD. Avviare nuovamente il processo con un nuovo Pod.
5. Se la cannula è inserita correttamente, toccare SÌ.



La configurazione Pod è completata. Lo schermo visualizza i dettagli del Pod attivo e l'elenco dei promemoria.

Una volta inserita la cannula, il Pod riempie automaticamente la cannula con insulina e inizia a erogare insulina alla velocità basale indicata dal Programma Basale in corso.

La cannula può essere inserita una sola volta per ogni Pod.

6. Rivedere l'elenco dei promemoria attivi, quindi toccare CHIUDI.

5 Attivazione e sostituzione del Pod

Attenzione: se si sospetta un problema con i suoni del Pod, controllare SEMPRE la funzione di allarme quando lo si sostituisce per assicurarsi di non perdere allarmi importanti durante l'uso (vedere "Controllo allarmi" a pagina 168).

5.6 Passaggio alla Modalità Automatizzata

Per passare alla Modalità Automatizzata sono necessari un Pod attivo e un Numero di serie (NS) del Trasmettitore Dexcom G6 o un Sensore FreeStyle Libre 2 Plus associato. Se si dispone di un Numero di serie (NS) del Trasmettitore Dexcom G6 attivo o di un Sensore FreeStyle Libre 2 Plus associato all'App Omnipod 5, verrà richiesto di passare alla Modalità Automatizzata dopo l'attivazione del Pod.

Per passare alla Modalità Automatizzata:

- Toccare SI.

Per continuare in Modalità Manuale:

- Toccare NO.



È possibile passare dalla Modalità Manuale alla Modalità Automatizzata in un secondo momento. Vedere "22.1 Passaggio dalla Modalità Manuale alla Modalità Automatizzata" a pagina 342.

Nota: dopo il passaggio alla Modalità Automatizzata, si potrebbe visualizzare Modalità Automatizzata: Limitata fino a quando i valori glicemici del sensore non saranno disponibili. Vedere "21.5 Informazioni sulla Modalità Automatizzata: Limitata" a pagina 337.

5.7 Disattivazione di un Pod attivo

Avvertenza: NON applicare un nuovo Pod finché non si è disattivato e rimosso il precedente. Un Pod non correttamente disattivato può continuare a erogare insulina come programmato, esponendo l'utilizzatore al rischio di un'erogazione eccessiva di insulina con conseguente ipoglicemia.


Attenzione: non riutilizzare MAI il Pod o la siringa di riempimento, né provare a utilizzare una siringa di riempimento non in dotazione. Smaltire sempre il Pod usato e la siringa di riempimento in conformità alle normative vigenti in materia di smaltimento. A ogni sostituzione del Pod, utilizzare esclusivamente uno nuovo con la siringa di riempimento in dotazione. Portare sempre con sé i materiali di consumo per la sostituzione del Pod, nel caso in cui si rendesse necessario effettuarla.

Per disattivare e rimuovere un Pod attivo:

1. Accedere alla schermata di sostituzione del Pod:
Home > scheda INFO POD > VISUALIZZA DETTAGLI POD
oppure
pulsante Menu (☰) > Pod.
2. Toccare SOSTITUISCI POD, quindi toccare DISATTIVA POD.

Se era in corso un'operazione tra Basale Temporanea, Bolo prolungato o la Funzione Attività fisica, questa viene annullata.

Se viene visualizzato un messaggio di errore di comunicazione, vedere "Errore durante la disattivazione di un Pod" a pagina 401.

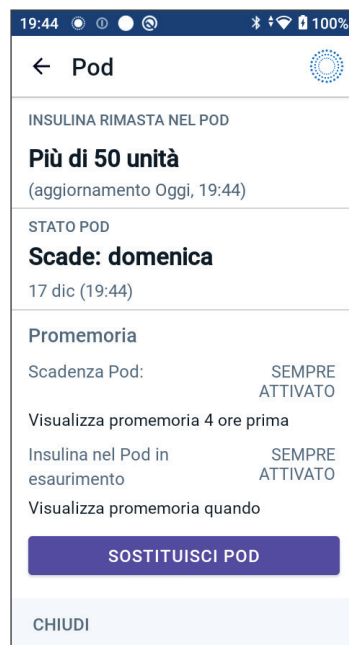

Quando si disattiva il Pod, il sistema esce dalla Modalità Automatizzata. Quando il nuovo Pod è attivato, il sistema sarà in Modalità Manuale; tuttavia, verrà richiesto di accedere alla Modalità Automatizzata se è stato immesso un Numero di serie (NS) del Trasmettitore Dexcom G6 o un Sensore FreeStyle Libre 2 Plus è associato nell'App Omnipod 5.

3. Rimuovere il Pod disattivato dal corpo:
 - a. Staccare delicatamente dalla pelle i bordi del nastro adesivo e rimuovere completamente il Pod.
Consiglio: rimuovere lentamente il Pod per evitare possibili irritazioni della pelle.
 - b. Usare acqua e sapone o, se necessario, un solvente per adesivi per rimuovere i residui di adesivo rimasti sulla pelle.

5 Attivazione e sostituzione del Pod

- c. Controllare che il sito di infusione non presenti segni di infezione (vedere “Come evitare infezioni nel sito di infusione” a pagina 98).
 - d. Smaltire il Pod usato attenendosi alle normative e ai regolamenti locali vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
4. Per attivare un nuovo Pod, toccare CONFIGURA NUOVO POD.

5.8 Ulteriori informazioni sull'utilizzo del Pod

Come evitare infezioni nel sito di infusione

Attenzione: ruotare SEMPRE i siti di infusione di insulina per prevenire complicanze nel sito di infusione quali ad esempio tessuto cicatriziale e infezioni. La rotazione dei siti di infusione dell'insulina riduce il rischio di cicatrici. La presenza di tessuto cicatriziale in un sito può portare a problemi di assorbimento dell'insulina.

Attenzione: NON utilizzare un Pod se la confezione sterile è aperta o danneggiata, se il Pod è caduto dopo essere stato estratto dalla confezione o se è scaduto, in quanto potrebbe non funzionare correttamente e aumentare di conseguenza il rischio di infezione.

Attenzione: per preparare il sito, procedere SEMPRE come segue. Se il sito non è adeguatamente pulito o se le mani dell'utilizzatore sono sporche, il rischio di infezione è maggiore.

- Lavarsi le mani.
- Pulire la parte superiore della fiala di insulina con un tampone disinfettante imbevuto di alcool.
- Pulire il sito di infusione con acqua e sapone o con un tampone disinfettante imbevuto di alcool; lasciarlo asciugare completamente.
- Conservare i materiali sterili lontano da ogni possibile fonte di contaminazione.

Attenzione: controllare SEMPRE con frequenza l'eventuale presenza di segni di infezione. Se il sito di infusione presenta segni di infezione:

- Rimuovere immediatamente il Pod e applicarne uno nuovo in un sito di infusione diverso.
- Contattare l'operatore sanitario di riferimento, e procedere a curare l'infezione seguendo le istruzioni ricevute.

Se si nota del sangue nella cannula, controllare il glucosio con maggiore frequenza per accertarsi che l'insulina venga erogata correttamente. Qualora si rilevasse glicemia inaspettatamente alta, sostituire il Pod.

Controllare il sito di infusione almeno una volta al giorno:

- Individuare eventuali segni di infezione, tra cui dolore, gonfiore, rossore, essudazione o calore nel sito di infusione. Se si sospetta un'infezione, rimuovere immediatamente il Pod e applicarne uno nuovo in un sito diverso. Quindi contattare l'operatore sanitario di riferimento.

Se si riscontrano problemi con il Pod, disattivarlo e attivarne uno nuovo.

Informazioni aggiuntive

Consiglio: Consiglio: è utile stabilire una propria routine che preveda di sostituire il Pod a un'ora del giorno che risulti comoda in base alle proprie abitudini. Se si sa in anticipo che un evento potrebbe interferire con l'operazione di sostituzione del Pod, è possibile cambiare il Pod prima della scadenza per evitare interruzioni nell'erogazione di insulina.

Per ulteriori informazioni su come ottimizzare l'utilizzo dei Pod, vedere le seguenti sezioni:

- Per ulteriori informazioni sulla cura del Pod, vedere “14.1 Conservazione e cura del Pod e dell'insulina” a pagina 196.
- Per conoscere il significato dei vari allarmi del Pod, vedere pagina 159.
- Per informazioni su come silenziare l'allarme di un Pod, vedere “13.9 Silenziamento degli allarmi non risolti” a pagina 190.
- Per comprendere il significato dei segnali acustici di notifica e informativi emessi dal Pod, compresi quelli opzionali, vedere “13.11 Elenco notifiche di promemoria” a pagina 192 e “13.4 Suoni e vibrazioni informativi” a pagina 164.
- Per sapere come gestire quelle situazioni in cui l'App Omnipod 5 non può comunicare con il Pod, vedere “26.5 Problemi di comunicazione del Pod – “Riprova”” a pagina 398.
- Se la scheda della schermata Home INFO POD indica “Nessuna comunicazione con il Pod”:
 - Per determinare l'ultima volta che l'App Omnipod 5 ha comunicato correttamente con il Pod, accedere a: pulsante Menu (☰) > Pod.
 - Se non si è in grado di ripristinare la comunicazione con il Pod e si desidera passare a un nuovo Pod, accedere a: pulsante Menu (☰) > Pod > SOSTITUISCI POD.

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

CAPITOLO 6

Programmi Basale

Sommario

6.1 Informazioni sui Programmi Basale	102
6.2 Revisione di tutti i Programmi Basale	103
6.3 Creazione di nuovi Programmi Basale.....	103
6.4 Modifica di un Programma Basale	104
6.5 Eliminazione di un Programma Basale	105
6.6 Passaggio a un Programma Basale diverso	105
6.7 Erogazione di insulina basale	106
Programmi Basale in Modalità Manuale.....	106

6.1 Informazioni sui Programmi Basale

In Modalità Manuale, i Programmi Basale vengono utilizzati per erogare una quantità costante di insulina durante la giornata. Questa è nota come insulina basale. Giorni diversi possono avere routine diverse. Il Sistema Omnipod 5 consente di creare Programmi Basale diversi per le varie routine. È possibile, ad esempio, impostare un Programma Basale per i giorni della settimana e un Programma Basale diverso per i fine settimana.

Prima di creare o modificare un Programma Basale, procedere come segue:

- Annullare la Basale Temporanea se è in esecuzione.
- Passare alla Modalità Manuale se si sta utilizzando la Modalità Automatizzata. Vedere “22.2 Passaggio dalla Modalità Automatizzata alla Modalità Manuale” a pagina 344.

Consiglio: scrivere un elenco dei segmenti di basale per guidare l'utilizzatore nell'immissione dei valori per ogni segmento. È possibile scrivere questo elenco sulle pagine alla fine del presente *Manuale d'uso tecnico*.

6.2 Revisione di tutti i Programmi Basale

Per rivedere tutti i Programmi Basale:

1. Accedere all'elenco dei Programmi Basale:
pulsante Menu (☰) > Programmi Basale.
Viene visualizzato un elenco di Programmi Basale con il Programma Basale in corso in alto.
2. Scorrere verso l'alto o verso il basso in base alle esigenze per visualizzare altri Programmi Basale.
3. Toccare il nome di un Programma Basale salvato per visualizzarne il grafico e le velocità basali. Toccare fuori dal grafico per chiuderlo.



6.3 Creazione di nuovi Programmi Basale

Per creare un nuovo Programma Basale:

1. Accedere alla schermata Crea Programma Basale:
pulsante Menu (☰) > Programmi Basale.
2. Toccare CREA NUOVO.
Nota: se è già stato raggiunto il numero massimo di 12 Programmi Basale, l'opzione CREA NUOVO non è disponibile. Se necessario, è possibile eliminare un Programma Basale esistente. Vedere “6.5 Eliminazione di un Programma Basale” a pagina 105.
3. Vedere “Creazione di un Programma Basale” a pagina 72 per continuare con la creazione del nuovo Programma Basale.
4. Se si è in possesso di un Pod attivo e si desidera utilizzare subito il nuovo Programma Basale, toccare AVVIA per iniziare a utilizzare il nuovo Programma Basale. Se non si desidera utilizzare il nuovo Programma Basale, toccare NON ORA.

6.4 Modifica di un Programma Basale

Per modificare un Programma Basale:

1. Accedere all'elenco dei Programmi Basale:
pulsante Menu (☰) > Programmi Basale.
2. Selezionare il Programma Basale che si desidera modificare. Scorrere verso l'alto o verso il basso secondo necessità per individuare il Programma Basale.
 - Per modificare il Programma Basale in corso, toccare **MODIFICA** sotto il grafico del programma in corso. Quindi toccare **SOSPENDEI INSULINA**.
 - Per modificare un Programma Basale salvato, toccare il pulsante Opzioni (⋮) accanto al Programma Basale che si desidera modificare. Quindi toccare **Modifica**.
3. Per rinominare il Programma Basale, toccare il campo **Nome programma** e immettere il nuovo nome.
4. Toccare **FATTO**.
5. Toccare **AVANTI**.
6. Consultare i passaggi da 2 a 7 della sezione “6.2 Revisione di tutti i Programmi Basale” a pagina 103 per continuare con la modifica del Programma Basale.
7. Per attivare il Programma Basale appena modificato:
 - Se è stato modificato il Programma Basale in corso, toccare **AVVIA INSULINA**.
 - Se è stato modificato un Programma Basale salvato e si desidera avviarlo, toccare **AVVIA**.
8. Se non si desidera avviare il Programma Basale appena modificato, toccare **NON ORA**.



6.5 Eliminazione di un Programma Basale

È possibile eliminare solo un Programma Basale non in corso. Per eliminare un Programma Basale:

1. Accedere all'elenco dei Programmi Basale:
pulsante Menu (≡) > Programmi Basale.
2. Toccare il pulsante Opzioni (⋮) accanto al Programma Basale che si desidera eliminare.
3. Toccare Elimina.
4. Toccare ELIMINA per confermare l'eliminazione del Programma Basale.

Nota: assicurarsi sempre di eliminare il Programma Basale corretto. Una volta eliminato, l'azione non può essere annullata e, se necessario, il Programma Basale dovrà essere ricreato.

6.6 Passaggio a un Programma Basale diverso

Per passare a un Programma Basale diverso:

1. Accedere a: pulsante Menu (≡) > Programmi Basale.
Viene visualizzato un elenco di Programmi Basale con il Programma Basale in corso in alto.
2. Selezionare un Programma Basale diverso in uno dei seguenti modi:
 - Per vedere un grafico di un Programma Basale salvato prima di attivarlo, toccare il nome di quel Programma Basale. Quindi toccare AVVIA.
Consiglio: toccare due volte il grafico per visualizzare una vista espansa del Programma Basale. Scorrere a sinistra e a destra per visualizzare le velocità basali per le ore successive o precedenti.
 - Toccare il pulsante Opzioni (⋮) a destra di un Programma Basale salvato, quindi toccare AVVIA.
3. Per avviare il Programma Basale appena selezionato, toccare AVVIA.

6.7 Erogazione di insulina basale

Anche fuori dai pasti, il corpo necessita di un costante, per quanto esiguo, rifornimento di insulina per il normale svolgimento delle attività quotidiane, noto con il nome di insulina “basale”. Nelle persone non affette da diabete, il pancreas eroga in continuazione questa quantità di insulina basale. Per chi utilizza il Sistema Omnipod 5, il Pod può simulare il pancreas di una persona senza diabete erogando in maniera continuativa insulina basale mentre si indossa il Pod.

La metà circa della dose Insulina Totale Giornaliera (TDI) di una persona è di solito costituito dall'erogazione di insulina basale, mentre l'altra metà è generalmente costituita dalle dosi di bolo.

Nel Sistema Omnipod 5, l'erogazione basale avviene in modo diverso a seconda di quale delle due modalità si sta operando: Manuale o Automatizzata.


Programmi Basale in Modalità Manuale

Una velocità basale indica il numero di unità di insulina erogate ogni ora.

Un segmento di basale definisce l'ora del giorno durante cui viene erogata una data velocità basale.

Un Programma Basale è l'insieme dei segmenti di basale che coprono un periodo di tempo che va da mezzanotte a mezzanotte. In altre parole, un Programma Basale definisce la velocità dell'erogazione di insulina nell'arco di 24 ore.

La figura seguente mostra un Programma Basale con tre segmenti basali che erogano 7,4 U totali in un periodo di 24 ore.

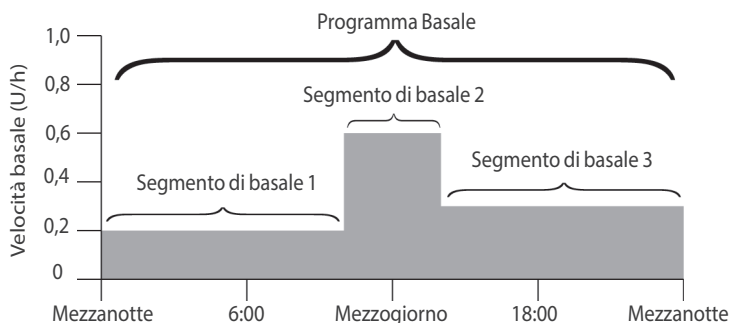

Il fabbisogno di insulina varia nel corso della giornata. Per questa ragione, molte persone impostano le proprie velocità basali in modo che venga erogata una quantità di insulina leggermente più alta o più bassa

in determinati momenti della giornata. Ad esempio, si potrebbe avere bisogno di erogare insulina a una velocità inferiore durante la notte e a una velocità superiore durante il giorno.

Per creare il Programma Basale illustrato nella figura precedente, è necessario programmare nell'App Omnipod 5 i seguenti segmenti di basale:

Segmento	Velocità basale	
1: da mezzanotte alle 10:00	0,20 U/h	Tra mezzanotte e le 10:00, il Pod eroga 0,20 unità di insulina ogni ora.
2: dalle 10:00 alle 14:00	0,60 U/h	Tra le 10:00 e le 14:00, il Pod eroga 0,60 unità di insulina ogni ora.
3: dalle 14:00 a mezzanotte	0,30 U/h	Tra le 14:00 e mezzanotte, il Pod eroga 0,30 unità di insulina ogni ora.

La routine dei giorni della settimana può essere diversa da quella del fine settimana e ciò comporta variazioni anche nel fabbisogno insulinico. Per gestire queste variazioni prevedibili nella propria routine, è possibile creare fino a 12 diversi Programmi Basale (vedere “6.3 Creazione di nuovi Programmi Basale” a pagina 103).

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

CAPITOLO 7

Velocità Basali Temporanee

Sommario

7.1 Informazioni sulle Velocità Basali Temporanee	110
7.2 Avvio di una Basale Temporanea	111
7.3 Annullamento di una Basale Temporanea	113
7.4 Erogazione di Velocità Basali Temporanee.....	113
Impostazioni delle Basali Temporanee: unità orarie (U/h) o percentuale (%)	114
Limiti delle Basali Temporanee.....	116

7.1 Informazioni sulle Velocità Basali Temporanee

In Modalità Manuale, è possibile utilizzare una Velocità Basale Temporanea, detta anche “Basale Temporanea”, per gestire un cambiamento temporaneo nella propria routine giornaliera. Ad esempio, è possibile ricorrere a una Basale Temporanea quando si pratica attività sportiva oppure quando si è malati. Al termine di una Basale Temporanea, il Pod avvia l'erogazione del Programma Basale pianificato.

Per attivare o disattivare la possibilità di avviare Basali Temporanee o di specificare la Basale Temporanea come percentuale o in U/h, vedere pagina 140.

Consiglio: per impostazione predefinita, l'App Omnipod 5 o il Pod emette un tono all'inizio e alla fine di una Basale Temporanea e ogni 60 minuti mentre è in esecuzione una Basale Temporanea. Per attivare o disattivare l'emissione di questi toni, vedere “13.3 Suoni e vibrazioni” a pagina 163.


Prima di creare o modificare una Velocità Basale Temporanea, procedere come segue:

- L'impostazione Basale Temporanea deve essere impostata su Attivo. Se è su Disattivo, vedere “10.3 Impostazioni di Basale e Basale Temporanea” a pagina 139.
- Se il Sistema Omnipod 5 è attualmente in Modalità Automatizzata, passare alla Modalità Manuale. Vedere “22.2 Passaggio dalla Modalità Automatizzata alla Modalità Manuale” a pagina 344.

7.2 Avvio di una Basale Temporanea

Nota: non è possibile avviare o annullare una Basale Temporanea durante l'erogazione di un bolo immediato, ma è possibile avviare o annullare una Basale Temporanea mentre è in corso un Bolo prolungato.

Per avviare una Basale Temporanea:

1. Accedere a:
pulsante Menu () > Imposta Basale Temporanea.
La schermata mostra un grafico del Programma Basale in corso.
2. Toccare il campo Velocità basale e immettere la variazione desiderata della velocità basale:

- Se si utilizza una variazione percentuale (%):

Una FRECCIA VERSO L'ALTO () indica un **aumento** della velocità basale oltre quella del Programma Basale in corso.

Una FRECCIA VERSO IL BASSO () indica una **riduzione** della velocità basale al di sotto di quella del Programma Basale in corso.

- Se si utilizza una velocità fissa (U/h), scorrere per selezionare la velocità basale per l'intero periodo della Basale Temporanea.

Nota: per modificare la configurazione delle Basali Temporanee in termini di percentuale (%) o U/h, vedere “10.3 Impostazioni di Basale e Basale Temporanea” a pagina 139.

Nota: la rotella non scorre al di sopra della Velocità basale massima. Per regolare la Velocità basale massima, vedere “Velocità basale massima” a pagina 140.

Consiglio: è possibile disattivare l'erogazione di insulina per la durata della Basale Temporanea impostando una riduzione del 100% o impostando la Basale Temporanea su 0 U/h. Per ulteriori informazioni, vedere “Limiti delle Basali Temporanee” a pagina 116 e “7.4 Erogazione di Velocità Basali Temporanee” a pagina 113.



3. Toccare il campo Durata e immettere la durata della Basale Temporanea (tra 30 minuti e 12 ore).

7 Velocità Basali Temporanee

4. Esaminare il grafico della Basale Temporanea nella parte superiore della schermata. La Basale Temporanea proposta viene visualizzata durante il Programma Basale in corso.
 - L'area ombreggiata di colore azzurro mostra la Velocità Basale Temporanea proposta per ciascun segmento.
 - Se si imposta una riduzione, il Programma Basale in corso viene visualizzato come una linea orizzontale punteggiata.
5. Toccare **CONFERMA** per continuare.
6. Rivedere i dettagli della Basale Temporanea. Se sono necessarie correzioni, toccare la riga da modificare. Quindi immettere le correzioni e confermarle.
7. Per attivare la Basale Temporanea, toccare **AVVIA**. Quindi toccare di nuovo **AVVIA**.

Una volta avviata l'erogazione della Basale Temporanea, la scheda **INSULINA** della schermata Home viene evidenziata in azzurro e rinominata **TEMP ATTIVA**, a indicare che è in corso l'erogazione della Basale Temporanea. La scheda **TEMP ATTIVA** ora mostra che è in corso l'erogazione della Basale Temporanea, la variazione della velocità basale e quanto tempo rimane.

Al termine della durata della Basale Temporanea, il Pod riprende a erogare il Programma Basale pianificato.

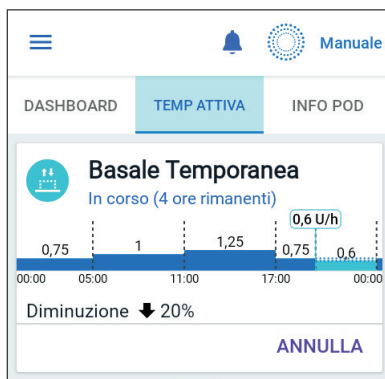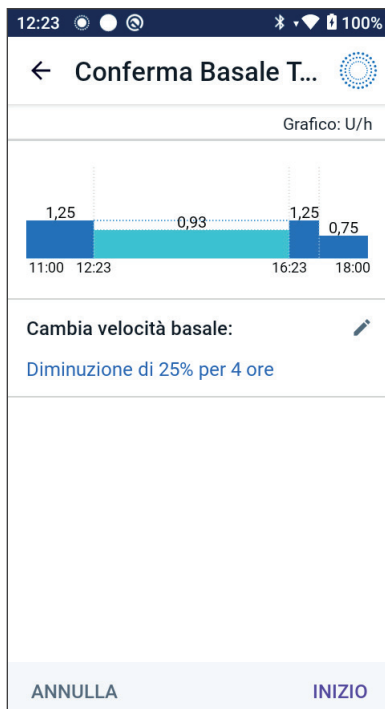

7.3 Annullamento di una Basale Temporanea

La Basale Temporanea si interrompe automaticamente al termine del periodo di tempo definito e si avvia l'ultimo Programma Basale pianificato.

Per annullare una Basale Temporanea prima della fine della sua durata:

1. Accedere alla scheda TEMP ATTIVA della schermata Home.
2. Toccare ANNULLA.
3. Toccare SÌ per confermare l'annullamento. L'App Omnipod 5 annullerà la Basale Temporanea e avvierà l'ultimo Programma Basale pianificato.

7.4 Erogazione di Velocità Basali Temporanee

Una Basale Temporanea consente di ignorare il Programma Basale attualmente in esecuzione impostando una velocità basale diversa per un periodo di tempo predefinito. Questa funzione è disponibile solo in Modalità Manuale.

Se, ad esempio, ci si accinge a praticare dello sci di fondo per alcune ore, sarà possibile impostare una Basale Temporanea per abbassare la velocità basale durante e dopo la pratica sportiva (vedere "Velocità Basali Temporanee" a pagina 109).


Le Basali Temporanee possono avere una durata compresa tra 30 minuti e 12 ore. Al termine del periodo di tempo specificato, il Pod tornerà automaticamente alla velocità basale programmata.

Impostazioni delle Basali Temporanee: unità orarie (U/h) o percentuale (%)

Le Basali Temporanee possono essere impostate in termini di percentuale (%) oppure in termini di unità orarie (U/h).

Impostando le Basali Temporanee in termini di unità orarie (U/h), il Pod erogherà l'insulina a una velocità fissa per tutta la durata della Basale Temporanea. In altre parole, i dettagli del Programma Basale attualmente pianificato verranno ignorati durante l'erogazione di queste Basali Temporanee.

Impostando le Basali Temporanee in termini di percentuale (%), l'erogazione di insulina seguirà lo schema definito nel Programma Basale attualmente pianificato, incrementando o riducendo l'erogazione di insulina della percentuale specificata. Ad esempio, la figura che segue mostra come un incremento del 50% aumenti l'erogazione di insulina del Programma Basale del 50%, mentre una riduzione del 50% riduca l'erogazione di insulina del Programma Basale del 50%.

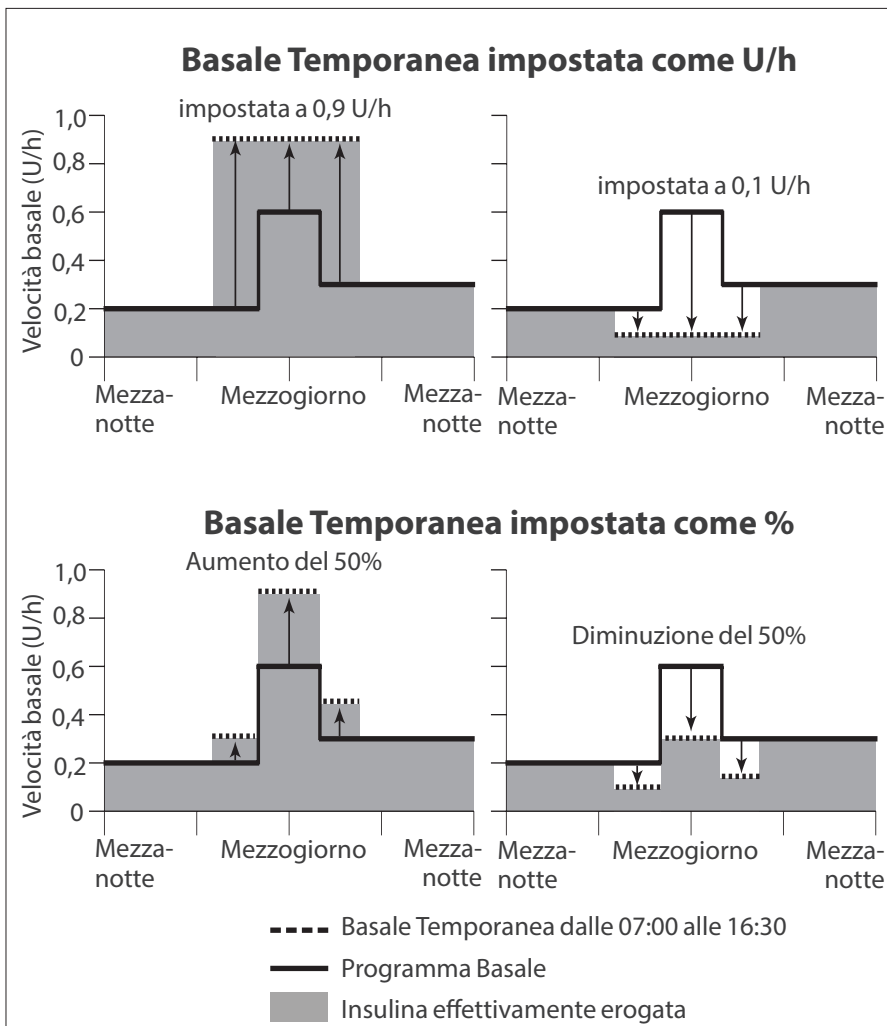

7 Velocità Basali Temporanee

Nella figura di esempio precedente sono riportati i calcoli relativi alla Basale Temporanea di incremento del 50%:

Limiti del segmento*	Velocità basale del Programma Basale (U/h)	Aumento del 50% (U/h)	Velocità Basale Temporanea ottenuta: (U/h)
Da mezzanotte alle 7:00	0,20		
Dalle 7:00 alle 10:00	0,20	$0,20 \times 50\% = 0,10$	$0,20 + 0,10 = 0,30$
Dalle 10:00 alle 14:00	0,60	$0,60 \times 50\% = 0,30$	$0,60 + 0,30 = 0,90$
Dalle 14:00 alle 16:30	0,30	$0,30 \times 50\% = 0,15$	$0,30 + 0,15 = 0,45$
Dalle 16:30 a mezzanotte	0,30		

* I segmenti sono definiti dal Programma Basale attualmente pianificato.

Limiti delle Basali Temporanee

Valori Basale Temporanea vietati: non è possibile impostare una Basale Temporanea dello 0%, in quanto non comporterebbe alcuna modifica del Programma Basale in corso.

Basale Temporanea massima:

- Se si utilizza la percentuale (%), è possibile impostare la Basale Temporanea fino al 95% in più rispetto alla velocità del Programma Basale in corso, con la seguente eccezione: Non è possibile impostare una Basale Temporanea che superi la Velocità basale massima durante qualsiasi segmento temporale coperto dalla durata della Basale Temporanea.
- Quando si utilizza una velocità fissa (U/h), non è possibile impostare una Basale Temporanea superiore alla Velocità basale massima.

Valori della Basale Temporanea che disattivano l'erogazione di insulina basale: quando si utilizza la percentuale (%), se si imposta una riduzione che determina un flusso inferiore a 0,05 U/h per un segmento, l'App Omnipod 5 informa che si riceverà 0 U/h di insulina per uno o più segmenti.

Se la Basale Temporanea è sufficientemente lunga, alla fine si riceverà un po' di insulina. Ciò è dovuto al fatto che il Pod eroga insulina a impulsi di 0,05 U.

Se, ad esempio, la portata di un segmento di basale è di 0,10 U/h e si crea una Basale Temporanea con una riduzione del 60% per:

- Un'ora, la portata risultante di 0,04 U/h comporta la mancata erogazione di insulina per la durata di un'ora della Basale Temporanea.
- Due ore, la portata risultante di 0,04 U/h comporta l'erogazione di 0 U di insulina nella prima ora e di 0,05 U di insulina nella seconda ora.

È possibile impostare una Basale Temporanea per disattivare l'erogazione di insulina basale per un determinato periodo di tempo utilizzando una riduzione del 100% o una velocità fissa di 0 U/h. Il Pod emette un segnale acustico all'inizio e alla fine di un periodo di Basale Temporanea in cui non viene erogata insulina basale. È comunque possibile erogare boli di insulina in concomitanza con l'utilizzo di una Basale Temporanea che disattiva l'erogazione di insulina basale.

Consiglio: l'utilizzo di una Basale Temporanea per disattivare l'erogazione di insulina basale risulta utile se si desidera avviare automaticamente il Programma Basale al termine della Basale Temporanea.

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

CAPITOLO 8

Letture della glicemia

Sommario

8.1 Informazioni sulle letture della glicemia	120
8.2 Immissione della lettura della glicemia	121
8.3 Letture della glicemia alta e bassa	122
Modalità di visualizzazione delle letture della glicemia	123

8.1 Informazioni sulle letture della glicemia

Avvertenza: per evitare che si verifichino episodi di iperglicemia e ipoglicemia, attenersi SEMPRE alle indicazioni dell'operatore sanitario di riferimento in merito all'appropriato monitoraggio del glucosio.

Il Sistema Omnipod 5 riceve valori di glucosio regolari dal Sensore dopo aver connesso il Sensore Dexcom G6 o il Sensore FreeStyle Libre 2 Plus a un Pod attivo. Una volta connesso, i valori glicemici del sensore vengono visualizzati e possono essere utilizzati nell'App Omnipod 5 in entrambe le Modalità Manuale e Automatizzata. A volte potrebbe essere necessario controllare la glicemia utilizzando un glucometro separato. Si consiglia di controllare la glicemia nei seguenti scenari:

- Si stanno manifestando sintomi di ipoglicemia. Vedere “Sintomi di ipoglicemia (glicemia bassa)” a pagina 211.
- Si stanno manifestando sintomi di iperglicemia. Vedere “Sintomi di iperglicemia (glicemia alta)” a pagina 215.
- Si stanno manifestando sintomi non coerenti con i valori glicemici del sensore.
- Si utilizza un Sensore Dexcom G6 e il Sensore deve essere calibrato. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle *Istruzioni per l'uso del sistema CGM Dexcom G6*.
- Non si sta utilizzando un Sensore per monitorare il glucosio.
- Quando l'operatore sanitario di riferimento lo consiglia.

8.2 Immissione della lettura della glicemia

Per immettere la lettura della glicemia:

1. Controllare la glicemia attenendosi alle istruzioni per l'uso del glucometro.
2. Andare alla schermata Immetti glicemia dell'App Omnipod 5: pulsante Menu (☰) > Immetti glicemia
In alternativa, dal Suggeritore SmartBolus, toccare il campo Glucosio.
3. Immettere o modificare manualmente un valore della glicemia come segue:
 - a. Immettere e confermare la lettura della glicemia utilizzando il tastierino numerico.
 - b. Toccare il segno di spunta per chiudere il tastierino numerico.

Nota: quando si immette una lettura della glicemia superiore a 33,3 mmol/L (600 mg/dL), l'App Omnipod 5 la memorizza come valore "ALTO". Quando si immette una lettura della glicemia inferiore a 1,1 mmol/L (20 mg/dL), l'App Omnipod 5 la memorizza come valore "BASSO".

4. Una volta immessa la lettura glicemia, eseguire una delle seguenti azioni:
 - Toccare AGGIUNGI AL SUGGERITORE per salvare e immettere la lettura della glicemia nel Suggeritore SmartBolus.
Nota: fino a quando non viene inserita una lettura della glicemia o se l'insulina è in pausa, l'opzione AGGIUNGI AL SUGGERITORE risulta disabilitata.
 - Toccare SALVA per salvare la lettura della glicemia nei registri cronologici. Se si accede a questa schermata dal Suggeritore SmartBolus, SALVA non viene visualizzato.
 - Toccare ANNULLA e poi SÌ per uscire dalla schermata senza salvare la lettura della glicemia.

L'App Omnipod 5 registra l'ora corrente come l'ora della lettura della glicemia.

8.3 Letture della glicemia alta e bassa

Avvertenza: per evitare che si verifichino episodi di iperglicemia e ipoglicemia, attenersi SEMPRE alle indicazioni dell'operatore sanitario di riferimento in merito all'appropriato monitoraggio del glucosio.

Avvertenza: un valore del glucosio inferiore a 3,9 mmol/L (70 mg/dL) può indicare ipoglicemia (glucosio basso). Un valore del glucosio superiore a 13,9 mmol/L (250 mg/dL) può indicare iperglicemia (glucosio elevato). Rispettare le indicazioni dell'operatore sanitario di riferimento in merito al trattamento.

Avvertenza: trattare SEMPRE tempestivamente l'ipoglicemia. Un valore del glucosio pari o inferiore a 3,1 mmol/L (55 mg/dL) indica ipoglicemia significativa (glicemia molto bassa). Se non trattata, può causare crisi convulsive, perdita di coscienza e morte. Attenersi alle raccomandazioni dell'operatore sanitario per il trattamento.

Avvertenza: trattare SEMPRE tempestivamente livelli di glucosio inferiori a 3,9 mmol/L (70 mg/dL) (ipoglicemia) in base alle raccomandazioni dell'operatore sanitario di riferimento. I sintomi dell'ipoglicemia includono debolezza, sudorazione, nervosismo, cefalea o confusione. Se non trattata, l'ipoglicemia può causare crisi convulsive, perdita di coscienza o morte.

Avvertenza: NON aspettare per trattare l'ipoglicemia (glucosio basso) o i relativi sintomi. Anche se non è possibile controllare il valore del glucosio, attendere per trattare i sintomi manifestati potrebbe portare a un'ipoglicemia grave, che a sua volta può sfociare in crisi convulsive, perdita di coscienza o morte.

Avvertenza: trattare SEMPRE tempestivamente l'iperglicemia (glicemia alta) in base alle raccomandazioni dell'operatore sanitario di riferimento. I sintomi di iperglicemia includono stanchezza, sete, eccessiva minzione o visione annebbiata. Se non trattata, l'iperglicemia può sfociare in chetoacidosi diabetica (DKA) o morte.

Avvertenza: NON aspettare per trattare la DKA. Se non trattata, la DKA può sfociare rapidamente in respirazione difficoltosa, shock, coma o morte.

Avvertenza: trattare SEMPRE i valori glicemici del sensore e i valori della lettura del glucosio "BASSO" o "ALTO" in base alle raccomandazioni dell'operatore sanitario di riferimento. Questi valori possono indicare condizioni potenzialmente gravi che è necessario curare immediatamente. Se non trattate, queste situazioni possono sfociare rapidamente in chetoacidosi diabetica (DKA), shock, coma o morte.

Se la lettura della glicemia è un valore ALTO o superiore a 33,3 mmol/L (600 mg/dL), l'App Omnipod 5 registra "ALTO" nella cronologia. Ciò indica un'iperglicemia grave (glicemia alta). Se la lettura della glicemia è un valore BASSO o inferiore a 1,1 mmol/L (20 mg/dL), l'App Omnipod 5 registra "BASSO" nella cronologia. Ciò indica un'ipoglicemia grave (glicemia bassa).

L'App Omnipod 5 indica letture della glicemia alta e bassa come segue.


Letture della glicemia	Display schermo
Superiore a 33,3 mmol/L (600 mg/dL) o ALTO	ALTO
1,1–33,3 mmol/L (20–600 mg/dL)	<lettura della glicemia>
0–1 mmol/L (0–19 mg/dL) o BASSO	BASSO

Modalità di visualizzazione delle letture della glicemia

L'App Omnipod 5 visualizza la lettura della glicemia con un colore. Il colore del testo è:

- Giallo se la glicemia supera l'Obiettivo glicemico.
- Verde se la glicemia rientra nell'Obiettivo glicemico.
- Rosso se la glicemia è inferiore all'Obiettivo glicemico.

Per modificare l'Obiettivo glicemico, vedere pagina 150.

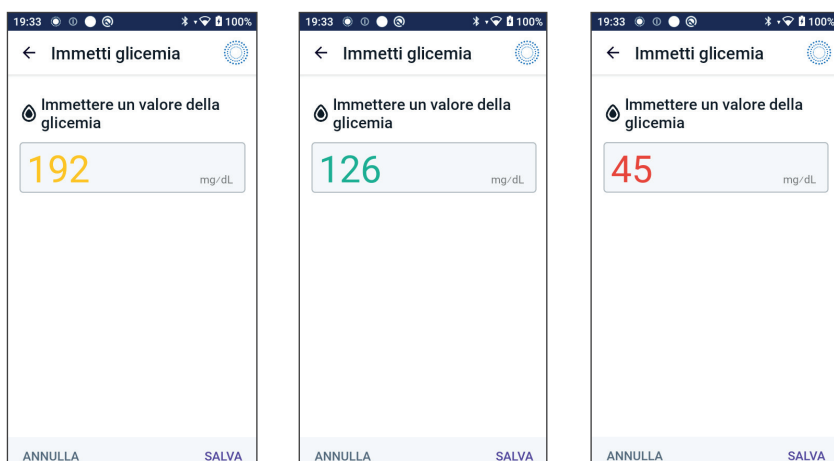

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

CAPITOLO 9

Sospensione e avvio dell'erogazione di insulina

Sommario

9.1 Sospensione dell'erogazione di insulina	126
Sospensione dell'erogazione di insulina	126
9.2 Metodi per sospendere temporaneamente l'erogazione di insulina in Modalità Manuale	127
9.3 Avvio dell'erogazione di insulina	128
Avvio dell'erogazione di insulina prima del termine del periodo di sospensione	129
Avvio dell'erogazione di insulina dopo il termine del periodo di sospensione	129

9.1 Sospensione dell'erogazione di insulina

Attenzione: toccare SEMPRE AVVIA INSULINA per avviare l'erogazione di insulina al termine di un periodo di sospensione durante l'uso in Modalità Manuale. L'erogazione di insulina non si avvia automaticamente dopo una sospensione. In caso di mancato avvio, può manifestarsi iperglicemia.

Talvolta può essere necessario sospendere brevemente l'erogazione di insulina, ad esempio, occorre sospendere l'erogazione di insulina prima di modificare un Programma Basale in corso o di modificare il fuso orario. Il Sistema Omnipod 5 consente di sospendere completamente l'erogazione di insulina per un massimo di due ore.

Per conoscere la differenza tra sospendere l'erogazione di insulina mediante la funzione di sospensione e attraverso la funzione della Basale Temporanea, vedere "9.2 Metodi per sospendere temporaneamente l'erogazione di insulina in Modalità Manuale" a pagina 127.

Prima di iniziare, procedere come segue:


- È necessario essere in Modalità Manuale per sospendere l'insulina. Se si sta utilizzando la Modalità Automatizzata, vedere "22.2 Passaggio dalla Modalità Automatizzata alla Modalità Manuale" a pagina 344.

Sospensione dell'erogazione di insulina

Per sospendere l'erogazione di insulina:

1. Accedere a:
pulsante Menu (☰) >
Sospendi insulina.
2. Toccare il campo Sospendi insulina.
Scorrere per specificare per quanto tempo sospendere l'insulina. La durata della sospensione può essere di 0,5 ore, 1 ora, 1,5 ore o 2 ore.
3. Toccare SOSPENDEI.
4. Toccare Sì per confermare che si desidera sospendere completamente l'erogazione di insulina.
L'erogazione di insulina basale verrà sospesa completamente.

La schermata Home visualizza un banner giallo con il messaggio "Erogazione di insulina sospesa".

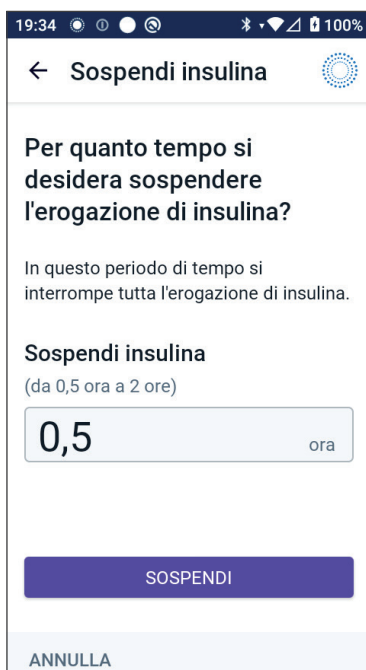

Nota: per tutta la durata del periodo di sospensione, il Pod emette dei segnali acustici a intervalli di 15 minuti. Alla fine del periodo di sospensione, l'erogazione di insulina non viene ripresa automaticamente. Il Pod e l'App Omnipod 5 avvisano l'utilizzatore ogni minuto per 3 minuti e ripetono questa notifica ogni 15 minuti fino a quando l'erogazione di insulina non viene riavviata.

9.2 Metodi per sospendere temporaneamente l'erogazione di insulina in Modalità Manuale

Si possono verificare situazioni in cui si desidera sospendere l'erogazione di insulina, completamente o solo dell'insulina basale, per un dato periodo di tempo. Se non si desidera disattivare il Pod in uso, è possibile richiedere un'interruzione temporanea dell'erogazione di insulina come segue:

- Sospendendo l'erogazione di insulina.
- Impostando una Basale Temporanea per disattivare l'erogazione di insulina:

Nella tabella seguente vengono messe a confronto le opzioni per la sospensione temporanea dell'erogazione di insulina.

	Sospendi insulina	Basale Temporanea di 0 U/h
Effetto sull'erogazione di insulina basale e di boli di insulina	Nessuna erogazione basale Nessuna erogazione di boli	Nessuna erogazione basale Boli consentiti
Durata minima della sospensione di insulina	30 min	30 min
Durata massima della sospensione di insulina	2 ore	12 ore
L'erogazione di insulina si avvia automaticamente	No	Sì
Display schermo alla fine della durata specificata	“Avvia insulina. Il periodo di sospensione dell'insulina è terminato.”	La scheda centrale della schermata Home mostra ora “Basale” (non “Basale Temporanea”)

9 Sospensione e avvio dell'erogazione di insulina

	Sospendi insulina	Basale Temporanea di 0 U/h
Segnali acustici mentre l'erogazione di insulina è sospesa	Ogni 15 minuti	All'inizio e ogni 60 minuti
Segnali acustici alla fine della durata specificata	Ogni 15 minuti fino a quando non si tocca Avvia	Un segnale acustico e poi l'erogazione di insulina si avvia automaticamente
Utilizzare necessariamente per	Modifica di un Programma Basale in corso Modifica del fuso orario Test della funzione di allarme e vibrazione	L'utilizzo di questo metodo non è mai indispensabile
Annullamento della sospensione	Pulsante Menu (☰) > Avvia insulina	Home: scheda Basale Temporanea > ANNULLA


9.3 Avvio dell'erogazione di insulina

Attenzione: toccare SEMPRE AVVIA INSULINA per avviare l'erogazione di insulina al termine di un periodo di sospensione durante l'uso in Modalità Manuale. L'erogazione di insulina non si avvia automaticamente dopo una sospensione. In caso di mancato avvio, può manifestarsi iperglicemia.

Avvio dell'erogazione di insulina prima del termine del periodo di sospensione

1. Accedere a:
pulsante Menu (☰) >
Avvia insulina.
2. Toccare AVVIA INSULINA per confermare il riavvio del Programma Basale pianificato per l'ora corrente.

L'App Omnipod 5 emette un segnale acustico a conferma dell'avvio dell'erogazione di insulina.

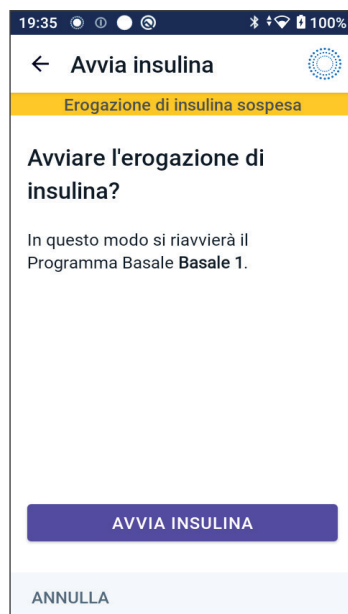


Avvio dell'erogazione di insulina dopo il termine del periodo di sospensione

- Toccare AVVIA INSULINA per avviare l'erogazione di insulina.

L'App Omnipod 5 attiva il Programma Basale pianificato per l'ora corrente ed emette un segnale acustico per avvisare che l'erogazione di insulina è stata avviata.

Se l'erogazione di insulina non viene avviata immediatamente, viene visualizzata di nuovo questa schermata e l'App Omnipod 5 e il Pod emetteranno un segnale acustico a intervalli di 15 minuti fino a quando l'erogazione non verrà avviata.

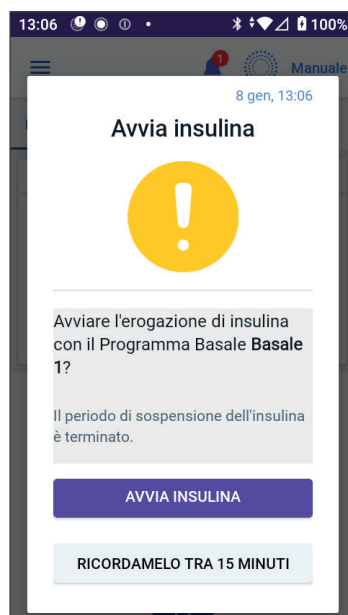

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

CAPITOLO 10

Modifica delle impostazioni

Sommario

10.1 Impostazioni generali	132
Connettività di rete	132
Modalità aereo	132
Display schermo	133
Timeout schermo	133
Luminosità dello schermo	133
Blocco schermo	133
Messaggio blocco schermo	133
Sfondo blocco schermo	134
PIN	134
Cambio dell'ora	134
Fuso orario dispositivo	135
Fuso orario per l'erogazione di insulina	135
Lingua	136
Reimpostazione	136
10.2 Impostazioni dei promemoria	137
Scadenza Pod	137
Insulina nel Pod in esaurimento	138
Spegnimento Pod	138
Promemoria sicurezza	139
Promemoria programma	139
10.3 Impostazioni di Basale e Basale Temporanea	139
Velocità basale massima	140
Basale Temporanea	140

10.1 Impostazioni generali

Avvertenza: NON iniziare a utilizzare il sistema o modificare le impostazioni senza aver prima ricevuto formazione e indicazioni appropriate da parte dell'operatore sanitario di riferimento. Un avvio e una regolazione delle impostazioni non corretti possono comportare un'erogazione eccessiva o insufficiente di insulina, con conseguente ipoglicemia o iperglicemia. Le impostazioni che influiscono principalmente sull'erogazione di insulina sono le seguenti: Spegnimento Pod, velocità basali, Velocità basale massima, Bolo massimo, Fattore/i di Correzione, Rapporto Insulina/Carboidrati (IC), Glicemia Minima per il Suggeritore di Bolo, Target Glicemico, Correggi se superiore a e Durata dell'azione dell'insulina.


Connettività di rete

La Modalità aereo è un'impostazione del dispositivo che disattiva la connettività di rete cellulare e Wi-Fi. Questa modalità può essere attivata e disattivata.

Nota: Sebbene il Sistema Omnipod 5 non richieda una connettività di rete costante, è necessaria una connettività frequente (cellulare o Wi-Fi) per un utilizzo ottimale del sistema, ad esempio se i dati sul glucosio vengono solitamente condivisi con un operatore sanitario. Per un utilizzo ottimale del sistema, considerare di riattivare il Wi-Fi dopo aver attivato la Modalità aereo.

Modalità aereo

Per attivare (ON) o disattivare (OFF) la Modalità aereo sul Controller:


1. Accedere a: pulsante Menu () > Impostazioni > Generale.
2. Toccare l'interruttore della Modalità aereo per attivare (ON) o disattivare (OFF) la Modalità aereo.

Display schermo

Utilizzare le impostazioni del display per controllare la luminosità e il timeout dello schermo.


Timeout schermo

Lo schermo del Controller diventa nero se non è stato utilizzato per il periodo di tempo specificato per preservare la carica della batteria. Per modificare la quantità di tempo:

1. Accedere a:
pulsante Menu () > Impostazioni > Generale > Timeout schermo.
2. Toccare l'intervallo di tempo desiderato per selezionarlo.
Consiglio: un timeout schermo più breve prolunga la carica della batteria.
3. Toccare SALVA.

Luminosità dello schermo

Per regolare la luminosità dello schermo sul Controller:

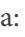
1. Accedere a: pulsante Menu () > Impostazioni > Generale > Luminosità.
2. Posizionare il dito sul punto blu del cursore. Far scorrere il dito verso destra per aumentare la luminosità dello schermo. Far scorrere il dito verso sinistra per diminuire la luminosità dello schermo.
Consiglio: una luminosità dello schermo più bassa prolunga la carica della batteria.

Blocco schermo

È possibile modificare il messaggio di blocco schermo, l'immagine di sfondo e il PIN del Controller, in modo tale da essere certi di utilizzare il Controller corretto.

Messaggio blocco schermo


Per modificare il messaggio del blocco schermo:

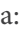1. Accedere a: pulsante Menu () > Impostazioni > Generale > Messaggio.
2. Toccare il campo Messaggio blocco schermo e immettere il messaggio che il Controller deve mostrare all'accensione.
3. Toccare SALVA.

10 Modifica delle impostazioni


Sfondo blocco schermo

Per modificare l'immagine di sfondo del blocco schermo:

1. Accedere a: pulsante Menu () > Impostazioni > Generale > Sfondo.
2. Toccare l'immagine di sfondo che si desidera utilizzare.
3. Toccare SALVA.

PIN

Per modificare il numero di identificazione personale o PIN:

1. Accedere a: pulsante Menu () > Impostazioni > Generale > PIN.
2. Immettere il PIN corrente.
3. Immettere il nuovo PIN a quattro cifre.

Consiglio: Toccare l'icona a forma di occhio per visualizzare o nascondere il PIN.

4. Toccare Fatto per accettare il PIN.
5. Immettere di nuovo il PIN, quindi toccare Fatto.

Nota: per modificare il PIN, è necessario disporre della connettività cellulare o Wi-Fi.

Nota: in caso di problemi con il PIN, contattare l'Assistenza clienti. Per le informazioni di contatto, fare riferimento alla scheda Assistenza clienti all'inizio del presente *Manuale d'uso tecnico*.

Cambio dell'ora

Attenzione: EVITARE di disattivare il Fuso orario automatico sul Controller. Se lo si disattiva, il Controller non sarà in grado di rilevare la non corrispondenza tra il fuso orario per il dispositivo e quello per l'erogazione di insulina. L'erogazione di insulina in base a un fuso orario diverso da quello locale potrebbe generare errori nell'erogazione di insulina e nella registrazione dei dati, con conseguente ipoglicemia o iperglicemia.

Il cambio dell'ora si verifica quando si viaggia in un'area geografica con un fuso orario diverso o per il passaggio all'ora legale. Per facilitare la gestione dei cambi dell'ora, il fuso orario del dispositivo è separato dal fuso orario per l'erogazione di insulina, come descritto nella tabella seguente.

App Omnipod 5 su:	Fuso orario dispositivo	Fuso orario per l'erogazione di insulina	Impostazione Fuso orario automatico: Attivato/ Disattivato
Controller	Ora mostrata sul Controller (barra di stato, blocco schermo)	Ora mostrata sull'App Omnipod 5, su cui si basa l'erogazione di insulina	Consigliata: ON (Attivato)

Fuso orario dispositivo

Il fuso orario del dispositivo è l'ora mostrata al di fuori dell'App Omnipod 5 sulla barra di stato e sul blocco schermo. L'ora del dispositivo si aggiorna automaticamente quando ci si sposta in un'area geografica con un fuso orario diverso o per il passaggio all'ora legale, se l'impostazione Fuso orario automatico è attivata (ON). Si consiglia di mantenere attiva l'impostazione Fuso orario automatico in modo che il fuso orario del dispositivo corrisponda sempre al fuso orario locale.

Per impostare il Fuso orario automatico su ON o OFF:

1. Accedere a: pulsante Menu (☰) > Impostazioni > Generale > Fuso orario.
2. Se si indossa un Pod attivo, toccare SOSPENDE INSULINA e toccare SÌ.
3. Toccare Fuso orario automatico dispositivo. Toccare CONTINUA.
4. Toccare l'interruttore per attivare (ON) o disattivare (OFF) il rilevamento del Fuso orario Automatico.

Consiglio: il colore viola indica che l'impostazione è attiva. Il grigio indica che l'impostazione è inattiva.

5. Quando il Fuso orario automatico del dispositivo è OFF, è possibile accedere al fuso orario del Controller.
6. Per modificare il fuso orario del Controller, toccare SELEZIONA FUSO ORARIO e selezionare il fuso orario desiderato dall'elenco.

Fuso orario per l'erogazione di insulina

Il fuso orario per l'erogazione di insulina è l'ora visualizzata sull'App Omnipod 5, che cambia solo se modificata manualmente. Questo è il fuso orario su cui si basa l'erogazione di insulina. Se l'impostazione Fuso orario automatico è attiva, l'App Omnipod 5 rileva quando il fuso orario del dispositivo e il fuso orario per l'erogazione di insulina non corrispondono e notifica l'utilizzatore. Ad esempio, quando si viaggia fuori dal Paese,

10 Modifica delle impostazioni

L'App Omnipod 5 chiede se si desidera aggiornare il fuso orario per l'erogazione di insulina al nuovo fuso orario locale.

È possibile modificare il fuso orario per l'erogazione di insulina, ad esempio in preparazione di un viaggio verso un'area geografica con un fuso orario diverso.

Per modificare il fuso orario per l'erogazione dell'insulina:

1. In Modalità Manuale, accedere a: pulsante Menu (☰) > Impostazioni > Generale > Fuso orario per l'erogazione di insulina.
2. Se si indossa un Pod attivo, toccare SOSPENDE INSULINA e toccare SÌ.
3. Selezionare il fuso orario desiderato e toccare SALVA, quindi toccare CONFERMA.
4. Toccare SÌ per riavviare l'erogazione di insulina.

Lingua

Per modificare la lingua preferita:

1. Accedere a: pulsante Menu (☰) > Impostazioni > Generale > Lingua.
2. Selezionare la lingua che si desidera utilizzare per l'App Omnipod 5.
3. Toccare SALVA.

Lo schermo lampeggia brevemente. L'app verrà riaperta nella lingua selezionata. La modifica della lingua NON ripristinerà le impostazioni, la cronologia o l'adattabilità.

Reimpostazione

Attenzione: NON reimpostare l'App Omnipod 5 prima di aver consultato l'operatore sanitario di riferimento. Questa operazione cancellerà tutte le impostazioni, la Velocità Basale Adattiva e la cronologia e richiederà la modifica del Pod attivo. Prima di procedere, verificare di disporre di una registrazione aggiornata delle impostazioni e di un nuovo Pod con i materiali di consumo da utilizzare al riavvio dell'app.

Se è necessario reimpostare l'App Omnipod 5 sul Controller, il che comporta il ripristino di tutte le impostazioni e della cronologia, eseguire i seguenti passaggi.

1. Accedere a: pulsante Menu (☰) > Impostazioni > Generale > Reimposta.
2. Se è presente un Pod attivo, disattivarlo e rimuoverlo.

Nota: anche se un Pod continuerà a erogare insulina dopo la reimpostazione dell'app, non sarà possibile ricollegarsi al Pod per erogare un bolo o disattivarlo successivamente. Lo rimuova e si prepari ad attivare un nuovo Pod.

3. Toccare Cancellare tutti i dati.
4. Toccare CONFERMA.
5. Dovrà ripetere la configurazione iniziale. Per la configurazione dell'App Omnipod 5, seguire le istruzioni riportate al Capitolo 4.

10.2 Impostazioni dei promemoria

Attenzione: EVITARE di impostare il Controller su Silenzioso, Vibrazione o qualsiasi altra impostazione impedisca di sentire allarmi e notifiche dell'App Omnipod 5. Se non si avvertono allarmi e notifiche dal Controller, si corre il rischio di non apportare tempestivamente le modifiche necessarie alla terapia insulinica. Il Pod continuerà a emettere segnali acustici e sarà possibile visualizzare l'allarme o la notifica sull'App Omnipod 5. Vedere "13.3 Suoni e vibrazioni" a pagina 163 per indicazioni su come gestire suoni e vibrazioni.

Le notifiche di promemoria attirano l'attenzione su varie azioni di gestione del diabete che si potrebbe dover intraprendere (vedere "13.11 Elenco notifiche di promemoria" a pagina 192 e "13.2 Schermata di allarmi e notifiche" a pagina 162).

Scadenza Pod

Il promemoria Scadenza Pod informa l'utilizzatore che si sta avvicinando la scadenza del Pod, in modo da consentire di pianificare la sostituzione del Pod nel momento più opportuno. È possibile impostare questa notifica in modo che venga visualizzata da 1 a 24 ore prima della scadenza del Pod. All'ora selezionata, il Pod emette un segnale acustico. L'App Omnipod 5 visualizza un messaggio e il Controller emette un segnale acustico/vibra.


Per impostare l'orario del promemoria Scadenza Pod:

1. Accedere a: pulsante Menu (☰) > Impostazioni > Promemoria > Scadenza Pod.
2. Toccare il campo Scadenza Pod e selezionare quanto tempo prima della scadenza del Pod si desidera che venga visualizzata la notifica.
3. Toccare SALVA.

Insulina nel Pod in esaurimento

Quando il livello di insulina nel Pod scende al di sotto dell'impostazione Insulina nel Pod in esaurimento, viene emesso un Allarme di Notifica dal Pod e dall'App Omnipod 5. Questa impostazione può essere compresa tra 10 e 50 unità.

Per impostare il livello di insulina per l'Allarme di Notifica Insulina nel Pod in esaurimento:


1. Accedere a: pulsante Menu () > Impostazioni > Promemoria > Insulina nel Pod in esaurimento.
2. Toccare il campo Insulina nel Pod in esaurimento e selezionare il livello di insulina del Pod in corrispondenza del quale si desidera che venga visualizzata la notifica.
3. Toccare SALVA.

Spegnimento Pod

Avvertenza: l'App Omnipod 5 va utilizzata entro 15 minuti dall'attivazione dell'Allarme di Notifica di Spegnimento Pod. Se non si risponde a questo allarme entro questo lasso di tempo, l'App Omnipod 5 e il Pod emettono un Allarme di Pericolo e il Pod interrompe l'erogazione di insulina, con conseguente iperglicemia.

Se la funzione Spegnimento Pod è attiva, il Pod si disattiva automaticamente se non si utilizza l'App Omnipod 5 entro il tempo definito. Consultare l'operatore sanitario di riferimento prima di modificare l'impostazione Spegnimento Pod.

Per abilitare o disabilitare Spegnimento Pod:

1. Accedere a: pulsante Menu () > Impostazioni > Promemoria > Spegnimento Pod.
2. Toccare l'interruttore di Spegnimento Pod per abilitare o disabilitare la funzione corrispondente.
3. Se la funzione Spegnimento Pod è abilitata, toccare il campo Timer inattività e selezionare la durata del conto alla rovescia. Questa impostazione può essere compresa tra 1 e 24 ore.

Esempio: se si impostano 10 ore, sarà necessario attivare il Pod almeno una volta ogni 10 ore, sia di giorno sia di notte, per impedire che venga emesso l'allarme di Spegnimento Pod.


4. Toccare SALVA.

Promemoria sicurezza

Quando i Promemoria sicurezza sono attivi, viene emesso un segnale acustico all'inizio e alla fine di ogni bolo, Bolo prolungato o Basale Temporanea:

- Il App Omnipod 5 emette un segnale acustico all'inizio.
- Il Pod emette un segnale acustico alla fine.


I Promemoria sicurezza sono particolarmente utili quando si sta acquisendo familiarità con il Sistema Omnipod 5 e si desidera ulteriore conferma che è stato eseguito un comando di erogazione dell'insulina. Per attivare (ON) o disattivare (OFF) i Promemoria sicurezza:

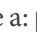1. Accedere a: pulsante Menu () > Impostazioni > Promemoria.
2. Toccare l'interruttore dei Promemoria sicurezza per attivare (ON) o disattivare (OFF) i promemoria sicurezza.

Nota: non è possibile disattivare (OFF) i segnali acustici che vengono emessi all'avvio di una Basale Temporanea impostata per l'erogazione di un quantitativo di insulina uguale a zero.

Promemoria programma

Quando i Promemoria programma sono attivi, ogni 60 minuti il Pod emette un segnale acustico mentre è in corso l'erogazione di una Basale Temporanea o di un Bolo prolungato. Per attivare (ON) o disattivare (OFF) i Promemoria programma:

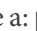1. Accedere a: pulsante Menu () > Impostazioni > Promemoria.
2. Scorrere verso il basso e toccare l'interruttore dei Promemoria programma per attivare (ON) o disattivare (OFF) i promemoria programma.

Nota: non è possibile disattivare (OFF) i segnali acustici che vengono emessi durante una Basale Temporanea impostata per l'erogazione di un quantitativo di insulina uguale a zero.

10.3 Impostazioni di Basale e Basale Temporanea


Le sezioni seguenti descrivono come modificare le impostazioni che controllano l'erogazione di insulina basale.

Nota: queste impostazioni si applicano solo quando si utilizza la Modalità Manuale.

Velocità basale massima

La Velocità basale massima definisce il limite superiore per qualsiasi velocità basale utilizzata nei Programmi Basale e si applica sia ai Programmi Basale sia alle Basali Temporanee. Rivolgersi all'operatore sanitario di riferimento prima di modificare questa impostazione.


Per modificare la Velocità basale massima:

1. Accedere a: pulsante Menu () > Impostazioni > Basale e Basale Temporanea > Velocità basale massima.
2. Toccare il campo Velocità basale massima e immettere il nuovo valore per la Velocità basale massima.
3. Toccare SALVA.

Nota: Non è possibile impostare una Velocità basale massima inferiore alla velocità basale più elevata utilizzata in un Programma Basale esistente, o nella Basale Temporanea attualmente in esecuzione.

Basale Temporanea

Per attivare (ON) o disattivare (OFF) la possibilità di impostare le Basali Temporanee:

1. Accedere a: pulsante Menu () > Impostazioni > Basale e Basale Temporanea.
2. Per abilitare o disabilitare la possibilità di impostare velocità basali temporanee (basali temporanee), toccare l'interruttore (ON o OFF).
3. Per passare da Basali Temporanee con percentuali (%) a Basali Temporanee a velocità fissa (U/h) e viceversa:
 - a. Toccare Basale Temporanea.
 - b. Selezionare il metodo desiderato per l'impostazione di una Basale Temporanea:
 - Toccare Percentuale (%) per modificare il Programma Basale in corso aumentando o diminuendo la percentuale.
 - Toccare Velocità fissa (U/h) per sostituire il Programma Basale in corso con una velocità basale fissa per la durata specificata.
 - c. Toccare SALVA.

CAPITOLO 11

Visualizzazione di cronologia e registri

Sommario

11.1 Informazioni sulla cronologia recente e sui registri precedenti	142
11.2 Visualizzazione del Grafico sensore	142
11.3 Stati del Grafico sensore	143
11.4 Panoramica delle informazioni sulla cronologia	145
Sezione Sommario cronologia	146
11.5 Calcoli per i sommari della cronologia	148
Sommari del glucosio	148
Riepiloghi dell'erogazione di insulina	148
11.6 Sezione Dettagli Cronologia	149
Dettagli sul glucosio	150
Obiettivo glicemico	150
Dettagli sul bolo	151
Bolo immediato e Bolo prolungato	151
Eventi del Bolo prolungato	151
Quando il Pod non conferma l'erogazione del bolo	152
Dettagli relativi al Pod	152
Dettagli relativi ai carboidrati	152
Dettagli relativi alla velocità basale	153
Funzione Attività fisica	153
Programmi Basale	153
Basali Temporanee	153
Velocità basale a mezzanotte	153
Dettagli relativi all'insulina sospesa e avviata	153
Dettagli relativi alla modifica dell'ora	154
Eventi automatizzati (Eventi automatici)	154

11 Visualizzazione di cronologia e registri

11.1 Informazioni sulla cronologia recente e sui registri precedenti

Il App Omnipod 5 può contenere oltre 90 giorni di registri cronologici. Una volta che la memoria è piena, i nuovi registri vanno a sostituire quelli più datati. È possibile visualizzare, ma non modificare, le informazioni presenti nei registri.

I registri vengono visualizzati nelle seguenti schermate:

- Grafico sensore (recente)
- Schermate Dettagli Cronologia, che mostrano gli eventi relativi a insulina, glucosio, carboidrati, Pod ed Eventi automatici.
- La cronologia degli allarmi e delle notifiche può essere visualizzata nella schermata Notifica.

11.2 Visualizzazione del Grafico sensore

Il Grafico sensore può essere visualizzato dalla schermata Home sia in Modalità Manuale che in Modalità Automatizzata.

Per visualizzare il Grafico sensore:

- Nella parte inferiore destra della schermata Home, toccare VISUALIZZA.


Per uscire dal Grafico sensore:

- Toccare la (X) nell'angolo in alto a destra del grafico.



11.3 Stati del Grafico sensore

Quando il Sistema Omnipod 5 è in Modalità Manuale, l'indicatore della modalità è blu

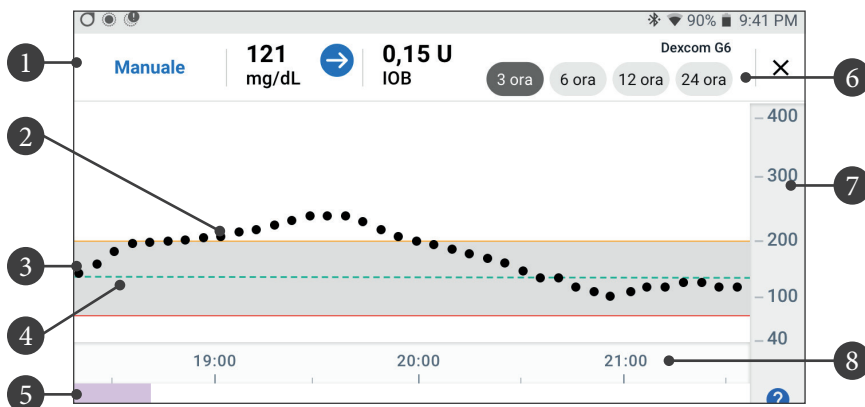

Il grafico mostra i valori glicemici del sensore più recenti delle ultime 3, 6, 12 e 24 ore.


Nota: toccando il simbolo ? nell'angolo in basso a destra viene visualizzata una Legenda dei simboli utilizzati nel Grafico sensore.

1. **Stato corrente:** vengono visualizzati il valore glicemico del sensore e la freccia della tendenza glicemica, insieme all'attuale IOB
2. **Linea della tendenza glicemica del sensore:** ogni punto sul grafico rappresenta un valore glicemico del sensore. I valori rappresentati sono compresi tra 2,2 e 22,2 mmol/L (tra 40 e 400 mg/dL).
3. **Obiettivo glicemico:** quest'area ombreggiata indica l'Obiettivo glicemico. La linea gialla mostra il limite superiore, mentre la linea rossa mostra il limite inferiore definito in Impostazioni.
4. **Target Glicemico:** la linea verde tratteggiata indica il Target Glicemico definito in Impostazioni. Quando la Funzione Attività fisica è abilitata, questo valore passa a 8,3 mmol/L (150 mg/dL).
5. **Area eventi:** la riga sotto il grafico mostra:
 - Sfondo viola per i periodi di tempo in cui Omnipod 5 è in Modalità Automatizzata.
 - Sfondo vuoto (bianco) per i periodi di tempo in cui Omnipod 5 è in Modalità Manuale, in cui non è presente nessun Pod attivo o in assenza di comunicazione con il Pod.
 - Sfondo grigio scuro per i periodi di tempo in cui Omnipod 5 eroga insulina nella Modalità Automatizzata: Stato Limitato.


11 Visualizzazione di cronologia e registri

- Una linea rossa per i periodi di tempo in cui la tecnologia SmartAdjust sospende l'insulina.
 - Una linea arancione per i periodi di tempo in cui viene erogata la quantità massima di insulina basale dal sistema Omnipod 5.
 - Pulsante Bolo per il momento in cui viene avviato un bolo.
6. **Selezione della vista:** utilizzare i pulsanti per selezionare le viste a 3, 6, 12 e 24 ore.
 7. **Asse verticale:** consente di visualizzare i valori glicemici del sensore.
 8. **Scala temporale:** consente di visualizzare i contrassegni relativi a ore e mezz'ora.

Quando il Sistema Omnipod 5 è in Modalità Automatizzata, l'indicatore della modalità è viola.

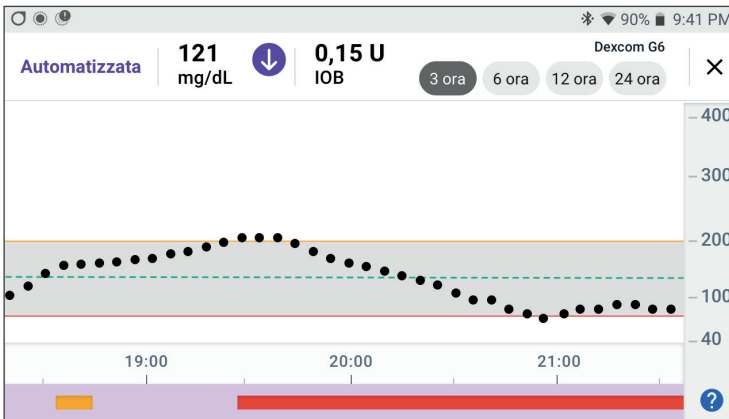

Quando il Sistema Omnipod 5 è in stato Modalità Automatizzata: Stato Limitato, l'indicatore della modalità è grigio.

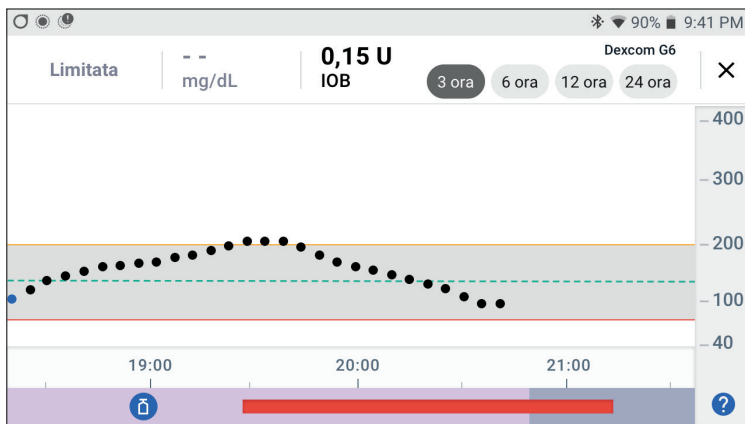

11.4 Panoramica delle informazioni sulla cronologia

È possibile accedere al sommario della cronologia e alle informazioni dettagliate e a un elenco di eventi automatici dalla schermata Dettagli Cronologia.

- Accedere a: pulsante Menu (☰) > Dettagli Cronologia.

Data →

Sezione del Sommario →
-Toccare EVENTI AUTOMATICI per visualizzare i dettagli degli eventi automatizzati

Sommario del glucosio →

Sommario di insulina e carboidrati →

Sezione dei dettagli →
- Scorrere per una vista estesa dei dettagli

← Cronologia
🌐

← Oggi, 28 novembre

SOMMARIO
EVENTI AUTOMATICI

Sensore

125
mg/dL
Media del Sensore

74%
Sensore nell'intervallo
Da 70 a 180 mg/dL

24%
Sensore sopra

2%
Sensore sotto

Insulina e carboidrati

28.9
U
Insulina totale

45%
12.9 U
Insulina basale

55%
16 U
Insulina bolo

134
g
Carboidrati totali

Glucosio
mg/dL

Bolo
U

Carboidrati
g

14:55

55

⌵

I registri cronologici del giorno corrente vengono visualizzati sotto i cerchi del sommario, partendo dai registri più recenti in alto.

11 Visualizzazione di cronologia e registri

Nota: toccare “<” accanto alla freccia della data per visualizzare un giorno precedente.

Sezione Sommario cronologia

La parte superiore della schermata Cronologia riassume i registri relativi alla giornata.





Elemento del sommario	Descrizione
Riga 1 - Sensore	
Media del Sensore	Media dei valori glicemici del sensore relativi alla giornata.
Sensore nell'intervallo	Percentuale dei valori glicemici del sensore che rientrano nell'Obiettivo glicemico.
Sensore sopra	Percentuale dei valori glicemici del sensore al di sopra dell'Obiettivo glicemico.
Sensore sotto	Percentuale dei valori glicemici del sensore al di sotto dell'Obiettivo glicemico.
Riga 2 - Insulina e carboidrati	
Insulina totale	Insulina totale (basale + bolo) erogata relativa alla giornata.
Insulina basale	Percentuale dell'insulina totale erogata come basale insieme al numero di unità di insulina basale erogate. L'insulina basale include l'erogazione basata sul Programma Basale in Modalità Manuale e qualsiasi erogazione automatizzata ricevuta in Modalità Automatizzata.
Insulina bolo	Percentuale dell'insulina totale erogata mediante uno o più boli insieme al numero di unità di boli di insulina erogate.
Carboidrati totali	Somma dei carboidrati in pasto (in grammi) utilizzati nei calcoli per l'erogazione dei boli per il giorno specificato.

Nota: a causa degli arrotondamenti, la somma delle percentuali potrebbe non essere 100.

Per il sommario di questi calcoli, vedere pagina 148.

Quando l'erogazione di insulina non è confermata

Dopo l'erogazione di un bolo o di una dose basale di insulina, al completamento il Pod invia una conferma al App Omnipod 5. Se l'erogazione di un bolo, di insulina basale o totale non è stata confermata, verranno visualizzate le seguenti icone:

	<p>La quantità di bolo di insulina per la giornata viene visualizzata come trattini (- -) insieme a un punto esclamativo grigio (!) se sono previste erogazioni di bolo stimate. Il valore visualizzato in grigio può essere costituito da importi confermati e programmati.</p>
	<p>La quantità di bolo di insulina per la giornata viene visualizzata come trattini (- -) insieme a un punto esclamativo giallo (!) quando il Pod è stato scartato prima di poter confermare l'erogazione di insulina.</p>
	<p>Le quantità di insulina basale per la giornata vengono visualizzate come trattini (- -) insieme a un punto esclamativo grigio (!) se sono presenti erogazioni di insulina non confermate, che si tratta di boli o di basale.</p>
	<p>Le quantità di insulina basale per la giornata vengono visualizzate come trattini (- -) insieme a un punto esclamativo giallo (!) quando il Pod è stato scartato e risultano registri di erogazione dell'insulina persa.</p>

11 Visualizzazione di cronologia e registri

11.5 Calcoli per i sommari della cronologia

Questa sezione elenca i calcoli per i dati del sommario visualizzati nelle schermate della cronologia.

Sommari del glucosio

I calcoli utilizzati per i riepiloghi del glucosio includono i valori glicemici del sensore (compresi i valori ALTO e BASSO) ed escludono le letture inserite manualmente.

Elemento	Calcolo
Riga 1	
Media del Sensore	$= \frac{\text{Somma di tutti i valori glicemici del sensore}}{\text{Numero totale di valori glicemici del sensore}}$ <p>Nota: i valori glicemici del sensore di tipo ALTO sono inclusi come 22,2, mentre i valori glicemici del sensore di tipo BASSO come 2,1.</p>
Sensore nell'inter-vallo	$= \frac{\text{Q.tà dei valori glicemici del sensore che rientrano nell'Obiettivo glicemico}}{\text{Numero totale di valori glicemici del sensore}} \times 100$
Sensore sopra	$= \frac{\text{Q.tà dei valori glicemici del sensore al di sopra del limite superiore dell'Obiettivo glicemico}}{\text{Numero totale di valori glicemici del sensore}} \times 100$
Sensore sotto	$= \frac{\text{Q.tà dei valori glicemici del sensore al di sotto del limite inferiore dell'Obiettivo glicemico}}{\text{Numero totale di valori glicemici del sensore}} \times 100$

Riepiloghi dell'erogazione di insulina

I calcoli dei boli di insulina includono:

- boli del Suggestore SmartBolus
- boli manuali
- qualsiasi quantità di bolo parziale erogata da boli immediati o prolungati che sono stati annullati e che il Pod può confermare

I calcoli dell'insulina basale includono:

- regolazioni della basale con la tecnologia SmartAdjust (Modalità Automatizzata)

- Programmi Basale (Modalità Manuale)
- eventuali regolazioni per Basali Temporanee, periodi di sospensione o ore senza Pod attivo

Quando il Sistema Omnipod 5 non riceve aggiornamenti dal Pod circa l'erogazione di insulina confermata, i calcoli relativi all'erogazione di insulina sono stime basate sull'erogazione programmata di insulina.

Elemento del sommario	Calcolo
Riga 2	
Insulina totale	= Somma di insulina basale e boli di insulina erogati
Insulina basale	= Quantità di insulina basale erogata in Modalità Manuale e tutte le erogazioni automatizzate di insulina in Modalità Automatizzata
Insulina bolo	= Quantità di bolo di insulina erogata
Carboidrati totali	= Grammi totali di carboidrati immessi nel Suggeritore SmartBolus

11.6 Sezione Dettagli Cronologia

Scorrere le schermate della cronologia per vedere la sezione dei dettagli. La sezione dei dettagli della schermata Cronologia mostra i singoli registri elencati in base all'ora del giorno.




Toccare una riga con una freccia giù per visualizzare più dettagli. Toccarla di nuovo per nascondere i dettagli.

← Cronologia			
← Oggi, 14 dicembre			
SOMMARIO		EVENTI AUTOMATICI	
Glucosio mg/dL	Bolo U	Carboidrati g	
21:07	167	4,15	35
20:45	Funzione Attività fisica avviata: Imposta durata: 2 ore		
20:34	Passato alla Modalità Automatizzata		
20:18	Programma Basale avviato: "Basale 1"		
20:18	Pod attivato		
20:17	Pod disattivato		
20:16	Programma Basale avviato: "Basale 1"		
20:16	Passato alla Modalità Manuale		

Dettagli sul glucosio

L'icona visualizzata con una lettura della glicemia indica se il valore del glucosio rientrava nell'intervallo.

Le icone della glicemia sono:

	Immissione valore glicemico
Sopra l'Obiettivo glicemico	
Entro l'Obiettivo glicemico	
Sotto l'Obiettivo glicemico	

L'icona Dexcom G6 è: 


L'icona FreeStyle Libre 2 Plus è: 

Obiettivo glicemico

L'obiettivo di utilizzare il Sistema Omnipod 5 è mantenere il livello di glucosio entro l'Obiettivo glicemico. È possibile definire questo obiettivo impostandone il limite superiore e il limite inferiore. Il Grafico sensore e la schermata Immetti glicemia utilizzano l'Obiettivo glicemico per determinare quali letture glicemiche rientrano nell'Obiettivo glicemico e quali invece sono al di sotto o al di sopra di tale soglia.



Nota: l'Obiettivo glicemico non influisce sull'erogazione di insulina.

Per impostare il limite superiore e il limite inferiore dell'Obiettivo glicemico:

1. Accedere a: pulsante Menu () > Impostazioni > Obiettivo glicemico.
2. Impostare i limiti dell'Obiettivo glicemico:
 - a. Toccare il campo Limite superiore e immettere il valore desiderato.
 - b. Toccare il campo Limite inferiore e immettere il valore desiderato.
3. Toccare SALVA.

Dettagli sul bolo

L'icona visualizzata con un valore del bolo indica se è stato utilizzato il Suggeritore SmartBolus:

- L'icona a forma di flacone di insulina () indica che il Suggeritore SmartBolus è stato utilizzato.
- L'icona della siringa () indica che è stato erogato un bolo manuale.

Bolo immediato e Bolo prolungato

La quantità di bolo indicata accanto al pulsante Bolo è il totale di un bolo immediato e dell'eventuale porzione prolungata del bolo. Se si annulla un bolo immediato o un Bolo prolungato, la quantità indicata è la quantità erogata confermata prima dell'annullamento.

Toccano una riga con un valore del bolo, si espande il registro contenente i dettagli aggiuntivi sul bolo, incluso:

- Se il bolo è stato calcolato dal Suggeritore SmartBolus o se si trattava di un bolo manuale.
- Il pulsante VISUALIZZA CALCOLI BOLO, se è stato utilizzato il Suggeritore SmartBolus. Se si tocca questo pulsante, viene visualizzata una schermata indicante i dettagli dei calcoli e se il bolo calcolato è stato regolato manualmente.
Potrebbe essere necessario scorrere verso l'alto o verso il basso per vedere tutti i calcoli. Al termine, toccare CHIUDI (vedere "18.1 Il Suggeritore SmartBolus" a pagina 254 per i dettagli).
- La quantità originariamente programmata per l'erogazione in caso di annullamento di un bolo immediato.
- Per un Bolo prolungato, la quantità erogata ora e prolungata e la percentuale (%) del bolo pasto erogato ora e prolungato.
- In caso di un bolo attivo, non confermato o perso, la quantità di bolo che è stata confermata.

Eventi del Bolo prolungato

 Il pulsante Bolo e il relativo banner indicano un evento di Bolo prolungato:

- Il banner Bolo prolungato avviato indica l'ora in cui il bolo immediato termina e inizia il Bolo prolungato. Oltre all'ora di inizio del bolo, il banner indica il numero delle unità prolungate e la durata del prolungamento.
- Il banner Bolo prolungato completato indica la fine del Bolo prolungato.

11 Visualizzazione di cronologia e registri

- Il banner Bolo prolungato annullato indica l'annullamento di un Bolo prolungato e la quantità di bolo confermata che è stata erogata prima dell'annullamento.

Quando il Pod non conferma l'erogazione del bolo

Una volta confermata la quantità di bolo da erogare, viene inviata al Pod un'istruzione relativa al bolo. Una volta completata l'erogazione, il Pod invia al App Omnipod 5 la conferma dell'erogazione del bolo.



Prima che il App Omnipod 5 riceva dal Pod la conferma dell'erogazione del bolo, il App Omnipod 5 stima la quantità erogata. Durante questo periodo, le schermate della cronologia utilizzano un'icona con un punto esclamativo grigio per indicare che il bolo è stimato.



Nella maggior parte dei casi, una volta che il Controller e il Pod sono di nuovo a distanza di comunicazione, il Pod conferma l'erogazione del bolo. Tuttavia, in rari casi, il Pod non è in grado di confermare l'erogazione del bolo a causa di un errore di comunicazione. Se si tocca l'opzione SCARTA POD in questa situazione, le schermate della cronologia utilizzano un'icona con un punto esclamativo giallo per contrassegnare il bolo come "non confermato".

Se un Pod viene scartato con un bolo non confermato, anche le quantità di insulina basale e insulina totale per quel giorno vengono contrassegnate come non confermate con due trattini e un'icona con un punto esclamativo giallo. La quantità di bolo indicata include la quantità programmata per l'erogazione fino al momento in cui il Pod è stato scartato.


Nota: in caso di bolo non confermato, il Suggestore SmartBolus viene disattivato per tutta la durata dell'azione dell'insulina.

Dettagli relativi al Pod



L'icona di un Pod e il relativo banner indicano l'attivazione e la disattivazione (o lo smaltimento) di ciascun Pod. Se si tocca il banner di un Pod, vengono visualizzati il numero di lotto e il numero di sequenza del Pod.

Dettagli relativi ai carboidrati

L'icona dei carboidrati () viene visualizzata accanto ai valori dei carboidrati utilizzati dal Suggestore SmartBolus.

Dettagli relativi alla velocità basale

Funzione Attività fisica



In Modalità Automatizzata, l'icona Attività fisica e il relativo banner indicano l'inizio, la fine o l'annullamento della Funzione Attività fisica.

Programmi Basale



L'icona Programmi Basale e il relativo banner indicano l'inizio di un Programma Basale e il riavvio di un Programma Basale alla fine di un periodo di sospensione dell'insulina o della Basale Temporanea.

Basali Temporanee



In Modalità Manuale, l'icona Basale Temporanea e il relativo banner indicano l'inizio, la fine o l'annullamento di una Basale Temporanea.

Se una Basale Temporanea è stata definita come percentuale (%) del Programma Basale in corso, il banner visualizza l'aumento o la riduzione percentuale e la durata. Se una Basale Temporanea è stata definita in termini di unità orarie (U/h), il banner visualizza la velocità Basale Temporanea e la durata.

Se si tocca il banner Basale Temporanea avviata, viene visualizzato un grafico delle velocità basali associate a ogni segmento temporale.

Se una Basale Temporanea è stata annullata, il banner Basale Temporanea avviata contiene la durata programmata e il banner Basale Temporanea annullata contiene la durata effettiva.

Velocità basale a mezzanotte

La prima voce per ogni giorno è un banner che mostra lo stato dell'erogazione di insulina basale a mezzanotte. Se un Programma Basale, una Basale Temporanea o l'utilizzo della Funzione Attività fisica continuano dal giorno precedente, il banner indica che si tratta della continuazione di un programma. In caso di sospensione dell'insulina a mezzanotte, questa viene indicata dal banner.

Dettagli relativi all'insulina sospesa e avviata



11 Visualizzazione di cronologia e registri

L'icona Erogazione di insulina sospesa e il relativo banner indicano l'ora di inizio di un periodo di sospensione dell'insulina.



L'icona Erogazione di insulina avviata e il relativo banner indicano l'ora di riavvio dell'erogazione di insulina.

Dettagli relativi alla modifica dell'ora

Il banner del fuso orario modificato viene visualizzato se si modifica il fuso orario per l'erogazione di insulina.

Dopo la modifica del fuso orario, le nuove voci della cronologia rifletteranno il nuovo fuso orario.

Nota: le voci della cronologia registrate prima della modifica del fuso orario verranno visualizzate nel fuso orario precedente.

Eventi automatizzati (Eventi automatici)

Toccare EVENTI AUTOMATICI nella schermata della cronologia per visualizzare la quantità di insulina erogata in ciascun periodo di 5 minuti in Modalità Automatizzata.

L'icona e il banner della modalità di sistema mostrano l'ora in cui il sistema è passato alla Modalità Automatizzata o alla Modalità Manuale.

Questa scheda mostra tutta l'insulina automatizzata, sia la Velocità Basale Adattiva di riferimento sia eventuali aggiustamenti verso l'alto o verso il basso dovuti al valore glicemico e alla tendenza glicemica del sensore nonché alla previsione a 60 minuti.

Nota: il valore glicemico del sensore indica la quantità di insulina che il sistema erogherà nei successivi 5 minuti. Ad esempio, se il valore glicemico del sensore alle 11:00 scende a 3,2 mmol/L (58 mg/dL), la tecnologia SmartAdjust non erogherà alcun microbolo alle 11:05. La scheda Eventi automatici indicherà 0 U alle 11:05.

20:16

← Cronologia

Oggi, 14 dicembre

SOMMARIO EVENTI AUTOMATICI

	Sensore mg/dL	Quantità insulina U
20:16		Passato alla Modalità Manuale
20:15	135	0,05
20:10	137	0,05
20:05	133	0
20:00	123	0
19:55	115	0,1
19:50	111	0,15
19:45	100	0,1
19:40	95	0,05
19:35	91	0,05
19:30		Passato alla Modalità Automatizzata

CAPITOLO 12

Gestione degli aggiornamenti software

Sommario

12.1 Controller fornito da Insulet	156
Aggiornamento del sistema operativo (SO).....	157
Aggiornamento dell'App Omnipod 5	158

12.1 Controller fornito da Insulet

Quando è connesso a una rete, il Controller Omnipod 5 offre aggiornamenti over-the-air quando è disponibile un aggiornamento software. Esistono due tipi di aggiornamenti per il Controller Omnipod 5: aggiornamenti del sistema operativo (SO) e aggiornamenti dell'App Omnipod 5. L'aggiornamento del sistema operativo si riferisce all'aggiornamento del sistema operativo del Controller. L'aggiornamento dell'App Omnipod 5 si riferisce all'aggiornamento dell'App Omnipod 5 sul Controller. Quando è disponibile un aggiornamento, si riceve una notifica che ne richiede l'implementazione.

Nota: non è possibile navigare nell'App Omnipod 5 durante un aggiornamento di Omnipod 5; tuttavia, la terapia insulinica non è interessata. Il Pod continua a erogare insulina e ristabilisce la connessione con l'App Omnipod 5 una volta completato l'aggiornamento.

Nota: il Controller deve essere connesso a una rete per ricevere aggiornamenti over-the-air. Se si attiva la Modalità aereo, si potrebbero perdere importanti aggiornamenti.

Nota: tutti gli aggiornamenti sul Controller considerati opzionali richiedono una connessione Wi-Fi.

Nota: se è in corso un bolo immediato, gli aggiornamenti del software saranno ritardati fino al completamento del bolo.

Attenzione: prima di installare un aggiornamento del software, verificare SEMPRE che la batteria sia sufficientemente carica.

Attenzione: connettere il Controller ESCLUSIVAMENTE a reti Wi-Fi attendibili, non pubbliche, come ad esempio quelle presenti negli aeroporti, nei bar, ecc., in quanto non sicure e possono esporre il Controller a malware. NON connettersi a reti Wi-Fi pubbliche durante la configurazione iniziale del Sistema Omnipod 5.

Aggiornamento del sistema operativo (SO)

Gli aggiornamenti del sistema operativo possono essere “opzionali” o “obbligatori”. Gli aggiornamenti obbligatori richiedono l’implementazione dell’aggiornamento immediatamente prima di poter utilizzare l’App Omnipod 5. Gli aggiornamenti opzionali possono essere rimandati a un momento successivo.

Per scaricare e installare un aggiornamento del sistema operativo sul Controller:

1. Assicurarsi che il Controller sia in carica o che la batteria sia carica oltre il 40%.

Nota: se il Controller è in carica, la batteria deve essere oltre il 20%.

2. Toccare **Aggiorna ora**.

Il Controller Omnipod 5 inizia l’aggiornamento.

Una volta completato l’aggiornamento, verrà visualizzata una schermata di conferma.

Se l’aggiornamento non è considerato obbligatorio, è possibile selezionare **Non ora** per posticipare l’aggiornamento a un secondo momento; tuttavia, si consiglia di aggiornare il sistema operativo non appena l’aggiornamento risulta disponibile. Se si sceglie di posticipare un aggiornamento opzionale, è possibile implementarlo manualmente in qualsiasi momento. Trascorse 72 ore, si riceverà una notifica di promemoria dell’aggiornamento ogni 24 ore. Per aggiornare manualmente il sistema operativo del Controller:

1. Assicurarsi che il Controller sia in carica o che la batteria sia carica oltre il 40%.

Nota: se il Controller è in carica, la batteria deve essere oltre il 20%.

2. Andare alla schermata Home.
3. Toccare l’icona della campana di notifica.
4. Toccare la notifica di aggiornamento.
5. Toccare **Aggiorna ora**.

Una volta completato l’aggiornamento, viene visualizzata una schermata di conferma che informa che l’aggiornamento è stato completato correttamente.

Aggiornamento dell'App Omnipod 5

App Omnipod 5 Gli aggiornamenti possono essere “opzionali” o “obbligatori”. Gli aggiornamenti obbligatori richiedono l'implementazione dell'aggiornamento immediatamente prima di procedere all'utilizzo del Controller. Gli aggiornamenti opzionali possono essere rimandati a un momento successivo.

Per scaricare e installare un aggiornamento dell'App Omnipod 5 sul Controller:

1. Assicurarsi che la batteria sia carica oltre il 15%.
2. Selezionare **Aggiorna ora**.

Una volta completato l'aggiornamento, viene visualizzata una schermata di conferma che informa che l'aggiornamento è stato completato correttamente.

Se l'aggiornamento non è considerato obbligatorio, è possibile selezionare **Non ora** per posticipare l'aggiornamento a un secondo momento; tuttavia, si consiglia di aggiornare l'App Omnipod 5 non appena l'aggiornamento risulta disponibile. Se si sceglie di posticipare un aggiornamento opzionale a un secondo momento, è possibile implementarlo manualmente nell'App Omnipod 5 in qualsiasi momento. Trascorse 72 ore, si riceverà una notifica di promemoria dell'aggiornamento dell'App Omnipod 5 ogni 24 ore.

Per aggiornare manualmente l'App Omnipod 5:

1. Assicurarsi che la batteria sia carica oltre il 15%.
2. Andare alla schermata Home.
3. Toccare l'icona della campana di notifica.
4. Toccare la notifica di aggiornamento.
5. Toccare **Aggiorna ora**.

Una volta completato l'aggiornamento, viene visualizzata una schermata di conferma che informa che l'aggiornamento è stato completato correttamente.





CAPITOLO 13

Allarmi, azioni e notifiche di promemoria

Sommario

13.1 Tipi di allarmi e notifiche.....	161
13.2 Schermata di allarmi e notifiche.....	162
13.3 Suoni e vibrazioni	163
13.4 Suoni e vibrazioni informativi	164
Promemoria sicurezza	165
Promemoria programma.....	165
Modifiche al Programma Basale.....	165
Annullamento di Basali Temporanee e boli	166
13.5 Risposta agli allarmi.....	166
Diagnostica	167
13.6 Elenco degli Allarmi di Pericolo.....	168
▲ Rilevata ostruzione	169
▲ Errore dell'App Omnipod 5.....	170
▲ Memoria Omnipod 5 danneggiata	171
▲ Errore del Pod.....	172
▲ Pod scaduto	173
▲ Insulina nel Pod terminata	174
▲ Spegnimento Pod	175
▲ Errore di sistema.....	176
13.7 Elenco degli Allarmi di Notifica	177
⚠ Insulina nel Pod in esaurimento.....	177
⚠ Pod scaduto	178
⚠ Spegnimento Pod	179
⚠ Avvia insulina.....	180
⚠ Ipoglicemia urgente.....	181
13.8 Elenco delle notifiche Elemento di Azione.....	182
🚫 App bloccata	182
🌐 Connetti a rete Wi-Fi.....	183
🕒 Aggiornamento ora legale.....	184
🚫 Errore Omnipod 5	185

13 Allarmi, azioni e notifiche di promemoria

 Aggiornamento di Omnipod 5 - App non più supportata	186
 Aggiornamento di Omnipod 5 - Aggiornamento del software	187
 Aggiorna SO	188
 Aggiorna fuso orario	189
13.9 Silenziamento degli allarmi non risolti	190
Allarme del Pod	190
Allarme del Controller	190
13.10 Risposta alle notifiche di promemoria	191
13.11 Elenco notifiche di promemoria	192



13.1 Tipi di allarmi e notifiche

Avvertenza: contattare l'Assistenza clienti OGNI VOLTA che il Controller del Sistema Omnipod 5 si danneggia e non funziona correttamente. Se è necessario sostituire il Controller, consultare SEMPRE l'operatore sanitario di riferimento per ricevere istruzioni sull'utilizzo di altri metodi di erogazione di insulina alternativi, come ad esempio le iniezioni. Provvedere a misurare spesso la glicemia.

Attenzione: EVITARE di impostare il Controller su Silenzioso, Vibrazione o qualsiasi altra impostazione impedisca di sentire allarmi e notifiche dell'App Omnipod 5. Se non si avvertono allarmi e notifiche dal Controller, si corre il rischio di non apportare tempestivamente le modifiche necessarie alla terapia insulinica. Il Pod continuerà a emettere segnali acustici e sarà possibile visualizzare l'allarme o la notifica sull'App Omnipod 5. Vedere "13.3 Suoni e vibrazioni" a pagina 163 per indicazioni su come gestire suoni e vibrazioni.


Il Sistema Omnipod 5 genera i seguenti tipi di allarmi e notifiche:

- **Allarmi:**

-  **Allarmi di Pericolo:** sono allarmi ad alta priorità che indicano la presenza di un problema serio e, di conseguenza, che potrebbe essere necessario rimuovere il Pod. Gli Allarmi di Pericolo si ripetono ogni 15 minuti fino a quando non vengono confermati. L'allarme acustico sul Pod continua fino a quando non viene confermato nell'App Omnipod 5. Vedere "13.6 Elenco degli Allarmi di Pericolo" a pagina 168.
- In generale, può verificarsi un solo Allarme di Pericolo alla volta. Nell'improbabile eventualità che si verificano contemporaneamente un Allarmi di Pericolo sul Pod e uno sull'App Omnipod 5, l'Allarme di Pericolo più recente verrà visualizzato per primo sull'App Omnipod 5. Tutti gli Allarmi di Pericolo del Pod vengono emessi sul Pod.
-  **Segnali di Notifica:** sono allarmi a bassa priorità che segnalano una situazione che richiede l'attenzione dell'utilizzatore. I Segnali di Notifica si ripetono ogni 15 minuti fino a quando non vengono confermati (vedere le tabelle sugli allarmi per ulteriori dettagli) e continuano sul Pod fino a quando non vengono confermati nell'App Omnipod 5. Vedere "13.7 Elenco degli Allarmi di Notifica" a pagina 177.

13 Allarmi, azioni e notifiche di promemoria

• Notifiche:

- **Notifiche Elemento di Azione:** sono relative alle attività tecniche del sistema che richiedono l'attenzione dell'utilizzatore. Vedere pagina 162.
-  **Notifiche di promemoria:** sono promemoria di azioni di gestione del diabete che l'utilizzatore potrebbe dover svolgere. Vedere "13.11 Elenco notifiche di promemoria" a pagina 192.
- **Errore di comunicazione:** si tratta di messaggi visualizzati sul display quando il App Omnipod 5 non è in grado di comunicare con il Pod. Vedere "26.5 Problemi di comunicazione del Pod – "Riprova"" a pagina 398.

Per istruzioni su come visualizzare la cronologia degli allarmi e delle notifiche, vedere pagina 162.

Per informazioni sugli allarmi Dexcom G6, consultare le *Istruzioni per l'uso del sistema CGM Dexcom G6*.

Per informazioni sugli allarmi del Sensore FreeStyle Libre 2 Plus, vedere "20.5 Messaggi di comunicazione e problemi del Sensore FreeStyle Libre 2 Plus" a pagina 306.

13.2 Schermata di allarmi e notifiche

Per rivedere gli allarmi e le notifiche precedenti:

1. Toccare il pulsante Menu (☰) > Notifiche.

I messaggi del giorno corrente vengono visualizzati per primi, con quelli più recenti nella parte superiore della schermata e quelli meno recenti nella parte inferiore della schermata.

2. Per visualizzare uno specifico intervallo di date, toccare FILTRA PER DATA.
 - a. Toccare la data di inizio nel calendario.

Nota: toccare la freccia "<" per visualizzare un mese precedente.



- b. Toccare FINE nella parte superiore dello schermo.
 - c. Toccare la data di fine per l'intervallo di tempo.
 - d. Toccare OK.
3. Al termine, toccare la freccia indietro per uscire (←). Le notifiche non lette presentano icone colorate descritte in “13.1 Tipi di allarmi e notifiche” a pagina 161.

Nota: quando una notifica è stata visualizzata in questa schermata e si è usciti toccando la freccia indietro (←), l'icona per queste notifiche diventerà grigia alla successiva visualizzazione di questa schermata.

13.3 Suoni e vibrazioni

Il Sistema Omnipod 5 utilizza suoni e vibrazioni per attirare l'attenzione su un allarme o una notifica.

Attenzione: EVITARE di impostare il Controller su Silenzioso, Vibrazione o qualsiasi altra impostazione impedisca di sentire allarmi e notifiche dell'App Omnipod 5. Se non si avvertono allarmi e notifiche dal Controller, si corre il rischio di non apportare tempestivamente le modifiche necessarie alla terapia insulinica. Il Pod continuerà a emettere segnali acustici e sarà possibile visualizzare l'allarme o la notifica sull'App Omnipod 5.

Consiglio: per testare i suoni e le vibrazioni, vedere “Controllo allarmi” a pagina 168.

Allarmi del Pod

Il Pod emette un segnale acustico quando rileva un problema che può influire sull'erogazione di insulina.



- Gli Allarmi di Pericolo del Pod sono segnali acustici continui, intervallati periodicamente da una serie di bip.
- I Segnali di Notifica e le notifiche del Pod sono segnali acustici intermittenti ripetuti periodicamente fino alla conferma da parte dell'utilizzatore

App Omnipod 5 allarmi

App Omnipod 5 I suoni degli allarmi dipendono dalle impostazioni audio del Controller, ad esempio l'impostazione Silenzioso o Vibrazione.

Il pulsante Suoneria/Vibrazione del Controller

Il pulsante Suoneria/Vibrazione, situato nella parte superiore destra del Controller, controlla se tutte le notifiche utilizzano vibrazioni o suoni.

- Per attivare le vibrazioni (ON), tenere premuta l'estremità inferiore del pulsante Suoneria/Vibrazione fino a quando l'icona delle vibrazioni () non appare sullo schermo.
- Per attivare il suono (ON), tenere premuta l'estremità superiore del pulsante Suoneria/Vibrazione fino a quando l'icona della suoneria () non appare sullo schermo.
- Per alzare o abbassare il volume, premere l'estremità superiore o inferiore del pulsante Suoneria/Vibrazione. Sullo schermo, è anche possibile spostare l'indicatore del volume verso sinistra per diminuire il volume e spostarlo verso destra per aumentarlo.

13.4 Suoni e vibrazioni informativi

Attenzione: EVITARE di impostare il Controller su Silenzioso, Vibrazione o qualsiasi altra impostazione impedisca di sentire allarmi e notifiche dell'App Omnipod 5. Se non si avvertono allarmi e notifiche dal Controller, si corre il rischio di non apportare tempestivamente le modifiche necessarie alla terapia insulinica. Il Pod continuerà a emettere segnali acustici e sarà possibile visualizzare l'allarme o la notifica sull'App Omnipod 5. Vedere "13.3 Suoni e vibrazioni" a pagina 163 per indicazioni su come gestire suoni e vibrazioni.

Il Pod e l'App Omnipod 5 possono generare suoni informativi (toni, bip) o vibrazioni per informare l'utilizzatore che è in corso la regolare attività prevista tra il Pod e l'App Omnipod 5. Consultare le tabelle riportate di seguito per le descrizioni dei suoni informativi che si possono avvertire durante l'uso.

Promemoria sicurezza

Causa	App Omnipod 5	Pod
Toni o vibrazioni comunicano all'utente che le Basali Temporanee e i boli funzionano come previsto. Questi Promemoria sono attivati (ON) per impostazione predefinita. Per attivarli (ON) o disattivarli (OFF), vedere "Promemoria sicurezza" a pagina 139.	Tono/Vibrazione all'inizio di una Basale Temporanea, di un bolo o di un Bolo prolungato.	Emette un segnale acustico a alla fine di una Basale Temporanea, di un bolo o di un Bolo prolungato.

Nota: i Promemoria sicurezza e i Promemoria programma sono attivati per impostazione predefinita. Questi Promemoria fanno in modo che l'App Omnipod 5 o il Pod emettano un segnale acustico all'inizio e alla fine dell'erogazione di boli e di Basali Temporanee, nonché una volta all'ora durante una Basale Temporanea o un Bolo prolungato. Per ulteriori informazioni, vedere "Promemoria sicurezza" a pagina 139.

Promemoria programma

Causa	App Omnipod 5	Pod
I segnali acustici ricordano all'utente che è in corso una Basale Temporanea o un Bolo prolungato. Questi Promemoria sono attivati (ON) per impostazione predefinita. Per attivarli (ON) o disattivarli (OFF), vedere pagina 139.	Assenza di toni/vibrazione	Emette un segnale acustico ogni 60 minuti mentre è in corso una Basale Temporanea o un Bolo prolungato.

Modifiche al Programma Basale

Causa	App Omnipod 5	Pod
Toni o vibrazioni informano l'utente di modifiche al Programma Basale. Non è possibile disattivarli (OFF).	Tono/Vibrazione quando un Programma Basale viene attivato, modificato, sospeso o ripreso.	Emette un segnale acustico ogni 15 minuti dopo la fine del periodo di sospensione.

Annullamento di Basali Temporanee e boli

Causa	App Omnipod 5	Pod
Un segnale acustico comunica all'utilizzatore il corretto annullamento della Basale Temporanea o del bolo. Non è possibile disattivarli (OFF).	Assenza di toni/vibrazione	Emette un segnale acustico quando si annulla una Basale Temporanea, un bolo o un Bolo prolungato.

Attivazione/Disattivazione del Pod

Causa	App Omnipod 5	Pod
Toni e vibrazioni si verificano in momenti diversi durante il processo di attivazione del Pod per indicare l'avanzamento. Non è possibile disattivarli (OFF).	Tono/Vibrazione in caso di esito positivo dell'associazione di Pod e App Omnipod 5. Emette un segnale acustico/vibra due volte quando il Pod viene disattivato correttamente.	Emette un segnale acustico quando viene riempito con la quantità minima di insulina necessaria per l'attivazione (vedere pagina 88). A partire da 10 minuti dopo il riempimento del Pod con insulina, il Pod emette un segnale acustico ogni cinque minuti fino all'avvio dell'erogazione di insulina.

13.5 Risposta agli allarmi

Attenzione: EVITARE di lasciare il Controller in un luogo che impedisce di sentire allarmi e notifiche dell'App Omnipod 5. Se ci si allontana dal Controller, l'erogazione di insulina in Modalità Manuale o Modalità Automatizzata prosegue come da programma.

Attenzione: EVITARE di impostare il Controller su Silenzioso, Vibrazione o qualsiasi altra impostazione impedisca di sentire allarmi e notifiche dell'App Omnipod 5. Se non si avvertono allarmi e notifiche dal Controller, si corre il rischio di non apportare tempestivamente le modifiche necessarie alla terapia insulinica. Il Pod continuerà a emettere segnali acustici e sarà possibile visualizzare l'allarme o la notifica sull'App Omnipod 5. Vedere "13.3 Suoni e vibrazioni" a pagina 163 per indicazioni su come gestire suoni e vibrazioni.

Per rispondere a un Allarme di Pericolo o a un Allarme di Notifica:

1. Riattivare il Controller. Il blocco schermo mostra un messaggio di allarme insieme all'icona dell'Allarme di Pericolo (⚠️) o all'icona dell'Allarme di Notifica (🚨).
2. Dopo aver sbloccato l'App Omnipod 5, attenersi alle istruzioni visualizzate sul display oppure vedere i singoli dettagli dell'allarme a partire da pagina 168.

Nota: è possibile utilizzare il Sistema Omnipod 5 anche se non si risolve immediatamente un Allarme di Notifica. Tuttavia, è necessario confermare un Allarme di Pericolo prima di poter utilizzare il Sistema Omnipod 5.

Consiglio: se, pur attenendosi alle istruzioni dell'App Omnipod 5, non è possibile silenziare un Allarme di Pericolo, vedere "13.9 Silenziamento degli allarmi non risolti" a pagina 190.

Nota: se è in esecuzione una Basale Temporanea o un Bolo prolungato quando si verifica un Allarme di Pericolo del Pod, l'App Omnipod 5 comunica all'utilizzatore che è stato annullato.

Temporizzazione degli allarmi del Pod sull'App Omnipod 5

Se il Pod emette un Allarme di Pericolo, trasmette un segnale all'App Omnipod 5.

- Se il Controller è a distanza di comunicazione ed è attivo, entro 25 secondi dall'emissione dell'allarme iniziale del Pod, anche l'App Omnipod 5 emette un allarme e visualizza il messaggio di allarme.
- Se il Controller si trova a distanza di comunicazione ma è in modalità di sospensione, potrebbe verificarsi un ritardo massimo di 6 minuti tra l'emissione dell'allarme da parte del Pod e l'emissione dell'allarme da parte dell'App Omnipod 5.
- Se il Controller non è a distanza di comunicazione dal Pod, l'App Omnipod 5 non può ricevere comunicazioni dal Pod. Pertanto, quando si sente una notifica o un allarme del Pod, accertarsi che il Controller si trovi a distanza di comunicazione dal Pod e riattivare l'App Omnipod 5. Entro 25 secondi, l'App Omnipod 5 emette l'allarme e visualizza il messaggio di allarme.

Diagnostica

Avvertenza: NON continuare a utilizzare un Pod attivato che non emetta segnali acustici nel corso di un esame diagnostico. Il Pod deve essere sostituito immediatamente. Se nel corso di un esame diagnostico l'App Omnipod 5 non emette alcun segnale acustico, contattare immediatamente l'Assistenza clienti. Continuando a utilizzare il Sistema Omnipod 5 in queste situazioni, si potrebbe mettere a rischio la salute e la sicurezza dell'utilizzatore.


13 Allarmi, azioni e notifiche di promemoria

Controllo allarmi

Prima di iniziare, passare alla Modalità Manuale se si sta utilizzando la Modalità Automatizzata. Vedere “22.2 Passaggio dalla Modalità Automatizzata alla Modalità Manuale” a pagina 344.

Nota: le impostazioni audio del Controller devono essere attive per poter sentire un segnale acustico sull'App Omnipod 5.

Per verificare che le funzioni di allarme e di vibrazione dell'App Omnipod 5 e del Pod funzionino correttamente, testarle attenendosi alla procedura seguente:

1. Accedere a: pulsante Menu () > Impostazioni > > Generale Controlla Allarmi.
2. Se si indossa un Pod attivo, toccare SOSPENDE INSULINA e toccare SÌ.
3. Toccare CONTROLLA ALLARMI per avviare il controllo degli allarmi.
4. Si percepirà quanto segue: il Controller emette un segnale acustico e vibra tre volte. Se si indossa un Pod, questo emetterà una serie di segnali acustici e un tono di allarme per diversi secondi.
5. Se il Pod non ha emesso segnali acustici, toccare NO. Quindi toccare RICONTROLLA per testare nuovamente gli allarmi oppure toccare FATTO e sostituire il Pod.
6. Se gli allarmi del Sistema Omnipod 5 non hanno suonato, toccare NO. Quindi toccare RICONTROLLA per testare nuovamente gli allarmi oppure contattare l'Assistenza clienti.
7. Se i segnali acustici e le vibrazioni hanno funzionato correttamente, toccare SÌ. Se l'insulina è stata sospesa per controllare gli allarmi, toccare SÌ per riprendere l'erogazione di insulina.

13.6 Elenco degli Allarmi di Pericolo



Avvertenza: rispondere SEMPRE agli Allarmi di Pericolo non appena si verificano. Gli Allarmi di Pericolo emessi dal Pod segnalano un'interruzione nell'erogazione di insulina. La mancata risposta a un Allarme di Pericolo può comportare un'erogazione insufficiente di insulina, con conseguente iperglicemia.

Gli Allarmi di Pericolo segnalano all'utilizzatore una situazione grave. Rispondere sempre a un Allarme di Pericolo immediatamente. Alcuni messaggi di allarme riportano un numero univoco chiamato “numero di

riferimento”. Fornire tale numero all’Assistenza clienti quando si chiama in merito a un allarme.

▲ Rilevata ostruzione



Avvertenza: monitorare SEMPRE il glucosio e, quando si interrompe l'erogazione di insulina a causa di un'ostruzione (occlusione), attenersi alle linee guida terapeutiche dell'operatore sanitario di riferimento. La mancata azione tempestiva può comportare una somministrazione insufficiente di insulina con conseguenti episodi di iperglicemia o chetoacidosi diabetica (DKA).

Avviso su schermo	Descrizione
<p>App Omnipod 5:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Rilevata ostruzione</p>  <p>Erogazione di insulina arrestata. Sostituire il Pod ora.</p> <p>Controllare il glucosio.</p> <p>Rif: 17-07700-00051-020</p> <p>OK, DISATTIVA IL POD ORA</p> </div>	<p>Perché si verifica: è stata rilevata un'ostruzione (occlusione) dalla cannula bloccata, un malfunzionamento del Pod o l'utilizzo di insulina scaduta o inattiva, che ha interrotto l'erogazione di insulina.</p> <p>Suono del Pod: segnale acustico continuo</p> <p>Suono e vibrazione del Controller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • segnale acustico di 30 secondi • vibrazione di 30 secondi • Vibrazione e segnale acustico si ripetono ogni 15 minuti fino alla conferma dell'utilizzatore.
<p>Blocco schermo:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;"> <p>Rilevata ostruzione Erogazione di insulina arrestata. So.. </p> </div>	<p>Azione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toccare OK, DISATTIVA IL POD ORA. 2. Sostituire il Pod. 3. Controllare la glicemia.

▲ Errore dell'App Omnipod 5



Avviso su schermo	Descrizione
<p>App Omnipod 5:</p> <div data-bbox="142 331 440 772" style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Errore dell'App Omnipod 5</p>  <p>Se questo problema si ripete, contattare l'Assistenza clienti.</p> <p>Toccare OK per continuare.</p> <p>Rif: 05-50069-00051-008</p> <p>OK</p> </div>	<p>Perché si verifica: è stato rilevato un errore imprevisto nell'App Omnipod 5.</p> <p>Nota: se l'App Omnipod si arresta e si riavvia da sola, è possibile che lampeggi in bianco prima che venga visualizzata questa schermata.</p> <p>Suono del Pod: nessuno</p> <p>Suono e vibrazione del Controller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • segnale acustico di 30 secondi • vibrazione di 30 secondi • Vibrazione e segnale acustico si ripetono ogni 15 minuti fino alla conferma dell'utilizzatore.
<p>Blocco schermo:</p> <div data-bbox="125 936 475 1014" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Errore dell'App Omnipod 5 Si è verificato un errore. Controllare .. </p> </div>	<p>Azione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toccare OK per confermare o silenziare l'allarme. <p>Nota: a seconda della causa dell'errore, il Controller potrebbe riavviarsi dopo aver selezionato OK. Indipendentemente che questo si verifichi o meno, continuare con i seguenti passaggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Contattare immediatamente l'Assistenza clienti. 3. Controllare la glicemia.

Memoria Omnipod 5 danneggiata

Avviso su schermo	Descrizione
<p>App Omnipod 5:</p> <div data-bbox="250 331 510 758" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p style="text-align: center;">Memoria dell'App Omnipod 5 danneggiata</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Il Pod non è più connesso all'App. Rimuovere il Pod ora.</p> <p style="text-align: center;">Toccare OK per reimpostare l'App Omnipod 5 ed eliminare tutte le impostazioni utente.</p> <p style="text-align: center;">Rif: 19-01300-00051-034</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <div style="background-color: #4a5568; color: white; padding: 5px 15px; border-radius: 5px;">OK</div> </div> </div>	<p>Perché si verifica: è stato rilevato un errore imprevisto nell'App Omnipod 5.</p> <p>Suono del Pod: nessuno</p> <p>Suono e vibrazione del Controller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • segnale acustico di 30 secondi • vibrazione di 30 secondi • Vibrazione e segnale acustico si ripetono ogni 15 minuti fino alla conferma dell'utilizzatore. <p>Azione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toccare OK per confermare l'allarme e reimpostare l'App Omnipod 5. 2. Rimuovere il Pod. 3. Contattare immediatamente l'Assistenza clienti. 4. Controllare la glicemia.
<p>Blocco schermo:</p> <div data-bbox="226 867 553 943" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Memoria dell'App Omnipod 5 dann.. Rimuovere il Pod ora. Controllare l'A.. </p> </div>	


⚠ Errore del Pod

Attenzione: attivare SEMPRE un nuovo Pod in modo tempestivo. Un'attesa eccessiva tra le sostituzioni del Pod può comportare un'erogazione insufficiente di insulina, con conseguente iperglicemia. Se non è disponibile un altro Pod, adottare un metodo alternativo di erogazione dell'insulina.

Avviso su schermo	Descrizione
<p>App Omnipod 5:</p> <div data-bbox="150 520 435 885" style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Errore del Pod</p>  <p>Erogazione di insulina arrestata. Sostituire il Pod ora.</p> <p>Rif: 19-01300-00051-034</p> <p>OK, DISATTIVA IL POD ORA</p> </div>	<p>Perché si verifica: il Pod ha rilevato un errore imprevisto e l'erogazione di insulina è stata interrotta.</p> <p>Suono del Pod: segnale acustico continuo</p> <p>Suono e vibrazione del Controller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • segnale acustico di 30 secondi • vibrazione di 30 secondi • Vibrazione e segnale acustico si ripetono ogni 15 minuti fino alla conferma dell'utilizzatore.
<p>Blocco schermo:</p> <div data-bbox="130 1054 465 1132" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Errore del Pod Erogazione di insulina arrestata. So.. </p> </div>	<p>Azione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toccare OK, DISATTIVA IL POD ORA. 2. Sostituire il Pod. 3. Controllare la glicemia.



Pod scaduto

Attenzione: attivare SEMPRE un nuovo Pod in modo tempestivo. Un'attesa eccessiva tra le sostituzioni del Pod può comportare un'erogazione insufficiente di insulina, con conseguente iperglicemia. Se non è disponibile un altro Pod, adottare un metodo alternativo di erogazione dell'insulina.

Avviso su schermo	Descrizione
<p>App Omnipod 5:</p> <div data-bbox="250 525 539 896" style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Pod scaduto</p>  <p>Erogazione di insulina arrestata. Sostituire il Pod ora.</p> <p>Rif: 16-01300-00051-028</p> <p>OK, DISATTIVA IL POD ORA</p> </div>	


⚠ Insulina nel Pod terminata

Attenzione: attivare SEMPRE un nuovo Pod in modo tempestivo. Un'attesa eccessiva tra le sostituzioni del Pod può comportare un'erogazione insufficiente di insulina, con conseguente iperglicemia. Se non è disponibile un altro Pod, adottare un metodo alternativo di erogazione dell'insulina.


Avviso su schermo	Descrizione
<p>App Omnipod 5:</p> <div data-bbox="148 516 444 1007" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p style="text-align: center;">Insulina nel Pod terminata</p> <div style="text-align: center;">  </div> <hr/> <p>Pod vuoto; l'insulina nel Pod è esaurita. Erogazione di insulina arrestata.</p> <p>Sostituire il Pod ora.</p> <p>Rif: 14-01300-00051-024</p> <div style="text-align: center; background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">OK, DISATTIVA IL POD ORA</div> </div>	<p>Perché si verifica: il serbatoio di insulina del Pod è vuoto e l'erogazione di insulina è stata interrotta.</p> <hr/> <p>Suono del Pod: segnale acustico continuo</p> <hr/> <p>Suono e vibrazione del Controller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • segnale acustico di 30 secondi • vibrazione di 30 secondi • Vibrazione e segnale acustico si ripetono ogni 15 minuti fino alla conferma dell'utilizzatore. <hr/> <p>Azione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toccare OK, DISATTIVA IL POD ORA. 2. Sostituire il Pod. 3. Controllare la glicemia.
<p>Blocco schermo:</p> <div data-bbox="130 1130 465 1204" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Insulina nel Pod terminata Erogazione di insulina arrestata. So.. </p> </div>	

⚠ Spegnimento Pod

Attenzione: attivare SEMPRE un nuovo Pod in modo tempestivo. Un'attesa eccessiva tra le sostituzioni del Pod può comportare un'erogazione insufficiente di insulina, con conseguente iperglicemia. Se non è disponibile un altro Pod, adottare un metodo alternativo di erogazione dell'insulina.

Avviso su schermo	Descrizione
<p>App Omnipod 5:</p> <div data-bbox="268 516 536 919" style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Spegnimento Pod</p>  <p>Erogazione di insulina arrestata. L'App Omnipod 5 non ha comunicato con il Pod nelle ultime 4 ore. Per avviare l'erogazione di insulina, sostituire il Pod.</p> <p>Rif: 15-01300-00051-041</p> <p>OK, DISATTIVA IL POD ORA</p> </div>	<p>Perché si verifica: il Pod ha interrotto l'erogazione di insulina perché è stato impostato un orario di Spegnimento Pod e non è stato confermato l'Allarme di Notifica Spegnimento Pod.</p> <p>Suono del Pod: segnale acustico continuo</p> <p>Suono e vibrazione del Controller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • segnale acustico di 30 secondi • vibrazione di 30 secondi • Vibrazione e segnale acustico si ripetono ogni 15 minuti fino alla conferma dell'utilizzatore.
<p>Blocco schermo:</p> <div data-bbox="229 1095 561 1169" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Spegnimento Pod Erogazione di insulina arrestata. L'A.. </p> </div>	<p>Azione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toccare OK, DISATTIVA IL POD ORA. 2. Sostituire il Pod. 3. Controllare la glicemia. <p>Nota: per modificare l'impostazione Spegnimento Pod, vedere "Spegnimento Pod" a pagina 138.</p>

▲ Errore di sistema



Avviso su schermo	Descrizione
<p>App Omnipod 5:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">Errore di sistema</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Il sistema potrebbe non funzionare come previsto. Rimuovere il Pod ora. Se questo problema si ripete, contattare l'Assistenza clienti.</p> <p>Toccare OK, disattiva il Pod ora per continuare.</p> <p>Rif: 50-50069-00051-006</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <div style="background-color: #4a5568; color: white; padding: 5px 15px; border-radius: 5px; display: inline-block;">OK</div> </div> </div>	<p>Perché si verifica: è stato rilevato un errore imprevisto nel Pod o nell'App Omnipod 5.</p> <p>Suono del Pod: nessuno</p> <p>Suono e vibrazione del Controller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • segnale acustico di 30 secondi • vibrazione di 30 secondi • Vibrazione e segnale acustico si ripetono ogni 15 minuti fino alla conferma dell'utilizzatore.
<p>Blocco schermo:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>Errore di sistema </p> <p>Rimuovere il Pod ora. Controllare l'A..</p> </div>	<p>Azione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toccare OK per confermare l'allarme. 2. Rimuovere il Pod. 3. Contattare immediatamente l'Assistenza clienti. 4. Controllare la glicemia.

13.7 Elenco degli Allarmi di Notifica



Attenzione: rispondere SEMPRE ai Segnali di Notifica Pod scaduto, Insulina nel Pod in esaurimento e Spegnimento Pod nel momento in cui si verificano. Se non si intraprende alcuna azione, questi segnali diventano Allarmi di Pericolo. Quando si verificano Allarmi di Pericolo, l'erogazione di insulina si interrompe.

I Segnali di Notifica indicano una situazione che richiede l'attenzione dell'utilizzatore nel breve termine.



! Insulina nel Pod in esaurimento

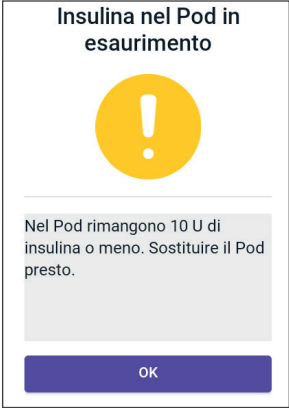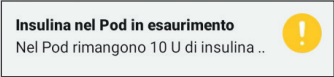Avviso su schermo	Descrizione
<p>App Omnipod 5:</p> 	<p>Perché si verifica: la quantità di insulina nel Pod è inferiore al valore specificato nelle impostazioni.</p> <p>Suono del Pod:</p> <ul style="list-style-type: none"> • segnale acustico a 8 bip • Il segnale acustico viene emesso una volta ogni 3 minuti per 60 minuti. <p>Suono e vibrazione del Controller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • segnale acustico di 3 secondi • vibrazione di 3 secondi • Vibrazione e segnale acustico si ripetono ogni 15 minuti fino alla conferma dell'utilizzatore.
<p>Blocco schermo:</p> 	<p>Azione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toccare OK. 2. Sostituire il Pod.
<p>Nota: se ignorato, diventa Allarme di Pericolo Insulina nel Pod terminata.</p> <p>Nota: per modificare questo valore, vedere “Insulina nel Pod in esaurimento” a pagina 138.</p>	

! Pod scaduto

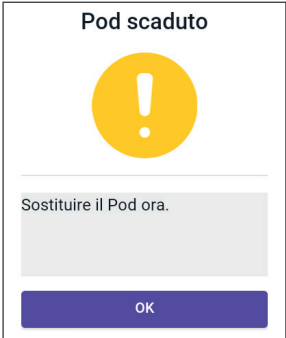Avviso su schermo	Descrizione
<p>App Omnipod 5:</p> 	<p>Perché si verifica: il Pod interromperà presto l'erogazione di insulina.</p> <p>Suono del Pod:</p> <ul style="list-style-type: none"> • segnale acustico a 8 bip • Segnale acustico emesso ogni 60 minuti trascorse 72 ore di vita utile del Pod. • Dopo 79 ore di vita utile del Pod, viene emesso un segnale acustico ogni 5 minuti. <p>Suono e vibrazione del Controller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • segnale acustico di 3 secondi • vibrazione di 3 secondi • Vibrazione e segnale acustico si ripetono ogni 15 minuti fino alla conferma dell'utilizzatore. <p>Azione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toccare OK. 2. Sostituire il Pod.
<p>Blocco schermo:</p> 	
<p>Nota: dopo la conferma o se ignorato, l'allarme si ripete quando rimane 1 ora di vita utile del Pod.</p> <p>Nota: se ignorata, questa situazione progredisce generando l'Allarme di Pericolo "Pod scaduto".</p>	

! Spegnimento Pod

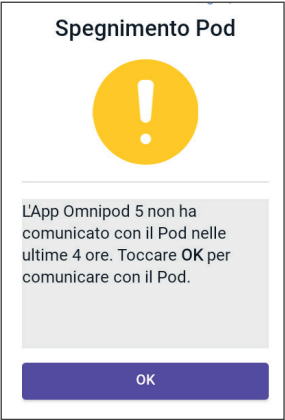Avviso su schermo	Descrizione
<p>App Omnipod 5:</p> 	<p>Perché si verifica: è stato raggiunto il tempo di Spegnimento Pod impostato. Il Pod interromperà presto l'erogazione se non si risponde a questo allarme.</p> <p>Suono del Pod:</p> <ul style="list-style-type: none"> • segnale acustico a 6 bip • una volta al minuto per 15 minuti <p>Suono e vibrazione del Controller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • segnale acustico di 3 secondi • vibrazione di 3 secondi • Vibrazione e segnale acustico si ripetono ogni 15 minuti fino alla conferma dell'utilizzatore. <p>Azione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Toccare AVANTI per ripristinare il timer di Spegnimento Pod.
<p>Blocco schermo:</p> 	
<p>Nota: per abilitare e disabilitare la funzione Spegnimento Pod o per modificare il periodo del conto alla rovescia, vedere “Spegnimento Pod” a pagina 138.</p>	



! Avvia insulina

Attenzione: toccare SEMPRE AVVIA INSULINA per avviare l'erogazione di insulina al termine di un periodo di sospensione durante l'uso in Modalità Manuale. L'erogazione di insulina non si avvia automaticamente dopo una sospensione. In caso di mancato avvio, può manifestarsi iperglicemia.

Avviso su schermo	Descrizione
<p>App Omnipod 5:</p>  <p>Avvia insulina</p> <p>Avviare l'erogazione di insulina con il Programma Basale Basale 1?</p> <p>Il periodo di sospensione dell'insulina è terminato.</p> <p>AVVIA INSULINA</p> <p>RICORDAMELO TRA 15 MINUTI</p>	<p>Perché si verifica: il periodo di tempo specificato per sospendere l'erogazione di insulina è trascorso. In caso di mancato avvio, può manifestarsi iperglicemia.</p> <p>Suono del Pod:</p> <ul style="list-style-type: none"> • segnale acustico a 8 bip • Il segnale acustico viene emesso ogni minuto per 3 minuti. • Si ripete ogni 15 minuti fino alla conferma. <p>Suono e vibrazione del Controller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • segnale acustico di 3 secondi • vibrazione di 3 secondi • Vibrazione e segnale acustico si ripetono ogni 15 minuti fino alla conferma dell'utilizzatore.
<p>Blocco schermo:</p>  <p>Avvia insulina Il periodo di sospensione dell'insuli..</p>	<p>Azione:</p> <p>Effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se si desidera avviare l'insulina con il Programma Basale, toccare AVVIA INSULINA. • Se si desidera mantenere in pausa l'insulina, toccare RICORDAMELO TRA 15 MINUTI.

! Ipoglicemia urgente

Avvertenza: trattare SEMPRE tempestivamente la glicemia bassa. Un valore del glucosio pari o inferiore a 3,1 mmol/L (55 mg/dL) indica ipoglicemia significativa (glicemia molto bassa). Se non trattata, può causare crisi convulsive, perdita di coscienza o morte. Attenersi alle raccomandazioni dell'operatore sanitario per il trattamento.

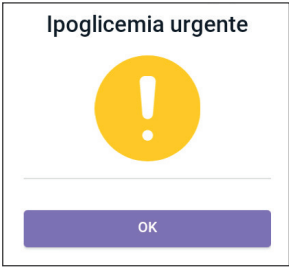Avviso su schermo	Descrizione
<p>App Omnipod 5:</p> 	<p>Perché si verifica: il glucosio è pari o inferiore a 3,1 mmol/L (55 mg/dL), in base a ciò che il Sensore ha inviato all'App Omnipod 5.</p> <p>Suono del Pod:</p> <ul style="list-style-type: none"> • segnale acustico a 4 bip • si ripete ogni 5 minuti fintantoché il valore glicemico del sensore è criticamente basso <p>Suono e vibrazione del Controller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • segnale acustico di 3 secondi • vibrazione di 3 secondi • vibrazione e segnale acustico si ripetono ogni 15 minuti fino alla conferma dell'utilizzatore
<p>Blocco schermo:</p> 	<p>Azione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Toccare OK per confermare l'allarme.
<p>Nota: questo Allarme di Notifica smetterà di ripetersi solo una volta ricevuto un valore di glucosio pari o superiore a 3,2 mmol/L (56 mg/dL). È possibile silenziare questo Allarme di Notifica per 30 minuti confermando il messaggio sul display.</p> <p>Nota: dopo la conferma dell' Allarme di Notifica iniziale, questo si riattiva se i valori glicemici del sensore sono ancora inferiori a 3,1 mmol/L (55 mg/dL) dopo 30 minuti.</p> <p>Nota: utilizzare un glucometro per confermare la lettura della glicemia. Trattare la glicemia bassa secondo necessità.</p> <p>Nota: l'Allarme di Notifica Ipoglicemia urgente è correlato al livello attuale di glucosio nel corpo, mentre gli altri allarmi sono correlati allo stato del Pod o dell'App Omnipod 5.</p>	

13.8 Elenco delle notifiche Elemento di Azione

Notifiche Elemento di Azione: sono relative alle attività tecniche del sistema che richiedono l'attenzione dell'utilizzatore.

App bloccata

Avvertenza: NON sarà possibile utilizzare l'App Omnipod 5 nei seguenti casi:


- Non è stato installato un aggiornamento richiesto per l'App Omnipod 5.
- Non è ancora disponibile un aggiornamento per risolvere un problema noto con l'App Omnipod 5.

Utilizzare un altro metodo di erogazione dell'insulina. La mancata disattivazione del Pod e l'utilizzo di un'altra forma di erogazione di insulina può comportare un'erogazione eccessiva o insufficiente di insulina, con conseguente ipoglicemia o iperglicemia.

Avviso su schermo	Descrizione
<p>App Omnipod 5:</p> <div data-bbox="154 830 443 1337"><p style="text-align: center;">App bloccata</p><p>A causa di un problema software, l'App Omnipod 5 non può essere utilizzata. Utilizzare un altro metodo di erogazione di insulina fino a quando non sarà disponibile un aggiornamento.</p><p>Controllare frequentemente l'app per ricercare eventuali aggiornamenti.</p><p style="text-align: center;">DISATTIVA POD</p></div>	

✕ Connetti a rete Wi-Fi

Attenzione: connettere il Controller ESCLUSIVAMENTE a reti Wi-Fi attendibili, non pubbliche, come ad esempio quelle presenti negli aeroporti, nei bar, ecc., in quanto non sicure e possono esporre il Controller a malware. NON connettersi a reti Wi-Fi pubbliche durante la configurazione iniziale del Sistema Omnipod 5.

Avviso su schermo	Descrizione
<p>App Omnipod 5:</p> <div data-bbox="254 513 549 924" style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Connetti a rete Wi-Fi</p>  <p>Per scaricare l'ultima app, è necessaria la connettività di rete. Spostarsi in un'area con un segnale migliore o connettersi alla rete Wi-Fi.</p> <p>IMPOSTAZIONI WI-FI</p> </div>	<p>Perché si verifica: l'App Omnipod 5 non si è connessa alla rete di Insulet per almeno 7 giorni.</p> <hr/> <p>Suono del Pod: nessuno</p> <hr/> <p>Suono e vibrazione del Controller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • segnale acustico di 3 secondi • vibrazione di 3 secondi • nessuna ripetizione <hr/> <p>Azione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Toccare IMPOSTAZIONI WI-FI quando richiesto. Connettersi a una rete Wi-Fi.

Consiglio: quando si è connessi a una rete, l'App Omnipod 5 riceve una notifica degli aggiornamenti del software quando sono richiesti.


Consiglio: se il Wi-Fi non è disponibile, spostarsi in un'area con un segnale cellulare migliore.

Nota: la scheda SIM sul Controller Omnipod 5 consente l'invio e la ricezione dei dati tramite la rete wireless AT&T quando il Controller non è connesso a una rete Wi-Fi. Se si interrompe l'utilizzo dell'App Omnipod 5 su una rete cellulare del Controller, Insulet potrebbe disattivare la scheda SIM.


Nota: tenere presente che il Controller funziona ancora tramite Wi-Fi. Se si torna a utilizzare l'App Omnipod 5 sul Controller dopo un periodo di tempo prolungato, contattare l'Assistenza clienti per richiedere la riattivazione della scheda SIM per la copertura completa tramite rete cellulare e Wi-Fi. Su richiesta, la scheda SIM viene riattivata.

🕒 Aggiornamento ora legale

Attenzione: prestare SEMPRE attenzione ai possibili cambi di fuso orario quando si viaggia. Se il fuso orario non viene aggiornato, la terapia insulinica verrà erogata in base a quello precedente, con conseguenti interruzioni nel programma di erogazione dell'insulina e registri della cronologia imprecisi. Parlare con l'operatore sanitario di riferimento di come gestire l'erogazione di insulina mentre si viaggia tra fusi orari diversi.

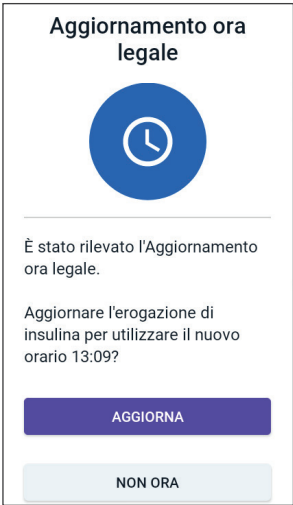Avviso su schermo	Descrizione
<p>App Omnipod 5:</p> 	<p>Perché si verifica: l'App Omnipod 5 ha rilevato che l'ora legale è stata avviata o terminata.</p> <p>Suono del Pod: nessuno</p> <p>Suono e vibrazione del Controller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • segnale acustico di 3 secondi • vibrazione di 3 secondi • nessuna ripetizione <p>Azione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Toccare AGGIORNA per aggiornare l'orario di erogazione dell'insulina. <p>Oppure:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Toccare NON ORA per continuare a utilizzare l'orario di erogazione dell'insulina corrente.
<p>Nota: è essenziale che l'orario sia corretto perché siano corretti anche l'erogazione di insulina e i registri della cronologia. Se si tocca NON ORA, questa notifica Elemento di Azione sarà mostrata sul pulsante Menu (☰) > Notifiche e ogni 24 ore verrà ricordato di effettuare l'aggiornamento.</p>	

❏ Errore Omnipod 5

Avviso su schermo	Descrizione
<p>App Omnipod 5:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Errore Omnipod® 5</p>  <p>Riavviare il dispositivo. Se il problema persiste, contattare l'Assistenza clienti utilizzando le informazioni fornite dal referente.</p> <p>Ref: 0001</p> <p style="background-color: #4a5568; color: white; padding: 5px 10px; display: inline-block; margin-top: 10px;">RIAVVIA</p> </div>	<p>Perché si verifica: l'App Omnipod 5 ha riscontrato un problema.</p> <p>Suono del Pod: nessuno</p> <p>Suono e vibrazione del Controller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • segnale acustico di 3 secondi • vibrazione di 3 secondi • nessuna ripetizione <p>Azione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Toccare RIAVVIA per riavviare il dispositivo.

Aggiornamento di Omnipod 5 - App non più supportata

Attenzione: prima di installare un aggiornamento del software, verificare SEMPRE che la batteria sia sufficientemente carica.

Descrizione

Perché si verifica: la versione dell'App Omnipod 5 attualmente in uso è obsoleta e non è più supportata.


Suono del Pod: nessuno

Suono e vibrazione del Controller:

- segnale acustico di 3 secondi
- vibrazione di 3 secondi
- nessuna ripetizione

Azione:

1. Toccare AGGIORNA ORA.
La carica della batteria deve essere superiore al 15% prima dell'aggiornamento.
2. Se la batteria non è sufficientemente carica, caricarla prima di continuare.
Verrà visualizzato l'aggiornamento in corso.
3. Al comparsa del messaggio indicante l'avvenuto completamento dell'aggiornamento, toccare OK.

Nota: se l'aggiornamento è critico (obbligatorio), non sarà possibile ignorare la notifica. Se si tocca NON ORA, questa notifica Elemento di Azione sarà disponibile in Menu () > Notifiche.

Aggiornamento di Omnipod 5 - Aggiornamento del software

Attenzione: prima di installare un aggiornamento del software, verificare SEMPRE che la batteria sia sufficientemente carica.

Descrizione

Perché si verifica: è disponibile un aggiornamento del software dell'App Omnipod 5.

Suono del Pod: nessuno



Suono e vibrazione del Controller:

- segnale acustico di 3 secondi
- vibrazione di 3 secondi
- nessuna ripetizione

Azione:


1. Toccare AGGIORNA ORA.
La carica della batteria deve essere superiore al 15% prima dell'aggiornamento.
2. Se la batteria non è sufficientemente carica, caricarla prima di continuare.
3. Al comparsa del messaggio indicante l'avvenuto completamento dell'aggiornamento, toccare OK.

Aggiorna SO

Avviso su schermo	Descrizione
<p>App Omnipod 5:</p> <div data-bbox="149 319 441 737" style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Aggiorna SO</p>  <p>Aggiornare alla versione più recente del sistema operativo.</p> <p>Ciò non influirà sull'erogazione di insulina.</p> <p>AGGIORNA ORA</p> </div>	<p>Perché si verifica: è disponibile un aggiornamento del sistema operativo per il Controller.</p> <p>Suono del Pod: nessuno</p> <p>Suono e vibrazione del Controller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • segnale acustico di 3 secondi • vibrazione di 3 secondi • nessuna ripetizione <p>Azione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toccare AGGIORNA ORA La carica della batteria deve essere superiore al 40% o superiore al 20% e in carica prima dell'aggiornamento. 2. Se la batteria non è sufficientemente carica, caricarla prima di continuare. 3. Al comparsa del messaggio indicante l'avvenuto completamento dell'aggiornamento, toccare OK.
<p>Nota: se l'aggiornamento è critico (obbligatorio), non sarà possibile ignorare la notifica. Se si tocca NON ORA, questa notifica Elemento di Azione sarà disponibile sul pulsante Menu () > Notifiche.</p>	

🕒 Aggiorna fuso orario

Attenzione: prestare SEMPRE attenzione ai possibili cambi di fuso orario quando si viaggia. Se il fuso orario non viene aggiornato, la terapia insulinica verrà erogata in base a quello precedente, con conseguenti interruzioni nel programma di erogazione dell'insulina e registri della cronologia imprecisi. Parlare con l'operatore sanitario di riferimento di come gestire l'erogazione di insulina mentre si viaggia tra fusi orari diversi.

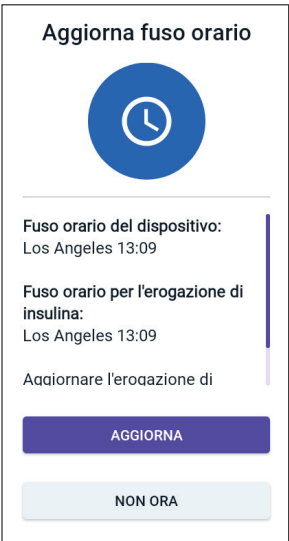Avviso su schermo	Descrizione
<p>App Omnipod 5:</p> 	<p>Perché si verifica: il fuso orario del Controller non corrisponde al fuso orario di erogazione dell'insulina dell'App Omnipod 5.</p> <p>Suono del Pod: nessuno</p> <p>Suono e vibrazione del Controller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • segnale acustico di 3 secondi • vibrazione di 3 secondi • nessuna ripetizione <p>Azione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toccare AGGIORNA quando viene richiesto di aggiornare il fuso orario di erogazione dell'insulina. 2. In Modalità Automatizzata, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per passare alla Modalità Manuale e sospendere l'erogazione di insulina. 3. Una volta aggiornato il fuso orario, è possibile avviare l'erogazione di insulina e tornare alla Modalità Automatizzata.
<p>Nota: è essenziale che l'orario sia corretto perché siano corretti anche l'erogazione di insulina e i registri della cronologia. Se si tocca NON ORA, questa notifica Elemento di Azione sarà mostrata sul pulsante Menu (☰) > Notifiche e ogni 24 ore verrà ricordato di effettuare l'aggiornamento.</p>	

13.9 Silenziamento degli allarmi non risolti


È possibile silenziare gli allarmi del Pod o dell'App Omnipod 5 confermando la schermata di allarme visualizzata sull'App Omnipod 5. Se l'allarme continua, seguire le istruzioni in questa sezione.

Allarme del Pod

Attenzione: per silenziare definitivamente un allarme, è necessario rimuovere il Pod dal corpo. Dopo averlo rimosso ed eliminato, attivare immediatamente un nuovo Pod per evitare di rimanere a lungo senza insulina, con conseguente rischio di iperglicemia.

Per disattivare definitivamente un allarme del Pod:

1. Se il Pod è sul corpo, rimuoverlo.
2. Staccare l'adesivo partendo dalla parte inferiore del Pod in corrispondenza dell'estremità quadrata (vedere la figura).
3. Individuare il foro per la disattivazione degli allarmi a destra del cerchio dorato. Si tratta di un punto di plastica morbida che è possibile individuare con un'unghia o l'estremità di una graffetta.
4. Premere con decisione la graffetta o un altro oggetto appuntito nel foro per la disattivazione manuale degli allarmi. È necessario applicare una forza sufficiente a forare un sottile strato di plastica. Se sta suonando un allarme, questo si interrompe.

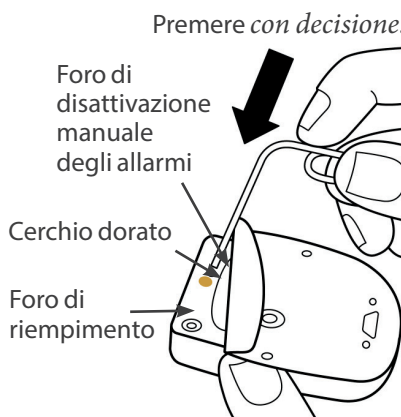

Allarme del Controller

Se l'allarme del Controller non smette di suonare dopo averlo confermato:

1. Tenere premuto il pulsante di accensione, quindi toccare Spegni.
2. Tenere premuto il pulsante di accensione per riaccendere il Controller.

questa operazione consente di silenziare l'allarme del Controller. I registri cronologici e le impostazioni personali non andranno persi. Tuttavia, potrebbe essere necessario confermare il fuso orario.


13.10 Risposta alle notifiche di promemoria

Le notifiche di promemoria ricordano all'utilizzatore le azioni di gestione del diabete che potrebbe dover eseguire.

Attivazione delle notifiche di promemoria

Per avvisare l'utilizzatore di una notifica, il Pod emette un segnale acustico a 3 bip, mentre il App Omnipod 5 emette un segnale acustico o vibra (vedere "13.3 Suoni e vibrazioni" a pagina 163). Quando si sente un segnale acustico o una vibrazione, controllare il App Omnipod 5 per vedere se è presente un messaggio.

Nota: i Promemoria programma, i Promemoria sicurezza e alcuni segnali informativi non hanno un messaggio di accompagnamento.

Se il App Omnipod 5 è inattivo quando si sente una notifica, riattivarlo. Il blocco schermo mostra l'icona della notifica di promemoria () e il messaggio di notifica.


- Se ci sono più messaggi, il messaggio più recente viene visualizzato in cima all'elenco.
- Se ci sono più messaggi di quelli che possono essere visualizzati nel blocco schermo, un banner sotto i messaggi mostra il numero di messaggi aggiuntivi.

Se si sta utilizzando l'App Omnipod 5 quando viene emessa una notifica, il messaggio di notifica viene visualizzato nella parte superiore dello schermo. Per rimuovere il messaggio dallo schermo:

- Non fare niente. Il messaggio scompare dopo alcuni secondi e viene salvato come nuovo messaggio.
- Scorrere verso l'alto per rimuovere immediatamente il messaggio e salvarlo come nuovo messaggio.
- Scorrere verso destra per rimuovere immediatamente il messaggio e salvarlo come messaggio confermato.

Conferma delle notifiche di promemoria




Nota: la riattivazione e l'utilizzo dell'App Omnipod 5 non confermano né silenziano automaticamente le notifiche.


Tutte le nuove notifiche sono incluse nel conteggio delle notifiche e degli allarmi () nel cerchio rosso sopra la campana di notifica in alto a destra nella schermata Home.

Per confermare la notifica:

1. Riattivare l'App Omnipod 5.

13 Allarmi, azioni e notifiche di promemoria

2. Toccare l'icona a forma di campana di notifica () per visualizzare la schermata Notifiche e allarmi.
3. Scorrere verso il basso nella schermata, se necessario, per visualizzare eventuali ulteriori notifiche con icone blu ()
4. Toccare la freccia indietro () nella parte in alto a sinistra dello schermo per contrassegnare le notifiche come confermate.

Nota: la disattivazione del Controller Omnipod 5 premendo il pulsante di accensione non contrassegna le notifiche come confermate. È necessario toccare la freccia indietro () per confermare la notifica.


13.11 Elenco notifiche di promemoria

Le notifiche di promemoria ricordano all'utilizzatore diverse azioni di gestione del diabete che potrebbe dover eseguire. Alcune vengono generate automaticamente, mentre altre hanno impostazioni controllate dall'utilizzatore (vedere "10.2 Impostazioni dei promemoria" a pagina 137).


Consiglio: utilizzare il pulsante Suoneria/vibrazione nella parte destra del Controller per controllare se la notifica emette un segnale acustico o vibra (vedere "Il pulsante Suoneria/Vibrazione del Controller" a pagina 164).

Le notifiche di promemoria sono:

Nessun Pod attivo

Schermata visualizzata	Nessun Pod attivo Attivare un Pod per avviare l'erogazi.. 
Causa	Ricorda all'utilizzatore di attivare un nuovo Pod per avviare l'erogazione di insulina basale.
Suono del Pod:	Nessuno
Suono e vibrazione del Controller:	Si ripete una volta 15 minuti dopo la notifica iniziale, a meno che non venga confermato.
Azione	Sbloccare l'App Omnipod 5. Attivare un nuovo Pod.

Scadenza Pod

Schermata visualizzata	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f9f9f9;"> <p>Scadenza Pod </p> <p>Il Pod scade alle 17:13, 08/01/2024</p> </div>
Causa	<p>Indica il tempo rimasto prima dell'emissione dell'Allarme di Avviso di scadenza del Pod.</p>
Suono del Pod:	<ul style="list-style-type: none"> • segnale acustico a 8 bip • Segnale acustico emesso una volta al minuto per 3 minuti. • Si ripete ogni 15 minuti fino alla conferma.
Suono e vibrazione del Controller:	<p>Si ripete una volta 15 minuti dopo la notifica iniziale, a meno che non venga confermato.</p>
Azione	<p>Confermare il messaggio (vedere “Conferma delle notifiche di promemoria” a pagina 191). Sostituire il Pod.</p>

Nota: per modificare l'impostazione temporale di questa notifica, vedere “Scadenza Pod” a pagina 137. Il Pod e l'App Omnipod 5 emettono entrambi una notifica.

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

CAPITOLO 14

Cura e manutenzione di Controller e Pod

Sommario

14.1 Conservazione e cura del Pod e dell'insulina	196
Conservazione del Pod e dell'insulina	196
Pod e ambiente	196
Evitare le temperature estreme	196
Il Pod e l'acqua.....	197
Pulizia del Pod.....	197
14.2 Conservazione e manutenzione del Controller	197
Conservazione a lungo termine del Controller	198
Il Controller e l'ambiente.....	198
Evitare le temperature estreme	198
L'acqua e il Controller.....	198
Interferenze elettriche.....	199
Cavo caricabatterie e adattatore	199
Pulizia del Controller	199
In caso di caduta del Controller.....	200
14.3 Manutenzione della batteria del Controller	200
Impiego sicuro della batteria del Controller.....	201
Ricarica della batteria del Controller.....	202

14 Cura e manutenzione di Controller e Pod

Avvertenza: NON esporre i prodotti o i materiali di consumo del Sistema Omnipod 5 a temperature estreme poiché ne impediscono il corretto funzionamento. Conservare tutti i prodotti e i materiali di consumo del Sistema Omnipod 5, compresi i Pod sigillati, in un luogo fresco e asciutto.

Il Sistema Automatizzato di Erogazione di Insulina Omnipod 5 non dispone di parti riparabili dall'utilizzatore. Qualora si necessitasse di assistenza per l'utilizzo o la manutenzione del Sistema Omnipod 5, contattare l'Assistenza clienti.

14.1 Conservazione e cura del Pod e dell'insulina

In questa sezione sono illustrate le procedure per la corretta cura e manutenzione del Pod.

Conservazione del Pod e dell'insulina

Caldo o freddo eccessivo può danneggiare i Pod causandone il malfunzionamento.

È molto importante conservare l'insulina in un ambiente sicuro e ben controllato. Esaminare l'insulina prima di utilizzarla. Non usare mai insulina torbida o scolorita, in quanto potrebbe essere vecchia, contaminata o inattiva. Controllare le modalità di utilizzo e la data di scadenza dell'insulina sul foglietto illustrativo del produttore dell'insulina.

Pod e ambiente

Evitare le temperature estreme

Avvertenza: NON esporre il Pod alla luce solare diretta per lunghi periodi di tempo. Rimuovere il Pod prima di entrare in vasche con acqua riscaldata, idromassaggio o saune. Nelle suddette condizioni è infatti possibile che il Pod venga esposto a temperature estreme, che potrebbero inoltre alterare l'insulina contenuta al suo interno con conseguente iperglicemia.

La temperatura per un funzionamento sicuro del Pod, verificata mediante test, è compresa tra 5°C e 40°C (tra 41°F e 104°F). In circostanze normali, la temperatura corporea manterrà il Pod entro un intervallo compreso tra 23°C e 37°C (tra 73°F e 98,6°F).

Attenzione: non utilizzare MAI un asciugacapelli o aria calda per asciugare il Controller o il Pod. Il calore eccessivo può danneggiare i componenti elettronici.

Se si rimuove il Pod per evitare di esporlo a temperature estreme, ricordarsi di controllare frequentemente la glicemia.

Nota: chiedere indicazioni all'operatore sanitario di riferimento se si sta pianificando di non utilizzare Pod per periodi di tempo prolungati.

Nota: consultare le etichette relative all'insulina ad azione rapida, poiché le temperature massime di esposizione all'insulina possono variare in base al tipo di insulina.

Il Pod e l'acqua

Avvertenza: NON immergere il Pod in acqua a profondità superiori a 7,6 metri (25 piedi) o per un periodo di tempo superiore a 60 minuti onde evitare di danneggiarlo e causare un'erogazione eccessiva o insufficiente di insulina, con conseguente ipoglicemia o iperglicemia.

Il Pod è impermeabile fino a una profondità di 7,6 metri (25 piedi) e per un tempo massimo di 60 minuti (IP28). Se il Pod è stato indossato durante il nuoto o se è stato esposto all'acqua, risciacquarlo con acqua pulita e asciugarlo delicatamente con una salvietta.

Pulizia del Pod

I Pod sono impermeabili. Per pulire un Pod, lavarlo delicatamente con un panno umido e pulito. In alternativa, usare acqua e sapone neutro. Evitare in ogni caso l'uso di detergenti aggressivi o solventi, in quanto possono danneggiare l'alloggiamento del Pod o causare irritazioni nel sito di infusione.

Attenzione: prestare attenzione durante la pulizia del Pod indossato. Afferrare saldamente il Pod in modo che la cannula non si pieghi e il Pod non si stacchi dalla pelle.

14.2 Conservazione e manutenzione del Controller

Quando non si utilizza, conservare il Controller in un luogo pratico, fresco e asciutto.

Attenzione: non lasciare MAI incustodito il Controller, tenerlo SEMPRE sotto controllo per garantire che altri non possano apportare modifiche alla propria terapia insulinica. Non condividere la sicurezza blocco schermo del Controller con nessuno.

Attenzione: qualora si sospettino danni in seguito a un evento imprevisto, come ad esempio una caduta o un impatto su una superficie dura, NON utilizzare alcun componente del Sistema Omnipod 5 (Controller, Pod). L'uso di componenti danneggiati può mettere a rischio la salute dell'utilizzatore, in quanto il sistema potrebbe non funzionare correttamente. Se non si ha la certezza che uno o più componenti siano danneggiati, interrompere l'utilizzo del sistema e contattare l'Assistenza clienti.

Conservazione a lungo termine del Controller

Se non si utilizzerà per un periodo di tempo prolungato, lasciare che la batteria del Controller raggiunga tra il 50% e il 60%. Tenere quindi premuto il pulsante di accensione per spegnere (OFF) il Controller.

Il Controller e l'ambiente

Evitare le temperature estreme

L'utilizzo del Controller a temperature estreme può danneggiare la batteria del dispositivo e interferire con il corretto funzionamento del Sistema Omnipod 5. Evitare di usare il Controller a temperature inferiori a 5°C (41°F) o superiori a 40°C (104°F).

Attenzione: NON esporre il Controller a temperature estreme in fase di conservazione o utilizzo. Caldo o freddo eccessivo possono determinare il malfunzionamento del Controller. Per calore eccessivo si intendono temperature > 30°C (86°F) in fase di conservazione e > 40°C (104°F) durante l'uso. Per freddo eccessivo si intendono temperature < 0°C (32°F) in fase di conservazione e < 5°C (41°F) durante l'uso.

L'acqua e il Controller

Attenzione: NON immergere il Controller né collocarlo in prossimità di acqua in quanto non è un dispositivo impermeabile. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe danneggiare il Controller.

Se il Controller si bagna:

1. Asciugare l'esterno del Controller con un panno pulito privo di lanugine.

Attenzione: non utilizzare MAI un asciugacapelli o aria calda per asciugare il Controller o il Pod. Il calore eccessivo può danneggiare i componenti elettronici.

2. Una volta asciugato completamente all'aria, attivare (ON) il Controller per vedere se funziona.
3. Se il Controller non funziona, contattare l'Assistenza clienti.

Interferenze elettriche

Il Controller e il Pod sono progettati per tollerare interferenze radio e campi elettromagnetici normali, inclusi quelli generati nelle postazioni di controllo aeroportuali e dai telefoni cellulari. Come per qualsiasi tecnologia di comunicazione wireless, però, alcune condizioni operative possono causare l'interruzione delle comunicazioni. Ad esempio, elettrodomestici quali i forni a microonde e le apparecchiature elettriche usate in ambienti di produzione possono causare interferenze. Nella maggior parte dei casi, le interruzioni sono facilmente risolvibili spostandosi in una nuova posizione (per ulteriori informazioni, vedere "26.5 Problemi di comunicazione del Pod – "Riprova"" a pagina 398).

Cavo caricabatterie e adattatore

Attenzione: utilizzare ESCLUSIVAMENTE il cavo caricabatterie e l'adattatore in dotazione nella confezione con il Controller. EVITARE l'uso di cavi di ricarica alternativi o altri accessori, in quanto possono danneggiare il Controller o avere effetti sulla ricarica in futuro. Se è necessario utilizzare un altro tipo di cavo, utilizzare solo cavi di lunghezza inferiore o uguale a 1,2 metri (4 piedi).

Nota: è possibile utilizzare il Controller durante la ricarica.

Pulizia del Controller

Mantenere la porta USB del Controller libera da residui e asciutta. Lo sporco, la polvere e i liquidi possono compromettere la funzionalità del Controller o danneggiarlo. Utilizzare aria compressa per rimuovere la polvere. Non soffiare mai nel foro con la bocca.

Attenzione: NON utilizzare solventi per pulire il Controller. NON immergerlo in acqua in quanto non è un dispositivo impermeabile. L'uso di solventi o l'immersione in acqua può causare il malfunzionamento del Controller.

14 Cura e manutenzione di Controller e Pod

Per pulire il Controller:

1. Premere brevemente il pulsante di accensione per mettere il Controller in modalità di sospensione.
2. Pulire la superficie esterna del Controller con un panno umido privo di lanugine. Se necessario, utilizzare una soluzione di acqua tiepida e detergente non aggressivo sul panno.
3. Asciugare la superficie esterna con un panno asciutto privo di lanugine.

Attenzione: durante la pulizia del Controller, NON lasciar penetrare residui o liquidi nella porta USB, nell'altoparlante, nel pulsante Suoneria/Vibrazione o nel pulsante di accensione. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe danneggiare il Controller.

Ogni volta che il Controller viene pulito, esaminare l'intero Controller per escludere la presenza di crepe, parti scolorite o parti che non aderiscono più perfettamente. Escludere anche l'eventuale deterioramento delle prestazioni del dispositivo, ad esempio, messaggi illeggibili, malfunzionamento di pulsanti o ripetuti errori di comunicazione. Se si notano segni di deterioramento, interrompere l'uso del Controller. In caso di domande, contattare l'Assistenza clienti.

In caso di caduta del Controller

Una scossa elettrica o un colpo violento possono danneggiare il Controller. Se il Controller viene lasciato cadere o è comunque sottoposto a colpi violenti, procedere nel modo seguente:

1. Controllare che l'esterno del Controller non presenti segni visibili di danni.
2. Se il Controller si è spento, tenere premuto il pulsante di accensione per vedere se il Controller si accende e viene visualizzato il blocco schermo.

Attenzione: non utilizzare il Controller in caso di danni visibili o di malfunzionamento. Non utilizzare il Controller in caso di rottura dello schermo.

14.3 Manutenzione della batteria del Controller

Il Controller in dotazione utilizza una batteria ricaricabile ai polimeri di litio. Non è possibile rimuovere la batteria dal Controller. In caso di problemi con la batteria o il cavo di ricarica e l'adattatore, contattare l'Assistenza clienti.

Impiego sicuro della batteria del Controller

Attenzione: NON esporre la batteria del Controller a calore elevato [$> 30^{\circ}\text{C}$ (86°F) nel periodo di conservazione e $> 40^{\circ}\text{C}$ (104°F) durante l'uso]. Non forare o schiacciare né esercitare pressione sulla batteria. La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare esplosioni, incendi, scosse elettriche, danni al Controller o alla batteria o perdite da quest'ultima.

Per un impiego sicuro della batteria ricaricabile:

- Per prolungare la durata della batteria, conservare e ricaricare il Controller in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole. Non lasciare il Controller in un'auto esposta a temperature eccessive, in quanto possono danneggiare permanentemente la batteria.
- Se esposto a temperature elevate o in seguito a uso prolungato, il Controller può surriscaldarsi. Se il Controller diventa caldo al tatto, scollegare l'eventuale cavo caricabatterie e adattatore collegato e non toccare né tenere in mano il Controller. Collocarlo in un luogo fresco e lasciarlo raffreddare a temperatura ambiente.
- Non esporre il cavo di ricarica e l'adattatore a liquidi, incluse acqua, pioggia o neve, poiché ciò potrebbe causare malfunzionamenti. In caso di esposizione di batteria o cavo di ricarica e adattatore a liquidi, lasciarli asciugare.
- Non collocare il Controller sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento, come ad esempio forni a microonde, stufe o radiatori. La batteria può esplodere se surriscaldata.
- Non far cadere il Controller.
- Utilizzare esclusivamente un cavo di ricarica e un adattatore approvati da Insulet per caricare il Controller. L'utilizzo di cavi di ricarica e adattatori non approvati può causare l'esplosione della batteria o danneggiare il Controller e potrebbe invalidare la garanzia.
- Se la batteria è danneggiata e del liquido fuoriesce dalla batteria, evitare che questo entri in contatto diretto con la pelle o gli occhi. Se ciò dovesse accadere, sciacquare immediatamente la pelle o gli occhi con acqua pulita e consultare un medico.
- Controllare il cavo di ricarica della batteria e l'adattatore del Controller prima di ogni utilizzo. Se l'adattatore per il cavo di ricarica cade in acqua o presenta segni di rottura, non utilizzarlo.

Ricarica della batteria del Controller

Attenzione: OGNI VOLTA che viene visualizzato il messaggio di batteria scarica, collegare e ricaricare il Controller. Quando la carica della batteria scende a un livello critico, il Controller si spegne e non si riceve l'Allarme di Pericolo di batteria scarica. Senza l'uso del Controller, non sarà possibile modificare l'erogazione di insulina, con conseguenti erogazione eccessiva o insufficiente di insulina e ipoglicemia o iperglicemia.

In condizioni di utilizzo normale, la batteria dovrebbe mantenere la carica per più di un giorno.

Un messaggio dell'App Omnipod 5 avverte quando la carica della batteria si sta esaurendo. L'icona della batteria nella barra di stato monitora la carica rimanente nella batteria (vedere "3.4 Barra di stato" a pagina 48).

Nota: controllare la porta di ricarica e il cavo di ricarica per escludere la presenza di polvere o detriti. Utilizzare aria compressa per rimuovere la polvere. Non soffiare mai nel foro con la bocca.

Per ricaricare il Controller:

1. Assemblare il cavo di ricarica collegando l'adattatore a parete.

Attenzione: utilizzare ESCLUSIVAMENTE il cavo caricabatterie e l'adattatore in dotazione nella confezione con il Controller. EVITARE l'uso di cavi di ricarica alternativi o altri accessori, in quanto possono danneggiare il Controller o avere effetti sulla ricarica in futuro. Se è necessario utilizzare un altro tipo di cavo, utilizzare solo cavi di lunghezza inferiore o uguale a 1,2 metri (4 piedi).

2. Collegare il cavo di ricarica e l'adattatore a una presa di corrente. Scegliere una presa facilmente accessibile e dalla quale scollegare agevolmente il cavo di ricarica e l'adattatore quando necessario.
3. Inserire l'altra estremità del cavo nella porta USB del Controller.
4. Caricare il Controller finché l'icona del livello della batteria non mostra una carica del 100%.
5. Scollegare il cavo di ricarica e l'adattatore dal Controller e dalla presa a muro.

È possibile caricare la batteria molte volte, ma tutte le batterie hanno una durata limitata. Contattare l'Assistenza clienti se si nota un declino significativo della durata della carica della batteria del Controller.

Nota: i tempi di ricarica possono variare in base alla temperatura circostante e al livello rimanente della batteria.

Consiglio: sviluppare una routine per ricaricare la batteria del Controller alla stessa ora ogni giorno. Non aspettare il messaggio di batteria quasi scarica.

Nota: se la batteria del Controller scende a un livello critico e il Controller si è spento (OFF), il Pod continua a erogare insulina in Modalità Automatizzata o insulina basale in Modalità Manuale in base al Programma Basale in corso o alla Basale Temporanea. Se non si carica la batteria del Controller, l'erogazione di insulina continua fino alla scadenza del Pod.

Nota: i registri della cronologia rimangono in memoria per 1 anno anche se il livello di carica della batteria è estremamente basso.

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

CAPITOLO 15

Convivere con il diabete

Sommario

15.1 Controlli del sito di infusione.....	206
15.2 Prestare attenzione ai livelli di glucosio.....	207
15.3 Viaggi e vacanze	208
Pronta accessibilità dei materiali di consumo	208
Piano per il cambio di fuso orario.....	209
Aeroporti e voli.....	209
Controlli aeroportuali	209
Voli e modalità aereo.....	210
15.4 Come evitare valori bassi, alti e chetoacidosi diabetica ...	211
Precauzioni generali	211
Ipoglicemia (glicemia bassa).....	211
Sintomi di ipoglicemia (glicemia bassa)	211
Come evitare l'ipoglicemia (glicemia bassa).....	212
Come trattare l'ipoglicemia (glicemia bassa)	214
Iperglicemia (glicemia alta)	215
Sintomi di iperglicemia (glicemia alta).....	215
Come evitare l'iperglicemia (glicemia alta)	215
Come trattare l'iperglicemia (glicemia alta)	217
Chetoacidosi diabetica (DKA).....	218
Sintomi di DKA	218
Come evitare la DKA	219
Come trattare la DKA.....	219
15.5 Gestione delle situazioni speciali	219
Giorni di malattia.....	219
Esercizio fisico, attività sportiva o lavoro intenso.....	220
Raggi X, RM e scansioni TC.....	221
Intervento chirurgico o ricovero ospedaliero	221

15.1 Controlli del sito di infusione

Attenzione: controllare SEMPRE con frequenza l'eventuale presenza di segni di infezione. Se il sito di infusione presenta segni di infezione:

- Rimuovere immediatamente il Pod e applicarne uno nuovo in un sito di infusione diverso.
- Contattare l'operatore sanitario di riferimento e procedere a curare l'infezione seguendo le istruzioni ricevute.

Se si nota del sangue nella cannula, controllare il glucosio con maggiore frequenza per accertarsi che l'insulina venga erogata correttamente. Qualora si rilevasse glicemia inaspettatamente alta, sostituire il Pod.

Controllare almeno una volta al giorno, attraverso la finestrella di visualizzazione del Pod, il sito di infusione. Verificare che non vi siano:

- Perdite oppure odore di insulina, condizione che potrebbe indicare lo spostamento della cannula.
- Segni di un'infezione, tra cui dolore, gonfiore, rossore, essudazione o calore.

Consiglio: i controlli del sito di infusione devono essere considerati parte integrante della routine quotidiana (come farsi la doccia o lavarsi i denti).

15.2 Prestare attenzione ai livelli di glucosio

Avvertenza: prestare SEMPRE attenzione al valore glicemico attuale del sensore, affidarsi alle sensazioni del proprio corpo e non ignorare i sintomi di glicemia alta e bassa. Anche se l'erogazione di insulina si regola automaticamente in Modalità Automatizzata con l'obiettivo di portare il livello di glucosio al Target Glicemico definito, possono comunque verificarsi eventi di ipoglicemia o iperglicemia grave.

Se i valori glicemici del sensore non corrispondono ai sintomi, controllare SEMPRE il glucosio con un glucometro e, se necessario, prendere in considerazione il trattamento e/o la calibrazione del Sensore. Passare SEMPRE alla Modalità Manuale se si ritiene che i valori glicemici del sensore siano imprecisi.

- Valori glicemici del sensore erroneamente elevati possono causare un'erogazione eccessiva di insulina, con conseguente ipoglicemia grave, crisi convulsive, perdita di coscienza o morte.
- Valori glicemici del sensore erroneamente bassi possono causare sospensioni prolungate dell'erogazione di insulina con conseguenti iperglicemia, DKA o morte.

Se si avvertono sintomi che non sono congruenti con le letture del glucosio e ci si è attenuti alle istruzioni descritte nel presente *Manuale d'uso tecnico*, contattare immediatamente l'operatore sanitario.

Quando si controllano regolarmente i valori glicemici del sensore e/o la glicemia, è possibile identificare meglio quando è necessario prendere una decisione terapeutica o risolvere un problema. Se non si indossa un Sensore, si consiglia di controllare la glicemia almeno 4–6 volte al giorno: al risveglio, prima di ogni pasto e prima di andare a letto.

Eeguire un controllo dei livelli di glucosio:

- qualora si avvertisse un senso di nausea o di malessere
- prima di mettersi alla guida di un'automobile
- in caso di abbassamento o innalzamento insolito dei livelli di glucosio
- se si sospetta che i livelli di glucosio siano alti o bassi
- prima, durante e dopo l'attività fisica
- se è stato indicato dall'operatore sanitario di riferimento

Quando si utilizza un Sensore, se i valori glicemici del sensore sono diversi da quelli attesi sulla base di come ci si sente, controllare la glicemia con un glucometro per verificare l'accuratezza dei valori glicemici del sensore. Ad esempio, in caso di tremori o sudorazione anomali, il che di solito indica livelli di glucosio molto bassi, ma il valore glicemico del sensore

15 Convivere con il diabete

rientra nell'intervallo accettabile, è necessario effettuare un controllo con il glucometro.

Se si rilevano letture glicemiche troppo basse o troppo alte, considerare un trattamento.

Potrebbe essere necessaria una calibrazione del sensore anche se si utilizza il Sensore Dexcom G6; per ulteriori informazioni, consultare le *Istruzioni per l'uso del sistema Dexcom G6*.

15.3 Viaggi e vacanze

È importante tenere i livelli di glucosio costantemente sotto controllo mentre si è in viaggio. Le variazioni di fusi orari, livelli di attività e orari dei pasti possono influire sul glucosio.

Una corretta preparazione è importante quando si viaggia. Le seguenti sezioni aiutano l'utilizzatore a prepararsi per i viaggi.

Pronta accessibilità dei materiali di consumo

Su aerei, treni e autobus, è importante portare con sé i seguenti articoli piuttosto che tenerli nel bagaglio:

- Controller
- Pod di scorta
- un kit di emergenza
- fiale di insulina (la temperatura della stiva può compromettere l'integrità dell'insulina)
- una copia della lettera firmata dell'operatore sanitario di riferimento che attesti l'esigenza di portare con sé scorte di insulina e il Sistema Omnipod 5
- prescrizioni di tutti i farmaci
- farmaci e materiali di consumo con le prescrizioni originali e la documentazione

Nota: all'estero, potrebbe essere più semplice reperire farmaci generici piuttosto che quelli di una marca specifica.

- spuntini e trattamenti per l'ipoglicemia, nel caso in cui non ci sia cibo disponibile
- acqua in bottiglia (soprattutto sugli aerei) per evitare la disidratazione
- nome e numero di telefono del proprio medico e di un medico presso la propria destinazione finale

Nota: per informazioni sui materiali di consumo per il monitoraggio del glucosio da portare con sé, consultare le *Istruzioni per l'uso* del Sensore di glucosio compatibile.

Nota: portare con sé il kit di emergenza durante i viaggi o le vacanze (vedere “Kit di emergenza” a pagina 16). Poiché potrebbe risultare difficile o addirittura impossibile procurarsi dell'insulina o dei materiali di consumo in un luogo sconosciuto, prenderne di più del necessario.

Consiglio: se ci si reca all'estero o si fanno viaggi lunghi, portare con sé materiali di consumo supplementari per il Pod. Prima di partire per un viaggio, contattare l'Assistenza clienti per ordinare materiali di consumo di scorta per il Sistema Omnipod 5.

Piano per il cambio di fuso orario

Se si sta pianificando una vacanza o un viaggio d'affari in un'area geografica con un fuso orario diverso, potrebbe essere necessario modificare i Programmi Basale normalmente utilizzati in Modalità Manuale. Per una differenza di poche ore, le correzioni della velocità basale sono minime e facili da calcolare. Per i viaggi lunghi, invece, può essere difficile prevedere il Programma Basale corretto. L'operatore sanitario di riferimento potrà essere di aiuto con queste regolazioni.

Aeroporti e voli

Prima di viaggiare in aereo, è bene familiarizzare con le procedure di sicurezza aeroportuali e organizzare tutto il necessario per il diabete in modo da evitare problemi durante i controlli di sicurezza e il volo.

Controlli aeroportuali

Preparazione del viaggio:

- Poiché le procedure di controllo e screening aeroportuali possono cambiare, visitare il sito web dell'aeroporto e quello della sicurezza dei trasporti per reperire informazioni di viaggio aggiornate prima della partenza.
- Arrivare all'aeroporto 2–3 ore prima della partenza del volo.
- Tenere i materiali di consumo per la gestione dell'insulina a portata di mano per evitare problemi durante i controlli aeroportuali.

Alcuni aeroporti offrono la possibilità di richiedere un'ispezione visiva dei materiali di consumo medici in alternativa all'esame ai raggi X. Tale richiesta deve essere fatta al personale addetto alla sicurezza prima dell'inizio dello screening. I materiali di consumo medici devono essere tenuti in una borsa a parte quando ci si avvicina al personale addetto alla sicurezza.

15 Convivere con il diabete

Per evitare di contaminare o danneggiare i materiali di consumo, il personale addetto alla sicurezza chiederà all'utilizzatore di mostrare, maneggiare e riporre tutti i materiali durante l'ispezione visiva. Eventuali farmaci e/o relativi materiali di consumo che non possono essere esaminati visivamente devono essere sottoposti allo screening ai raggi X.

Se non si è a proprio agio all'idea di dover passare attraverso un metal detector, è possibile segnalare al personale addetto alla sicurezza che si indossa un microinfusore di insulina, informandolo che non può essere rimosso in quanto inserito con una cannula (ago) sotto la pelle.

Per ulteriori domande o dubbi, visitare il centro di contatto per la sicurezza dei trasporti.

Nota: per informazioni sul passaggio di dispositivi di rilevamento del glucosio attraverso le apparecchiature radiologiche aeroportuali, consultare le *Istruzioni per l'uso* del Sensore di glucosio compatibile.

Voli e modalità aereo

Attenzione: controllare SEMPRE con frequenza il glucosio se si sale su attrazioni di parchi divertimenti e durante i voli o in altre situazioni in cui possono verificarsi cambiamenti improvvisi o estremi di pressione dell'aria, altitudine o gravità. Sebbene sia sicuro usare il Sistema Omnipod 5 alle pressioni atmosferiche tipiche delle cabine degli aerei durante i voli, la pressione atmosferica al loro interno può variare nel corso del volo e avere effetti sull'erogazione di insulina da parte del Pod. Rapide variazioni di altitudine e gravità, come quelle che di solito avvengono sulle attrazioni dei parchi divertimenti o in fase di decollo e atterraggio dei voli, possono avere effetti sull'erogazione di insulina, con conseguenti possibili episodi di ipoglicemia o lesioni. Se necessario, attenersi alle indicazioni dell'operatore sanitario di riferimento.

Il Sistema Omnipod 5 invia e riceve informazioni dal Pod utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth. Prima di volare, controllare la politica della compagnia aerea riguardo all'utilizzo di dispositivi elettronici medici personali che comunicano tramite la tecnologia Bluetooth.

Se è consentito utilizzare un dispositivo medico elettronico personale con tecnologia Bluetooth, impostare l'App Omnipod 5 in modalità aereo mentre si è in aereo (vedere "Modalità aereo" a pagina 132). L'impostazione Bluetooth rimane abilitata nella modalità aereo del Controller in modo da poter comunicare con il Pod.

Nota: il Sistema Omnipod 5 può essere utilizzato a pressioni atmosferiche tipiche delle cabine degli aerei durante il volo. Il Sistema Omnipod 5 può essere utilizzato a pressioni atmosferiche fino a un minimo di 700 hPa, che è un valore inferiore alla pressione tipica delle cabine degli aerei.

15.4 Come evitare valori bassi, alti e chetoacidosi diabetica

È possibile evitare la maggior parte dei rischi correlati all'uso del Sistema Omnipod 5 seguendo le istruzioni contenute in questo *Manuale d'uso tecnico* e trattando tempestivamente i sintomi di ipoglicemia (glicemia bassa), iperglicemia (glicemia alta) o chetoacidosi diabetica (DKA) in base alle istruzioni dell'operatore sanitario. Il modo più semplice e sicuro per evitare queste situazioni è controllare frequentemente i livelli di glucosio.

Precauzioni generali

- Registrare attentamente i valori e discutere con il proprio operatore sanitario di riferimento eventuali modifiche e aggiustamenti.
- Informare il proprio operatore sanitario di riferimento in caso di glicemia eccessivamente alta o bassa oppure se questi sbalzi si verificano più spesso del solito.
- In caso di problemi tecnici non risolvibili con il Sistema Omnipod 5, contattare immediatamente l'Assistenza clienti.

Ipoglicemia (glicemia bassa)

Avvertenza: NON aspettare per trattare l'ipoglicemia (glucosio basso) o i relativi sintomi. Anche se non è possibile controllare il valore del glucosio, attendere per trattare i sintomi manifestati potrebbe portare a un'ipoglicemia grave, che a sua volta può sfociare in crisi convulsive, perdita di coscienza o morte.

L'ipoglicemia si può verificare anche quando il Pod funziona correttamente. Non ignorare mai i segnali di bassi livelli di glucosio, anche se lievi. Se non trattate, le ipoglicemie gravi possono causare crisi o provocare perdita di conoscenza. Se si sospetta un basso livello di glucosio, controllare la glicemia per confermare.

Sintomi di ipoglicemia (glicemia bassa)

Non ignorare mai i seguenti sintomi, in quanto possono segnalare una condizione di ipoglicemia:

- tremori
- stanchezza
- sudorazione inspiegabile
- cute fredda e sudata
- debolezza
- vista offuscata o cefalea
- fame improvvisa
- frequenza cardiaca accelerata
- confusione
- formicolio alle labbra o alla lingua
- ansia

Consiglio: verificare che il livello glicemico sia di almeno 5,6 mmol/L (100 mg/dL) prima di mettersi alla guida di veicoli o di utilizzare macchinari o apparecchiature pericolose. L'ipoglicemia può causare perdita di controllo del veicolo o di apparecchiature pericolose. La concentrazione sullo svolgimento di un compito può inoltre impedire alla persona di avvertire i sintomi dell'ipoglicemia.

Consiglio: insegnare a persone fidate (come parenti e amici) come praticare un'iniezione di glucagone. Sarà infatti necessario affidarsi a loro qualora si perdesse conoscenza a causa di una forte crisi ipoglicemica. Includere una copia delle istruzioni per il glucagone nel kit di emergenza e rivedere periodicamente la procedura con amici e parenti.

Come evitare l'ipoglicemia (glicemia bassa)

- Consultare l'operatore sanitario di riferimento per stabilire insieme impostazioni personalizzate del Target Glicemico e relative linee guida.
- Portare sempre con sé dei carboidrati ad azione rapida per poter intervenire rapidamente in caso di glicemia bassa. Esempi di carboidrati ad azione rapida sono le compresse di glucosio, le caramelle o i succhi di frutta.
- Insegnare ad amici, familiari e colleghi a riconoscere i segni dell'ipoglicemia, in modo da intervenire in caso di ipoglicemia inavvertita o di una grave reazione avversa.
- Includere nei materiali di emergenza un kit di glucagone. Insegnare ad amici e familiari come somministrare una dose di glucagone in caso di un attacco ipoglicemico grave con perdita di conoscenza.

Controllare periodicamente la data di scadenza del kit di glucagone.

Nota: portare sempre nel portafoglio una tessera identificativa per le emergenze mediche e indossare una collana o un braccialetto identificativi come quelli di Medic Alert.

Anche in questo caso, controlli frequenti del glucosio sono essenziali per evitare potenziali problemi. Il tempestivo rilevamento di glicemia bassa consente di trattarla prima che diventi un problema.

Consultare l'operatore sanitario di riferimento per indicazioni su come evitare l'ipoglicemia.

Possibili cause di ipoglicemia	Azione suggerita
Programma Basale non corretto (Modalità Manuale)	Verificare che sia attivo il Programma Basale corretto. Consultare l'operatore sanitario di riferimento riguardo la regolazione dei Programmi Basale o l'uso di una Basale Temporanea.


Possibili cause di ipoglicemia	Azione suggerita
Temporizzazione del bolo errata o bolo troppo grande	<p>Assumere il bolo insieme al cibo.</p> <p>Controllare la glicemia prima di somministrare un bolo pasto. Se necessario, regolare il bolo.</p> <p>Controllare la quantità e la sincronizzazione del bolo.</p> <p>Non correggere eccessivamente il glucosio post-prandiale.</p> <p>Controllare l'assunzione di carboidrati.</p> <p>Consultare l'operatore sanitario di riferimento in caso di dubbi o domande.</p>
<p>Livelli del Target Glicemico non corretti</p> <p>o Fattore di Correzione non corretto</p> <p>o Rapporto Insulina/Carboidrati (IC) non corretto</p>	<p>Consultare il proprio operatore sanitario di riferimento per mettere a punto queste impostazioni in base alle proprie esigenze.</p>
<p>Predisposizione all'ipoglicemia grave</p> <p>o all'ipoglicemia inavvertita</p>	<p>Consultare l'operatore sanitario di riferimento per informazioni sull'ipoglicemia inavvertita e sull'innalzamento del Target Glicemico.</p>
<p>Attività fisica non programmata</p>	<p>Consultare l'operatore sanitario in merito all'utilizzo della Basale Temporanea (Modalità Manuale) o della Funzione Attività fisica (Modalità Automatizzata).</p>

Possibili cause di ipoglicemia	Azione suggerita
Esercizio fisico prolungato o intenso	<p>Regolare l'erogazione di insulina in base alle istruzioni fornite dall'operatore sanitario di riferimento.</p> <p>Controllare il glucosio prima, durante e dopo l'attività fisica e trattare secondo necessità.</p> <p>Nota: gli effetti dell'attività fisica possono protrarsi per svariate ore, persino per un intero giorno, dopo la fine dell'attività.</p> <p>Consultare l'operatore sanitario di riferimento riguardo alla regolazione dei Programmi Basale o l'uso di una Basale Temporanea (Modalità Manuale) o della Funzione Attività fisica (Modalità Automatizzata) per evitare l'ipoglicemia.</p>
Assunzione di una quantità ridotta di carboidrati prima dell'attività fisica	<p>Controllare il glucosio prima di svolgere attività fisica.</p> <p>Consultare l'operatore sanitario di riferimento in caso di dubbi o domande.</p>
Consumo di alcolici	<p>Controllare frequentemente il glucosio, soprattutto prima di coricarsi.</p> <p>Consultare l'operatore sanitario di riferimento in caso di dubbi o domande.</p>

Come trattare l'ipoglicemia (glicemia bassa)

Ogni volta che il livello di glucosio si abbassa, intervenire immediatamente secondo le indicazioni dell'operatore sanitario di riferimento. L'operatore sanitario potrebbe consigliare di trattare l'ipoglicemia con una quantità diversa di carboidrati durante la Modalità Automatizzata rispetto alla Modalità Manuale. Controllare il livello di glucosio ogni 15 minuti durante il trattamento per accertarsi di non intervenire eccessivamente sulla condizione e causare un innalzamento eccessivo dei livelli di glucosio. Contattare l'operatore sanitario di riferimento in caso di dubbi o domande.

Iperglicemia (glicemia alta)

Avvertenza: monitorare SEMPRE il glucosio e, quando si interrompe l'erogazione di insulina a causa di un'ostruzione (occlusione), attenersi alle linee guida terapeutiche dell'operatore sanitario di riferimento. Il mancato intervento tempestivo può comportare una somministrazione insufficiente di insulina con conseguente iperglicemia o chetoacidosi diabetica (DKA) (vedere “ Rilevata ostruzione” a pagina 169).

I pod utilizzano insulina ad azione rapida, che ha una durata inferiore rispetto all'insulina ad azione prolungata, in modo da non avere insulina ad azione prolungata nell'organismo quando si utilizza il Sistema Omnipod 5. Se si verifica un'ostruzione (interruzione dell'erogazione di insulina dal Pod), o un'occlusione, il glucosio può aumentare rapidamente.

Consiglio: i sintomi dell'iperglicemia possono essere fuorvianti. Controllare sempre il glucosio prima di trattare l'iperglicemia.

Sintomi di iperglicemia (glicemia alta)

Non ignorare mai i seguenti sintomi, in quanto possono segnalare una condizione di iperglicemia:

- stanchezza
- diuresi frequente, soprattutto durante la notte
- sete o fame insolita
- calo ponderale inspiegabile
- visione annebbiata
- lenta cicatrizzazione di tagli o ferite

Come evitare l'iperglicemia (glicemia alta)

Eseguire un controllo dei livelli di glucosio:

- almeno 4–6 volte al giorno, ovvero al risveglio, prima di ogni pasto e prima di andare a letto, a meno che non si stia utilizzando un sistema di monitoraggio continuo del glucosio
- se si avverte un senso di nausea o di malessere
- prima di mettersi alla guida di un'automobile
- in caso di abbassamento o innalzamento insolito dei livelli di glucosio
- se si sospetta che i livelli di glucosio siano alti o bassi
- prima, durante e dopo l'attività fisica

15 Convivere con il diabete

- se è stato indicato dall'operatore sanitario di riferimento

Possibili cause di iperglicemia	Azione suggerita
Insulina scaduta o esposta a temperature estreme	Disattivare e rimuovere il Pod usato. Applicare un nuovo Pod riempito con una nuova fiala di insulina.
Sito di infusione vicino a o in corrispondenza di una cicatrice o di un neo	Disattivare e rimuovere il Pod usato. Applicare un nuovo Pod in una posizione diversa.
Sito di infusione infetto	Disattivare e rimuovere il Pod usato. Applicare un nuovo Pod in una posizione diversa e consultare l'operatore sanitario di riferimento.
Dislocamento della cannula	Disattivare e rimuovere il Pod usato. Applicare un nuovo Pod in una posizione diversa. Nota: evitare siti in prossimità di cinture o altre zone in cui lo sfregamento potrebbe causare il dislocamento della cannula.
Pod vuoto	Disattivare e rimuovere il Pod usato. Applicare un nuovo Pod in una posizione diversa.
Programma Basale non corretto (Modalità Manuale)	Verificare che sia attivo il Programma Basale corretto. Consultare l'operatore sanitario di riferimento riguardo la regolazione dei Programmi Basale o l'uso di una Basale Temporanea.
Temporizzazione del bolo errata o bolo troppo piccolo	Controllare l'assunzione di carboidrati. Assumere il bolo con o prima del pasto piuttosto che dopo. Controllare il glucosio prima di somministrare il bolo pasto. Se necessario, regolare il bolo. Consultare l'operatore sanitario di riferimento in caso di dubbi o domande.
Pasto troppo ricco di proteine o lipidi	Calcolare l'assunzione di proteine/lipidi e tenerne conto per la definizione del tipo di bolo e dell'intervallo di erogazione. Consultare il proprio operatore sanitario di riferimento in merito all'impiego dell'opzione Bolo prolungato.

Possibili cause di iperglicemia	Azione suggerita
Attività fisica inferiore al consueto	Consultare l'operatore sanitario di riferimento riguardo la regolazione dei Programmi Basale o l'uso di una Basale Temporanea (Modalità Manuale).
Valore del glucosio superiore a 13,9 mmol/L (250 mg/dL) (con presenza di chetoni) prima dell'attività fisica	Non svolgere attività fisica se sono presenti chetoni. Nota: il glucosio sale se si svolge attività fisica in presenza di chetoni. Consultare l'operatore sanitario di riferimento in caso di dubbi o domande.
Infezione o malattia o modifica della terapia	Vedere "Giorni di malattia" a pagina 219. Consultare l'operatore sanitario di riferimento per indicazioni su come comportarsi nei giorni di malattia e come modificare la terapia.
Perdita o aumento di peso, ciclo mestruale o gravidanza	Consultare l'operatore sanitario di riferimento in caso di dubbi o domande.
Ostruzione (occlusione)	Disattivare e rimuovere il Pod usato. Applicare un nuovo Pod in una posizione diversa.

Come trattare l'iperglicemia (glicemia alta)

Avvertenza: se si necessita di cure mediche di emergenza, non mettersi MAI alla guida verso il pronto soccorso, ma farsi accompagnare da un amico o da un parente oppure chiamare un'ambulanza.

Tenere i livelli di glucosio costantemente sotto controllo durante il trattamento dell'iperglicemia. Questo impedirà di eccedere con il trattamento e causare un abbassamento eccessivo del glucosio.

1. Eseguire un controllo dei livelli di glucosio. Il risultato aiuterà a individuare la quantità di insulina necessaria a riportare il glucosio entro l'Obiettivo glicemico.
2. Se il livello del glucosio è pari o superiore a 13,9 mmol/L (250 mg/dL), controllare i chetoni. Se sono presenti chetoni, attenersi alle indicazioni dell'operatore sanitario di riferimento.

15 Convivere con il diabete

3. Se non sono presenti chetoni, assumere un bolo di correzione, come prescritto dall'operatore sanitario di riferimento.
 4. Controllare di nuovo il glucosio dopo 2 ore.
 5. Se i livelli di glucosio non sono diminuiti, eseguire le seguenti operazioni:
 - Assumere un secondo bolo mediante iniezione, usando una siringa sterile. Chiedere all'operatore sanitario di riferimento se è necessario iniettare la stessa quantità di insulina di cui al passaggio 3.
 - Sostituire il Pod. Usare una nuova fiala di insulina per riempire il nuovo Pod. Quindi consultare l'operatore sanitario di riferimento per indicazioni.
- Nota:** il Sistema Omnipod 5 non è in grado di monitorare l'insulina erogata al di fuori del sistema. Consultare l'operatore sanitario di riferimento per conoscere il tempo di attesa dopo l'erogazione manuale dell'insulina prima di avviare la Modalità Automatizzata.
6. Se si avverte un senso di nausea in qualsiasi momento, controllare i chetoni e contattare immediatamente l'operatore sanitario di riferimento.

Chetoacidosi diabetica (DKA)

Avvertenza: NON aspettare per trattare la DKA. Se non trattata, la DKA può sfociare rapidamente in respirazione difficoltosa, shock, coma o morte.

I pod utilizzano insulina ad azione rapida, che ha una durata inferiore rispetto all'insulina ad azione prolungata, in modo da non avere insulina ad azione prolungata nell'organismo quando si utilizza il Sistema Omnipod 5. Se l'erogazione di insulina dal Pod viene interrotta (ostruzione o occlusione), il livello del glucosio può aumentare rapidamente, provocando chetoacidosi diabetica (DKA). La DKA è un'emergenza grave, ma evitabile, che può verificarsi se la condizione di glicemia alta non viene risolta, in caso di malattia o quando non vi è abbastanza insulina nel corpo.

Sintomi di DKA

- Nausea e vomito
- Dolore addominale
- Disidratazione
- Alito acetone
- Pelle o bocca secca
- Sonnolenza
- Tachicardia

- Respiro affannoso

I sintomi della DKA sono molto simili a quelli di un'influenza. Prima di pensare di avere contratto un'influenza, controllare il glucosio e la presenza di chetoni per escludere la DKA.

Come evitare la DKA

Il modo più semplice e sicuro per evitare la DKA consiste nel controllare il glucosio almeno 4–6 volte al giorno. I controlli di routine consentono di identificare e trattare la glicemia alta prima che si sviluppi la DKA.

Come trattare la DKA

- Una volta iniziato il trattamento per glicemia alta, controllare i chetoni. Controllare i chetoni ogni volta che il glucosio è pari o superiore a 13,9 mmol/L (250 mg/dL).
- Se i chetoni sono negativi o ve ne sono solo tracce, continuare il trattamento per la glicemia alta.
- Se i chetoni sono positivi e si avverte senso di nausea o di malessere, contattare immediatamente l'operatore sanitario di riferimento.
- Se i chetoni sono positivi, ma non si avverte alcun senso di nausea o di malessere, sostituire il Pod e usare una nuova fiala di insulina.
- Controllare di nuovo il glucosio dopo 2 ore. Se il glucosio non è diminuito o se i livelli di chetoni sono aumentati o rimangono elevati, contattare immediatamente l'operatore sanitario per indicazioni.

15.5 Gestione delle situazioni speciali

Giorni di malattia

Qualsiasi sforzo fisico o stress emotivo può causare un aumento del glucosio, e una malattia è da considerare alla stregua di uno sforzo fisico. L'operatore sanitario di riferimento può essere di aiuto nella definizione di un piano per i giorni di malattia. Di seguito sono riportate solo delle linee guida generiche.

In caso di malattia, controllare con maggiore frequenza il glucosio per evitare la DKA. I sintomi della DKA sono molto simili a quelli di un'influenza. Prima di presumere di avere contratto un'influenza, controllare il glucosio per escludere la DKA (vedere "Come trattare l'iperglicemia (glicemia alta)" a pagina 217).

Per gestire i giorni di malattia:

- Trattare la malattia sottostante per favorire una guarigione più veloce.

15 Convivere con il diabete

- Mangiare il più normalmente possibile. Il corpo ha ancora bisogno di carboidrati e insulina per ottenere energia.
- Regolare le dosi di bolo, se necessario, in modo che corrispondano alle modifiche apportate ai pasti principali e agli spuntini.
- Continuare ad assumere l'insulina basale, anche quando non si è in grado di mangiare. Contattare l'operatore sanitario di riferimento per suggerimenti su come regolare la velocità basale durante i giorni di malattia.
- Controllare il glucosio ogni 2 ore e registrare accuratamente i risultati.
- Controllare la presenza di chetoni quando il glucosio è pari o superiore a 13,9 mmol/L (250 mg/dL) e/o in caso di malessere, in quanto i chetoni possono essere presenti anche quando il glucosio rientra nell'intervallo previsto durante la malattia.
- Attenersi alle indicazioni fornite dall'operatore sanitario di riferimento riguardo alla possibilità di aumentare l'assunzione di insulina durante i giorni di malattia.
- Assumere abbondanti liquidi per prevenire la disidratazione.
- Se i sintomi persistono, contattare l'operatore sanitario di riferimento.

Esercizio fisico, attività sportiva o lavoro intenso

Controllare il glucosio prima, durante e dopo l'esercizio fisico, l'attività sportiva o sforzi fisici insolitamente intensi.

L'adesivo mantiene il Pod saldamente in posizione per un massimo di 3 giorni. Tuttavia, in caso di bisogno, sono disponibili diversi prodotti per aumentare l'adesione. Per informazioni sui prodotti in questione, chiedere all'operatore sanitario di riferimento.

Evitare di usare prodotti per la pelle, creme oppure oli vicino al sito di infusione, in quanto potrebbero causare il distacco dell'adesivo.

Per alcuni sport di contatto, se il Pod si trova in una posizione in cui è probabile che venga colpito, prendere in considerazione la rimozione del Pod e il posizionamento di uno nuovo in una posizione più protetta.

Assicurarsi di controllare il glucosio prima della rimozione del Pod e dopo l'applicazione di un nuovo Pod. I Pod sono monouso. Non tentare di riapplicare un Pod usato.

Se è necessario rimuovere il Pod per più di un'ora, chiedere al proprio operatore sanitario di riferimento come procedere.

Raggi X, RM e scansioni TC

Avvertenza: i componenti del dispositivo, tra cui il Pod, il Sensore Dexcom G6, il Trasmettitore Dexcom G6 e il Sensore FreeStyle Libre 2 Plus, possono risentire dell'esposizione a forti radiazioni o campi magnetici. I componenti del dispositivo devono essere rimossi (e il Pod e il Sensore devono essere smaltiti) prima di eseguire radiografie, risonanza magnetica (RM) o tomografia computerizzata (TC) (o qualsiasi test o procedura simile). Inoltre, il Controller deve essere collocato all'esterno della sala operatoria. L'esposizione a raggi X, RM, TC o al trattamento può danneggiare questi componenti. Per conoscere le linee guida per la rimozione del Pod, rivolgersi all'operatore sanitario di riferimento.

Il Pod e il Controller sono in grado di tollerare campi elettromagnetici ed elettrostatici normali, inclusi quelli generati nelle postazioni di controllo aeroportuali e dai telefoni cellulari.

Intervento chirurgico o ricovero ospedaliero


Per interventi chirurgici o ricoveri ospedalieri programmati, informare il medico/chirurgo o il personale ospedaliero di essere portatori di un Pod a insulina. Potrebbe rendersi necessaria la rimozione del Pod per determinate trattamenti o procedure. Ricordarsi di erogare l'insulina basale non erogata durante il periodo in cui il Pod era stato rimosso. L'operatore sanitario di riferimento fornirà le indicazioni necessarie a prepararsi per queste situazioni.

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

SUGGERITORE SMARTBOLUS

Suggeritore SmartBolus
Importanti informazioni di sicurezza

- 16 Erogazione di un bolo
- 17 Erogazione di un bolo con il Suggeritore SmartBolus
- 18 Calcoli del Suggeritore SmartBolus

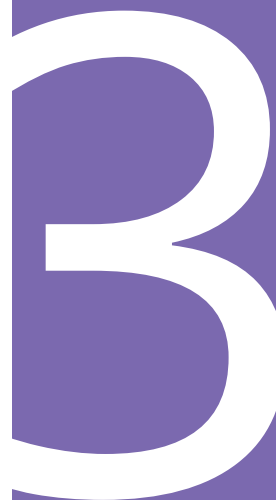

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

Importanti informazioni di sicurezza del Suggeritore SmartBolus

Avvertenze relative al Suggeritore SmartBolus

Avvertenza: prima di rivolgersi all'operatore sanitario di riferimento, EVITARE di modificare le impostazioni del Suggeritore SmartBolus. Modifiche non corrette possono comportare un'erogazione eccessiva o insufficiente di insulina, con conseguente ipoglicemia o iperglicemia. Le impostazioni che influiscono principalmente sui calcoli del bolo sono le seguenti: Bolo massimo, Glicemia Minima per il Suggeritore di Bolo, Correggi se superiore a, Fattore/i di Correzione, Rapporto/i Insulina/Carboidrati (IC), Durata dell'azione dell'insulina e Target Glicemico.

Avvertenza: quando si utilizza la funzione di Bolo prolungato, controllare SEMPRE con frequenza il glucosio per evitare la comparsa di un episodio ipoglicemico o iperglicemico.

Avvertenza: EVITARE di immettere una lettura del glucosio precedente di oltre 10 minuti. Se si utilizza una lettura precedente di oltre 10 minuti, il suggeritore bolo può calcolare e consigliare una dose errata, con conseguente erogazione eccessiva o insufficiente di insulina con conseguente ipoglicemia o iperglicemia.

Avvertenza: prestare SEMPRE attenzione al valore glicemico attuale del sensore, affidarsi alle sensazioni del proprio corpo e non ignorare i sintomi di glicemia alta e bassa. Anche se l'erogazione di insulina si regola automaticamente in Modalità Automatizzata con l'obiettivo di portare il livello di glucosio al Target Glicemico definito, possono comunque verificarsi eventi di ipoglicemia o iperglicemia grave.

Se i valori glicemici del sensore non corrispondono ai sintomi, controllare SEMPRE il glucosio con un glucometro e, se necessario, prendere in considerazione il trattamento e/o la calibrazione del Sensore. Passare SEMPRE alla Modalità Manuale se si ritiene che i valori glicemici del sensore siano imprecisi.

- Valori glicemici del sensore erroneamente elevati possono causare un'erogazione eccessiva di insulina, con conseguente ipoglicemia grave, crisi convulsive, perdita di coscienza o morte.
- Valori glicemici del sensore erroneamente bassi possono causare sospensioni prolungate dell'erogazione di insulina con conseguenti iperglicemia, DKA o morte.

Se si avvertono sintomi che non sono congruenti con le letture del glucosio e ci si è attenuti alle istruzioni descritte nel presente *Manuale d'uso tecnico*, contattare immediatamente l'operatore sanitario.

Avvertenza: NON utilizzare il Sistema Omnipod 5 con il Sensore Dexcom G6 se si assume idrossiurea, un farmaco utilizzato nel trattamento di malattie tra cui il cancro e l'anemia a cellule falciformi. I valori glicemici del Sensore Dexcom G6 possono essere falsamente elevati e causare un'erogazione eccessiva di insulina con conseguente ipoglicemia grave.

Attenzione: NON allontanarsi dall'App Omnipod 5 durante il processo di modifica delle impostazioni di erogazione dell'insulina. Se si esce dall'app prima di salvare la modifica delle impostazioni e che questa venga implementata, il sistema continuerà a utilizzare le ultime impostazioni salvate. Questo significa che si rischia di proseguire con delle impostazioni terapeutiche diverse da quelle che si intendeva immettere. Se non si è sicuri che le modifiche siano state salvate, rivedere le impostazioni.

Precauzioni relative al Suggeritore SmartBolus

Attenzione: controllare SEMPRE il glucosio prima di erogare un bolo in modo da essere certi delle quantità da assumere. L'erogazione di un bolo senza aver prima controllato il glucosio può comportare un'erogazione eccessiva o insufficiente di insulina, con conseguente ipoglicemia o iperglicemia.

CAPITOLO 16

Erogazione di un bolo

Sommario

16.1 Erogazione di un bolo manuale	228
16.2 Erogazione di boli immediati e Boli prolungati	229
16.3 Monitoraggio del progresso di un bolo	230
Avanzamento del bolo immediato	230
Avanzamento del Bolo prolungato.....	231
16.4 Annullamento dell'erogazione di un bolo in corso	231
Annullamento di un bolo	232
Erogazione di un nuovo prima della fine dell'erogazione di un Bolo prolungato.....	232

16.1 Erogazione di un bolo manuale

In alcune situazioni, si potrebbe decidere di erogare un bolo manuale. Un bolo manuale è un bolo calcolato dall'utilizzatore senza l'aiuto del Suggestore SmartBolus. È possibile utilizzare i boli manuali quando il Suggestore SmartBolus è temporaneamente disabilitato o quando si sceglie di non utilizzarlo. Consultare l'operatore sanitario di riferimento per istruzioni su come calcolare un bolo.


È possibile prolungare solo una porzione o tutto il bolo manuale in Modalità Manuale.

Quando si eroga un bolo manuale, il Sistema Omnipod 5 non regola la quantità di bolo in base al valore di glucosio, ai carboidrati consumati o all'IOB come avviene quando si utilizza il Suggestore SmartBolus.

Nota: qualsiasi bolo somministrato dall'utilizzatore sarà considerato come IOB e potrebbe influire sull'erogazione di insulina automatizzata in Modalità Automatizzata. I valori attuali del glucosio continueranno a essere considerati in Modalità Automatizzata e potrebbero influire sull'erogazione di insulina automatizzata.

Un bolo non può essere superiore all'impostazione Bolo massimo. Vedere "Bolo massimo" a pagina 249.

Per erogare un bolo manuale:


1. Nella schermata Home, toccare il pulsante Bolo ().
2. Toccare il campo Bolo totale e immettere la quantità di bolo.
3. Toccare Fatto.
4. Per erogare immediatamente l'intero bolo, toccare CONFERMA.
5. Rivedere i dettagli del bolo nella schermata Conferma bolo.
6. Toccare AVVIA per avviare il bolo.

I dettagli relativi al bolo e alla quantità di bolo vengono memorizzati nei registri della cronologia. La schermata Home monitora l'erogazione di un bolo immediato o di un Bolo prolungato.

16.2 Erogazione di boli immediati e Boli prolungati

Un bolo è una dose extra di insulina che viene erogata in aggiunta alla velocità basale che viene somministrata in maniera continuativa. Utilizzare i boli per coprire i carboidrati di un pasto e/o ridurre livelli di glucosio elevati.

Si ha la possibilità di erogare l'intero bolo in una sola volta. In questo caso si parla di "bolo immediato" o, semplicemente, "bolo". In Modalità Manuale, è possibile diluire l'erogazione dell'intero bolo pasto o di una sua porzione perché sia costante nel corso di un periodo di tempo specificato. In questo caso si parla di "Bolo prolungato".

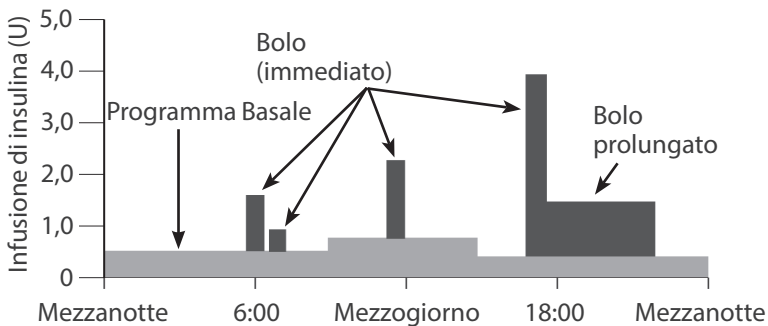

È consigliabile prolungare un bolo se si mangiano alimenti ricchi di lipidi o di proteine. Questi tipi di alimenti impiegano più tempo per essere digeriti e quindi rallentano l'aumento dei livelli di glucosio post-prandiale.

16.3 Monitoraggio del progresso di un bolo

Durante la somministrazione di un bolo, la schermata Home visualizza una barra di avanzamento.

Avanzamento del bolo immediato

Durante l'erogazione di un bolo immediato, la schermata Home visualizza il messaggio Erogazione bolo in corso insieme a una barra di avanzamento e ai dettagli.


Nella parte in basso a sinistra dello schermo viene visualizzata una stima dell'insulina attiva (IOB).

Se l'IOB non è disponibile, nella parte in basso a sinistra dello schermo viene visualizzata la quantità dell'ultimo bolo completato.

Nota: non è possibile navigare all'interno dell'App Omnipod 5 durante un bolo immediato.

Nota: cercare la barra di avanzamento per verificare che l'erogazione del bolo sia iniziata prima di uscire dall'App Omnipod 5.

Per annullare un bolo, vedere “16.4 Annullamento dell'erogazione di un bolo in corso” a pagina 231.

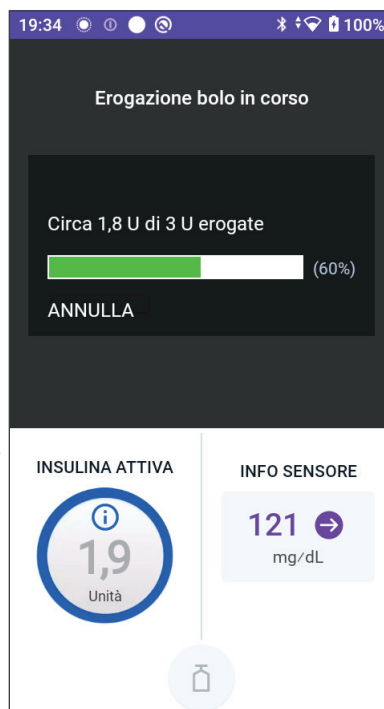

Avanzamento del Bolo prolungato

Durante l'erogazione di un Bolo prolungato, nella scheda DASHBOARD della schermata Home viene visualizzato il messaggio Erogazione Bolo prolungato in corso insieme a una barra di avanzamento e ad altri dettagli.

Nella parte in basso a sinistra dello schermo viene visualizzata una stima dell'insulina attiva (IOB).

Se l'IOB non è disponibile, nella parte in basso a sinistra dello schermo viene visualizzata la quantità dell'ultimo bolo completato.

Nota: è comunque possibile navigare all'interno dell'App Omnipod 5 durante l'erogazione di un Bolo prolungato, ma alcune funzioni non saranno disponibili fino al completamento del bolo.

A meno che il bolo non venga annullato, il Pod porta a termine l'erogazione indipendentemente dalla distanza di comunicazione dal Controller. Per annullare un bolo, vedere “16.4 Annullamento dell'erogazione di un bolo in corso” nella prossima sezione.



16.4 Annullamento dell'erogazione di un bolo in corso

Quando un bolo immediato è attivo, è necessario annullarlo o attendere il completamento prima di eseguire qualsiasi altra azione.

Durante l'erogazione di un Bolo prolungato, è possibile utilizzare normalmente il Sistema Omnipod 5, a eccezione del pulsante Bolo che sarà disattivato (in grigio), impedendo l'erogazione di un bolo aggiuntivo. È possibile:

- Annullare il bolo.
- Annullare il bolo in corso e procedere a erogare un altro bolo.

Se viene visualizzato un messaggio di errore di comunicazione quando si annulla un bolo, vedere “Errore durante l'annullamento di un bolo” a pagina 400.

16 Erogazione di un bolo

Annullamento di un bolo

Per annullare un bolo immediato o un Bolo prolungato:

1. Nella schermata Home (bolo immediato) o nella scheda DASHBOARD della schermata Home (Bolo prolungato), toccare ANNULLA.
2. Toccare Sì per confermare l'annullamento del bolo. Il Pod emetterà un segnale acustico a conferma che il bolo è stato annullato.

Consiglio: per vedere la quantità di insulina erogata da un bolo, andare a: pulsante Menu (☰) > Dettagli Cronologia > Sommario. Per ulteriori informazioni, vedere “Bolo immediato e Bolo prolungato” a pagina 151.

Erogazione di un nuovo prima della fine dell'erogazione di un Bolo prolungato

Per erogare un bolo mentre è in corso un Bolo prolungato:

1. Annullare il Bolo prolungato come descritto nella procedura precedente, “Annullamento di un bolo”.
2. Determinare la quantità di insulina rimanente (non erogata) del bolo annullato. I dettagli del bolo sono disponibili sul pulsante Menu (☰) > Dettagli Cronologia > Sommario.
3. Nella schermata Bolo, inserire le informazioni su carboidrati e glucosio (oppure toccare USA SENSORE).
4. Opzionale: tenere in considerazione la quantità rimanente del bolo annullato e aggiungerla quantità nel campo Bolo totale.
5. Verificare che la quantità immessa nel campo Bolo totale sia corretta. Quindi toccare CONFERMA.
6. Toccare AVVIA.

CAPITOLO 17

Erogazione di un bolo con il Suggeritore SmartBolus

Sommario

17.1 Informazioni sul Suggeritore SmartBolus	234
Informazioni su boli di correzione e boli pasto	234
Informazioni sull'uso del valore glicemico del sensore con tendenza	234
17.2 Immissione delle informazioni del pasto	236
17.3 Creazione di un Alimento Personalizzato	237
17.4 Modifica degli Alimenti Personalizzati	237
17.5 Immissione delle informazioni del pasto con Alimenti Personalizzati	238
17.6 Inserimento di una lettura glicemica o utilizzo di un valore glicemico del sensore	238
Immissione manuale della lettura glicemica	239
Importazione e utilizzo del valore glicemico del sensore	240
17.7 Insulina Attiva (IOB)	241
Come viene calcolata l'IOB	241
IOB nel Suggeritore SmartBolus	241
17.8 Regolazioni al calcolo	242
17.9 Erogazione di un bolo immediato	242
17.10 Erogazione di un Bolo prolungato	244
17.11 Impostazioni dei boli	245
Effetti sui calcoli del bolo consigliato	246
Bolo massimo	249
Bolo prolungato	249
Impostazioni del Suggeritore SmartBolus	249
Target Glicemico e Correggi se superiore a	249
Glicemia Minima per il Suggeritore di Bolo	250
Rapporto Insulina/Carboidrati (IC)	250
Fattore di Correzione	251
Correzione Inversa	251
Durata dell'azione dell'insulina	252

17.1 Informazioni sul Suggeritore SmartBolus

Un bolo è una dose di insulina assunta per coprire i carboidrati in un pasto, una bevanda o uno spuntino (bolo pasto) o per correggere valori elevati di glucosio (bolo di correzione). Il Suggeritore SmartBolus calcola una quantità di bolo di insulina consigliata per abbassare la glicemia alta (bolo di correzione) e/o per coprire i carboidrati di un pasto (bolo pasto).

Informazioni su boli di correzione e boli pasto

Se si immette una lettura glicemica o un valore glicemico del sensore superiore al target ma non vengono inseriti carboidrati, viene calcolato un bolo di correzione. Se si immettono carboidrati ma non una lettura glicemica o un valore glicemico del sensore, viene calcolato un bolo pasto. Se si immettono sia una lettura glicemica o un valore glicemico del sensore sia i carboidrati, entrambi i fattori vengono utilizzati per calcolare un bolo consigliato.

Valore immesso		Tipo di bolo calcolato
Letture glicemiche o valore glicemico del sensore superiore al target	Carboidrati	
✓		Bolo di correzione
	✓	Bolo pasto
✓	✓	Bolo consigliato combinato

Informazioni sull'uso del valore glicemico del sensore con tendenza

La tendenza glicemica del sensore si basa sulle variazioni recenti nei livelli di glucosio. Se si utilizza il valore glicemico del sensore, questo e la tendenza glicemica del sensore verranno utilizzati per calcolare la quantità di bolo consigliato. Il valore glicemico e la tendenza glicemica del sensore verranno utilizzati insieme al Fattore di Correzione per determinare la porzione di correzione del bolo. Il Suggeritore SmartBolus utilizzerà la tendenza glicemica del sensore per regolare la quantità di bolo di correzione.

Quando i valori glicemici del sensore sono...	Il Suggeritore SmartBolus cerca di mantenere il glucosio entro l'intervallo target e...
Tendenza al rialzo (in aumento)	Aggiunge più insulina al bolo.
Tendenza al ribasso (in diminuzione)	Sottrae insulina dal bolo.
Stabile	Nessuna regolazione del bolo.

Informazioni aggiuntive

È possibile scegliere di accettare o modificare la raccomandazione finale prima dell'erogazione del bolo.

Dopo l'apertura del Suggeritore SmartBolus, l'erogazione del bolo deve essere avviata entro 5 minuti, altrimenti i valori dovranno essere aggiornati. Se trascorrono più di 5 minuti, viene visualizzato un messaggio indicante che i valori sono scaduti. Toccare **CONTINUA** per aggiornare il Suggeritore SmartBolus, quindi inserire o utilizzare i valori correnti.

Per modificare le impostazioni personali utilizzate dal Suggeritore SmartBolus, vedere "Impostazioni del Suggeritore SmartBolus" a pagina 249.

Nota: per utilizzare il Suggeritore SmartBolus, l'App Omnipod 5 e il Pod devono essere in comunicazione. Se non è presente alcuna comunicazione tra l'App Omnipod 5 e il Pod, verrà richiesto di ristabilire la connessione. Per indicazioni su come procedere quando l'App Omnipod 5 e il Pod hanno un problema di comunicazione, vedere "Risoluzione dei problemi" a pagina 381.

Attenzione: NON allontanarsi dall'App Omnipod 5 durante il processo di modifica delle impostazioni di erogazione dell'insulina. Se si esce dall'app prima di salvare la modifica delle impostazioni e che questa venga implementata, il sistema continuerà a utilizzare le ultime impostazioni salvate. Questo significa che si rischia di proseguire con delle impostazioni terapeutiche diverse da quelle che si intendeva immettere. Se non si è sicuri che le modifiche siano state salvate, rivedere le impostazioni.

Consiglio: se si conosce già il numero di unità per il bolo che si desidera erogare, toccare **Bolo totale**. Immettere la quantità di bolo e toccare **Fatto**. Quindi andare a pagina 242.

17.2 Immissione delle informazioni del pasto

Per immettere i carboidrati del pasto:

1. Nella schermata Home, toccare il pulsante Bolo.

Nota: la schermata Bolo è valida solo per 5 minuti. Dopo 5 minuti, se l'erogazione del bolo non è iniziata, è necessario aggiornare e immettere nuovamente i valori.

2. Toccare il campo Carboidrati. Immettere i grammi di carboidrati e toccare Fatto.

Nota: consultare il proprio operatore sanitario per istruzioni su come calcolare i grammi di carboidrati.

Nota: è inoltre possibile estrarre i valori da Alimenti Personalizzati.

Vedere “17.5 Immissione delle informazioni del pasto con Alimenti Personalizzati” a pagina 238.

3. Esaminare il bolo pasto consigliato, che viene visualizzato sotto i grammi di carboidrati.
4. Opzionale: toccare Calcoli per visualizzare i dettagli.

The screenshot shows the 'Bolo' screen with the following elements:

- Header: < Bolo
- Section: Carboidrati (ALIMENTI PERSONALIZZATI)
- Input field: 0 g
- Text: Bolo pasto: 0 U
- Section: Glucosio (USA SENSORE)
- Input field: — mg/dL
- Text: Bolo di correzione: 0 U
- Section: Bolo totale (CALCOLI)
- Input field: 0 U
- Text: IOB di 1 U
- Buttons: ANNULLA, CONFERMA

17.3 Creazione di un Alimento Personalizzato

Il Suggeritore SmartBolus consente di salvare le informazioni sui carboidrati relative a determinati alimenti, spuntini o pasti preferiti (Alimenti Personalizzati) che l'utente potrebbe consumare di frequente. È possibile utilizzare questi valori di carboidrati nei calcoli del bolo.

Per creare un Alimento Personalizzato:

1. Toccare Menu > Alimenti Personalizzati.
2. Toccare AGGIUNGI.
3. Immettere un nome per l'Alimento Personalizzato.
4. Aggiungere il conteggio totale dei carboidrati per la voce.
5. Toccare SALVA. Accanto alla nuova voce verrà visualizzato un badge verde con la dicitura NUOVO.

17.4 Modifica degli Alimenti Personalizzati

Per modificare l'elenco, toccare MODIFICA nell'angolo in alto a destra.

- Per spostare un elemento in alto o in basso nell'elenco, toccare e tenere premuta l'icona a destra dell'elemento mentre si trascina l'elemento nella posizione desiderata.
- Per eliminare gli elementi, toccare l'icona (−) a sinistra dell'elemento. Toccare SI per confermare che si desidera eliminare l'Alimento Personalizzato.
- Per modificare il nome o il conteggio dei carboidrati dell'Alimento Personalizzato, toccare il nome dell'elemento. Modificare i dettagli dell'elemento. Toccare SALVA.


17.5 Immissione delle informazioni del pasto con Alimenti Personalizzati

Per immettere i carboidrati dagli Alimenti Personalizzati salvati:

1. Nella schermata Bolo, toccare Alimenti Personalizzati nell'angolo in alto a destra sopra il campo Carboidrati.
2. Verrà visualizzato un elenco degli Alimenti Personalizzati.

Nota: toccare i pulsanti freccia su e giù per modificare l'ordine e la visualizzazione degli elementi. È possibile scegliere tra le seguenti opzioni: in ordine alfabetico, aggiunti di recente, da quelli con più carboidrati a quelli con meno carboidrati o da quelli con meno carboidrati a quelli con più carboidrati.

3. Selezionare i pulsanti accanto agli alimenti che si desidera selezionare. La quantità totale di carboidrati viene visualizzata nella parte inferiore della schermata.
4. Toccare AGGIUNGI. Viene visualizzata la schermata del Suggeritore SmartBolus.

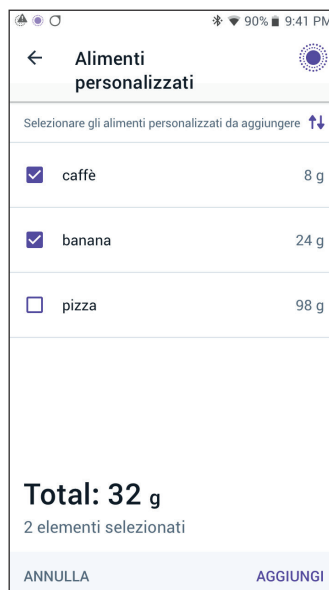

17.6 Inserimento di una lettura glicemica o utilizzo di un valore glicemico del sensore

Il Suggeritore SmartBolus utilizza le informazioni relative al glucosio per calcolare una porzione di correzione del bolo. Nelle sezioni seguenti viene descritto come fornire i dati glicemici tramite il Suggeritore SmartBolus immettendo manualmente una lettura glicemica oppure ottenendo e utilizzando il valore glicemico attuale del sensore.

Nota: il Suggeritore SmartBolus può generare una dose di bolo consigliato in base ai carboidrati di un pasto e alla lettura glicemica oppure al valore glicemico del sensore con tendenza. L'immissione di una lettura glicemica recente o l'utilizzo di un valore glicemico del sensore con tendenza può contribuire a garantire sicurezza e accuratezza.

Immissione manuale della lettura glicemica

Avvertenza: EVITARE di immettere una lettura del glucosio precedente di oltre 10 minuti. Se si utilizza una lettura precedente di oltre 10 minuti, il suggeritore bolo può calcolare e consigliare una dose errata, con conseguente erogazione eccessiva o insufficiente di insulina con conseguente ipoglicemia o iperglicemia.

Per immettere una lettura della glicemia:

1. Toccare il campo Glucosio.

Se si è inserita manualmente una lettura della glicemia generata da un glucometro negli ultimi 10 minuti, tale valore viene visualizzato automaticamente nel campo Glucosio. Se si desidera che il Suggeritore SmartBolus utilizzi tale valore, procedere direttamente al passaggio successivo.

2. Toccare la casella nel cerchio e immettere la lettura glicemica. In alternativa, far scorrere l'indicatore lungo il cerchio per immettere la lettura glicemica.

Per il significato dei colori visualizzati nella schermata Immetti glucosio, vedere "Modalità di visualizzazione delle letture della glicemia" a pagina 123.

3. Toccare AGGIUNGI AL SUGGERITORE. Viene visualizzata la schermata del Suggeritore SmartBolus.
4. Rivedere il bolo di correzione consigliato, che viene visualizzato sotto la lettura della glicemia. Il bolo di correzione è stato regolato per l'Insulina Attiva (IOB) (vedere "Insulina Attiva (IOB)" a pagina 262).

Importazione e utilizzo del valore glicemico del sensore

Avvertenza: prestare SEMPRE attenzione al valore glicemico attuale del sensore, affidarsi alle sensazioni del proprio corpo e non ignorare i sintomi di glicemia alta e bassa. Anche se l'erogazione di insulina si regola automaticamente in Modalità Automatizzata con l'obiettivo di portare il livello di glucosio al Target Glicemico definito, possono comunque verificarsi eventi di ipoglicemia o iperglicemia grave.

Se i valori glicemici del sensore non corrispondono ai sintomi, controllare SEMPRE il glucosio con un glucometro e, se necessario, prendere in considerazione il trattamento e/o la calibrazione del Sensore. Passare SEMPRE alla Modalità Manuale se si ritiene che i valori glicemici del sensore siano imprecisi.

- Valori glicemici del sensore erroneamente elevati possono causare un'erogazione eccessiva di insulina, con conseguente ipoglicemia grave, crisi convulsive, perdita di coscienza o morte.
- Valori glicemici del sensore erroneamente bassi possono causare sospensioni prolungate dell'erogazione di insulina con conseguenti iperglicemia, DKA o morte.

Se si avvertono sintomi che non sono congruenti con le letture del glucosio e ci si è attenuti alle istruzioni descritte nel presente *Manuale d'uso tecnico*, contattare immediatamente l'operatore sanitario.

Se è collegato un Sensore, è possibile utilizzare il valore glicemico e la tendenza glicemica del sensore correnti in entrambe le Modalità Manuale e Automatizzata:

➤ Toccare USA SENSORE.

Se il valore glicemico del sensore è inferiore all'impostazione di Glicemia Minima per il Suggestore di Bolo, verrà visualizzato un messaggio indicante che il Suggestore SmartBolus è disabilitato. Se il valore glicemico del sensore è "ALTO", il Suggestore SmartBolus è temporaneamente disattivato.

Nota: se il Sistema Omnipod 5 non dispone di un valore glicemico o una tendenza glicemica del sensore validi all'apertura del Suggestore SmartBolus, l'opzione USA SENSORE è disattivata.

Consiglio: se si desidera sostituire il valore glicemico del sensore con una lettura della glicemia, toccare il campo Sensore. Vedere "Immissione manuale della lettura glicemica" a pagina 239.

17.7 Insulina Attiva (IOB)

L'Insulina Attiva, anche nota come IOB, è la quantità di insulina ancora "attiva" nel corpo da una dose precedente di bolo o un'erogazione di insulina automatizzata.

Come viene calcolata l'IOB

Il Sistema Omnipod 5 calcola l'IOB come qualsiasi insulina (bolo o basale) erogata al di sopra della Velocità Basale Adattiva che si prevede che il sistema abbia erogato in Modalità Automatizzata durante tale intervallo.

Nota: se nella Modalità Manuale è presente un'IOB rilevata non riconducibile a un bolo precedente, è probabile che il Programma Basale in Modalità Manuale stia erogando una Velocità basale superiore alla Velocità Basale Adattiva in Modalità Automatizzata per un determinato intervallo di tempo.

Nota: la Durata dell'azione dell'insulina programmata viene utilizzata per calcolare solo l'IOB del bolo di insulina. La tecnologia SmartAdjust utilizza il proprio tempo di azione per calcolare l'IOB dall'insulina al di sopra della Velocità Basale Adattiva.

IOB nel Suggeritore SmartBolus

Il Suggeritore SmartBolus considera l'IOB corrente quando si calcola un bolo consigliato. L'Insulina Attiva può provenire da:

- IOB pasto, ovvero dai boli pasto precedenti
- IOB di correzione, ovvero può provenire da boli di correzione precedenti o da erogazioni di insulina automatizzate superiori alla Velocità Basale Adattiva.

Per ulteriori informazioni, vedere "Insulina Attiva (IOB)" a pagina 262 e "Equazioni del Suggeritore SmartBolus" a pagina 264.

In determinate circostanze si potrebbe decidere di inserire solo carboidrati o la quantità di bolo nel Suggeritore SmartBolus, ad esempio se si desidera erogare solo un bolo per i carboidrati utilizzando il rapporto insulina/carboidrati programmato o se si desidera erogare una quantità di insulina in base alla propria stima. Se si immettono solo carboidrati o quantità di bolo senza un valore del glucosio, l'IOB non viene sottratta dalla dose di bolo consigliato poiché il suggeritore non è in grado di regolare la dose in bolo se il valore del glucosio non è noto. Se si desidera prendere in considerazione l'IOB, immettere un valore del glucosio. Ecco un esempio dimostrativo di alcuni scenari in cui si potrebbe scegliere di inserire solo la quantità di carboidrati o di bolo nel Suggeritore SmartBolus.

17 Erogazione di un bolo con il Suggeritore SmartBolus

Esempio: si sta per pranzare ma non si è certi di quanto si mangerà. Per evitare di assumere una quantità eccessiva di insulina, erogare un bolo pasto e di correzione in base ai carboidrati che si è certi di assumere e al proprio valore di glucosio. Dopo aver erogato il bolo e mangiato la prima porzione, si decide di terminare la porzione rimanente. Poiché è già stata erogata una correzione con il bolo precedente, e si è consapevoli che i valori del glucosio sono in aumento, si decide di erogare un secondo bolo solo per i carboidrati rimanenti nel pasto e non inserire un altro valore di glucosio.

17.8 Regolazioni al calcolo

Un bolo pasto consigliato che viene calcolato utilizzando il rapporto insulina/carboidrati (IC) può essere ulteriormente regolato per altri valori immessi e utilizzati dal Suggeritore SmartBolus, tra cui: letture della glicemia, valore glicemico e tendenza glicemica del sensore e/o IOB. Queste regolazioni possono essere effettuate per:

- Insulina Attiva: IOB pasto o correzione IOB
- Correzione Inversa, se questa funzione è attivata e il glucosio è inferiore al Target Glicemico
- Lettura della glicemia, se immessa manualmente
- Valore glicemico e tendenza glicemica del sensore (vedere “19.5 Freccie della tendenza glicemica del sensore” a pagina 282)

17.9 Erogazione di un bolo immediato

Il campo Bolo totale mostra il bolo suggerito. La quantità di eventuali regolazioni dell'insulina attiva (IOB) viene visualizzata sotto il campo Bolo totale.

Nota: durante l'immissione del bolo pasto è disponibile l'opzione PROLUNGA BOLO quando il sistema è in Modalità Manuale e l'impostazione del Bolo prolungato è attiva.

Per rivedere ed erogare il bolo immediato:

1. Rivedere il bolo consigliato.
 - Per regolare il valore, toccare il campo Bolo totale e immettere un bolo rivisto.

2. Per rivedere le specifiche dei calcoli, toccare **CALCOLI**. Potrebbe essere necessario scorrere verso l'alto o verso il basso per vedere tutti i calcoli. Al termine, toccare **CHIUDI**. Vedere “Equazioni del Suggeritore SmartBolus” a pagina 264 per i dettagli.
3. Per erogare immediatamente l'intero bolo, toccare **CONFERMA**.
4. Rivedere i dettagli del bolo nella schermata Conferma bolo.
5. Opzionale: configurare un promemoria per controllare il glucosio:
 - a. Toccare **CREA PROMEMORIA GLICEMIA**.
 - b. Toccare il campo **Controlla glicemia tra** e selezionare il numero di ore trascorse le quali si desidera ricevere un promemoria.
 - c. Toccare **SALVA**.
6. Rivedere i dettagli del bolo nella schermata Conferma bolo.

Il bolo totale include eventuali regolazioni dell'insulina attiva (IOB) e le eventuali modifiche apportate al bolo calcolato.

Grammi di carboidrati

Glicemia o valore glicemico del sensore

Regolato per IOB di x U significa che il Suggeritore SmartBolus ha tenuto conto dell'insulina attiva (IOB).

7. Toccare **AVVIA** per avviare il bolo.

La schermata Home monitora l'erogazione di un bolo immediato o di un Bolo prolungato (vedere “16.3 Monitoraggio del progresso di un bolo” a pagina 230).

17.10 Erogazione di un Bolo prolungato

Avvertenza: quando si utilizza la funzione di Bolo prolungato, controllare SEMPRE con frequenza il glucosio per evitare la comparsa di un episodio ipoglicemico o iperglicemico.

Nota: è possibile prolungare un bolo solo in Modalità Manuale.

Per rivedere, prolungare ed erogare il bolo:

1. Rivedere il bolo consigliato.
 - a. Per regolare il valore, toccare il campo Bolo totale e immettere un bolo rivisto.
2. Per rivedere le specifiche dei calcoli, toccare CALCOLI. Potrebbe essere necessario scorrere verso l'alto o verso il basso per vedere tutti i calcoli. Al termine, toccare CHIUDI. Vedere "Equazioni del Suggestore SmartBolus" a pagina 264 per i dettagli.
3. Toccare PROLUNGA BOLO.
4. Toccare il campo Ora e immettere la percentuale del bolo da erogare immediatamente. In alternativa, toccare il campo Prolungato e immettere la percentuale da prolungare.

Ora	Prolungato
50 %	50 %
1,45 U	1,5 U
Durata (da 0,5 a 8 ore)	
2 ore	
Bolo totale	2,95 U
Bolo pasto	2,95 U
Bolo di correzione	0 U
ANNULLA	CONFERMA

Il numero di unità da erogare subito e nel corso del periodo prolungato viene visualizzato sotto la percentuale (%).

Nota: è possibile prolungare soltanto la porzione del bolo pasto. L'eventuale porzione di correzione del bolo viene sempre erogata immediatamente.

5. Toccare il campo Durata e immettere la durata per la porzione prolungata del bolo.
6. Toccare CONFERMA.

La schermata del Bolo prolungato mostra la quantità di bolo che verrà erogata immediatamente e la quantità di bolo che verrà prolungata.

7. Rivedere i dettagli del bolo nella schermata Conferma bolo.

L'intero bolo di correzione viene erogato immediatamente.

È possibile prolungare solo il bolo pasto.

% del bolo **pasto** da erogare immediatamente

% del bolo **pasto** da erogare durante il periodo prolungato

Conferma bolo

Carboidrati 27 g

Glicemia (18:40) 172 mg/dL

Bolo ora 50 %
Pasto: 1,45 U

Bolo prolungato 50 % (2 ore)
Pasto: 1,5 U

Bolo totale 2,95 U
CALCOLI Regolato per l'IOB di 1,8 U

INIZIO

ANNULLA

8. Rivedere i dettagli del bolo, quindi toccare INIZIO per avviare il bolo.

17.11 Impostazioni dei boli

Avvertenza: NON iniziare a utilizzare il sistema o modificare le impostazioni senza aver prima ricevuto formazione e indicazioni appropriate da parte dell'operatore sanitario di riferimento. Un avvio e una regolazione delle impostazioni non corretti possono comportare un'erogazione eccessiva o insufficiente di insulina, con conseguente ipoglicemia o iperglicemia. Le impostazioni che influiscono principalmente sull'erogazione di insulina sono le seguenti: Spegnimento Pod, velocità basali, Velocità basale massima, Bolo massimo, Fattore/i di Correzione, Rapporto Insulina/Carboidrati (IC), Glicemia Minima per il Suggeritore di Bolo, Target Glicemico, Correggi se superiore a e Durata dell'azione dell'insulina.

Queste impostazioni consentono di modificare le impostazioni relative al Bolo massimo, al Bolo prolungato e al Suggeritore SmartBolus.

Effetti sui calcoli del bolo consigliato

Nella tabella seguente sono descritte le funzioni di ogni impostazione del Suggestore SmartBolus, come regolarle e come vengono utilizzate per calcolare un bolo consigliato.

Impostazione e intervallo su Omnipod 5	Come immettere l'impostazione	Effetti sui calcoli del bolo consigliato
Carboidrati (grammi) 0,1–225 g (incrementi di 0,1 g)	Immissione nel Suggestore SmartBolus	L'aumento del valore della quantità di carboidrati aumenta la quantità della dose di bolo consigliato. La diminuzione del valore della quantità di carboidrati riduce la quantità della dose di bolo consigliato.
Valore glicemico del sensore (mmol/L) Dexcom G6: 2,2–22,2 mmol/L (40–400 mg/dL) FreeStyle Libre 2 Plus: 2,2–27,8 mmol/L (40–500 mg/dL) (incrementi di 0,1 mmol/L o 1 mg/dL)	Selezionare USA SENSORE nel Suggestore SmartBolus (il valore è generato dal Sensore connesso)	L'aumento del valore glicemico del sensore aumenta la quantità della dose di bolo consigliato. La diminuzione del valore glicemico del sensore riduce la quantità della dose di bolo consigliato.
Letture della glicemia (mmol/L) 1,1–33,3 mmol/L (20–600 mg/dL) (incrementi di 0,1 mmol/L o 1 mg/dL)	Immissione nel Suggestore SmartBolus (il valore è generato dal glucometro)	L'aumento della lettura della glicemia aumenta la quantità della dose di bolo consigliato. La diminuzione della lettura della glicemia riduce la quantità della dose di bolo consigliato.

Impostazione e intervallo su Omnipod 5	Come immettere l'impostazione	Effetti sui calcoli del bolo consigliato
<p>Bolo massimo 0,05–30 U (incrementi di 0,05 U)</p>	<p>Immissione nelle Impostazioni dell'App Omnipod 5 o durante la configurazione iniziale</p>	<p>Limita la quantità di una singola dose di bolo.</p>
<p>Bolo prolungato (solo Modalità Manuale) Attivato/Disattivato</p>	<p>Immissione nelle Impostazioni dell'App Omnipod 5 o durante la configurazione iniziale</p>	<p>Consente l'erogazione del bolo in un intervallo di tempo selezionato dall'utilizzatore.</p>
<p>Target Glicemico e Correggi se superiore a Target Glicemico: 6,1–8,3 mmol/L (110–150 mg/dL) Correggi se superiore a: Target Glicemico a 11,1 mmol/L (200 mg/dL) (incrementi di 0,55 mmol/L o 10 mg/dL, fino a 8 segmenti/giorno)</p>	<p>Immissione nelle Impostazioni dell'App Omnipod 5 o durante la configurazione iniziale</p>	<p>L'aumento del valore di impostazione riduce la quantità della dose di bolo consigliato. La diminuzione del valore di impostazione aumenta la quantità della dose di bolo consigliato.</p>
<p>Glicemia Minima per il Suggeritore di Bolo 2,8–3,9 mmol/L (50–70 mg/dL) (incrementi di 0,1 mmol/L o 1 mg/dL)</p>	<p>Immissione nelle Impostazioni dell'App Omnipod 5</p>	<p>Disabilita il Suggeritore SmartBolus quando il valore del glucosio è pari o inferiore a quello di impostazione.</p>

17 Erogazione di un bolo con il Suggestore SmartBolus


Impostazione e intervallo su Omnipod 5	Come immettere l'impostazione	Effetti sui calcoli del bolo consigliato
Rapporto Insulina/ Carboidrati (IC) 1-150 g (incrementi di 0,1 mmol/L o 1 mg/dL, fino a 8 segmenti/giorno)	Immissione nelle Impostazioni dell'App Omnipod 5 o durante la configurazione iniziale	L'aumento del valore di impostazione riduce la quantità della dose di bolo consigliato. La diminuzione del valore di impostazione aumenta la quantità della dose di bolo consigliato.
Fattore di Correzione 0,1-22,2 mmol/L (1-400 mg/dL) (incrementi di 0,1 mmol/L, fino a 8 segmenti/giorno)	Immissione nelle Impostazioni dell'App Omnipod 5 o durante la configurazione iniziale	L'aumento del valore di impostazione riduce la quantità della dose di bolo consigliato. La diminuzione del valore di impostazione aumenta la quantità della dose di bolo consigliato.
Correzione Inversa Attivato/Disattivato	Immissione nelle Impostazioni dell'App Omnipod 5	Se attivata, il bolo consigliato diminuisce quando il valore del glucosio è inferiore a quello del Target Glicemico.
Durata dell'azione dell'insulina 2-6 ore (incrementi di 0,5 ore)	Immissione nelle Impostazioni dell'App Omnipod 5 o durante la configurazione iniziale	L'aumento del valore di impostazione può ridurre la quantità della dose di bolo consigliato per periodi più lunghi.

Nota: la funzionalità Bolo prolungato può essere utilizzata solo in Modalità Manuale. Tutte le altre impostazioni per la terapia sono utilizzate in modo simile nella Modalità Manuale e nella Modalità Automatizzata.

Bolo massimo


L'impostazione Bolo massimo definisce il limite superiore per un bolo. Il Suggeritore SmartBolus impedisce l'immissione di un bolo superiore a questa quantità. Inoltre, impedisce di immettere una quantità di carboidrati che causerà il superamento di tale quantità di bolo calcolato. Il valore massimo consentito per il bolo massimo è 30 unità.

Per modificare il bolo massimo:

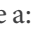1. Accedere a: pulsante Menu () > Impostazioni Bolo > Bolo massimo.
2. Toccare il campo Bolo massimo e immettere il nuovo valore del bolo massimo.
3. Toccare SALVA.

Bolo prolungato

Un Bolo prolungato viene erogato nel corso di un periodo di tempo specificato dall'utilizzatore. È possibile prolungare solo la porzione del pasto di un bolo. Non è invece possibile prolungare un bolo di correzione. Per disattivare (OFF) la funzione del Bolo prolungato o per modificarne la configurazione:

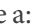1. Accedere a: pulsante Menu () > Impostazioni > Bolo.
2. Toccare l'interruttore accanto a Bolo prolungato per attivare (ON) o disattivare (OFF) la possibilità di prolungare un bolo.

Impostazioni del Suggeritore SmartBolus

Questa sezione descrive come regolare le impostazioni utilizzate dal Suggeritore SmartBolus per calcolare il bolo pasto e il bolo di correzione.


Consiglio: scrivere un elenco di tutti i segmenti e le impostazioni desiderati come guida per la reimmissione dei valori per ogni segmento.

Target Glicemico e Correggi se superiore a

Sia in Modalità Automatizzata sia in Modalità Manuale, il Suggeritore SmartBolus è inteso ad allineare il valore del glucosio al Target Glicemico. Tuttavia, il Suggeritore SmartBolus calcola un bolo di correzione solo se il glucosio è superiore all'impostazione Correggi se superiore a. In Modalità Automatizzata, il Sistema Omnipod 5 regolerà l'erogazione di insulina automatizzata con l'obiettivo di raggiungere il Target Glicemico.

17 Erogazione di un bolo con il Suggeritore SmartBolus


Per modificare i valori Target Glicemico o Correggi se superiore a:

1. Accedere a: pulsante Menu () > Impostazioni > Bolo > Target Glicemico e Correggi se superiore a.
2. Toccare AVANTI.
3. Per modificare un segmento, toccare la riga contenente il segmento da modificare.
 - a. Toccare il campo Ora di fine per immettere una nuova ora di fine.
 - b. Toccare il campo Target Glicemico per immettere un nuovo Target Glicemico.
 - c. Toccare il campo Correggi se superiore a per immettere un nuovo valore Correggi se superiore a.
 - d. Toccare AVANTI.
4. Ripetere il passaggio precedente secondo necessità per i segmenti rimanenti.
5. Dopo aver confermato che tutti i segmenti sono corretti, toccare SALVA.

Nota: è possibile aggiungere ed eliminare segmenti modificando i segmenti esistenti.


Glicemia Minima per il Suggeritore di Bolo

Il valore Glicemia Minima per il Suggeritore di Bolo viene utilizzato per impedire l'erogazione di un bolo quando i livelli di glucosio sono troppo bassi. Se il glucosio è inferiore al valore di Glicemia Minima per il Suggeritore di Bolo, il Suggeritore SmartBolus viene disabilitato e non calcola alcun bolo. Per modificare questo valore:

1. Accedere a: pulsante Menu () > Impostazioni > Bolo > Glicemia Minima per il Suggeritore di Bolo.
2. Toccare il campo Glicemia Minima per il Suggeritore di Bolo e immettere il valore desiderato.
3. Toccare SALVA.

Rapporto Insulina/Carboidrati (IC)

Il Rapporto Insulina/Carboidrati (IC) definisce i grammi di carboidrati coperti da un'unità di insulina. Il Suggeritore SmartBolus utilizza il Rapporto Insulina/Carboidrati (IC) per calcolare un bolo pasto quando si stanno per assumere degli alimenti. Per modificare questo valore:


1. Accedere a: pulsante Menu () > Impostazioni > Bolo > Rapporto Insulina/Carboidrati (IC).
2. Toccare AVANTI.

3. Per modificare un segmento, toccare la riga contenente il segmento da modificare.
 - a. Toccare il campo Ora di fine per immettere una nuova ora di fine.
 - b. Toccare il campo 1 Unità di insulina copre e immettere un nuovo Rapporto Insulina/Carboidrati (IC).
 - c. Toccare AVANTI.
4. Ripetere il passaggio precedente secondo necessità per i segmenti rimanenti.
5. Dopo aver confermato che tutti i segmenti sono corretti, toccare SALVA.

Nota: è possibile aggiungere ed eliminare segmenti modificando i segmenti esistenti.

Fattore di Correzione

Il Suggeritore SmartBolus utilizza il Fattore di Correzione per calcolare un bolo di correzione quando il valore del glucosio è superiore all'impostazione Correggi se superiore a. Vedere "Target Glicemico e Correggi se superiore a" a pagina 249. Per modificare questo valore:

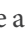1. Accedere a: pulsante Menu () > Impostazioni > Bolo > Fattore di Correzione.
2. Toccare AVANTI.
3. Per modificare un segmento, toccare la riga contenente il segmento da modificare.
 - a. Toccare il campo Ora di fine per immettere una nuova ora di fine.
 - b. Toccare il campo 1 Unità di insulina abbassa il glucosio di e immettere un nuovo Fattore di Correzione.
 - c. Toccare AVANTI.
4. Ripetere il passaggio precedente secondo necessità per i segmenti rimanenti.
5. Dopo aver confermato che tutti i segmenti sono corretti, toccare SALVA.


Nota: è possibile aggiungere ed eliminare segmenti modificando i segmenti esistenti.

Correzione Inversa

L'impostazione Correzione Inversa determina in che modo il Suggeritore SmartBolus gestisce i boli pasto quando il valore del glucosio è inferiore al Target Glicemico.


17 Erogazione di un bolo con il Suggeritore SmartBolus

Per attivare (ON) o disattivare (OFF) la Correzione Inversa:

1. Accedere a: pulsante Menu () > Impostazioni > Bolo.
2. Toccare l'interruttore sulla linea Correzione Inversa per attivare (ON) o disattivare (OFF) questa funzione.

Durata dell'azione dell'insulina

Il Suggeritore SmartBolus utilizza l'impostazione Durata dell'azione dell'insulina per calcolare la quantità di Insulina Attiva (IOB) nel corpo riconducibile a un bolo precedente. Per modificare questo valore:

1. Accedere a:
pulsante Menu () > Impostazioni > Bolo > Durata dell'azione dell'insulina.
2. Toccare il campo Durata dell'azione dell'insulina e immettere il nuovo valore.
3. Toccare SALVA.

Nota: in Modalità Automatizzata, la tecnologia SmartAdjust non utilizza questa impostazione di Durata dell'azione dell'insulina per calcolare l'erogazione automatizzata di insulina basale. Vedere “17.7 Insulina Attiva (IOB)” a pagina 241.

CAPITOLO 18

Comprensione dei calcoli del Suggeritore SmartBolus

Sommario

18.1 Il Suggeritore SmartBolus	254
Boli del Suggeritore SmartBolus.....	254
Boli prolungati.....	254
Bolo massimo	254
Controllo della quantità di bolo.....	254
Quando il Suggeritore SmartBolus non funziona	255
Fattori utilizzati nei calcoli del Suggeritore SmartBolus	256
Tendenza glicemica del sensore	256
Target Glicemico	256
Soglia Correggi se superiore a	256
Insulina Attiva	256
Durata dell'azione dell'insulina.....	257
Glicemia Minima per il Suggeritore di Bolo.....	257
Correzione Inversa	257
Limiti dei suggerimenti del Suggeritore SmartBolus.....	260
Considerazioni sui suggerimenti del Suggeritore SmartBolus.....	261
Insulina Attiva (IOB)	262
Esaurimento dell'IOB da bolo	263
Equazioni del Suggeritore SmartBolus	264
Regole del Suggeritore SmartBolus	266
Panoramica della schermata Calcoli bolo	267
18.2 Esempi del Suggeritore SmartBolus	268

18.1 Il Suggeritore SmartBolus

Il Suggeritore SmartBolus del Sistema Omnipod 5 è in grado di svolgere gran parte del lavoro di calcolo di un bolo al posto dell'utilizzatore. Il Suggeritore SmartBolus utilizza le impostazioni personali dell'utilizzatore e tiene conto anche della quantità di insulina rimasta nel corpo (chiamata Insulina Attiva o IOB) dall'erogazione di insulina automatizzata e dai boli precedenti.

Boli del Suggeritore SmartBolus

Per il Suggeritore SmartBolus, un bolo è la somma di due componenti:

- **Bolo di correzione:** utilizzato per abbassare il valore del glucosio quando diventa troppo elevato.
- **Bolo pasto:** utilizzato per coprire i carboidrati assunti in un pasto.

Boli prolungati

Quando si utilizza il Suggeritore SmartBolus, è possibile prolungare solo una porzione o tutto un bolo pasto in Modalità Manuale, ma non è possibile prolungare un bolo di correzione. Un bolo di correzione viene sempre erogato immediatamente. Nell'esempio che segue, vengono prolungate tre unità di insulina:

Bolo totale = 5 unità (1 unità di bolo di correzione + 4 unità di bolo pasto)

- Erogazione immediata = 2 unità (1 unità di bolo di correzione + 1 unità di bolo pasto)
- Erogazione prolungata = 3 unità (3 unità di bolo pasto)

Bolo massimo

Il Sistema Omnipod 5 non consente di immettere un bolo al di sopra dell'impostazione Bolo massimo. Se il Suggeritore SmartBolus calcola una quantità di bolo superiore al Bolo massimo, sarà possibile erogare solo fino alla quantità massima di bolo. Per regolare il valore, toccare il campo Bolo totale e immettere un bolo rivisto.

Controllo della quantità di bolo

Il Suggeritore SmartBolus è uno strumento molto utile, ma è l'utilizzatore che esercita il controllo finale in merito alla quantità del bolo da erogare. Dopo che il Suggeritore SmartBolus ha consigliato una determinata quantità di bolo, l'utilizzatore può confermare il bolo consigliato oppure scegliere di aumentarlo o ridurlo. Controllare sempre i Calcoli per confermare la quantità di insulina prima dell'erogazione.

Quando il Suggeritore SmartBolus non funziona

Il Suggeritore SmartBolus non funziona quando è disabilitato o in assenza di comunicazione con il Pod. Una volta disabilitato, il Suggeritore SmartBolus è temporaneamente non in grado di calcolare un bolo consigliato. Il Sistema Omnipod 5 potrebbe disattivare il Suggeritore SmartBolus in alcune situazioni.

Condizioni che disabilitano il Suggeritore SmartBolus:	Il Suggeritore SmartBolus viene disabilitato fino a quando:	Mentre il Suggeritore SmartBolus è disabilitato:
Il glucosio è al di sotto dell'impostazione Glicemia Minima per il Suggeritore di Bolo.	Per dieci minuti. oppure Una nuova lettura del glucosio è al di sopra dell'impostazione Glicemia Minima per il Suggeritore di Bolo.	L'insulina attiva (IOB) è visualizzata nella schermata Home.
La lettura della glicemia inserita manualmente è superiore a 33,3 mmol/L (600 mg/dL) o risulta come valore "ALTO".	Per dieci minuti. oppure Una nuova lettura della glicemia è al di sotto del valore "ALTO".	L'insulina attiva (IOB) è visualizzata nella schermata Home.
È presente un bolo non confermato quando si scarta un Pod.	Per un periodo completo di Durata dell'azione dell'insulina. Ad esempio, se Durata dell'azione dell'insulina è impostata su "2 ore" e si riceve un bolo non confermato alle 8:00, non sarà possibile utilizzare il Suggeritore SmartBolus fino alle 10:00 (2 ore dopo il bolo non confermato).	L'insulina attiva (IOB) non è visualizzata nella schermata Home.

Fattori utilizzati nei calcoli del Suggeritore SmartBolus

Quando calcola un bolo, il Suggeritore SmartBolus tiene conto di quanto segue:

- il valore corrente del glucosio (impresso manualmente o dal Sensore), la tendenza glicemica del sensore (se viene utilizzato il valore glicemico del sensore), il Target Glicemico, la soglia Correggi se superiore a e il Fattore di Correzione
- i carboidrati che si intende assumere (solidi o liquidi) e il Rapporto Insulina/Carboidrati (IC)
- Durata dell'azione dell'insulina e Insulina Attiva (IOB)
- la Glicemia Minima per il Suggeritore di Bolo
- la Correzione Inversa, se abilitata

Nota: sia in Modalità Automatizzata sia in Modalità Manuale, se si utilizzano un valore glicemico e una tendenza glicemica del sensore nel Suggeritore, il Suggeritore SmartBolus può ridurre la dose di insulina suggerita, anche se l'impostazione Correzione Inversa è disattivata (OFF).

Tendenza glicemica del sensore

La tendenza glicemica del sensore viene utilizzata per suggerire fino al 30% in più di insulina di correzione, quando i valori sono in rapida crescita, o fino al 100% in meno di insulina di correzione, quando i valori sono in rapido calo, rispetto alla quantità di bolo suggerita con la sola lettura della glicemia.

Target Glicemico

Attraverso il calcolo di un bolo di correzione, il Suggeritore SmartBolus cerca di abbassare la glicemia allineandola al Target Glicemico.

Soglia Correggi se superiore a

Il Suggeritore SmartBolus calcola un bolo di correzione solo se il valore della glicemia è superiore all'impostazione Correggi se superiore a. Questa funzione impedisce che vengano apportate correzioni al valore del glucosio che superano anche di poco il Target Glicemico.

Insulina Attiva

L'Insulina Attiva (IOB) indica la quantità di insulina ancora attiva che rimane nel corpo dall'erogazione di insulina basale e da boli precedenti. L'IOB erogata da precedenti boli di correzione è chiamata IOB di correzione, mentre l'IOB erogata da precedenti boli pasto è chiamata IOB pasto. Inoltre, nelle Modalità Manuale e Automatizzata, l'algoritmo

Omnipod 5 calcola costantemente l'IOB dall'erogazione basale al di sopra della Velocità Basale Adattiva.

Durante il calcolo di un nuovo bolo, il Suggeritore SmartBolus potrebbe ridurre il bolo consigliato in base all'insulina attiva (IOB).

Nota: il Suggeritore SmartBolus sottrae l'insulina attiva (IOB) da un bolo consigliato solo nel caso in cui sia noto il valore del glucosio corrente. Controllare sempre il glucosio prima dell'erogazione di un bolo.

Per ulteriori informazioni sull'Insulina Attiva, consultare "Come viene calcolata l'IOB" a pagina 241.

Durata dell'azione dell'insulina

Il Suggeritore SmartBolus utilizza l'impostazione Durata dell'azione dell'insulina per calcolare l'Insulina Attiva riconducibile a boli precedenti.

L'impostazione Durata dell'azione dell'insulina rappresenta la quantità di tempo in cui l'insulina rimane "attiva" nel corpo.

Glicemia Minima per il Suggeritore di Bolo

Il Suggeritore SmartBolus non suggerisce un bolo se il glucosio è al di sotto del livello della Glicemia Minima per il Suggeritore di Bolo. È possibile abbassare questo livello fino a 2,8 mmol/L (50 mg/dL).

Correzione Inversa

Se l'impostazione Correzione Inversa è attivata (ON) e il glucosio è inferiore al Target Glicemico, il Suggeritore SmartBolus riduce il bolo pasto. Ciò consente di utilizzare parte del pasto per aumentare il valore del glucosio e allinearli al Target Glicemico.

Se l'impostazione Correzione Inversa è disattivata (OFF), il Suggeritore SmartBolus calcolerà il bolo pasto completo anche nel caso in cui il glucosio fosse inferiore al Target Glicemico.

Nota: In Modalità Automatizzata, se si utilizzano un valore glicemico e una tendenza glicemica del sensore nel Suggeritore, il Suggeritore SmartBolus può sottrarre insulina anche se l'impostazione Correzione Inversa è disattivata (OFF) in situazioni con una tendenza glicemica del sensore in diminuzione.

La tabella riportata di seguito mostra in che modo ciascun valore viene utilizzato nel Suggeritore SmartBolus per calcolare il volume totale di bolo:

18 Comprensione dei calcoli del Suggeritore SmartBolus


	Valore accettato	In che modo il Suggeritore SmartBolus utilizza questo valore?
Utilizzo del Sistema Omnipod 5 con un glucometro con marchio CE		
Lettura della glicemia da glucometro	1,1–33,3 mmol/L (20–600 mg/dL)	Per calcolare il volume totale del bolo. È possibile inserire una lettura della glicemia direttamente nel Suggeritore SmartBolus. Dopo 5 minuti dall'immissione, la lettura scade. Una lettura salvata nella cronologia del Sistema Omnipod 5 può essere utilizzata fino a 10 minuti dopo l'immissione.
Microinfusore di insulina Omnipod 5		
Glicemia Minima per il Suggeritore di Bolo	2,8–3,9 mmol/L (50–70 mg/dL)	Disabilita l'erogazione del bolo quando il glucosio è inferiore a questo valore. È possibile regolare questo valore nelle impostazioni del Sistema Omnipod 5.
Fattore di Correzione	0,1–22,2 mmol/L (1–400 mg/dL)	Per calcolare il volume totale del bolo. È possibile regolare questo valore nelle impostazioni del Sistema Omnipod 5. Il valore indica di quanto un'unità di insulina abbasserà la glicemia.
Correggi se superiore a	Target Glicemico a 11,1 mmol/L (200 mg/dL)	Per calcolare il volume totale del bolo. È possibile regolare questo valore nelle impostazioni del Sistema Omnipod 5. Il valore indica il glucosio minimo raggiunto il quale sarà incluso un bolo di correzione nel volume totale del bolo.
Carboidrati	0,1–225 grammi	Per calcolare il volume totale del bolo. È possibile immettere il valore dei carboidrati direttamente nel Suggeritore per definire il bolo pasto.
Rapporto Insulina/Carboidrati (IC)	1–150 grammi	Per calcolare il volume totale del bolo. È possibile regolare questo valore nelle impostazioni del Sistema Omnipod 5. Il valore indica i grammi di carboidrati coperti da un'unità di insulina.
Durata dell'azione dell'insulina	2–6 ore	Per calcolare il volume totale del bolo. È possibile regolare questo valore nelle impostazioni del Sistema Omnipod 5. Il valore indica per quanto tempo l'insulina rimane attiva dopo l'erogazione del bolo.

	Valore accettato	In che modo il Suggeritore SmartBolus utilizza questo valore?
Porzione di IOB pasto	Unità 0–X	Per calcolare il volume totale del bolo. Il valore è noto dal Sistema Omnipod 5 e utilizzato dal Suggeritore per indicare eventuali boli pasto precedentemente erogati che potrebbero essere ancora attivi.
Target Glicemico	6,1–8,3 mmol/L (110–150 mg/dL)	Per calcolare il volume totale del bolo. È possibile regolare questo valore nelle impostazioni del Sistema Omnipod 5. In Modalità Automatizzata, l'erogazione di insulina basale verrà regolata automaticamente per raggiungere il Target Glicemico. Il valore consente di definire il volume del bolo di correzione.
Tecnologia SmartAdjust™ (Modalità Automatizzata)		
Target Glicemico	6,1–8,3 mmol/L (110–150 mg/dL)	Per calcolare il volume totale del bolo. È possibile regolare questo valore nelle impostazioni del Sistema Omnipod 5. In Modalità Automatizzata, l'erogazione di insulina basale verrà regolata automaticamente per raggiungere il Target Glicemico. Il valore consente di definire il volume del bolo di correzione.
Porzione di IOB di correzione	Unità 0–X	Per calcolare il volume totale del bolo. Questo valore è noto dal Sistema Omnipod 5 e utilizzato dal Suggeritore bolo per indicare eventuali boli di correzione precedentemente erogati che potrebbero essere ancora attivi.
Utilizzo di Omnipod 5 con un Sensore compatibile		
Valore glicemico del sensore	Dexcom G6: 2,2–22,2 mmol/L (40–400 mg/dL) FreeStyle Libre 2 Plus: 2,2–27,8 mmol/L (40–500 mg/dL)	Per calcolare il volume totale del bolo. Se si sceglie di utilizzare un Sensore, è possibile selezionare USA SENSORE direttamente nel Suggeritore bolo. Come vincolo di sicurezza, il Suggeritore accetta solo i valori glicemici del sensore che sono in tendenza rispetto ai precedenti valori glicemici del sensore.

Limiti dei suggerimenti del Suggeritore SmartBolus

Nella figura che segue sono riportati i limiti che contraddistinguono i diversi tipi di calcoli svolti dal Suggeritore SmartBolus a seconda dei livelli di glucosio. Di seguito sono riportati alcuni esempi di come leggere la figura:

- Quando il glucosio è compreso tra il Target Glicemico e il valore Correggi se superiore a, il Suggeritore SmartBolus calcola solo un bolo pasto.
- Quando il valore glicemico del sensore è superiore a 22,2 mmol/L (400 mg/dL) per Dexcom G6 o a 27,8 mmol/L (500 mg/dL) per FreeStyle Libre 2 Plus, il valore viene registrato come “ALTO” e non può essere utilizzato per il calcolo di boli.
- Quando la lettura della glicemia è superiore a 33,3 mmol/L (600 mg/dL), viene registrata come valore “ALTO” e il Suggeritore SmartBolus viene disabilitato.

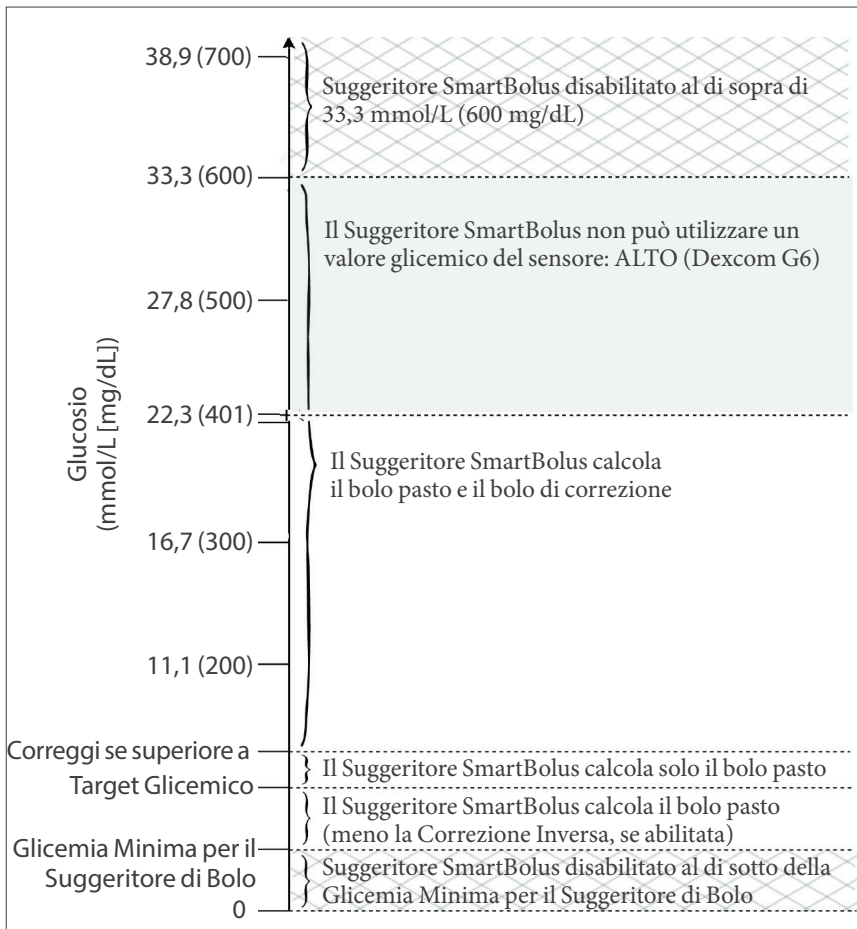

Considerazioni sui suggerimenti del Suggeritore SmartBolus

Quando si utilizza il Suggeritore SmartBolus e si esaminano i suoi suggerimenti, tenere presente quanto segue:

- Il Suggeritore SmartBolus utilizza le impostazioni valide nel momento in cui si richiede un bolo (vedere “Impostazioni del Suggeritore SmartBolus” a pagina 249).
- Il Suggeritore SmartBolus aggiorna i valori ogni 5 minuti. Se non si avvia il bolo entro 5 minuti dall'immissione nel Suggeritore SmartBolus, il Sistema Omnipod 5 dovrà cancellare la schermata in modo da presentare le informazioni più recenti relative all'IOB e al Sensore.
- Quando si cambia fuso orario, controllare sempre le impostazioni dei valori Rapporto Insulina/Carboidrati (IC) e Fattore di Correzione per il nuovo orario verificando che soddisfino ancora il reale fabbisogno insulinico dell'organismo.
- Il Suggeritore SmartBolus suggerisce le dosi in base ai valori di carboidrati e glucosio in quel momento. Controllare il contenuto nutrizionale dei pasti per assicurarsi che i carboidrati immessi siano il più accurati possibile. Immettere solo le letture della glicemia acquisite negli ultimi 10 minuti oppure toccare USA SENSORE. Questi fattori assicureranno che il Suggeritore SmartBolus suggerisca una dose di bolo adatta all'utilizzatore.

Se il valore glicemico o la tendenza glicemica del sensore non corrisponde ai sintomi o alle aspettative, nel Suggeritore SmartBolus utilizzare una lettura della glicemia effettuata mediante il pungidito.

Durante la programmazione e l'erogazione dei boli, verificare sempre che i valori immessi e la dose del bolo consigliato che si riceve siano corretti e, se necessario, allinearli a quelli desiderati in quel momento. Il Sistema Omnipod 5 è dotato di funzionalità che contribuiscono a prevenire quantità di erogazione involontarie.

Limitazioni relative all'erogazione	Descrizione
Impostazione Bolo massimo	Il Suggeritore SmartBolus non erogherà boli superiori all'impostazione Bolo massimo immessa (0,05–30 U). Ad esempio, se raramente si somministrano boli superiori a 5 U e l'impostazione Bolo massimo è 5 U, il sistema impedirà l'erogazione di qualsiasi quantità superiore a tale valore.

18 Comprensione dei calcoli del Suggeritore SmartBolus

Limitazioni relative all'erogazione	Descrizione
Timeout lettura glicemia	Il Suggeritore SmartBolus non calcolerà la dose di bolo consigliato utilizzando una lettura della glicemia immessa dal menu principale (≡) precedente a 10 minuti. Sarà necessario immettere nel Suggeritore SmartBolus una lettura della glicemia più recente.
Timeout Suggeritore SmartBolus	Il Suggeritore SmartBolus considera i valori immessi per un determinato calcolo del bolo validi fino a 5 minuti dall'immissione iniziale del valore. Se sono trascorsi 5 o più minuti, verrà visualizzato un avviso che informa della necessità di aggiornare il Suggeritore SmartBolus e immettere nuovamente i valori.
Fuso orario	Il Suggeritore SmartBolus si basa su una cronologia accurata e aggiornata dell'erogazione di insulina nonché sulla registrazione dei dati da parte del Sistema Omnipod 5. Se il Controller rileva una modifica del fuso orario, il sistema avvisa l'utente. Aggiornare i fusi orari sull'App Omnipod 5 in base alle indicazioni dell'operatore sanitario di riferimento.

Insulina Attiva (IOB)

Dopo l'erogazione di un bolo, la quantità di insulina attiva nel corpo diminuisce nel corso di alcune ore. L'IOB di un bolo diminuisce in base al valore Durata dell'azione dell'insulina definito nelle impostazioni del profilo.


L'IOB può essere riconducibile anche all'insulina erogata dall'automazione. La tecnologia SmartAdjust utilizza il proprio tempo di azione per l'insulina erogata al di sopra della Velocità Basale Adattiva.

Quando si utilizza il Suggeritore SmartBolus, il Sistema Omnipod 5 potrebbe, in ragione dell'IOB, ridurre la quantità di bolo consigliata per evitare di erogare eccessiva insulina.

Nota: è necessario portare il Controller vicino al Pod per ottenere il valore IOB più recente sulla schermata Home dell'App Omnipod 5.

Esaurimento dell'IOB da bolo

Il grafico seguente mostra l'IOB riconducibile a un bolo da 8 unità che si esaurisce nel corso dell'intervallo Durata dell'azione dell'insulina impostato di 4 ore.

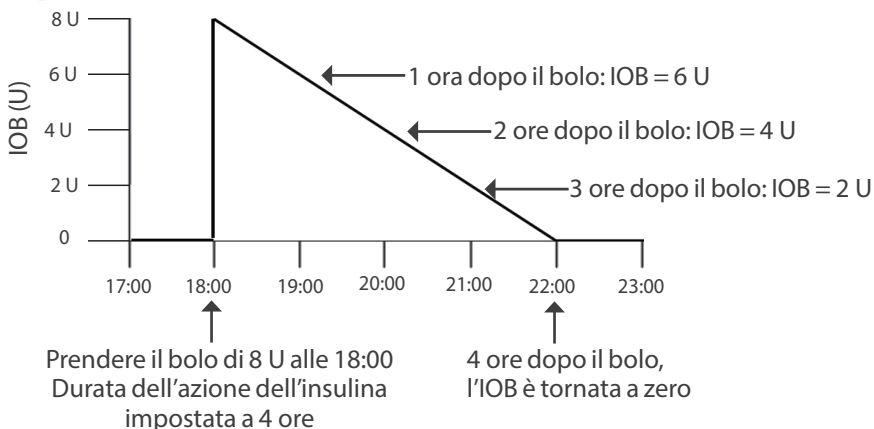

Nel Sistema Omnipod 5, anche l'IOB di correzione può variare a seconda dei calcoli della tecnologia SmartAdjust. Può aumentare o diminuire automaticamente.

Calcoli dell'Insulina Attiva (IOB)

Durata dell'azione dell'insulina -
tempo trascorso dal bolo precedente x bolo precedente
Durata dell'azione dell'insulina

L'insulina attiva (IOB) erogata da un bolo di correzione precedente è chiamata "IOB di correzione".

L'insulina attiva (IOB) erogata da un bolo pasto precedente è chiamata "IOB pasto".

Esempio di correzione IOB

Durata dell'azione dell'insulina: 3 ore
Tempo trascorso dal bolo di correzione precedente: 1 ora
Bolo di correzione precedente: 3 U

$$\frac{3 \text{ ore} - 1 \text{ ora}}{3 \text{ ore}} \times 3 \text{ U} = 2 \text{ U IOB di correzione}$$

IOB finale mostrata:

$$2 \text{ U IOB di correzione} + 1 \text{ U regolazione automatica} = 3 \text{ U IOB complessiva}$$

In altre parole, un'ora dopo il bolo di correzione precedente il corpo avrà utilizzato massimo 1 unità del bolo di correzione, mentre le

18 Comprensione dei calcoli del Suggestore SmartBolus

restanti 2 unità di insulina saranno ancora attive nel corpo per ridurre il glucosio. Inoltre, il sistema è in grado di regolare automaticamente l'IOB di correzione in base alla stima del fabbisogno insulinico. In questo esempio, la regolazione automatica ha aggiunto 1 unità per un totale di 3 unità per ridurre i livelli di glucosio.

Esempio di IOB pasto di correzione

Durata dell'azione dell'insulina: 3 ore
Tempo trascorso dal bolo pasto precedente: 2 ore
Bolo pasto precedente: 4,5 U

$$\frac{3 \text{ ore} - 2 \text{ ore}}{3 \text{ ore}} \times 4,5 \text{ U} = 1,5 \text{ U IOB pasto}$$

In altre parole, due ore dopo il bolo pasto precedente il corpo avrà utilizzato massimo 3 unità del bolo pasto, mentre le 1,5 unità di insulina restanti saranno ancora attive nel corpo per coprire il pasto.

Equazioni del Suggestore SmartBolus

Il Suggestore SmartBolus calcola innanzitutto un bolo di correzione e un bolo pasto preliminari. Questi valori verranno regolati in base all'IOB, se necessario. Suggestisce quindi un bolo totale finale che include il bolo di correzione e il bolo pasto.

Nota: le regolazioni effettuate in base alla tendenza glicemica del sensore possono aggiungere o sottrarre insulina dalla porzione di correzione e/o del pasto.

$$\text{Bolo di correzione preliminare} = \frac{\text{Glicemia corrente o Sensore} - \text{Target Glicemico}}{\text{Fattore di Correzione}}$$

Esempio: Glicemia attuale o Sensore: 11,1 mmol/L (200 mg/dL),
Target Glicemico: 8,3 mmol/L (150 mg/dL)
Fattore di Correzione (CF): 2,8 (50)

$$\frac{11,1 \text{ mmol/L (200 mg/dL)} - 8,3 \text{ mmol/L (150 mg/dL)}}{2,8 (50)} = 1 \text{ U bolo di correzione prelim.}$$

$$\text{Bolo pasto preliminare} = \frac{\text{Assunzione di carboidrati}}{\text{Rapporto Insulina/Carboidrati (IC)}}$$

Esempio: Assunzione di carboidrati: 45 grammi di carboidrati,
rapporto Insulina/Carboidrati (IC): 15

$$\frac{45}{15} = 3 \text{ U bolo pasto prelim.}$$

Bolo di correzione = (bolo di correzione prelim. - IOB di correzione IOB pasto)

L'IOB pasto viene sottratta per prima. Se il bolo di correzione preliminare è ancora superiore a zero, viene sottratta l'IOB di correzione.

Bolo pasto = bolo pasto prelim. - IOB di correzione rimanente

L'IOB pasto non viene mai sottratta da un bolo pasto. Solo l'IOB di correzione rimanente viene sottratta da un bolo pasto.

Bolo calcolato = bolo di correzione + bolo pasto

Calcolo del bolo con Correzione Inversa: se la funzione Correzione Inversa è attivata e il glucosio corrente è inferiore al Target Glicemico ma superiore alla Glicemia Minima per il Suggeritore di Bolo, il Suggeritore SmartBolus sottrae una quantità di correzione dal bolo pasto preliminare.

Bolo pasto con Correzione Inversa = Correzione Inversa + bolo pasto prelim.

Esempio: Glicemia corrente o Sensore: 4,2 mmol/L (75 mg/dL), Target Glicemico: 8,3 mmol/L (150 mg/dL), Fattore di Correzione: 2,8 (50), Bolo pasto preliminare: 2,5 U

$$\frac{4,2 \text{ mmol/L (75 mg/dL)} - 8,3 \text{ mmol/L (150 mg/dL)}}{2,8 (50)} = -1,5 \text{ U Correzione Inversa}$$

$$-1,5 \text{ U (Correzione Inversa)} + 2,5 \text{ U (bolo pasto prelim.)} = 1,0 \text{ U bolo pasto}$$

La Correzione Inversa viene applicata solo al bolo pasto. In questo esempio, il bolo pasto viene ridotto di 1,5 unità, risultando in un bolo pasto di 1,0 U.

Regole del Suggeritore SmartBolus

Il Suggeritore SmartBolus applica le seguenti regole durante il calcolo delle dosi del bolo consigliato:

Regola	Dettagli		
Arrotondamento	<p>I boli saranno sempre arrotondati <i>per difetto</i> alle 0,05 U più vicine e non saranno in alcun caso inferiori a 0 U.</p> <p>L'IOB sarà sempre arrotondata <i>per eccesso</i> alle 0,05 U più vicine e non sarà in alcun caso inferiore a 0 U.</p>		
Fattori che influenzano le dimensioni del bolo	Fattore	Aumento	Diminuzione
	Carboidrati immessi	✓	
	Valore glicemico del sensore o glicemia	✓	✓
	IOB		✓
	Tendenza glicemica del sensore (se si utilizza il Sensore)	✓	✓
	Target Glicemico	✓	✓
	Impostazione della Correzione Inversa		✓
Correzione IOB	L'IOB di correzione viene sottratta dai boli pasto e di correzione.		
IOB pasto	L'IOB pasto viene sottratta solo dai boli di correzione.		

Panoramica della schermata Calcoli bolo

Per visualizzare i dettagli relativi al calcolo del bolo, toccare VISUALIZZA CALCOLI BOLO dalla schermata Cronologia insulina e glicemia oppure toccare CALCOLI nella schermata Suggeritore SmartBolus.

Quando per un bolo vengono utilizzati un valore glicemico e una tendenza glicemica sensore, il Suggeritore SmartBolus non solo prende in considerazione il valore ma può anche regolare la quantità di bolo in base alla tendenza. Queste regolazioni sono riportate nella schermata Calcoli bolo.

Valore glicemico del sensore corrente →

Correzione calcolata e regolata per la tendenza glicemica del sensore ←

Calcoli bolo	
Bolo di correzione	0,05 u
Glicemia = 121, Target Glicemico = 110	
Fattore di correzione = 5	
$(121-110) / 50 \approx 0,22 \text{ U}$	
Regolazione IOB pasto	
IOB pasto = 0,15 U	
$0,22 \text{ U} - 0,15 \text{ U} = 0,07 \text{ U}$	
Regolazione correzione IOB	
Correzione IOB = 0 U	
$0,07 \text{ U} - 0 \text{ U} \approx 0,07 \text{ U}$	
Bolo pasto	2,7 u
Carboidrati = 27 g, Rapporto insulina/ carboidrati (IC) = 10 g/U	
$27 / 10 \approx 2,7 \text{ U}$	
Regolazione correzione IOB	
Bolo calcolato	2,75 u
Bolo totale	= 2,75 u
Correggi se superiore a: 120 mg/dL	
CHIUDI	

18.2 Esempi del Suggeritore SmartBolus

Esempio 1

50 g di carboidrati assunti durante il pasto, 0,6 U di IOB pasto e 0,5 U di IOB di correzione dai boli pasto e di correzione precedenti. Il valore glicemico del sensore non è disponibile e non è stata immessa alcuna lettura della glicemia.

Bolo di correzione -- U	
Glicemia = N/A, Target Glicemico = N/A Fattore di Correzione = N/A	
Regolazione IOB pasto	← Il Suggeritore SmartBolus non regola il bolo di correzione in base all'IOB pasto poiché non sono presenti informazioni relative al glucosio.
IOB pasto = 0,6 U N/A: nessuna lettura della glicemia	
Regolazione correzione IOB	← Il Suggeritore SmartBolus inoltre non regola il bolo di correzione in base all'IOB di correzione poiché non sono presenti informazioni relative al glucosio.
IOB di correzione = 0,5 U N/A: nessuna lettura della glicemia	
Bolo pasto 5 U	
Carboidrati = 50 g, Rapporto Insulina/ Carboidrati (IC) = 10 g/U $50 / 10 = 5 \text{ U}$	← Sono stati assunti 50 g di carboidrati durante il pasto. Con un Rapporto Insulina/Carboidrati (IC) di 10, è necessario un bolo pasto di 5 U.
Regolazione correzione IOB	← Il bolo pasto non viene regolato dall'IOB in assenza di letture della glicemia o di valori glicemici del sensore.
L'IOB viene sottratta da un bolo solo quando la glicemia è nota.	
Bolo calcolato 5 U	← Il bolo calcolato è solo il bolo pasto poiché non è presente alcun bolo di correzione.

Regolazione impostata del bolo pasto + 2 U	2 U	← È possibile apportare regolazioni manuali al bolo toccando il campo Bolo totale nella parte inferiore della schermata Suggeritore SmartBolus.
Bolo totale	= 7 U	← Il bolo totale è la somma del bolo calcolato e di eventuali regolazioni effettuate dall'utilizzatore.

Esempio 2

30 g di carboidrati assunti durante il pasto, nessuna IOB pasto o di correzione. Valore glicemico del sensore pari a 10 mmol/L, con una tendenza in crescita.

<p>Bolo di correzione 1,2 U</p> <p>Sensore = 10, Target Glicemico = 7,2 Fattore di Correzione = 2,8 (50) $(10 - 7,2) / 2,8 (50) = 1 U$</p> <p>Regolazione IOB pasto IOB pasto = 0 U 1 U - 0 U = 1 U</p> <p>Regolazione correzione IOB IOB di correzione = 0 U 1 U - 0 U = 1 U</p> <p>Bolo di correzione regolato = 1,2 U Regolato per il Sensore: In crescita</p>	<p>1,2 U</p> <p>← Il glucosio è pari a 10 mmol/L (180 mg/dL), ovvero 2,8 mmol/L (50 mg/dL) oltre il target. Poiché il Fattore di Correzione è 2,8 (50), il bolo di correzione iniziale è 1 U.</p> <p>← Il Suggeritore SmartBolus non regola il bolo di correzione in base all'IOB pasto poiché non è presente alcuna IOB pasto.</p> <p>← Il Suggeritore SmartBolus inoltre non regola il bolo di correzione in base all'IOB di correzione poiché non è presente alcuna IOB di correzione.</p> <p>← Il bolo di correzione viene aumentato per tenere conto della tendenza glicemica del sensore in crescita.</p>
<p>Bolo pasto 3,6 U</p> <p>Carboidrati = 30 g, Rapporto Insulina/ Carboidrati (IC) = 10 g/U $30 / 10 = 3 U$</p>	<p>3,6 U</p> <p>← Sono stati assunti 30 g di carboidrati durante il pasto. Con un Rapporto Insulina/Carboidrati (IC) di 10, è necessario un bolo pasto di 3 U.</p>

18 Comprensione dei calcoli del Suggestore SmartBolus

Regolazione correzione IOB

IOB di correzione rimanente = 0 U

$$3 \text{ U} - 0 \text{ U} = 3 \text{ U}$$

Bolo pasto regolato = 3,6 U

Regolato per il Sensore: In crescita

Bolo calcolato **4,8 U**

Bolo totale **4,8 U**

← Il Suggestore SmartBolus non regola il bolo pasto in base all'IOB di correzione poiché non è presente alcuna IOB di correzione.

← Il bolo pasto viene aumentato per tenere conto della tendenza glicemica del sensore in crescita.

← Il bolo calcolato è la somma del bolo di correzione e del bolo pasto che è stata regolata per il valore glicemico del sensore in crescita.

← Il bolo totale è la somma del bolo calcolato e di eventuali regolazioni effettuate dall'utilizzatore.

Esempio 3

Non sono stati immessi carboidrati, valore glicemico del sensore di 10 mmol/L (180 mg/dL) con tendenza in diminuzione. 0,8 U di IOB pasto e 0,5 U di IOB di correzione dai boli pasto e di correzione precedenti.

Bolo di correzione **0 U**

Sensore = 10

Target Glicemico = 7,2

Fattore di Correzione =
2,8 (50)

$$(10 - 7,2) / 2,8 (50) = 1 \text{ U}$$

← Il glucosio è pari a 10 mmol/L (180 mg/dL), ovvero 2,8 mmol/L (50 mg/dL) oltre il target. Poiché il Fattore di Correzione è 2,8 (50), il bolo di correzione iniziale è 1 U.

<p>Regolazione IOB pasto IOB pasto = 0,8 U $1 \text{ U} - 0,8 \text{ U} = 0,2 \text{ U}$</p>	<p>← Poiché rimangono 0,8 U di IOB pasto da un bolo pasto precedente, queste vengono sottratte dal bolo di correzione iniziale di 1 U, risultando in 0,2 U di bolo di correzione rimanenti.</p>
<p>Regolazione correzione IOB IOB di correzione = 0,5 U $0,2 \text{ U} - 0,5 \text{ U} \leq 0 \text{ U}$</p>	<p>← Inoltre, rimangono 0,5 U di IOB di correzione dall'azione dell'insulina precedente. Queste vengono sottratte dal bolo di correzione rimanente di 0,2 U, portando il bolo di correzione finale calcolato a 0 U. Si noti che 0,3 U di IOB di correzione rimangono ancora dopo aver portato il bolo di correzione a 0 U e vengono utilizzate nei calcoli del bolo pasto.</p>
<p>Bolo pasto 0 U Carboidrati = 0 g, Rapporto Insulina/ Carboidrati (IC) = 10 g/U $0 / 10 = 0 \text{ U}$</p>	<p>← Non è stato inserito alcun quantitativo di carboidrati, pertanto non si riceve alcuna dose di bolo pasto calcolato.</p>
<p>Regolazione correzione IOB IOB di correzione rimanente = 0,3 U $0 \text{ U} - 0,3 \text{ U} \leq 0 \text{ U}$</p>	<p>← Sebbene vi sia un'IOB di correzione rimanente di 0,3 U, il bolo pasto iniziale è già a 0 U, pertanto non viene regolato ulteriormente e il bolo pasto rimane a 0 U.</p>
<p>Bolo calcolato 0 U</p>	<p>← Sebbene il glucosio sia superiore al target, l'IOB è sufficiente. Di conseguenza, il Suggeritore SmartBolus consiglia di non erogare ulteriore insulina.</p>
<p>Bolo totale 0 U</p>	


Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

UTILIZZO DI UN SENSORE CON OMNIPOD 5

Importanti informazioni di sicurezza relative
al Sensore

- 19 Utilizzo di un Sensore Dexcom G6
con Omnipod 5

- 20 Utilizzo di un Sensore FreeStyle Libre 2 Plus
con Omnipod 5

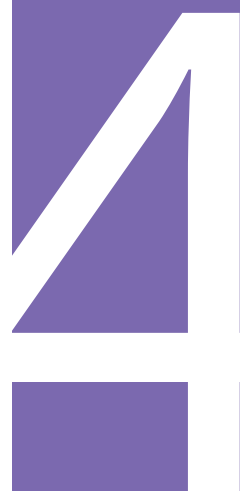

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

Importanti informazioni di sicurezza relative al Sensore

Avvertenze relative al Sensore

Avvertenza: prestare SEMPRE attenzione al valore glicemico attuale del sensore, affidarsi alle sensazioni del proprio corpo e non ignorare i sintomi di glicemia alta e bassa. Anche se l'erogazione di insulina si regola automaticamente in Modalità Automatizzata con l'obiettivo di portare il livello di glucosio al Target Glicemico definito, possono comunque verificarsi eventi di ipoglicemia o iperglicemia grave.

Se i valori glicemici del sensore non corrispondono ai sintomi, controllare SEMPRE il glucosio con un glucometro e, se necessario, prendere in considerazione il trattamento e/o la calibrazione del Sensore. Passare SEMPRE alla Modalità Manuale se si ritiene che i valori glicemici del sensore siano imprecisi.

- Valori glicemici del sensore erroneamente elevati possono causare un'erogazione eccessiva di insulina, con conseguente ipoglicemia grave, crisi convulsive, perdita di coscienza o morte.
- Valori glicemici del sensore erroneamente bassi possono causare sospensioni prolungate dell'erogazione di insulina

con conseguenti iperglicemia, DKA o morte.

Se si avvertono sintomi che non sono congruenti con le letture del glucosio e ci si è attenuti alle istruzioni descritte nel presente *Manuale d'uso tecnico*, contattare immediatamente l'operatore sanitario.

Avvertenza: utilizzare SEMPRE il Sensore secondo le istruzioni del produttore. Non utilizzarlo oltre la durata raccomandata e non avviarlo dopo la scadenza. Per determinare il fabbisogno insulinico, il Sistema Omnipod 5 si basa sui valori glicemici del sensore aggiornati e accurati. L'uso scorretto del Sensore può comportare un'erogazione eccessiva o insufficiente di insulina, con conseguente ipoglicemia o iperglicemia.

Avvertenza: confermare SEMPRE che il Numero di serie (NS) del Trasmittitore Dexcom G6 salvato nell'App Omnipod 5 corrisponda a quello che si indossa. Nei casi in cui più di una persona in famiglia utilizza Dexcom G6, una mancata corrispondenza nell'abbinamento dei Numeri di serie (NS) del Trasmittitore può comportare un'erogazione eccessiva o insufficiente di insulina, con conseguente ipoglicemia e iperglicemia.

Avvertenza: i componenti del dispositivo, tra cui il Pod, il Sensore Dexcom G6, il Trasmettitore Dexcom G6 e il Sensore FreeStyle Libre 2 Plus, possono risentire dell'esposizione a forti radiazioni o campi magnetici. I componenti del dispositivo devono essere rimossi (e il Pod e il Sensore devono essere smaltiti) prima di eseguire radiografie, risonanza magnetica (RM) o tomografia computerizzata (TC) (o qualsiasi test o procedura simile). Inoltre, il Controller deve essere collocato all'esterno della sala operatoria. L'esposizione a raggi X, RM, TC o al trattamento può danneggiare questi componenti. Per conoscere le linee guida per la rimozione del Pod, rivolgersi all'operatore sanitario di riferimento.

Avvertenza: NON utilizzare il Sistema Omnipod 5 con il Sensore Dexcom G6 se si assume idrossiurea, un farmaco utilizzato nel trattamento di malattie tra cui il cancro e l'anemia a cellule falciformi. I valori glicemici del Sensore Dexcom G6 potrebbero essere falsamente elevati e causare un'erogazione eccessiva di insulina con conseguente ipoglicemia grave.

Precauzioni relative al Sensore

Attenzione: non è possibile utilizzare il ricevitore Dexcom G6 con il Sistema Omnipod 5 in quanto quest'ultimo è compatibile con l'app G6 solo su smartphone.

Attenzione: non è possibile utilizzare un altro dispositivo per eseguire la scansione, leggere i valori o ricevere allarmi dal Sensore FreeStyle Libre 2 Plus con il Sistema Omnipod 5. L'App Omnipod 5 è compatibile solo con un Sensore avviato da e associato direttamente all'App Omnipod 5 sul Controller.

CAPITOLO 19

Utilizzo di un Sensore Dexcom G6 con Omnipod 5

Sommario

19.1	Panoramica di Dexcom G6	278
19.2	Posizionamento del Sensore Dexcom G6	279
	Esempi di posizionamento negli adulti	279
	Esempi di posizionamento nei bambini	280
19.3	Utilizzo del Dexcom G6 con Omnipod 5	280
19.4	Valori glicemici del sensore	281
	Valori glicemici del sensore alti e bassi	281
	Ipoglicemia urgente	282
19.5	Frecce della tendenza glicemica del sensore	282
19.6	Messaggi di comunicazione	283
19.7	Informazioni sulla connessione del Dexcom G6 al Pod	285
19.8	Connessione del Dexcom G6 durante la configurazione iniziale del Pod	286
19.9	Connessione del Trasmettitore del Dexcom G6	286
19.10	Disconnessione del Trasmettitore dal Pod	287
19.11	Passaggio a Dexcom G6 da un altro Sensore	288
	Come passare da un altro Sensore a Dexcom G6	288

19.1 Panoramica di Dexcom G6

Avvertenza: prestare SEMPRE attenzione al valore glicemico attuale del sensore, affidarsi alle sensazioni del proprio corpo e non ignorare i sintomi di glicemia alta e bassa. Anche se l'erogazione di insulina si regola automaticamente in Modalità Automatizzata con l'obiettivo di portare il livello di glucosio al Target Glicemico definito, possono comunque verificarsi eventi di ipoglicemia o iperglicemia grave.

Se i valori glicemici del sensore non corrispondono ai sintomi, controllare SEMPRE il glucosio con un glucometro e, se necessario, prendere in considerazione il trattamento e/o la calibrazione del Sensore. Passare SEMPRE alla Modalità Manuale se si ritiene che i valori glicemici del sensore siano imprecisi.

- Valori glicemici del sensore erroneamente elevati possono causare un'erogazione eccessiva di insulina, con conseguente ipoglicemia grave, crisi convulsive, perdita di coscienza o morte.
- Valori glicemici del sensore erroneamente bassi possono causare sospensioni prolungate dell'erogazione di insulina con conseguenti iperglicemia, DKA o morte.

Se si avvertono sintomi che non sono congruenti con le letture del glucosio e ci si è attenuti alle istruzioni descritte nel presente *Manuale d'uso tecnico*, contattare immediatamente l'operatore sanitario.

Il Sistema Omnipod 5 è progettato per essere connesso al sistema CGM Dexcom G6. Quando è connesso a Dexcom G6, il Pod riceve i valori e le tendenze della glicemia da Dexcom G6. In Modalità Automatizzata, il Pod utilizza i valori glicemici del sensore per prendere decisioni automatizzate sul dosaggio dell'insulina ogni 5 minuti. Sia in Modalità Manuale sia in Modalità Automatizzata, è possibile utilizzare un valore glicemico e una tendenza glicemica del sensore nel Suggeritore SmartBolus per calcolare un bolo consigliato.

Leggere e seguire tutte le istruzioni relative al prodotto Dexcom G6, incluse le dichiarazioni di sicurezza, contenute nelle *Istruzioni per l'uso del sistema CGM Dexcom G6*.

Nota: tutti gli avvisi e le azioni specifici del Sensore e del Trasmettitore sono controllati tramite l'app Dexcom G6. Per ulteriori informazioni, vedere le *Istruzioni per l'uso del sistema CGM Dexcom G6*.

Nota: l'app Dexcom G6 e il App Omnipod 5 non comunicano direttamente tra loro, bensì dispongono di canali di comunicazione separati per acquisire i valori glicemici del sensore. Di conseguenza, a volte si potrebbe notare una lieve variazione dei valori glicemici del sensore tra le app.

Quando si connette e si utilizza un Sensore, tenere presente quanto segue:

- Controllare sempre le date di scadenza del Dexcom G6 per il Sensore e il Trasmettitore. Non avviare il Sensore oltre la data di scadenza.
- Attenersi alle procedure di posizionamento approvate da Dexcom per l'usare del Dexcom G6.
- Tutti gli avvisi del Dexcom G6 sono configurati e guidati dall'app Dexcom G6. Prima di utilizzare il Sistema Omnipod 5, impostare gli avvisi del valore di glucosio Basso e Alto e qualsiasi altro avviso nell'app Dexcom G6.

Nota: il Sistema Omnipod 5 avvisa anche quando i valori glicemici del sensore sono pari o inferiori a 3,1 mmol/L (55 mg/dL).


- Assicurarsi sempre che il Numero di serie (NS) del Trasmettitore immesso nelle app Dexcom G6 e Omnipod 5 corrisponda a quello che si sta indossando.

19.2 Posizionamento del Sensore Dexcom G6


La connessione Bluetooth tra il Sensore e il Pod è ottimale quando il segnale non passa attraverso il corpo. Mantenere entrambi i dispositivi ad almeno 8 cm (3 pollici) di distanza ed entro la linea di vista consente una comunicazione coerente tra il Trasmettitore e il Pod.

Nota: per linea di vista si intende che il Pod e il Sensore vengono indossati sullo stesso lato del corpo in modo che i due dispositivi possano “vedersi” l'un l'altro senza che il corpo ne ostacoli la comunicazione.

Esempi di posizionamento negli adulti

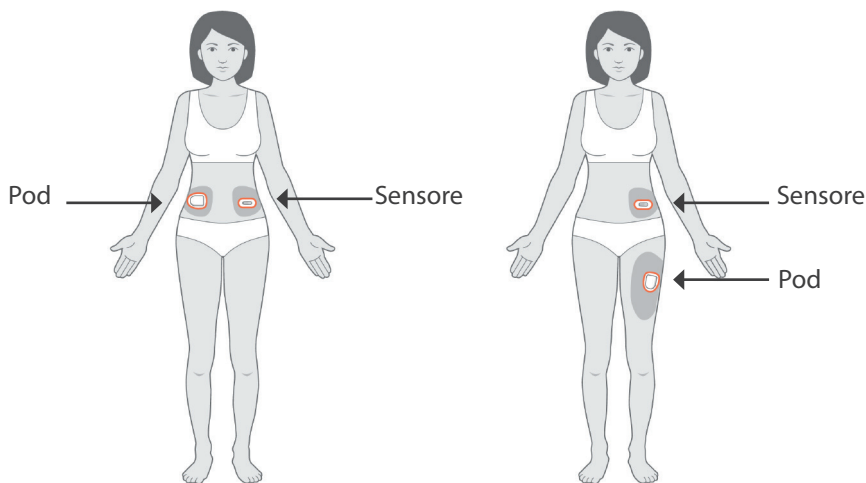

Esempi di posizionamento nei bambini

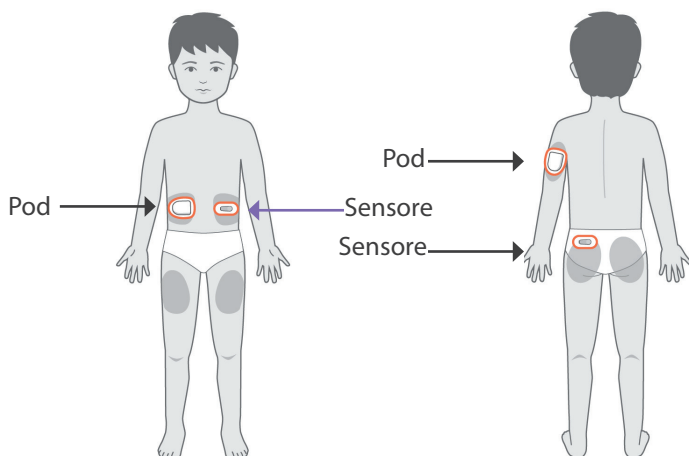

Nota: consultare le *Istruzioni per l'uso del sistema CGM Dexcom G6* per ulteriori informazioni sui punti di posizionamento approvati del Sensore.

19.3 Utilizzo del Dexcom G6 con Omnipod 5

Quando si utilizza il Sistema Omnipod 5 con il sistema CGM Dexcom G6, è necessario utilizzare l'app Dexcom G6 per controllare il Sensore.

Attenzione: non è possibile utilizzare il ricevitore Dexcom G6 con il Sistema Omnipod 5 in quanto quest'ultimo è compatibile con l'app G6 solo su smartphone.

19.4 Valori glicemici del sensore

I valori glicemici del sensore vengono visualizzati sulla DASHBOARD. La DASHBOARD visualizza inoltre una freccia per la tendenza glicemica del sensore per indicare se i valori glicemici del sensore stanno registrando una tendenza in crescita, in diminuzione o stabile. In Modalità Automatizzata, il sistema tiene in considerazione la tendenza glicemica del sensore ogni 5 minuti durante le decisioni relative all'erogazione di insulina automatizzata.

In Modalità Manuale e in Modalità Automatizzata, è possibile utilizzare il valore glicemico e la tendenza glicemica del sensore nel Suggeritore SmartBolus. Il Suggeritore SmartBolus può aumentare o diminuire il bolo come necessario in base al valore glicemico e alla tendenza glicemica del sensore.



Valori glicemici del sensore alti e bassi

L'App Omnipod 5 indica valori glicemici del sensore alti e bassi come segue.

Valori glicemici del sensore	Display schermo
Dexcom G6: Superiore a 22,2 mmol/L (400 mg/dL)	ALTO
FreeStyle Libre 2 Plus: Superiore a 27,8 mmol/L (500 mg/dL)	
Inferiore a 2,2 mmol/L (40 mg/dL)	BASSO

Nota: i valori glicemici del sensore vengono registrati automaticamente sul Sistema Omnipod 5 e non è necessario immetterli nella schermata Immetti glicemia.

Ipoglicemia urgente

Avvertenza: trattare SEMPRE tempestivamente la glicemia bassa. Un valore del glucosio pari o inferiore a 3,1 mmol/L (55 mg/dL) indica ipoglicemia significativa (glicemia molto bassa). Se non trattata, può causare crisi convulsive, perdita di coscienza o morte. Attenersi alle raccomandazioni dell'operatore sanitario per il trattamento.

Quando il valore glicemico del sensore è pari o inferiore a 3,1 mmol/L (55 mg/dL), il Dexcom G6 invierà il valore al Pod. Il Pod emette un Allarme di Notifica per segnalare che il glucosio è molto basso. È possibile confermare l'allarme dal Controller. Vedere "13.7 Elenco degli Allarmi di Notifica" a pagina 177.

Nota: questo allarme si verifica nuovamente se si riceve un altro valore glicemico del sensore pari o inferiore a 3,1 mmol/L (55 mg/dL) dopo la conferma dell'Allarme di Notifica iniziale.

Nota: questo Allarme di Notifica smetterà di ripetersi solo una volta ricevuto un valore di glucosio pari o superiore a 3,2 mmol/L (56 mg/dL). È possibile silenziare questo Allarme di Notifica per 30 minuti confermando il messaggio sul display.

Nota: utilizzare un glucometro per confermare il valore del glucosio. Trattare la glicemia bassa secondo necessità.

Nota: l'Allarme di Notifica Ipoglicemia urgente è correlato al livello attuale di glucosio nel corpo, mentre gli altri allarmi sono correlati allo stato del Pod o dell'App Omnipod 5.

19.5 Freccie della tendenza glicemica del sensore





Le freccie della tendenza vengono visualizzate in base alle specifiche Dexcom. Il colore della freccia corrisponde al colore del valore glicemico del sensore. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle *Istruzioni per l'uso del sistema CGM Dexcom G6*.

Il colore della freccia del valore glicemico e della tendenza glicemica del sensore può variare come segue:

Colore dei valori glicemici del sensore	Descrizione
Viola	Il valore glicemico del sensore rientra nell'Obiettivo glicemico (Modalità Automatizzata)

Colore dei valori glicemici del sensore	Descrizione
Azzurro	Il valore glicemico del sensore rientra nell'Obiettivo glicemico (Modalità Manuale)
Rosso	Il valore glicemico del sensore è inferiore all'Obiettivo glicemico
Arancione	Il valore glicemico del sensore è superiore all'Obiettivo glicemico

La tabella seguente descrive le frecce della tendenza glicemica del sensore. Le frecce della tendenza sono mostrate in blu esclusivamente a scopo esemplificativo.

Frecce della tendenza	Descrizione
	Costante; in aumento/diminuzione di meno di 0,1 mmol/L (1 mg/dL) al minuto
	In lento calo/In lenta crescita; il glucosio potrebbe diminuire/aumentare di 3,4 mmol/L (62 mg/dL) in 30 minuti
	In calo/In crescita; il glucosio potrebbe diminuire/aumentare di 5 mmol/L (90 mg/dL) in 30 minuti
	In rapido calo/In rapida crescita; il glucosio potrebbe diminuire/aumentare di oltre 5 mmol/L (90 mg/dL) in 30 minuti

19.6 Messaggi di comunicazione

Messaggio di comunicazione	Descrizione
CONNESSIONE TRASMETTITORE IN CORSO	Si verifica dopo l'immissione di un Numero di serie (NS) del Trasmittitore e il rilevamento di un tentativo del Pod di connettersi al Trasmittitore.

19 Utilizzo di un Sensore Dexcom G6 con Omnipod 5

Messaggio di comunicazione	Descrizione
RILEVATO PROBLEMA DI DEXCOM	Quando i valori glicemici del sensore non sono disponibili a causa di un Errore Sensore (inclusa la scadenza del Sensore). Per maggiori dettagli, vedere l'app Dexcom G6. Non è richiesta alcuna azione nell'App Omnipod 5.
RICERCA POD IN CORSO	Quando la comunicazione del Pod non è stata stabilita nell'intervallo di aggiornamento di 5 minuti più recente. Toccare ULTERIORI INFORMAZIONI per le cause potenziali e le azioni consigliate.
RICERCA SENSORE IN CORSO	Quando il Sensore è attivo e connesso al Pod Omnipod 5, ma il valore glicemico del sensore più recente non è stato acquisito entro la finestra di 5 minuti. Potrebbe non essere disponibile un valore glicemico del sensore valido a causa di un problema di comunicazione tra Pod e Sensore o di un problema temporaneo del Sensore (risolvibile senza alcuna azione da parte dell'utilizzatore). Toccare ULTERIORI INFORMAZIONI per l'azione consigliata. Controllare il posizionamento del Pod e del Sensore. Il Pod e il Sensore devono essere a una distanza reciproca di almeno 8 cm (3 pollici) ed entro la linea di vista.
ERRORE DEL TRASMETTITORE	Quando il Trasmettitore connesso al Sistema Omnipod 5 scade o si verifica un errore non risolvibile. Toccare SERVE AIUTO per le possibili cause e le azioni consigliate. Per configurare un nuovo Trasmettitore, vedere "Sensore" a pagina 280.

Messaggio di comunicazione	Descrizione
TRASMETTITORE NON TROVATO	In caso di tentativo del Pod di connettersi a un Trasmettitore che dopo 20 minuti non ha ancora avuto esito positivo. Questo può accadere anche quando un Trasmettitore è ancora connesso a un Pod scartato. Questo può accadere anche quando un Trasmettitore è ancora connesso a un Pod scartato. Toccare SERVE AIUTO per le possibili cause e le azioni consigliate. Vedere “Sensore” a pagina 280 per ulteriori informazioni.
IN ATTESA DELLA CONFIGURAZIONE DI DEXCOM	Quando il Trasmettitore è connesso ma i valori glicemici del Sensore non sono disponibili perché il Dexcom G6 è in fase di riscaldamento del Sensore o richiede la calibrazione. Per maggiori dettagli, vedere l'app Dexcom G6. Non è richiesta alcuna azione nell'App Omnipod 5.

Nota: per tutti i problemi correlati al Sensore, fare riferimento alle *Istruzioni per l'uso del sistema CGM Dexcom G6*.

19.7 Informazioni sulla connessione del Dexcom G6 al Pod

Il Sistema Omnipod 5 non è progettato per funzionare con il CGM Dexcom G6. Per utilizzare il CGM Dexcom G6 con il Sistema Omnipod 5, è necessario ottenere il Sensore e il Trasmettitore Dexcom G6, le *Istruzioni per l'uso di Dexcom G6* e scaricare l'app Dexcom G6 sul proprio smartphone personale.

Prima di poter visualizzare e utilizzare i valori glicemici del sensore nel Sistema Omnipod 5, è necessario configurare il Sistema Omnipod 5 per consentire al Pod di comunicare con il Sensore. Una volta connesso, sarà possibile utilizzare il sistema in Modalità Automatizzata, visualizzare i valori glicemici del sensore nell'App Omnipod 5 e utilizzare i valori glicemici del sensore nel Suggeritore bolo in entrambe le Modalità Manuale e Automatizzata.

19 Utilizzo di un Sensore Dexcom G6 con Omnipod 5

Nota: il Sensore Dexcom G6 deve essere avviato nell'app Dexcom per poter utilizzare i valori glicemici e le tendenze glicemiche del sensore nel Sistema Omnipod 5.

Prima di iniziare, procedere come segue:

- Il Sistema Omnipod 5 non si connette al Trasmettitore se si utilizza il ricevitore Dexcom. Se si dispone già di un Trasmettitore connesso al ricevitore, disattivare il ricevitore. È necessario utilizzare l'app Dexcom G6 sul proprio smartphone. Per istruzioni sull'utilizzo del sistema CGM Dexcom G6, consultare le *Istruzioni per l'uso del sistema CGM Dexcom G6*.

19.8 Connessione del Dexcom G6 durante la configurazione iniziale del Pod

Per connettere il Trasmettitore durante la configurazione iniziale del Pod:

1. Dopo aver attivato il Pod durante la configurazione iniziale, toccare **CONNETTI SENSORE**.

Nota: se si tocca **NON ORA** dopo aver attivato il Pod durante la configurazione iniziale, è possibile connettere il Sensore e il Trasmettitore in un secondo momento. Vedere “Connessione del Trasmettitore del Dexcom G6” nella sezione successiva.

2. Andare al passaggio 3 “Connessione del Trasmettitore del Dexcom G6” nella sezione successiva.

19.9 Connessione del Trasmettitore del Dexcom G6

Avvertenza: confermare SEMPRE che il Numero di serie (NS) del Trasmettitore Dexcom G6 salvato nell'App Omnipod 5 corrisponda a quello che si indossa. Nei casi in cui più di una persona in famiglia utilizza Dexcom G6, una mancata corrispondenza nell'abbinamento dei Numeri di serie (NS) del Trasmettitore può comportare un'erogazione eccessiva o insufficiente di insulina, con conseguente ipoglicemia e iperglicemia.

Se in precedenza era già stato connesso un Trasmettitore che è scaduto, oppure se è stato eliminato il Numero di serie (NS) del Trasmettitore e si desidera riconnettersi, è necessario inserire un nuovo NS.

Per connettere il Trasmittitore del Dexcom G6:

1. Dalla schermata Home, toccare il pulsante Menu (☰) > Gestisci Sensore.
La schermata Gestione Sensore visualizza l'NS salvato.
Nota: se l'NS Trasmittitore è stato precedentemente eliminato, il campo NS risulta vuoto (vedere “19.10 Disconnessione del Trasmittitore dal Pod” a pagina 287).
2. Toccare IMMETTI NUOVO.
3. Toccare il campo NS per visualizzare il tastierino alfanumerico.
4. Inserire l'NS stampato sul retro del Trasmittitore o sulla sua scatola, quindi toccare Fatto.
5. Toccare SALVA.



- Nota:** se si tocca ANNULLA o si esce dalla schermata corrente (premendo la freccia indietro), l'NS non viene salvato.
6. Toccare CONFERMA per avviare la connessione del Trasmittitore al Pod. La procedura di connessione può richiedere fino a 20 minuti.

Quando la comunicazione con il Pod viene stabilita correttamente, sullo schermo compare il messaggio “Connessione Trasmittitore in corso”.

Se il Pod non riesce a connettersi al Trasmittitore entro 20 minuti, compare il messaggio “Trasmittitore non trovato”. Toccare SERVE AIUTO per ulteriori informazioni. Vedere “26.3 Domande frequenti sul Sensore” a pagina 389 per ulteriori informazioni.

Se non si dispone di un Pod attivo o si sta sostituendo il Pod, il Numero di serie (NS) del Trasmittitore verrà salvato e inviato al successivo Pod attivato.

19.10 Disconnessione del Trasmittitore dal Pod

Per impedire che il Pod comunichi con il Trasmittitore, eliminare l'NS. Se si elimina l'NS, non sarà più possibile accedere alla Modalità Automatizzata fino a quando non viene aggiunto un nuovo NS Trasmittitore.

19 Utilizzo di un Sensore Dexcom G6 con Omnipod 5

Per eliminare l'NS:

1. Dalla schermata Home, toccare il pulsante Menu (☰) > Gestisci Sensore.

La schermata Gestione Sensore visualizza l'NS salvato.

2. Toccare ELIMINA.
3. Toccare OK, ELIMINA per confermare.

19.11 Passaggio a Dexcom G6 da un altro Sensore

Il Sistema Omnipod 5 è compatibile con sensori di più marchi e modelli. Se si desidera passare al Sensore Dexcom G6 con il Sistema Omnipod 5 da un altro tipo di Sensore compatibile, è possibile commutare i Sensori nell'App Omnipod 5


Nota: la commutazione dei Sensori deve essere effettuata tra una sostituzione e l'altra del Pod. Un singolo Pod non può essere connesso a più di una marca o un modello di Sensore durante l'utilizzo.

Come passare da un altro Sensore a Dexcom G6

Seguire gli 8 passaggi riportati di seguito:

1. Accedere a: pulsante Menu (☰) > Gestisci Sensore.

Nota: non è possibile passare da un Sensore all'altro mentre si indossa un Pod attivo. Se si dispone di un Pod attivo, quando si prova a cambiare il Pod viene visualizzato il messaggio Attendere la prossima sostituzione del Pod.

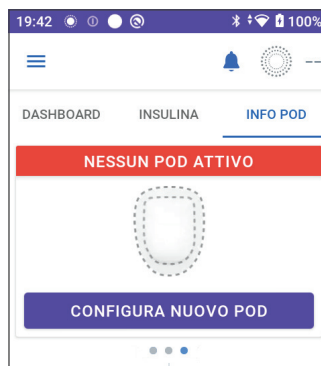


2. L'App Omnipod 5 mostra il Sensore corrente.

Toccare **Cambia** > per passare (o meno) a un altro Sensore.

Ad esempio, ipotizziamo che sia in uso un Sensore


FreeStyle Libre 2 Plus e si desideri passare a un Sensore Dexcom G6.

3. La schermata Selezione Sensore mostra le opzioni relative all'attuale Sensore selezionato.

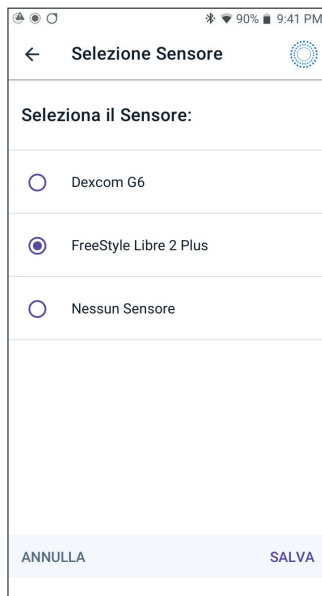


4. Per passare al Sensore Dexcom G6, selezionare Dexcom G6.

Toccare **SALVA**.

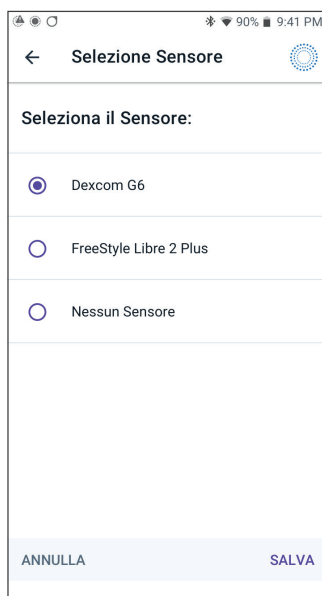

19 Utilizzo di un Sensore Dexcom G6 con Omnipod 5

5. Confermare il passaggio a Dexcom G6.
Toccare **CONFERMA** per confermare.

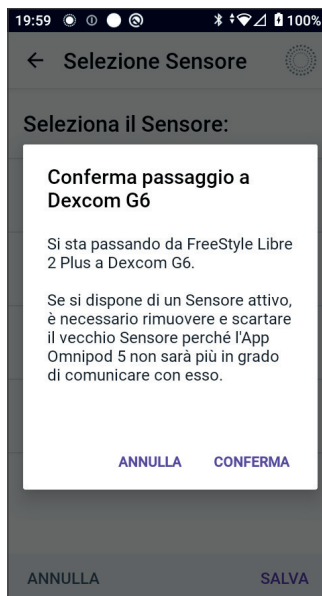

6. L'App Omnipod 5 chiederà:
Aggiungere il Sensore Dexcom G6 a Omnipod 5 ora?

Toccare **AGGIUNGI** per iniziare la procedura di aggiunta del Sensore Dexcom G6 a Omnipod 5.


Tocca **NON ORA** per aggiungere un Sensore Dexcom G6 a Omnipod 5 in seguito.

7. Aggiungere il Trasmettitore Dexcom G6 immettendo il Numero di serie (NS) del Trasmettitore nell'App Omnipod 5. Vedere "19.9 Connessione del Trasmettitore del Dexcom G6" a pagina 286.
8. Attivare un nuovo Pod.

Quando la comunicazione con il Pod viene stabilita correttamente, sullo schermo compare il messaggio "Connessione Trasmettitore in corso".

Se il Pod non riesce a connettersi al Trasmettitore Dexcom G6 entro 20 minuti, compare il messaggio "Trasmettitore non trovato". Toccare **SERVE AIUTO** per ulteriori informazioni. Vedere "26.3 Domande frequenti sul Sensore" a pagina 389.

Se non si dispone di un Pod attivo, il Numero di serie Trasmettitore verrà salvato e inviato al successivo Pod attivato.

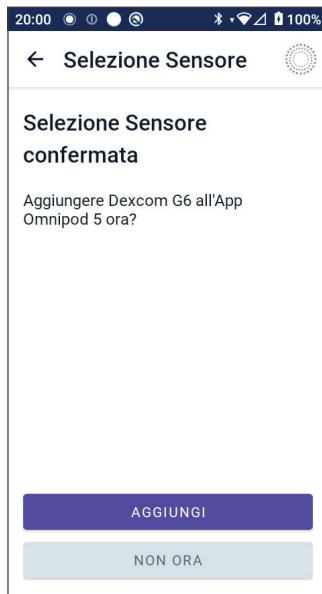

CAPITOLO 20

Utilizzo di un Sensore FreeStyle Libre 2 Plus con Omnipod 5

Sommario

20.1	Panoramica del Sensore FreeStyle Libre 2 Plus	293
20.2	Applicazione e posizionamento del Sensore FreeStyle Libre 2 Plus	295
	Applicazione del Sensore	295
	Scansione del Sensore da attivare	297
20.3	Utilizzo del Sensore FreeStyle Libre 2 Plus con l'App Omnipod 5	298
	Utilizzo del Sensore FreeStyle Libre 2 Plus senza un Pod attivo (stato Solo Sensore)	298
	Aggiunta di un Sensore FreeStyle Libre 2 Plus a Omnipod 5	299
	Revisione dei valori glicemici del sensore	300
	Allarme Glicemia alta	300
	Allarme Glicemia bassa	301
	Allarme Valori glicemici del sensore mancanti	302
	Ipoglicemia urgente	303
20.4	Tendenze glicemiche del sensore e indicatori	304
	Visualizzazione del grafico dei valori glicemici del sensore	305
20.5	Messaggi di comunicazione e problemi del Sensore FreeStyle Libre 2 Plus	306
	Messaggi di comunicazione	306
	Sensore troppo freddo	309
	Sensore troppo caldo	309
	Problema temporaneo del Sensore	309
	Sensore terminato	310
	Nessun Sensore	311
	Sostituisci Sensore	312
	Impossibile connettersi	312
	Come rispondere ai messaggi di problemi	313

20.6	Informazioni sulla connessione di un Sensore FreeStyle Libre 2 Plus al Pod	314
20.7	Connessione di un Sensore FreeStyle Libre 2 Plus durante la configurazione iniziale del Pod	315
20.8	Rimozione del Sensore: scadenza ed eliminazione.....	319
	Termine del Sensore	320
	Eliminazione di un Sensore	320
20.9	Passaggio a FreeStyle Libre 2 Plus da un altro Sensore	322

20.1 Panoramica del Sensore FreeStyle Libre 2 Plus

Avvertenza: prestare SEMPRE attenzione al valore glicemico attuale del sensore, affidarsi alle sensazioni del proprio corpo e non ignorare i sintomi di glicemia alta e bassa. Anche se l'erogazione di insulina si regola automaticamente in Modalità Automatizzata con l'obiettivo di portare il livello di glucosio al Target Glicemico definito, possono comunque verificarsi eventi di ipoglicemia o iperglicemia grave.

Se i valori glicemici del sensore non corrispondono ai sintomi, controllare SEMPRE il glucosio con un glucometro e, se necessario, prendere in considerazione il trattamento e/o la calibrazione del Sensore. Passare SEMPRE alla Modalità Manuale se si ritiene che i valori glicemici del sensore siano imprecisi.

- Valori glicemici del sensore erroneamente elevati possono causare un'erogazione eccessiva di insulina, con conseguente ipoglicemia grave, crisi convulsive, perdita di coscienza o morte.
- Valori glicemici del sensore erroneamente bassi possono causare sospensioni prolungate dell'erogazione di insulina con conseguenti iperglicemia, DKA o morte.

Se si avvertono sintomi che non sono congruenti con le letture del glucosio e ci si è attenuti alle istruzioni descritte nel presente *Manuale d'uso tecnico*, contattare immediatamente l'operatore sanitario.

Il Sistema Omnipod 5 è progettato per essere connesso al Sistema di Monitoraggio Flash del Glucosio FreeStyle Libre 2 Plus. Quando è connesso al Sensore FreeStyle Libre 2 Plus, il Pod riceve i valori e le tendenze glicemiche direttamente dal Sensore FreeStyle Libre 2 Plus. In Modalità Automatizzata, il Pod utilizza i valori glicemici del sensore per prendere decisioni automatizzate sul dosaggio dell'insulina ogni 5 minuti. Sia in Modalità Manuale sia in Modalità Automatizzata, è possibile utilizzare un valore glicemico e una tendenza glicemica del sensore nel Suggeritore SmartBolus per calcolare un bolo consigliato.

Leggere e seguire tutte le istruzioni relative al Sensore FreeStyle Libre 2 Plus, comprese le dichiarazioni di sicurezza, contenute nelle *Istruzioni per l'uso di FreeStyle Libre 2 Plus*.

Nota: azioni e avvisi specifici del Sensore sono tutti controllati tramite l'App Omnipod 5. Non è possibile utilizzare un altro dispositivo per eseguire la scansione, leggere i valori o ricevere allarmi dal Sensore quando si utilizza il Sensore FreeStyle Libre 2 Plus con il Sistema Omnipod 5. Il Sensore deve essere avviato dall'App Omnipod 5 per essere associato a un Pod.

Quando si connette e si utilizza un Sensore FreeStyle Libre 2 Plus, tenere presente quanto segue:

- NON utilizzare se la confezione del kit Sensore, la scatola del Sensore o l'applicatore del Sensore appaiono danneggiati o già aperti per evitare il rischio di non mancati risultati e/o infezione.
- NON utilizzare se il contenuto del kit Sensore ha superato la data di scadenza.
- Verificare che i codici del Sensore sulla scatola del Sensore e sull'applicatore del Sensore corrispondano prima dell'uso. Codici del Sensore diversi causano valori glicemici del sensore non corretti.
- Il Sensore FreeStyle Libre 2 Plus deve essere indossato sul retro della parte superiore del braccio.
- Tutti gli avvisi del Sensore FreeStyle Libre 2 Plus sono configurati e azionati dall'App Omnipod 5. Durante la configurazione iniziale del Sensore con il Sistema Omnipod 5, devono essere impostati gli avvisi di Glicemia alta, Glicemia bassa e Valori del Sensore mancanti.


Il Sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora costantemente il glucosio e, se utilizzato con il Sistema Omnipod 5, invia i valori glicemici e le tendenze glicemiche in modalità wireless al Pod. Il Sensore FreeStyle Libre 2 Plus non richiede l'uso del pungidito.

Il sistema FreeStyle Libre 2 Plus include:

- **Scatola del Sensore:** contiene un Sensore sterile.
- **Sensore:** Sensore a forma circolare da indossare sul retro della parte superiore del braccio. Il Sensore è dotato di un filamento sottile e flessibile che viene inserito in maniera indolore sotto la pelle.
- **Applicatore:** utilizzato per prelevare il Sensore dalla scatola del Sensore e applicarlo al braccio.
- **Controller:** i Sensori vengono avviati e gestiti tramite l'App Omnipod 5 in esecuzione sul Controller fornito da Insulet.

Se utilizzato con un Pod attivo: i valori glicemici e le tendenze glicemiche del sensore vengono inviati direttamente al Pod per l'uso nell'automazione dell'erogazione di insulina. Il valore e la tendenza vengono visualizzati nell'App Omnipod 5.

Se utilizzato senza un Pod attivo: se si sceglie di utilizzare l'App Omnipod 5 senza un Pod, ad esempio se si eseguono iniezioni per alcuni giorni, è comunque possibile utilizzare l'App Omnipod 5 per la gestione del glucosio. Senza un Pod attivo, il Sensore invia i valori glicemici del sensore e li trasmette direttamente all'App. È possibile utilizzare l'App in questo modo per un massimo di 30 giorni.

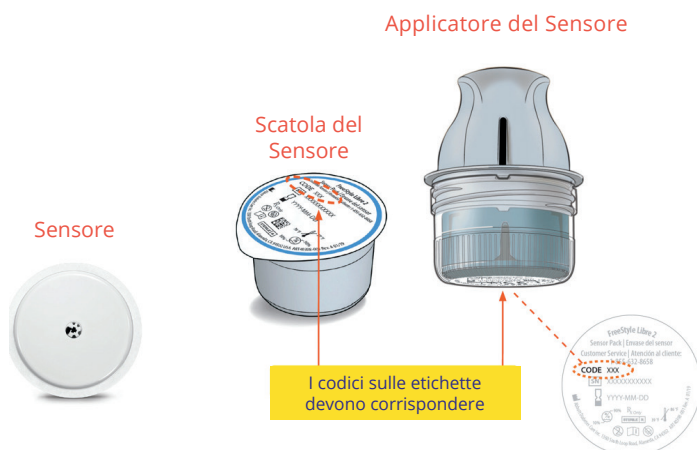


20.2 Applicazione e posizionamento del Sensore FreeStyle Libre 2 Plus

Dopo aver attivato un Pod, occorre configurare FreeStyle Libre 2 Plus come Sensore preferito.

Applicazione del Sensore

Per applicare un Sensore:

1. Pulire, disinfettare e asciugare il sito designato.
 - a. Individuare un punto sul retro della parte superiore del braccio che rimanga disteso durante le normali attività.
 - b. Pulire la pelle con acqua e sapone non idratante e senza profumo.
 - c. Utilizzare una salvietta imbevuta di alcol per disinfettare la pelle e lasciarla asciugare all'aria prima di procedere.
 - d. Selezionare un sito in linea di vista e ad almeno 2,5 cm (1 pollice) di distanza dal Pod.


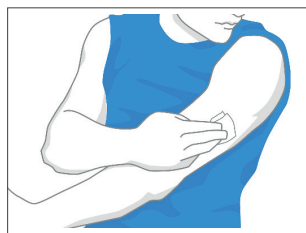


Nota: per linea di vista si intende che il Pod e il Sensore vengono indossati sullo stesso lato del corpo in modo che i due dispositivi possano “vedersi” l’un l’altro senza che il corpo ne ostacoli la comunicazione.

Nota: evitare cicatrici, nei, smagliature, noduli e siti di iniezione di insulina. Per prevenire l’irritazione della pelle, alternare i siti tra le applicazioni.

2. Preparare l’applicatore.

- Aprire la scatola del Sensore staccando il coperchio.
- Svitare il tappo dalla parte inferiore dell’applicatore del Sensore.
- Allineare i contrassegni sull’applicatore del Sensore mentre lo si inserisce nella scatola del Sensore.
- Premere con decisione sull’applicatore su una superficie rigida fino all’arresto. Sollevare l’applicatore.

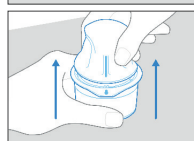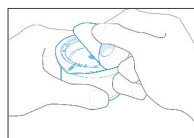


L’applicatore del Sensore è pronto per l’applicazione del Sensore.

Attenzione: l’applicatore del Sensore contiene un ago. Non toccare l’interno dell’applicatore del Sensore e non reinserirlo nella scatola del Sensore.

3. Applicare il Sensore.

- Posizionare l’applicatore del Sensore sul sito designato sul retro della parte superiore del braccio e premere con decisione per applicare.
- Allontanare delicatamente l’applicatore del Sensore dal corpo.
- Assicurarsi che il Sensore sia ben saldo premendolo e facendo scorrere il dito lungo l’adesivo del Sensore.

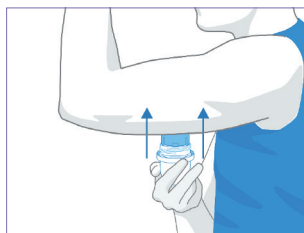

Attenzione: per evitare lesioni o risultati indesiderati, non spingere l’applicatore del Sensore finché non viene posizionato sul sito preparato.

Scansione del Sensore da attivare

Per attivare il Sensore:

1. Per aggiungere il Sensore FreeStyle Libre 2 Plus all'App Omnipod 5, toccare AGGIUNGI SENSORE.

Se non si è in Modalità Manuale, verrà richiesto di passare alla Modalità Manuale.

Nota: se il Sensore non è ancora stato applicato al corpo, verrà chiesto di farlo prima di continuare.

2. Eseguire la scansione del Sensore FreeStyle Libre 2 Plus tenendo il terzo inferiore del Controller in corrispondenza del Sensore.

Tenere il Controller vicino al Sensore senza spostarlo finché il Controller non vibra, a indicare che la scansione è completa.

Nota: è in grado di eseguire la scansione anche attraverso i vestiti.

3. Quando si posiziona il Controller in corrispondenza del Sensore, la scansione viene attivata.

Al termine della scansione, viene visualizzato un messaggio che indica che non sarà necessario ripetere la scansione fino all'avvio di un nuovo Sensore.

Toccare OK.

Nota: il Pod riceve un valore glicemico e una tendenza glicemica del sensore aggiornati ogni 5 minuti. Non sarà necessario eseguire la scansione del Sensore per rilevare un nuovo valore. Se non si dispone di un Pod attivo, l'App Omnipod 5 aggiornerà il valore del glucosio visualizzato dal Sensore.

4. Il Sensore inizierà il riscaldamento di 1 ora.

È possibile visualizzare l'avanzamento del riscaldamento sulla schermata Home dell'App Omnipod 5.



Scansione eseguita correttamente

Non è necessario ripetere la scansione fino all'avvio di un nuovo Sensore.

L'App Omnipod 5 aggiorna i valori glicemici del sensore ogni 5 minuti.

Non visualizzare più questo messaggio

Al termine del riscaldamento, i valori glicemici del sensore sono disponibili per la visualizzazione nell'App e per l'utilizzo in Modalità Automatizzata per regolare l'erogazione di insulina.

20.3 Utilizzo del Sensore FreeStyle Libre 2 Plus con l'App Omnipod 5

Dopo aver connesso il Sensore FreeStyle Libre 2 Plus al Sistema Omnipod 5, il Pod riceverà un valore glicemico del sensore ogni 5 minuti. Questi valori vengono inviati dal Pod all'App Omnipod 5, consentendo di monitorare il glucosio e l'erogazione di insulina. Se si utilizza il Sensore senza un Pod attivo, l'app riceve i valori del glucosio direttamente dal Sensore.

Attenzione: non è possibile utilizzare un altro dispositivo per eseguire la scansione, leggere i valori o ricevere allarmi dal Sensore FreeStyle Libre 2 Plus con il Sistema Omnipod 5. L'App Omnipod 5 è compatibile solo con un Sensore avviato da e associato direttamente all'App Omnipod 5 sul Controller.

Utilizzo del Sensore FreeStyle Libre 2 Plus senza un Pod attivo (stato Solo Sensore)

In alcuni casi si potrebbe voler continuare a utilizzare un Sensore interrompendo l'uso di un Pod in favore di un'altra terapia insulinica, come le iniezioni. Poiché in genere si utilizza l'App Omnipod 5 per avviare il Sensore e visualizzare le informazioni relative ai valori glicemici del sensore, è possibile continuare a farlo anche senza un Pod attivo.

Per lo stato Solo Sensore (nessun Pod attivo), l'App Omnipod 5 aggiornerà i valori glicemici del sensore ogni 5 minuti direttamente dal Sensore FreeStyle Libre 2 Plus, anziché da un Pod. Sarà possibile visualizzare il Grafico sensore e gli avvisi di Glicemia alta e Glicemia bassa. Non si riceveranno informazioni sullo stato dell'insulina finché non si attiva un nuovo Pod.

Nota: è possibile utilizzare l'App Omnipod 5 nello stato Solo Sensore per un massimo di 30 giorni. Se si prevede di utilizzare una terapia insulinica alternativa (come le iniezioni) per più di 30 giorni, chiedere all'operatore sanitario di riferimento di passare a un sistema FreeStyle Libre 2 Plus autonomo. Tenere presente che, per utilizzare un Sensore con l'App Omnipod 5, il Sensore deve essere scansionato e avviato dall'App Omnipod 5.

Nota: nello stato Solo Sensore, il Controller Omnipod 5 deve trovarsi nelle vicinanze e in linea di vista con il sensore affinché i valori glicemici del sensore vengano visualizzati sullo schermo. Avvicinare il Controller al Sensore se non vengono visualizzati valori.

Aggiunta di un Sensore FreeStyle Libre 2 Plus a Omnipod 5

Per aggiungere un Sensore all'App Omnipod 5, seguire i 5 passaggi riportati di seguito:

1. La schermata Home mostra che il Sensore non è stato rilevato.

Nota: prima di applicare e sottoporre a scansione il Sensore FreeStyle Libre 2 Plus, l'App Omnipod 5 chiederà all'utilizzatore di rivedere e regolare (se necessario) le impostazioni del Sensore.




2. Dopo aver rivisto e regolato (se necessario) le impostazioni del Sensore, toccare AGGIUNGI SENSORE.
3. Applicare il Sensore FreeStyle Libre 2 Plus. Dopo aver applicato il Sensore, toccare CONTINUA.
4. Quindi, eseguire la scansione del Sensore FreeStyle Libre 2 Plus posizionando il Controller sul Sensore FreeStyle Libre 2 Plus, in modo da eseguire la scansione del Sensore e avviare l'attivazione. Non spostare il Controller fino al completamento della scansione. Toccare OK.

5. Dopo aver selezionato FreeStyle Libre 2 Plus come opzione Sensore e aver rivisto le impostazioni, confermare di voler aggiungere il Sensore all'App Omnipod 5.

Toccare **AGGIUNGI** per procedere.

In alternativa, toccare **NON ORA** per aggiungere il Sensore FreeStyle Libre 2 Plus all'App Omnipod 5 in un secondo momento.

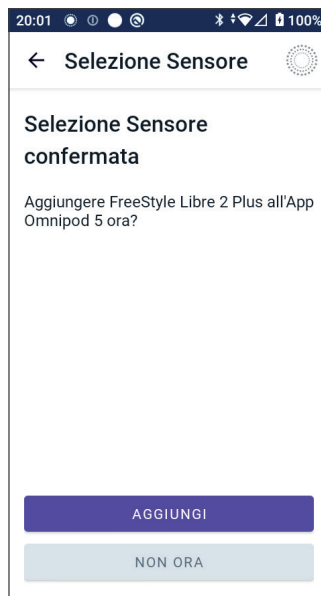

Revisione dei valori glicemici del sensore

L'App Omnipod 5 consente di rivedere e regolare le impostazioni degli allarmi di valori glicemici del sensore alti e bassi.


Sono disponibili 3 allarmi del Sensore regolabili opzionali che segnalano livelli di glucosio fuori intervallo.

Allarme Glicemia alta


Schermata visualizzata:	
Causa:	La notifica è impostata su ON e il valore glicemico del sensore è superiore all'impostazione Glicemia alta.
Suono e vibrazione del Controller:	<ul style="list-style-type: none"> • segnale acustico di 3 secondi • vibrazione di 3 secondi • L'allarme si ripete ogni 5 minuti fino a quando il valore glicemico del sensore non scende al di sotto dell'impostazione Glicemia alta impostata o non si conferma la notifica.

<p>Azione:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Confermare l'allarme visualizzando la notifica nella campana di notifica o cancellando la notifica dal blocco schermo. 2. Controllare la glicemia con un glucometro per confermare il valore del glucosio.
-----------------------	--

Allarme Glicemia bassa

<p>Schermata visualizzata:</p>	
<p>Causa:</p>	<p>La notifica è impostata su ON e il valore glicemico del sensore è inferiore all'impostazione Glicemia bassa.</p>
<p>Suono e vibrazione del Controller:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • segnale acustico di 3 secondi • vibrazione di 3 secondi • L'allarme si ripete ogni 5 minuti fino a quando il valore glicemico del sensore non supera l'impostazione Glicemia bassa impostata o non si conferma la notifica.
<p>Azione:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Confermare l'allarme visualizzando la notifica nella campana di notifica o cancellando la notifica dal blocco schermo. 2. Controllare la glicemia con un glucometro per confermare il valore del glucosio.

Allarme Valori glicemici del sensore mancanti

<p>Schermata visualizzata:</p>	
<p>Causa:</p>	<p>La notifica è impostata su ON e non si ricevono valori glicemici del sensore da 20 minuti.</p> <p>Potrebbe indicare una perdita del segnale o un problema del Sensore per cui l'App Omnipod 5 non è in grado di visualizzare i valori glicemici del sensore né di segnalare quando il valore glicemico del sensore è alto o basso.</p>
<p>Suono e vibrazione del Controller:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • segnale acustico di 3 secondi • vibrazione di 3 secondi • L'allarme si ripete ogni 5 minuti per un totale di 5 ripetizioni fino a quando i valori glicemici del sensore non vengono ripristinati o non si conferma la notifica.
<p>Azione:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Confermare l'allarme visualizzando la notifica nella campana di notifica o cancellando la notifica dal blocco schermo. 2. Verificare che il Sensore sia ancora applicato sulla pelle. 3. Per ridurre al minimo il rischio di interruzione, assicurarsi che il Sensore FreeStyle Libre 2 Plus e il Pod siano indossati sullo stesso lato del corpo. Le comunicazioni wireless non vengono trasmesse bene attraverso il corpo. In caso di frequenti interruzioni della connettività tra il Pod e il Sensore, vedere "26.3 Domande frequenti sul Sensore" a pagina 389.

Ipoglicemia urgente

Attenzione: trattare SEMPRE tempestivamente la glicemia bassa. Un valore del glucosio pari o inferiore a 3,1 mmol/L (55 mg/dL) indica ipoglicemia significativa (glicemia molto bassa). Se non trattata, può causare crisi convulsive, perdita di coscienza e morte. Attenersi alle raccomandazioni dell'operatore sanitario per il trattamento.

Quando il valore glicemico del sensore è pari o inferiore a 3,1 mmol/L (55 mg/dL), il FreeStyle Libre 2 Plus invierà il valore al Pod. Il Pod emette un Allarme di Notifica per segnalare che il glucosio è molto basso. È possibile confermare l'allarme dal Controller.

Se non si dispone di un Pod attivo, l'App Omnipod 5 emetterà l'Allarme di Notifica. Vedere "20.5 Messaggi di comunicazione e problemi del Sensore FreeStyle Libre 2 Plus" a pagina 306.

Nota: questo allarme si verifica nuovamente se si riceve un altro valore glicemico del sensore pari o inferiore a 3,1 mmol/L (55 mg/dL) dopo la conferma dell'Allarme di Notifica iniziale. È possibile silenziare (posporre) questo Allarme di Notifica per 30 minuti confermando il messaggio sul display.

Nota: questo Allarme di Notifica smetterà di ripetersi solo una volta ricevuto un valore di glucosio pari o superiore a 3,2 mmol/L (56 mg/dL).

Azione da intraprendere: utilizzare un glucometro per confermare il valore del glucosio. Trattare la glicemia bassa secondo necessità.






20.4 Tendenze glicemiche del sensore e indicatori

I colori e le frecce della tendenza vengono visualizzati nella schermata Home per mostrare il valore glicemico e la tendenza glicemica del sensore, che varieranno a seconda dell'Obiettivo glicemico.

<p>121 →</p> <p>Tendenza costante</p>	<p>■ : il valore glicemico del sensore rientra nell'Obiettivo Glicemico (Modalità Manuale)</p>
<p>121 →</p> <p>Tendenza costante</p>	<p>■ : il valore glicemico del sensore rientra nell'Obiettivo Glicemico (Modalità Automatizzata)</p>
<p>68 →</p> <p>Tendenza costante</p>	<p>■ : il valore glicemico del sensore è inferiore all'Obiettivo Glicemico</p>
<p>258 ↗</p> <p>In lenta crescita</p>	<p>■ : il valore glicemico del sensore è superiore all'Obiettivo Glicemico</p>

Frecce della tendenza glicemica


La tabella seguente descrive le frecce della tendenza glicemica del sensore. Le frecce della tendenza sono mostrate in blu esclusivamente a scopo esemplificativo.

Frecce della tendenza	Descrizione
	Il glucosio è in rapida crescita (oltre 0,1 mmol/L [2 mg/dL] al minuto)
	Il glucosio è in crescita (tra 0,06 e 0,1 mmol/L [1 e 2 mg/dL] al minuto)
	Il glucosio è in lenta variazione (meno di 0,06 mmol/L [1 mg/dL] al minuto)
	Il glucosio è in calo (tra 0,06 e 0,1 mmol/L [1 e 2 mg/dL] al minuto)
	Il glucosio è in rapido calo (oltre 0,1 mmol/L [2 mg/dL] al minuto)

Visualizzazione del grafico dei valori glicemici del sensore


È possibile visualizzare il Grafico sensore dalla schermata Home toccando VISUALIZZA sotto l'icona del Grafico sensore nella parte inferiore destra della schermata Home.

Toccando VISUALIZZA, viene visualizzato il Grafico sensore.

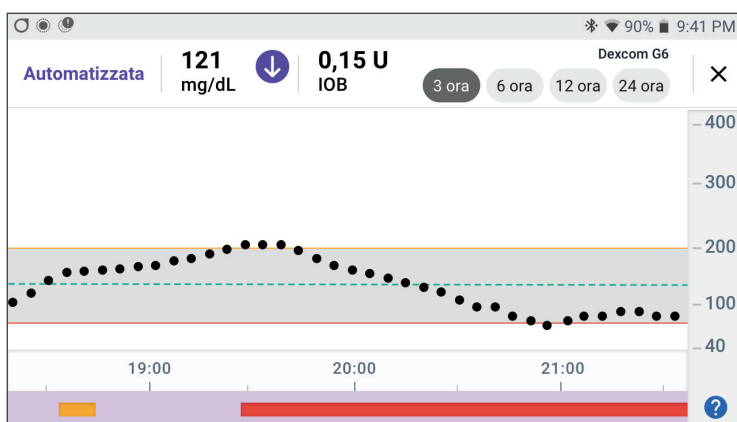

Per visualizzare la legenda del Grafico sensore, toccare l'icona del punto interrogativo nell'angolo inferiore destro del grafico.

La legenda del Grafico sensore mostra:

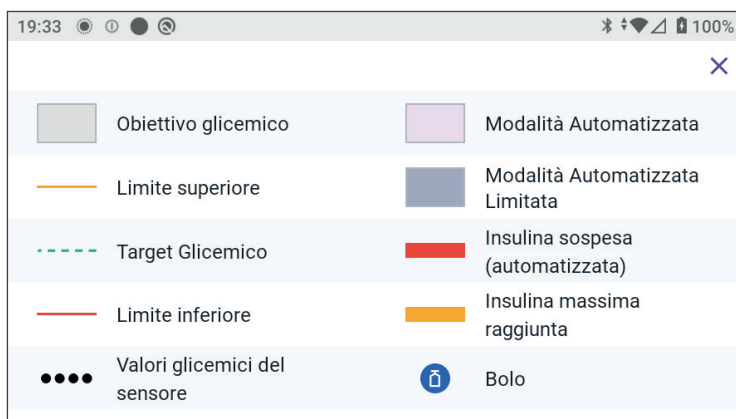





La legenda del Grafico sensore illustra i colori e l'uso delle righe sul grafico che mostra i valori glicemici del sensore e l'erogazione di insulina nel corso delle ultime ore.

20.5 Messaggi di comunicazione e problemi del Sensore FreeStyle Libre 2 Plus

Messaggi di comunicazione



Di seguito sono riportati i messaggi di comunicazione che vengono visualizzati sulla Dashboard dell'App Omnipod 5 associati al sistema FreeStyle Libre 2 Plus.




Messaggio di comunicazione	Descrizione
<p>CONNESSIONE IN CORSO</p> 	<p>Viene visualizzato dopo aver applicato e scansionato un Sensore FreeStyle Libre 2 Plus e aver avviato il processo di connessione del dispositivo o del Pod al Sensore.</p>
<p>SENSORE PRONTO ALLE <Ora></p> 	<p>Viene visualizzato quando il Sensore è connesso e in fase di avvio e i valori glicemici del sensore non sono disponibili.</p> <p>Non è richiesta alcuna azione nell'App Omnipod 5.</p>
<p>SENSORE CONNESSO E PRONTO</p> 	<p>Il Sensore ha appena completato l'avvio e i valori del glucosio saranno disponibili in pochi minuti.</p>
<p>RICERCA POD IN CORSO</p>	<p>Compare quando la comunicazione del Pod non è stata stabilita nell'intervallo di aggiornamento di 5 minuti più recente.</p> <p>Toccare ULTERIORI INFORMAZIONI per le cause potenziali e le azioni consigliate.</p>

Messaggio di comunicazione	Descrizione
<p>RICERCA SENSORE IN CORSO</p> 	<p>Viene visualizzato quando è in uso un Sensore con o senza un Pod e non è stato acquisito il valore glicemico del sensore più recente entro una finestra di 5 minuti.</p> <p>Potrebbe non essere disponibile un valore glicemico del sensore valido a causa di un problema di comunicazione tra Pod e Sensore o di un problema temporaneo del Sensore (risolvibile senza alcuna azione da parte dell'utilizzatore).</p> <p>Toccare ULTERIORI INFORMAZIONI per l'azione consigliata. Controllare il posizionamento del Pod e del Sensore.</p> <p>Il Pod e il Sensore devono essere a una distanza reciproca di almeno 2,5 cm (1 pollice) ed entro la linea di vista.</p>


Messaggi relativi ai problemi

Di seguito è riportato un riepilogo dei messaggi di errore del Sensore associati al Sensore FreeStyle Libre 2 Plus che vengono visualizzati nella Dashboard della schermata Home a indicare un problema e la necessità di intervento. Questi messaggi vengono visualizzati con un'icona di allarme e testo di colore rosso. Informazioni più specifiche per ciascun messaggio sono riportate dopo il sommario.


Messaggio e display della Dashboard	Descrizione del problema	Azione da intraprendere
<p>Sensore troppo freddo</p> 	<p>Il Sensore è troppo freddo per specificare un valore del glucosio.</p>	<p>Spostarsi in un luogo più caldo e riprovare dopo qualche minuto.</p>
<p>Sensore troppo caldo</p> 	<p>Il Sensore è troppo caldo per specificare un valore del glucosio.</p>	<p>Spostarsi in un luogo più fresco e riprovare dopo qualche minuto.</p>

Messaggio e display della Dashboard	Descrizione del problema	Azione da intraprendere
<p>Problema temporaneo del sensore</p> <p> PROBLEMA TEMPORANEO DEL SENSORE</p>	<p>Il Sensore non è temporaneamente in grado di inviare i valori glicemici del sensore al Pod o all'App Omnipod 5.</p>	<p>Ricontrollare trascorsi 10 minuti.</p>
<p>Sensore terminato</p> <p> SENSORE TERMINATO</p>	<p>Il Sensore è terminato. Il Pod e l'App Omnipod 5 non riceveranno ulteriori informazioni da questo Sensore.</p>	<p>Per utilizzare il Sistema Omnipod 5 in Modalità Automatizzata, è necessario aggiungere un nuovo Sensore e disporre di un Pod attivo.</p>
<p>Nessun Sensore</p>	<p>Nessun sensore rilevato.</p>	<p>Per utilizzare il Sistema Omnipod 5 in Modalità Automatizzata, aggiungere un Sensore e attivare un Pod.</p>
<p>Sostituisci Sensore</p> <p> SOSTITUISCI SENSORE</p>	<p>Il sistema ha rilevato un problema con il Sensore che non può essere risolto. Il Pod e l'App Omnipod 5 non riceveranno ulteriori informazioni da questo Sensore.</p>	<p>Rimuovere il Sensore precedente.</p> <p>Aggiungere un nuovo Sensore.</p>
<p>Impossibile connettersi</p> <p>IMPOSSIBILE CONNETTERSI</p>	<p>Il Pod e il Sensore non sono riusciti a connettersi.</p>	<p>Riprovare a effettuare la connessione.</p> <p>Se il problema persiste, riavviare il Controller o sostituire il Pod o il Sensore applicato di recente.</p>


Sensore troppo freddo

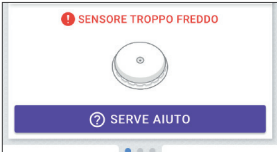Avviso su schermo	Descrizione
Schermata Home: 	<p>Perché si verifica: il Sensore è troppo freddo per specificare un valore del glucosio.</p> <p>Suono del Pod: nessuno</p> <p>Suono e vibrazione del Controller: nessuno</p> <p>Azione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spostarsi in un luogo più caldo. 2. Riprovare tra qualche minuto.


Sensore troppo caldo

Avviso su schermo	Descrizione
Schermata Home: 	<p>Perché si verifica: il Sensore è troppo caldo per fornire un valore del glucosio.</p> <p>Suono del Pod: nessuno</p> <p>Suono e vibrazione del Controller: nessuno</p> <p>Azione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spostarsi in un luogo più fresco. 2. Riprovare tra qualche minuto.


Problema temporaneo del Sensore

Avviso su schermo	Descrizione
Schermata Home: 	<p>Perché si verifica: il Sensore non è temporaneamente in grado di inviare i valori glicemici del sensore al Pod o all'App Omnipod 5.</p> <p>Suono del Pod: nessuno</p> <p>Suono e vibrazione del Controller: nessuno</p> <p>Azione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Attendere e riprovare trascorsi 10 minuti.


Sensore terminato

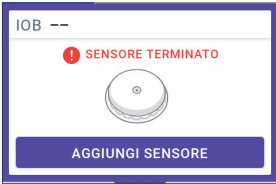Avviso su schermo	Descrizione
<p>App Omnipod 5:</p> 	<p>Perché si verifica: il Sensore è terminato. Il Pod e l'App Omnipod 5 non riceveranno ulteriori informazioni da questo Sensore.</p> <p>Suono del Pod: nessuno</p> <p>Suono e vibrazione del Controller: nessuno</p> <p>Azione: per utilizzare il Sistema Omnipod 5 in Modalità Automatizzata, è necessario aggiungere un nuovo Sensore e disporre di un Pod attivo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toccare OK. 2. Rimuovere il Sensore precedente dal corpo. 3. Aggiungere un nuovo Sensore. 4. Eseguire la scansione del nuovo Sensore per attivarlo. <p>Nota: per istruzioni dettagliate, vedere “Applicazione del Sensore” a pagina 295 e “Scansione del Sensore da attivare” a pagina 297.</p>


Nessun Sensore

Avviso su schermo	Descrizione
<p>Schermata Home:</p> 	<p>Perché si verifica: nessun Sensore rilevato.</p> <p>Suono del Pod: nessuno</p> <p>Suono e vibrazione del Controller: nessuno</p> <p>Azione: per utilizzare il Sistema Omnipod 5 in Modalità Automatizzata, aggiungere un Sensore e attivare un Pod.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toccare Aggiungi Sensore. 2. Applicare il Sensore al corpo. 3. Eseguire la scansione del nuovo Sensore per attivarlo. <p>Nota: per istruzioni dettagliate, vedere “Applicazione del Sensore” a pagina 295 e “Scansione del Sensore da attivare” a pagina 297.</p>

Sostituisci Sensore

Avviso su schermo	Descrizione
<p>App Omnipod 5:</p> 	<p>Perché si verifica: il sistema ha rilevato un problema con il Sensore che non può essere risolto. Il Pod e l'App Omnipod 5 non riceveranno ulteriori informazioni da questo Sensore.</p> <p>Suono del Pod: nessuno</p> <p>Suono e vibrazione del Controller: nessuno</p> <p>Azione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toccare OK (dalla schermata dell'App Omnipod 5) o toccare Aggiungi Sensore (dalla schermata Home). 2. Rimuovere il Sensore precedente dal corpo. 3. Aggiungere un nuovo Sensore. 4. Eseguire la scansione del nuovo Sensore per attivarlo. <p>Nota: per istruzioni dettagliate, vedere “Applicazione del Sensore” a pagina 295 e “Scansione del Sensore da attivare” a pagina 297.</p>

Impossibile connettersi

Avviso su schermo	Descrizione
<p>Schermata Home:</p> 	<p>Perché si verifica: il Sensore non si è connesso al Pod.</p> <p>Suono del Pod: nessuno</p> <p>Suono e vibrazione del Controller: nessuno</p> <p>Azione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Provare a connettere nuovamente il Sensore. 2. Se il problema persiste, sostituire il Sensore.


Come rispondere ai messaggi di problemi

L'App Omnipod 5 visualizza messaggi sullo schermo della Dashboard quando potrebbe verificarsi un problema con il Sensore. Rispondere sempre a questi problemi il prima possibile.

1. Quando viene visualizzato un messaggio, seguire le istruzioni sullo schermo.

Ad esempio, per l'allarme **SENSORE TROPPO FREDDO**, toccare il pulsante **SERVE AIUTO**.

2. Quando si tocca il pulsante **SERVE AIUTO**, viene visualizzata una spiegazione del problema, con un consiglio su come procedere, ad esempio, "Controllare tra qualche minuto".

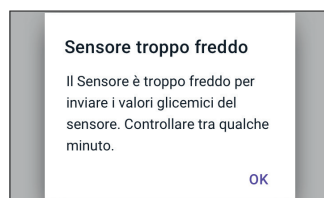

Se il problema persiste e si ricevono più messaggi sul dispositivo, contattare l'Assistenza clienti.

20.6 Informazioni sulla connessione di un Sensore FreeStyle Libre 2 Plus al Pod

Il Sistema Omnipod 5 è progettato per funzionare con il Sensore FreeStyle Libre 2 Plus. Per utilizzare il Sensore FreeStyle Libre 2 Plus con il Sistema Omnipod 5, è necessario ottenere un Sensore FreeStyle Libre 2 Plus e le Istruzioni per l'uso di FreeStyle Libre 2 Plus.

Prima di poter visualizzare e utilizzare i valori glicemici del sensore nel Sistema Omnipod 5, è necessario configurare il Sistema Omnipod 5 per consentire al Pod di comunicare con un Sensore FreeStyle Libre 2 Plus.

Una volta connesso, sarà possibile utilizzare il sistema in Modalità Automatizzata, visualizzare i valori glicemici del sensore nell'App Omnipod 5 e utilizzare i valori glicemici del sensore nel Suggeritore bolo in entrambe le Modalità Manuale e Automatizzata.

Il Sensore può essere connesso al Pod durante il riscaldamento del Sensore, ma questo deve essere completato prima di poter inviare i valori di glucosio al Pod.

Prima di iniziare, considerare quanto segue:

- Il Sistema Omnipod 5 non si connette a un Sensore FreeStyle Libre 2 Plus se il Sensore è stato avviato utilizzando un altro dispositivo. È necessario avviare il Sensore con l'App Omnipod 5.
- Se si dispone di un Sensore già attivato al di fuori dell'App Omnipod 5, il sistema informa l'utilizzatore che è necessario un nuovo Sensore. Rimuovere il Sensore in uso e applicarne uno nuovo o attendere che si sia pronti ad avviare un nuovo Sensore FreeStyle Libre 2 Plus.

Nuovo Sensore richiesto

Il Sensore FreeStyle Libre 2 Plus corrente è stato attivato in precedenza e non può essere aggiunto all'App Omnipod 5.

Rimuovere il Sensore corrente, quindi seguire le istruzioni sullo schermo per applicare e aggiungere un nuovo Sensore all'App Omnipod 5.

OK

Per informazioni aggiuntive sull'utilizzo del Sensore FreeStyle Libre 2 Plus, vedere le *Istruzioni per l'uso di FreeStyle Libre 2 Plus*.

20.7 Connessione di un Sensore FreeStyle Libre 2 Plus durante la configurazione iniziale del Pod

Per impostare FreeStyle Libre 2 Plus come Sensore del glucosio preferito, procedere come segue:

1. Quando richiesto, selezionare il Sensore FreeStyle Libre 2 Plus dalle opzioni sullo schermo.

- Dexcom G6
- FreeStyle Libre 2 Plus
- Nessun Sensore

Toccare **CONFERMA**.

L'App confermerà la selezione del CGM. Successivamente, l'App chiederà di rivedere le impostazioni CGM.




2. Nella schermata Rivedi le impostazioni del Sensore, toccare OK per rivedere o regolare, se necessario, le impostazioni del Sensore FreeStyle Libre 2 Plus.



10. Valori glicemici del sensore mancanti: attivare o regolare l'impostazione di notifica per Valori glicemici del sensore mancanti.

Nota: l'avviso Valori glicemici del sensore mancanti è progettato per segnalare che non vengono ricevuti valori glicemici del Sensore da 20 minuti. Ciò potrebbe significare che si è verificata una perdita di segnale tra il Sensore e il Pod o che si è verificato un problema con il Sensore.

- La notifica è attivata per impostazione predefinita. Se l'interruttore è disattivato (grigio), toccarlo per attivarlo.
 - Selezionare le preferenze di volume degli avvisi.
 - Toccare AVANTI per salvare le impostazioni del Sensore.
11. Il sistema conferma che ha salvato le impostazioni del Sensore.
12. Quindi, per aggiungere il Sensore, toccare AGGIUNGI.

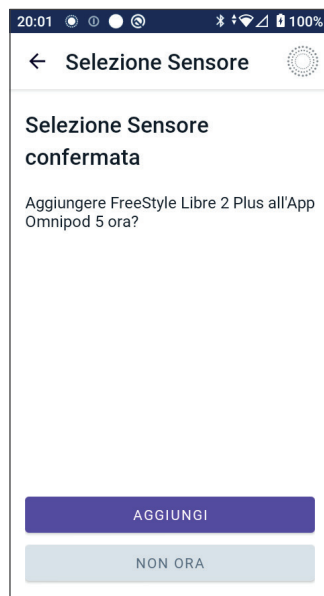

13. A questo punto, è possibile applicare un Sensore FreeStyle Libre 2 Plus.

Se si ha bisogno di ulteriore assistenza, toccare **Come applicare un Sensore** nella parte inferiore della schermata per consultare la guida passo-passo con le illustrazioni.

Una volta applicato il Sensore, toccare **CONTINUA**.



14. Eseguire la scansione del Sensore FreeStyle Libre 2 Plus posizionando il Controller sul Sensore, in modo da eseguire la scansione del Sensore e avviare l'attivazione.

Se si necessita di ulteriore assistenza, toccare **COME ESEGUIRE LA SCANSIONE DI UN SENSORE** nella parte inferiore dello schermo per istruzioni sulla scansione.

Dopo la scansione, viene visualizzato il messaggio **Scansione eseguita correttamente**:

Toccare **OK**.

Possono essere necessari fino a 20 minuti perché il Sensore si connetta al Pod e venga visualizzato nell'App.


Quando la comunicazione con il Pod viene stabilita correttamente: la schermata mostra il numero di giorni al termine del Sensore oppure, se questo è ancora in fase di avvio, il tempo rimanente viene visualizzato una volta pronto il Sensore.



Se il Pod non riesce a connettersi con il Sensore entro 20 minuti: viene visualizzato il messaggio “Il Pod e il Sensore non sono riusciti a connettersi”. Riprovare a effettuare la connessione. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire il Sensore.

15. Se la comunicazione con il Pod viene stabilita correttamente, è possibile passare alla Modalità Automatizzata.

Per passare alla Modalità Automatizzata, toccare Sì.

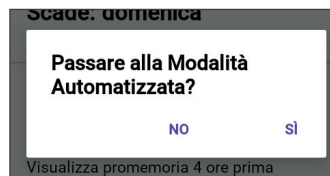

16. Automatizzata: Stato Limitata

Durante il riscaldamento del Sensore e finché questo non è in grado di inviare un valore di glucosio attuale al Pod, il sistema sarà in stato di Modalità Automatizzata: Stato Limitata.

Una volta completato il riscaldamento e quando i valori glicemici del sensore sono disponibili, si passerà alla Modalità Automatizzata.

I valori glicemici del sensore vengono aggiornati ogni 5 minuti fino al termine o all'eliminazione dal sistema.



20.8 Rimozione del Sensore: scadenza ed eliminazione

Per rimuovere il Sensore precedente, tirare verso l'alto il bordo dell'adesivo e rimuoverlo lentamente con un unico movimento.

Il Sensore è monouso e deve essere smaltito secondo le linee guida locali. Per istruzioni sulla rimozione e sullo smaltimento dei Sensori, vedere il *Manuale d'uso di FreeStyle Libre 2 Plus*.

Termine del Sensore

Quando il Sensore raggiunge la fine della sua durata di utilizzo, la schermata Home avviserà che il Sensore è terminato con il messaggio **SENSORE TERMINATO**. È possibile rimuovere il Sensore dal corpo e applicarne uno nuovo. Per ulteriori informazioni sul messaggio Sensore terminato, vedere “20.5 Messaggi di comunicazione e problemi del Sensore FreeStyle Libre 2 Plus” a pagina 306.


Eliminazione di un Sensore

Se si desidera rimuovere il Sensore prima della fine della sua durata di utilizzo, è necessario eliminarlo da Omnipod 5. L'eliminazione di un Sensore indica al Pod di interrompere la comunicazione con quel Sensore e di cercarlo.


Non è necessario eliminare un Sensore in grado di funzionare per la sua intera durata di utilizzo.

Per eliminare un Sensore FreeStyle Libre 2 Plus tramite l'App Omnipod 5:

1. Toccare Gestisci Sensore dal menu.

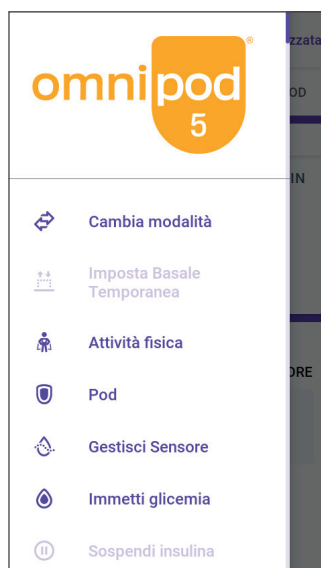

2. Per eliminare il Sensore corrente, toccare **ELIMINA SENSORE** nella parte inferiore dello schermo, in modo che il Pod riceva l'istruzione di disconnettersi dal Sensore.

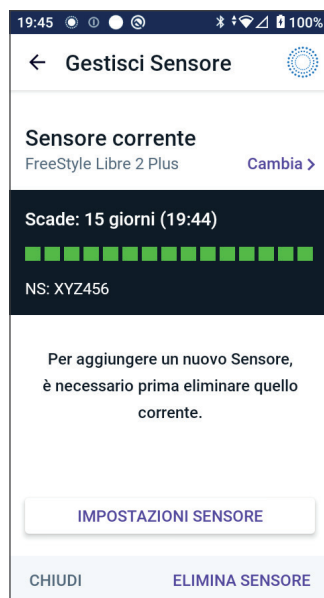

Se si è in Modalità Automatizzata, viene visualizzato il messaggio “Passa alla Modalità Manuale”.

Nota: per eliminare un Sensore occorre essere in Modalità Manuale.

3. Successivamente, l'App Omnipod 5 chiede di confermare l'eliminazione del Sensore. Toccare **ELIMINA**.



Se non si desidera eliminare il Sensore, toccare **ANNULLA**.

L'App Omnipod 5 conferma che il Sensore è stato eliminato.

4. Rimuovere il Sensore precedente dal corpo.

Una volta eliminato il Sensore, l'App Omnipod 5 mostra che il Pod non è connesso ad alcun Sensore attivo.

Nota: per aggiungere un nuovo Sensore, toccare **AGGIUNGI SENSORE** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo che richiedono di applicare, attivare e associare il Sistema Omnipod 5 al nuovo Sensore.

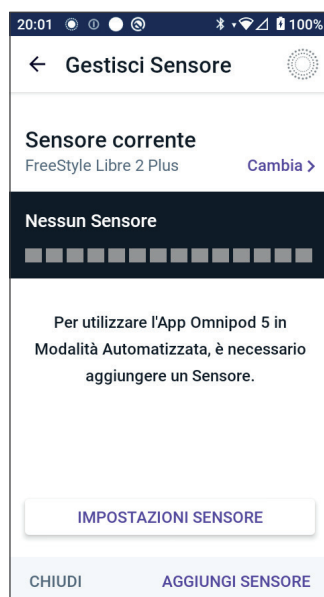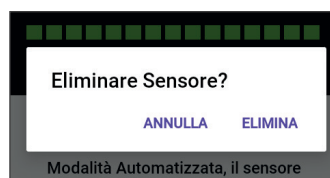

20.9 Passaggio a FreeStyle Libre 2 Plus da un altro Sensore

Il Sistema Omnipod 5 è compatibile con sensori di più marchi e modelli. Se si desidera passare a un Sensore FreeStyle Libre 2 Plus con il Sistema Omnipod 5 da un altro tipo di Sensore compatibile, è possibile commutare i Sensori nell'App Omnipod 5.

Nota: la commutazione dei tipi di Sensori deve essere effettuata tra una sostituzione e l'altra del Pod. Un singolo Pod non può essere connesso a più di una marca o un modello di Sensore durante il suo periodo di utilizzo.

Per passare al Sensore FreeStyle Libre 2 Plus da un altro Sensore:

1. Aprire l'App Omnipod 5 e accedere alla schermata INFO POD.

Nota: non è possibile passare da un tipo di Sensore all'altro mentre si indossa un Pod attivo. Se si dispone di un Pod attivo, quando si prova a cambiare il Pod viene visualizzato il messaggio "Attendere la prossima sostituzione del Pod".

Accedere a: pulsante Menu (☰) > Gestisci Sensore.




2. L'App Omnipod 5 mostra il Sensore corrente. Toccare Cambia > per passare (o meno) a un altro Sensore.

Ad esempio, ipotizziamo che sia in uso un Dexcom G6 e si desideri passare a utilizzare un Sensore FreeStyle Libre 2 Plus.

3. La schermata Selezione Sensore mostra le opzioni relative all'attuale modello di Sensore selezionato.
4. Per passare al Sensore FreeStyle Libre 2 Plus con il Sistema Omnipod 5, selezionare FreeStyle Libre 2 Plus.

Toccare SALVA.

5. L'App Omnipod 5 conferma il passaggio a FreeStyle Libre 2 Plus. Toccare CONFERMA per confermare.

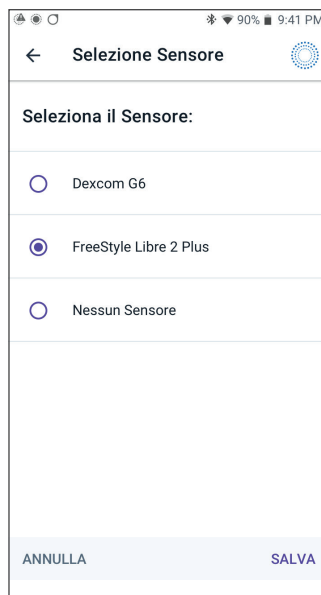

6. Rivedere le impostazioni del Sensore.

Toccare OK.

Viene visualizzata una serie di schermate che consentono di inserire o regolare le impostazioni di notifica per:

- Glicemia bassa
- Glicemia alta
- Valori CGM assenti

Nota: per istruzioni dettagliate e immagini su schermo per la revisione delle impostazioni, vedere i passaggi da 3 a 8 in “20.7 Connessione di un Sensore FreeStyle Libre 2 Plus durante la configurazione iniziale del Pod” a pagina 315.



7. L'App Omnipod 5 chiederà:


Aggiungere un Sensore FreeStyle Libre 2 Plus a Omnipod 5 ora?

Toccare **AGGIUNGI** per aggiungere il Sensore FreeStyle Libre 2 Plus.

Toccare **NON ORA** per aggiungere il Sensore FreeStyle Libre 2 Plus all'App Omnipod 5 in un secondo momento.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per applicare, attivare e associare il Sistema Omnipod 5 a un nuovo Sensore.

Nota: consultare la sezione “20.7. Connessione di un Sensore FreeStyle Libre 2 Plus durante la configurazione iniziale del Pod” a pagina 315 per ulteriori informazioni sull'applicazione e sulla scansione di un Sensore.

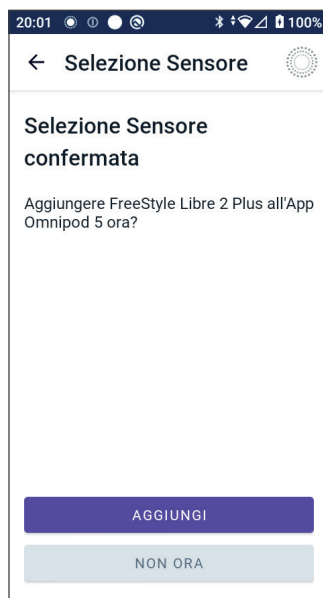

8. Successivamente, le schermate guideranno attraverso le seguenti operazioni:

- a. Applicazione del Sensore FreeStyle Libre 2 Plus. Per ulteriori dettagli, vedere il passaggio 10 a pagina 317.
- b. Eseguire la scansione e attivare il nuovo Sensore. Per ulteriori dettagli, vedere il passaggio 11 a pagina 318.


- c. Attivare un nuovo Pod e attendere il completamento del riscaldamento del Sensore. Sarà quindi possibile accedere alla Modalità Automatizzata. Vedere i passaggi 12 e 13 a pagina 318.

9. Stato Automatizzata: Limitata

Durante il riscaldamento del Sensore e finché questo non è in grado di inviare un valore di glucosio attuale al Pod, il sistema sarà in stato di Modalità Automatizzata: Stato Limitata.

Una volta completato il riscaldamento e quando i valori glicemici del sensore sono disponibili, si passerà alla Modalità Automatizzata.

I valori glicemici del sensore vengono aggiornati ogni 5 minuti fino al termine o all'eliminazione dal sistema.

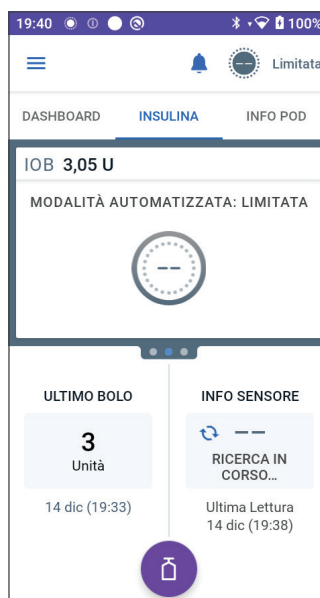

MODALITÀ AUTOMATIZZATA

- 21 Informazioni sulla Modalità Automatizzata
.....
- 22 Passaggio dalla Modalità Manuale alla
Modalità Automatizzata
.....
- 23 Funzione Attività fisica
.....
- 24 Allarmi della Modalità Automatizzata
.....
- 25 Studi clinici sul Sistema Omnipod 5



Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

Importanti informazioni di sicurezza relative alla Modalità Automatizzata

Avvertenze relative alla Modalità Automatizzata

Avvertenza: la tecnologia SmartAdjust non deve essere utilizzata da soggetti di età inferiore a 2 anni. Inoltre, la tecnologia SmartAdjust NON deve essere utilizzata in soggetti con fabbisogno insulinico inferiore a 5 unità al giorno, in quanto la sua sicurezza non è stata valutata in questa popolazione.

Avvertenza: NON utilizzare la tecnologia SmartAdjust in donne in gravidanza, pazienti in condizioni critiche e soggetti in dialisi. La sicurezza della tecnologia SmartAdjust non è stata valutata in queste popolazioni. In presenza di una di queste condizioni, rivolgersi all'operatore sanitario di riferimento prima di utilizzare la tecnologia SmartAdjust.

Avvertenza: prestare SEMPRE attenzione al valore glicemico attuale del sensore, affidarsi alle sensazioni del proprio corpo e non ignorare i sintomi di glicemia alta e bassa. Anche se l'erogazione di insulina si regola automaticamente in Modalità Automatizzata con l'obiettivo di portare il livello di glucosio al Target Glicemico definito, possono comunque verificarsi eventi di ipoglicemia o iperglicemia grave.

Se i valori glicemici del sensore non corrispondono ai sintomi, controllare SEMPRE il glucosio con un glucometro e, se necessario, prendere in considerazione il trattamento e/o la calibrazione del Sensore. Passare SEMPRE alla Modalità Manuale se si ritiene che i valori glicemici del sensore siano imprecisi.

- Valori glicemici del sensore erroneamente elevati possono causare un'erogazione eccessiva di insulina, con conseguente ipoglicemia grave, crisi convulsive, perdita di coscienza o morte.
- Valori glicemici del sensore erroneamente bassi possono causare sospensioni prolungate dell'erogazione di insulina con conseguenti iperglicemia, DKA o morte.

Se si avvertono sintomi che non sono congruenti con le letture del glucosio e ci si è attenuti alle istruzioni descritte nel presente *Manuale d'uso tecnico*, contattare immediatamente l'operatore sanitario.

Avvertenza: EVITARE la somministrazione di insulina, ad esempio tramite iniezione o inalazione, mentre si indossa un Pod attivo per evitare il rischio di ipoglicemia. Il Sistema Omnipod 5 non è in grado di monitorare l'insulina erogata al di fuori del sistema. Consultare l'operatore sanitario di riferimento per conoscere il tempo di attesa dopo l'erogazione manuale dell'insulina prima di avviare la Modalità Automatizzata.

Avvertenza: quando la Funzione Attività fisica è abilitata, monitorare SEMPRE i sintomi di ipoglicemia in quanto vi è ancora il rischio che si verifichi. Attenersi ai consigli dell'operatore sanitario di riferimento in merito alla prevenzione dell'ipoglicemia e relativo trattamento. Se non trattata, l'ipoglicemia può avere come conseguenza crisi convulsive, perdita di coscienza o morte.

Avvertenza: NON utilizzare il Sistema Omnipod 5 con il Sensore Dexcom G6 se si assume idrossiurea, un farmaco utilizzato nel trattamento di malattie tra cui il cancro e l'anemia a cellule falciformi. I valori glicemici del Sensore Dexcom G6 possono essere falsamente elevati e causare un'erogazione eccessiva di insulina con conseguente ipoglicemia grave.

CAPITOLO 21

Informazioni sulla Modalità Automatizzata

Sommario

21.1 Informazioni sulla Modalità Automatizzata	330
Modalità di calcolo ed erogazione dell'insulina in Modalità Automatizzata	331
Aumento dell'erogazione di insulina	331
Riduzione e sospensione dell'erogazione di insulina.....	331
Visualizzazione dell'erogazione di insulina automatizzata	332
Regolazione delle impostazioni per l'erogazione dell'insulina automatizzata.....	332
21.2 Informazioni sul Sensore in Modalità Automatizzata	333
21.3 Impostazioni del bolo e importanza di un bolo	335
21.4 Adattabilità del Pod	335
Il primo Pod	335
Uso continuo.....	336
21.5 Informazioni sulla Modalità Automatizzata: Limitata	337
21.6 Limitazioni all'erogazione automatica	339
Glicemia bassa	339
Glicemia alta.....	339
Passaggio alla Modalità Manuale	340

21 Informazioni sulla Modalità Automatizzata

21.1 Informazioni sulla Modalità Automatizzata

Avvertenza: EVITARE la somministrazione di insulina, ad esempio tramite iniezione o inalazione, mentre si indossa un Pod attivo per evitare il rischio di ipoglicemia. Il Sistema Omnipod 5 non è in grado di monitorare l'insulina erogata al di fuori del sistema. Consultare l'operatore sanitario di riferimento per conoscere il tempo di attesa dopo l'erogazione manuale dell'insulina prima di avviare la Modalità Automatizzata.

Avvertenza: prestare SEMPRE attenzione al valore glicemico attuale del sensore, affidarsi alle sensazioni del proprio corpo e non ignorare i sintomi di glicemia alta e bassa. Anche se l'erogazione di insulina si regola automaticamente in Modalità Automatizzata con l'obiettivo di portare il livello di glucosio al Target Glicemico definito, possono comunque verificarsi eventi di ipoglicemia o iperglicemia grave.

Se i valori glicemici del sensore non corrispondono ai sintomi, controllare SEMPRE il glucosio con un glucometro e, se necessario, prendere in considerazione il trattamento e/o la calibrazione del Sensore. Passare SEMPRE alla Modalità Manuale se si ritiene che i valori glicemici del sensore siano imprecisi.

- Valori glicemici del sensore erroneamente elevati possono causare un'erogazione eccessiva di insulina, con conseguente ipoglicemia grave, crisi convulsive, perdita di coscienza o morte.
- Valori glicemici del sensore erroneamente bassi possono causare sospensioni prolungate dell'erogazione di insulina con conseguenti iperglicemia, DKA o morte.

Se si avvertono sintomi che non sono congruenti con le letture del glucosio e ci si è attenuti alle istruzioni descritte nel presente *Manuale d'uso tecnico*, contattare immediatamente l'operatore sanitario.

Attenzione: controllare SEMPRE il glucosio prima di erogare un bolo in modo da essere certi delle quantità da assumere. L'erogazione di un bolo senza aver prima controllato il glucosio può comportare un'erogazione eccessiva o insufficiente di insulina, con conseguente ipoglicemia o iperglicemia.

La Modalità Automatizzata è la funzione che definisce il Sistema Omnipod 5. In Modalità Automatizzata, la tecnologia SmartAdjust™ (l'algoritmo Omnipod 5) prevede il valore del glucosio a 60 minuti. La tecnologia SmartAdjust utilizza queste informazioni, insieme al valore glicemico e alla tendenza glicemica del sensore correnti, per regolare

automaticamente l'erogazione di insulina ogni 5 minuti. L'obiettivo del sistema è quello di portare il livello di glucosio al Target Glicemico definito.

La tecnologia SmartAdjust è integrata nel Pod stesso. L'utilizzatore rimarrà in Modalità Automatizzata anche se il Controller su cui è in esecuzione l'App Omnipod 5 si trova fuori dalla portata del Pod. Quando il Pod e il Controller sono a distanza di comunicazione, il Pod invia nuovamente le informazioni all'App Omnipod 5, aggiornando la relativa schermata Home per mostrare l'IOB corrente insieme al valore glicemico e alla tendenza glicemica del sensore più recenti.

Nota: erogare il bolo pasto SEMPRE come indicato dall'operatore sanitario di riferimento. In Modalità Automatizzata, le dosi di bolo pasto richiedono comunque la programmazione e la somministrazione da parte dell'utilizzatore. La mancata erogazione del bolo pasto può comportare l'insorgenza di iperglicemia.

Modalità di calcolo ed erogazione dell'insulina in Modalità Automatizzata

Il Sistema Omnipod 5 utilizza la cronologia dell'Insulina Totale Giornaliera degli ultimi Pod per determinare la quantità di insulina necessaria per il corpo. La quantità oraria calcolata è nota come Velocità Basale Adattiva, la quale fornisce una linea di base per l'erogazione automatizzata dell'insulina.

A ogni sostituzione del Pod, il Sistema Omnipod 5 apprenderà i recenti fabbisogni di insulina giornaliera e aggiornerà le informazioni sull'Insulina Totale Giornaliera, con conseguente variazione della Velocità Basale Adattiva a ogni nuovo Pod per soddisfare al meglio le reali esigenze di insulina.

Utilizzando questa Velocità Basale Adattiva come punto di partenza, il sistema può aumentare, diminuire o sospendere automaticamente l'erogazione di insulina ogni 5 minuti per favorire il raggiungimento del Target Glicemico.

Aumento dell'erogazione di insulina

Il sistema può aumentare l'erogazione di insulina erogando una serie di microboli (piccole quantità di insulina erogate ogni 5 minuti) per rispondere a livelli elevati di glucosio o se prevede livelli di glucosio superiori al Target Glicemico nei successivi 60 minuti.

Riduzione e sospensione dell'erogazione di insulina

Il sistema può ridurre o sospendere l'erogazione di insulina automatizzata in qualsiasi momento se prevede livelli inferiori al Target Glicemico o per evitare il rischio di ipoglicemia.

L'insulina viene sempre sospesa quando l'ultimo valore glicemico del sensore registrato era inferiore a 3,3 mmol/L (60 mg/dL).

21 Informazioni sulla Modalità Automatizzata

Visualizzazione dell'erogazione di insulina automatizzata

Il Grafico sensore sulla schermata Home mostra quando il Sistema Omnipod 5 ha messo in pausa l'erogazione di insulina o ha raggiunto la massima erogazione. Vedere "11.2 Visualizzazione del Grafico sensore" a pagina 142.

La quantità di insulina erogata automaticamente ogni 5 minuti in Modalità Automatizzata può essere visualizzata nella scheda Eventi automatici della schermata Dettagli Cronologia. Vedere "Eventi automatizzati (Eventi automatici)" a pagina 154.

La scheda Eventi automatici mostra la quantità totale di insulina automatizzata erogata ogni 5 minuti. Questa scheda mostra tutta l'insulina automatizzata, sia la Velocità Basale Adattiva di riferimento sia eventuali aggiustamenti verso l'alto o verso il basso dovuti al valore glicemico e alla tendenza glicemica del sensore nonché alla previsione a 60 minuti. I valori saranno sempre contenuti (tenere presente che una velocità basale di 0,60 U/h corrisponde a 0,05 U ogni 5 minuti).

Nota: il valore glicemico del sensore indica la quantità di insulina che il sistema erogherà nei successivi 5 minuti. Ad esempio, se il valore glicemico del sensore alle 11:00 scende a 3,2 mmol/L (56 mg/dL), la tecnologia SmartAdjust non erogherà alcun microbolo alle 11:05. La scheda Eventi automatici indicherà 0 U alle 11:05, come illustrato nella tabella seguente.

	Sensore (mmol/L [mg/dL])	Quantità insulina (U)
11:05	3,4 (61)	0
11:00	3,2 (56)	0,05

Regolazione delle impostazioni per l'erogazione dell'insulina automatizzata

Mentre si è in Modalità Automatizzata, la principale impostazione regolabile che influisce sull'erogazione di insulina automatizzata è il Target Glicemico. Il Target Glicemico è personalizzabile da 6,1 a 8,3 mmol/L (da 110 a 150 mg/dL) (con incrementi di 0,55 mmol/L o 10 mg/dL) ed è possibile creare fino a 8 diversi segmenti temporali per giorno. Man mano che si aumenta il valore impostato per il Target Glicemico, la tecnologia SmartAdjust erogherà un quantitativo inferiore di insulina automatizzata. La modifica del Target Glicemico può essere utile se:

- In alcuni momenti della giornata in cui si è più o meno sensibili all'insulina (ad esempio, l'utilizzatore e l'operatore sanitario di riferimento identificheranno un'ora della giornata in cui il rischio di ipoglicemia è più alto, il che potrebbe richiedere un Target Glicemico più elevato). L'operatore può aiutare a selezionare i diversi valori di Target Glicemico per vari momenti della giornata.

- Si desidera ridurre gradualmente i valori glicemici del sensore a un Target Glicemico inferiore (ad esempio, al primo avvio del sistema).

Consultare il proprio operatore sanitario prima di apportare qualsiasi modifica al Target Glicemico. Vedere “Studi clinici sul Sistema Omnipod 5” a pagina 355 per informazioni sugli studi clinici per ciascun Target Glicemico.

Le impostazioni del Suggeritore SmartBolus possono anche essere regolate in modo da influenzare l'Insulina Totale Giornaliera erogata e il glucosio post-prandiale. Queste impostazioni includono il Rapporto Insulina/Carboidrati (IC), il Fattore di Correzione, Correggi se superiore a, Correzione Inversa e Durata dell'azione dell'insulina. Questi fattori influiscono sulla quantità di bolo erogata sia in Modalità Manuale sia in Modalità Automatizzata.

Nota: è importante comprendere che la modifica dei Programmi Basale, della Basale massima, del Fattore di Correzione o della Durata dell'azione dell'insulina non influisce sulla tecnologia SmartAdjust (l'algoritmo Omnipod 5).

21.2 Informazioni sul Sensore in Modalità Automatizzata

Avvertenza: prestare SEMPRE attenzione al valore glicemico attuale del sensore, affidarsi alle sensazioni del proprio corpo e non ignorare i sintomi di glicemia alta e bassa. Anche se l'erogazione di insulina si regola automaticamente in Modalità Automatizzata con l'obiettivo di portare il livello di glucosio al Target Glicemico definito, possono comunque verificarsi eventi di ipoglicemia o iperglicemia grave.

Se i valori glicemici del sensore non corrispondono ai sintomi, controllare SEMPRE il glucosio con un glucometro e, se necessario, prendere in considerazione il trattamento e/o la calibrazione del Sensore. Passare SEMPRE alla Modalità Manuale se si ritiene che i valori glicemici del sensore siano imprecisi.

- Valori glicemici del sensore erroneamente elevati possono causare un'erogazione eccessiva di insulina, con conseguente ipoglicemia grave, crisi convulsive, perdita di coscienza o morte.
- Valori glicemici del sensore erroneamente bassi possono causare sospensioni prolungate dell'erogazione di insulina con conseguenti iperglicemia, DKA o morte.

Se si avvertono sintomi che non sono congruenti con le letture del glucosio e ci si è attenuti alle istruzioni descritte nel presente *Manuale d'uso tecnico*, contattare immediatamente l'operatore sanitario.

21 Informazioni sulla Modalità Automatizzata

In Modalità Automatizzata, il Sistema Omnipod 5 si basa sui valori glicemici del sensore correnti e previsti per calcolare l'erogazione di insulina automatizzata. I valori glicemici e le tendenze glicemiche del sensore possono essere utilizzati anche dal Suggestore SmartBolus in entrambe le Modalità Automatizzata e Manuale.

È importante che il Sensore funzioni correttamente, che generi valori accurati e che si connetta al Pod.

Per accertarsi dell'accuratezza del Sensore, l'utilizzatore deve prestare attenzione ai valori glicemici del sensore. Se si riscontrano sintomi che non corrispondono ai valori glicemici del sensore, utilizzare un glucometro separato.

Quando il Pod e il Sensore perdono la comunicazione in Modalità Automatizzata, il sistema entra in Modalità Automatizzata: Stato Limitata. Per ulteriori informazioni sulla Modalità Automatizzata: Limitata, vedere "21.5 Informazioni sulla Modalità Automatizzata: Limitata" a pagina 337.

In caso di frequenti interruzioni della connettività tra il Pod e il Sensore, vedere "26.3 Domande frequenti sul Sensore" a pagina 389.

I problemi di connettività possono spesso essere risolti come segue:

- Indossare il Pod e il Sensore in linea di vista in modo tale che i due dispositivi possano "vedersi" l'un l'altro.
- Se si utilizza Dexcom G6:
 - Verificare che il Trasmettitore attivo corrente sia associato al Pod controllando che il Numero di serie (NS) del Trasmettitore memorizzato nell'App Omnipod 5 e nell'app mobile Dexcom G6 sia lo stesso.
 - Verificare che il Trasmettitore attivo non sia associato a un ricevitore Dexcom G6 o a un altro dispositivo medico. Quando si utilizza Omnipod 5, il Pod è l'unico dispositivo medico a cui il Trasmettitore può essere associato. È necessario utilizzare l'app mobile Dexcom G6 su uno smartphone per gestire gli allarmi del Sensore e avviare e arrestare Sensori e Trasmettitori.
- Se si utilizza FreeStyle Libre 2 Plus:
 - Verificare che il Sensore sia stato avviato nell'App Omnipod 5. Se il Sensore è stato avviato con un altro dispositivo, non sarà possibile utilizzarlo con Omnipod 5.

21.3 Impostazioni del bolo e importanza di un bolo

In Modalità Automatizzata, il Sistema Omnipod 5 eroga automaticamente l'insulina ogni 5 minuti. Ciononostante, è comunque necessario erogare una dose di bolo per i pasti. Per informazioni su come erogare un bolo, vedere "Suggeritore SmartBolus" a pagina 223.

Quando si eroga un bolo, si consiglia di:

- Toccare UTILIZZA SENSORE per utilizzare il valore glicemico del sensore nel Suggeritore SmartBolus. In questo modo si garantisce che la tendenza del sensore sia inclusa nei calcoli e che vengano effettuate le regolazioni necessarie per tenerne conto.
- Rivedere i calcoli del Suggeritore SmartBolus per verificarne l'accuratezza. Se i calcoli mostrano una quantità non prevista, annullare il bolo e ricominciare.
- Verificare sempre che la barra di avanzamento confermi che l'erogazione è iniziata prima di uscire dall'App Omnipod 5.

Nota: se si lascia l'App Omnipod 5 per più di 5 minuti mentre si apportano modifiche all'erogazione del bolo, si perderanno le informazioni inserite nel Suggeritore SmartBolus.

21.4 Adattabilità del Pod

In Modalità Automatizzata, l'erogazione di insulina automatizzata si adatta al variare delle esigenze man mano che si indossa il sistema. Mentre si utilizza il Sistema Omnipod 5 e si raccoglie la cronologia dell'erogazione di insulina, la tecnologia SmartAdjust aggiornerà automaticamente il Pod successivo con le informazioni degli ultimi Pod relative all'Insulina Totale Giornaliera (TDI).

La Velocità Basale Adattiva di base dipende dalla quantità di Insulina Totale Giornaliera necessaria nel corso delle ultime settimane. A ogni sostituzione del Pod, la tecnologia SmartAdjust utilizza questo valore TDI aggiornato per impostare una nuova Velocità Basale Adattiva.

Quando sono disponibili i valori glicemici e la tendenza glicemica del sensore, la tecnologia SmartAdjust regola anche questa velocità aumentandola o diminuendola ogni 5 minuti in risposta al livello di glucosio corrente e previsto.

Il primo Pod

Durante il primo utilizzo del Pod (o se sono trascorsi 30 giorni o più tra un Pod e l'altro), poiché non è disponibile una cronologia recente, il Sistema

21 Informazioni sulla Modalità Automatizzata


Omnipod 5 stima l'Insulina Totale Giornaliera esaminando il Programma Basale attivo (della Modalità Manuale). La tecnologia SmartAdjust imposta una Velocità Basale Adattiva iniziale da quel valore TDI stimato. Si tratta della velocità iniziale che verrà regolata in base alla tendenza e al livello di glucosio correnti e previsti.

Il sistema imposta inoltre un limite sulla quantità di insulina che le regolazioni di 5 minuti del primo Pod possono erogare per la sicurezza dell'utilizzatore.

Alla successiva sostituzione del Pod, se sono state raccolte almeno 48 ore di cronologia, la tecnologia SmartAdjust inizierà a utilizzare la cronologia dell'erogazione di insulina invece della stima originale per aggiornare la Velocità Basale Adattiva.

Uso continuo

A ogni sostituzione del Pod, per tutto il tempo in cui si indossa il sistema, le informazioni aggiornate sull'erogazione di insulina vengono inviate e salvate nell'App Omnipod 5 in modo che il successivo Pod avviato venga aggiornato con la nuova Velocità Basale Adattiva.

Nota: l'Insulina Totale Giornaliera (TDI) include tutta l'insulina erogata in Modalità Automatizzata o Manuale. È possibile visualizzare la TDI per ciascun giorno accedendo a: pulsante Menu () > Dettagli Cronologia e osservando il valore dell'Insulina totale.

21.5 Informazioni sulla Modalità Automatizzata: Limitata

Avvertenza: prestare SEMPRE attenzione al valore glicemico attuale del sensore, affidarsi alle sensazioni del proprio corpo e non ignorare i sintomi di glicemia alta e bassa. Anche se l'erogazione di insulina si regola automaticamente in Modalità Automatizzata con l'obiettivo di portare il livello di glucosio al Target Glicemico definito, possono comunque verificarsi eventi di ipoglicemia o iperglicemia grave.

Se i valori glicemici del sensore non corrispondono ai sintomi, controllare SEMPRE il glucosio con un glucometro e, se necessario, prendere in considerazione il trattamento e/o la calibrazione del Sensore. Passare SEMPRE alla Modalità Manuale se si ritiene che i valori glicemici del sensore siano imprecisi.

- Valori glicemici del sensore erroneamente elevati possono causare un'erogazione eccessiva di insulina, con conseguente ipoglicemia grave, crisi convulsive, perdita di coscienza o morte.
- Valori glicemici del sensore erroneamente bassi possono causare sospensioni prolungate dell'erogazione di insulina con conseguenti iperglicemia, DKA o morte.

Se si avvertono sintomi che non sono congruenti con le letture del glucosio e ci si è attenuti alle istruzioni descritte nel presente *Manuale d'uso tecnico*, contattare immediatamente l'operatore sanitario.

In alcune circostanze, il Pod e il Sensore potrebbero perdere la comunicazione mentre si è in Modalità Automatizzata. Ciò potrebbe essere dovuto a diverse ragioni, tra cui:

- Pod e Sensore non in linea di vista sul corpo
- perdita temporanea della comunicazione a causa di interferenze ambientali
- riscaldamento del Sensore o necessità di calibrazione (se applicabile al Sensore)
- Trasmettitore ancora associato a un ricevitore Dexcom G6 o a un altro dispositivo medico


Quando ciò si verifica, la tecnologia SmartAdjust non è più in grado di regolare l'erogazione di insulina automatizzata in base al glucosio, poiché il Pod non riceve informazioni aggiornate dal Sensore.

Dopo 20 minuti che il Pod non riceve i valori glicemici del sensore, il sistema entra in uno stato della Modalità Automatizzata chiamato Automatizzata: Limitata. L'App Omnipod 5 visualizzerà "Limitata" sulla schermata Home. Il Sistema rimarrà in Modalità Automatizzata: Stato Limitata fino al ripristino della comunicazione o al termine del periodo di riscaldamento del Sensore.

21 Informazioni sulla Modalità Automatizzata

Quando il sistema entra in Automatizzata: Stato Limitata, la tecnologia SmartAdjust basa l'erogazione di insulina su quanto segue:

- Esamina la velocità basale in Modalità Manuale a quest'ora del giorno e la Velocità Basale Adattiva per il Pod e sceglie il valore più basso tra i due valori ogni 5 minuti. In questo modo, la tecnologia SmartAdjust non suggerisce mai più del Programma Basale che sarebbe attivo in Modalità Manuale.
- Se la tecnologia SmartAdjust ha sospeso l'insulina prima della perdita di connessione tra Pod e Sensore, continuerà a sospendere l'insulina fino a 40 minuti per un totale di 1 ora in pausa. Dopo 1 ora di assenza di informazioni sul valore glicemico del sensore, l'insulina riprenderà a funzionare alla Velocità Basale Adattativa o manuale, a seconda di quale dei due valori sia più basso.
- Senza informazioni sul valore glicemico del sensore, la velocità erogata in Modalità Automatizzata: Limitata non regolerà il valore in base al livello di glucosio corrente o previsto.

Dopo un'ora di mancato rilevamento dei valori glicemici del sensore, viene visualizzato l'Allarme di Notifica Valori glicemici del sensore. Questo allarme si ripete ogni 15 minuti fino a quando non viene confermato e ogni 60 minuti fino al ripristino della comunicazione con il Sensore. Per ulteriori informazioni su questo allarme, vedere “ Valori glicemici del sensore mancanti” a pagina 352.

Il sistema entra inoltre nello Stato Limitata dopo aver ricevuto l'Allarme di Notifica Limitazioni all'erogazione automatica. Per ulteriori informazioni sulle Limitazioni all'erogazione automatica, vedere pagina 339.

È anche possibile scegliere di passare alla Modalità Manuale per avviare il Programma Basale. Vedere “22.2 Passaggio dalla Modalità Automatizzata alla Modalità Manuale” a pagina 344.

Controllare se sono necessarie azioni da parte del Sensore per ristabilire la comunicazione con il Pod.

Se si utilizza Dexcom G6 come Sensore, controllare l'app Dexcom G6. Consultare le Istruzioni *per l'uso del sistema CGM Dexcom G6*.

Se si utilizza FreeStyle Libre 2 Plus come Sensore, verificare la presenza di notifiche relative a FreeStyle Libre 2 Plus nell'App Omnipod 5.

Nota: la Modalità Automatizzata: Stato Limitata può verificarsi a causa di una perdita di comunicazione tra il Sensore e il Pod. Se si utilizza Dexcom G6, è possibile che l'app Dexcom G6 stia ancora ricevendo i valori glicemici del sensore. Aprire l'app Dexcom G6 per verificare.

21.6 Limitazioni all'erogazione automatica

In alcune circostanze, è possibile che il Sistema tenti di portare il glucosio nell'intervallo ma non rilevi la variazione del glucosio prevista. In questo caso, passerà alla Modalità Automatizzata: Stato Limitata.

Quando ciò avviene, viene visualizzata una barra arancione sul Grafico sensore per "Insulina massima raggiunta" o una barra rossa per "Insulina sospesa". Il sistema mostrerà l'Allarme di Notifica "Limitazioni all'erogazione automatica".

Per ulteriori informazioni su questo allarme, vedere "🚨 Limitazioni all'erogazione automatica" a pagina 350.

Glicemia bassa

Se il livello di glucosio ha mostrato una tendenza in calo, la tecnologia SmartAdjust potrebbe aver sospeso l'insulina.

Se la sospensione ha avuto un impatto scarso o nullo sul valore glicemico del sensore, il sistema presume che ci sia un problema da risolvere. Sospendere l'insulina troppo a lungo potrebbe comportare il rischio di iperglicemia.

L'allarme Limitazioni all'erogazione automatica informa l'utilizzatore che deve intervenire e verificare quanto segue:

- Il Sensore segnala con precisione il livello di glucosio? Controllare la glicemia con un glucometro per confermare.
- I livelli di glucosio sono bassi nonostante il trattamento? Prendere in considerazione la possibilità di consumare carboidrati ad azione rapida aggiuntivi.

Glicemia alta

Se il glucosio ha mostrato una tendenza in crescita, la tecnologia SmartAdjust potrebbe aver erogato la quantità massima di microboli di insulina consentita dal sistema.

Nota: questa quantità massima è diversa dall'impostazione Basale massima in Modalità Manuale. La regolazione dell'impostazione Basale massima in Modalità Manuale non influisce sulla quantità che la tecnologia SmartAdjust può erogare in Modalità Automatizzata. Questo valore massimo di insulina è specifico per ogni persona e si basa sul recente utilizzo dell'Insulina Totale Giornaliera. Può cambiare nel tempo, poiché il sistema si adatta continuamente a ogni sostituzione del Pod. L'utilizzatore non può intervenire direttamente su questa impostazione.

21 Informazioni sulla Modalità Automatizzata

Se l'erogazione della quantità massima di insulina ha avuto un impatto scarso o nullo sul valore glicemico del sensore, il sistema presume che ci sia un problema da risolvere. L'erogazione di una quantità eccessiva di insulina per un periodo di tempo troppo lungo potrebbe comportare il rischio di ipoglicemia.

L'allarme Limitazioni all'erogazione automatica informa l'utilizzatore che deve intervenire e verificare quanto segue:

- Il Sensore segnala con precisione il livello di glucosio? Controllare la glicemia con un glucometro per confermare. Potrebbe essere necessario sostituire il Sensore.
- Potrebbe essere presente un problema con il Pod o la cannula? Verificare che il Pod sia applicato correttamente e che non vi siano segni di umidità o perdite intorno all'adesivo. Controllare i chetoni. Potrebbe essere necessario sostituire il Pod.
- Si ha bisogno di più insulina? Toccare il pulsante Bolo, quindi Usa Sensore nella schermata Bolo e controllare se è raccomandata l'erogazione di insulina aggiuntiva. Potrebbe essere necessario un bolo di correzione.

Passaggio alla Modalità Manuale

Quando viene visualizzato l'allarme Limitazioni all'erogazione automatica, il sistema chiede di passare alla Modalità Manuale per almeno 5 minuti. Questa fase consente al sistema di accertarsi che l'utilizzatore sia a conoscenza della situazione e stia valutando l'azione da intraprendere. In Modalità Manuale, è possibile controllare la glicemia, rivedere il grafico del Sensore e risolvere i problemi relativi a Sensore e Pod. È quindi possibile tornare alla Modalità Automatizzata toccando il pulsante Menu (☰) > Cambia modalità.

Nota: se l'allarme viene generato spesso, potrebbe essere necessario regolare le impostazioni del Target Glicemico o del bolo. Consultare il proprio operatore sanitario per assistenza nella regolazione di queste impostazioni su Omnipod 5.

CAPITOLO 22

Passaggio dalla Modalità Manuale alla Modalità Automatizzata

Sommario

22.1 Passaggio dalla Modalità Manuale alla Modalità Automatizzata	342
Prima di iniziare	342
Come passare alla Modalità Automatizzata	343
22.2 Passaggio dalla Modalità Automatizzata alla Modalità Manuale.....	344
Come passare alla Modalità Manuale.....	344

22.1 Passaggio dalla Modalità Manuale alla Modalità Automatizzata

Avvertenza: prestare SEMPRE attenzione al valore glicemico attuale del sensore, affidarsi alle sensazioni del proprio corpo e non ignorare i sintomi di glicemia alta e bassa. Anche se l'erogazione di insulina si regola automaticamente in Modalità Automatizzata con l'obiettivo di portare il livello di glucosio al Target Glicemico definito, possono comunque verificarsi eventi di ipoglicemia o iperglicemia grave.

Se i valori glicemici del sensore non corrispondono ai sintomi, controllare SEMPRE il glucosio con un glucometro e, se necessario, prendere in considerazione il trattamento e/o la calibrazione del Sensore. Passare SEMPRE alla Modalità Manuale se si ritiene che i valori glicemici del sensore siano imprecisi.

- Valori glicemici del sensore erroneamente elevati possono causare un'erogazione eccessiva di insulina, con conseguente ipoglicemia grave, crisi convulsive, perdita di coscienza o morte.
- Valori glicemici del sensore erroneamente bassi possono causare sospensioni prolungate dell'erogazione di insulina con conseguenti iperglicemia, DKA o morte.

Se si avvertono sintomi che non sono congruenti con le letture del glucosio e ci si è attenuti alle istruzioni descritte nel presente *Manuale d'uso tecnico*, contattare immediatamente l'operatore sanitario.

Prima di iniziare

Innanzitutto, accertarsi di disporre di un Pod attivo e di un Sensore connesso. Vedere “Attivazione e sostituzione del Pod” a pagina 81 e i capitoli 19 e 20 per informazioni sulla connessione del Sensore al sistema.

Se necessario, procedere come segue:

- Annullare la Basale Temporanea o il Bolo prolungato, se in esecuzione. Vedere “7.3 Annullamento di una Basale Temporanea” a pagina 113 o “16.4 Annullamento dell'erogazione di un bolo in corso” a pagina 231.
- Avviare l'insulina, se sospesa. Vedere “9.3 Avvio dell'erogazione di insulina” a pagina 128.

Come passare alla Modalità Automatizzata

Per passare dalla Modalità Manuale alla Modalità Automatizzata:

1. Dalla schermata Home, toccare il pulsante Menu (☰) > Cambia modalità.

Nota: se sullo schermo viene visualizzato un cerchio rosso con un punto esclamativo e l'opzione **PASSA AD AUTOMATIZZATA** è disattivata (in grigio), eseguire l'azione correttiva descritta sullo schermo prima di riprovare.

2. Toccare **CAMBIA**.



22.2 Passaggio dalla Modalità Automatizzata alla Modalità Manuale

Quando si passa dalla Modalità Automatizzata alla Modalità Manuale, l'insulina basale sarà erogata in base al Programma Basale programmato per l'ora corrente. Se il Sensore è connesso, sarà ancora possibile visualizzare questi valori e utilizzarli nel Suggeritore SmartBolus in Modalità Manuale.

Prima di iniziare, procedere come segue:

- Annullare la Funzione Attività fisica, se abilitata. Vedere “23.3 Annullamento della Funzione Attività fisica” a pagina 348.

Come passare alla Modalità Manuale

1. Dalla schermata Home, toccare il pulsante Menu (☰) > Cambia modalità.
Nota: se sullo schermo viene visualizzato un cerchio rosso con un punto esclamativo e l'opzione PASSA A MANUALE è disattivata (in grigio), eseguire l'azione correttiva descritta sullo schermo prima di riprovare.
2. Toccare CAMBIA.



CAPITOLO 23

Funzione Attività fisica

Sommario

23.1 Informazioni sulla Funzione Attività fisica.....	346
23.2 Avvio della Funzione Attività fisica	347
23.3 Annullamento della Funzione Attività fisica.....	348

23.1 Informazioni sulla Funzione Attività fisica

Avvertenza: quando la Funzione Attività fisica è abilitata, monitorare SEMPRE i sintomi di ipoglicemia in quanto vi è ancora il rischio che si verifichi. Attenersi ai consigli dell'operatore sanitario di riferimento in merito alla prevenzione dell'ipoglicemia e relativo trattamento. Se non trattata, l'ipoglicemia può avere come conseguenza crisi convulsive, perdita di coscienza o morte.

In Modalità Automatizzata, non è possibile avviare una Basale Temporanea o sospendere manualmente l'erogazione di insulina. Il Sistema Omnipod 5 offre un'opzione per l'erogazione di insulina automatizzata modificata tramite la Funzione Attività fisica. La Funzione Attività fisica può essere utile nei casi in cui è necessaria meno insulina, ad esempio durante l'attività fisica.

Mentre Attività fisica è abilitata, il Sistema Omnipod 5 esegue le seguenti operazioni:

- riduce l'erogazione di insulina automatizzata
- imposta il Target Glicemico su 8,3 mmol/L (150 mg/dL), indipendentemente dalle impostazioni target

Con la Funzione Attività fisica attivata, è possibile erogare un bolo come di consueto.

Nota: la Funzione Attività fisica non modifica il Target Glicemico utilizzato nei calcoli del bolo.

L'Attività fisica può essere impostata per una durata di 1–24 ore, con incrementi di 1 ora. È possibile annullare la Funzione Attività fisica in qualsiasi momento. All'annullamento o alla scadenza del periodo di tempo definito, l'erogazione di insulina completamente automatizzata inizia da sola e la tecnologia SmartAdjust riprende a utilizzare il Target Glicemico definito nelle impostazioni.

La Funzione Attività fisica termina se il Pod viene disattivato. È necessario riattivare la Modalità Automatizzata e quindi abilitare l'Attività fisica con il nuovo Pod.

Rivolgersi al proprio operatore sanitario di riferimento in merito all'impostazione temporale di avvio della Funzione Attività fisica per gestire il periodo previsto di diminuzione del fabbisogno insulinico.



Nota: in caso di interruzione della comunicazione tra Pod e Sensore e di passaggio del Sistema Omnipod 5 allo Stato Limitata, la Funzione Attività fisica rimane abilitata.

Nota: si può notare un aumento dell'IOB visualizzata all'avvio della Funzione Attività fisica e una diminuzione dell'IOB al termine del periodo di tempo della Funzione Attività fisica in ragione della modalità di calcolo dell'insulina.

23.2 Avvio della Funzione Attività fisica

Prima di iniziare, procedere come segue:

- Passare alla Modalità Automatizzata se si sta utilizzando la Modalità Manuale. Vedere “22.1 Passaggio dalla Modalità Manuale alla Modalità Automatizzata” a pagina 342.

Per attivare l'Attività fisica:

1. Accedere a:
pulsante Menu (☰) > Attività fisica.
2. Toccare il campo Durata e selezionare la durata della Funzione Attività fisica.
3. Toccare CONFERMA.
4. Dalla schermata Conferma, toccare AVVIA.

La scheda INSULINA diventa una scheda ATTIVITÀ FISICA verde quando la Funzione Attività fisica viene abilitata.

← **Attività fisica**

Utilizzare la Funzione Attività fisica nei periodi di maggior rischio di ipoglicemia.

La Funzione Attività fisica riduce l'erogazione di insulina basale e imposta Target Glicemico per l'erogazione basale su 150 mg/dL.

Durata
(da 1 ora a 24 ore)

--- ore

ANNULLA CONFERMA

23.3 Annullamento della Funzione Attività fisica

La Funzione Attività fisica si arresta automaticamente al termine della durata selezionata; la Modalità Automatizzata continua, utilizzando il Target Glicemico definito nelle impostazioni dell'utilizzatore. Il Pod emette un segnale acustico quando il periodo di tempo della Funzione Attività fisica termina o quando questa viene annullata.

Per annullare l'Attività fisica prima della fine del relativo periodo di tempo:

1. Accedere alla scheda ATTIVITÀ FISICA della schermata Home.
2. Toccare ANNULLA.
3. Toccare Sì per confermare l'annullamento.
Il App Omnipod 5 annulla l'Attività fisica e ha inizio l'erogazione di insulina completamente automatizzata.

Nota: quando si annulla la Funzione Attività fisica, è possibile notare una diminuzione dell'Insulina Attiva (IOB).

CAPITOLO 24

Allarmi della Modalità Automatizzata

Sommario

24.1 Elenco degli Allarmi di Notifica	350
⚠ Limitazioni all'erogazione automatica	350
⚠ Valori glicemici del sensore mancanti	352


24.1 Elenco degli Allarmi di Notifica

I Segnali di Notifica indicano una situazione che richiede l'attenzione dell'utilizzatore nel breve termine.


! Limitazioni all'erogazione automatica

Si verifica solo in Modalità Automatizzata.

Schermate dell'App Omnipod 5:

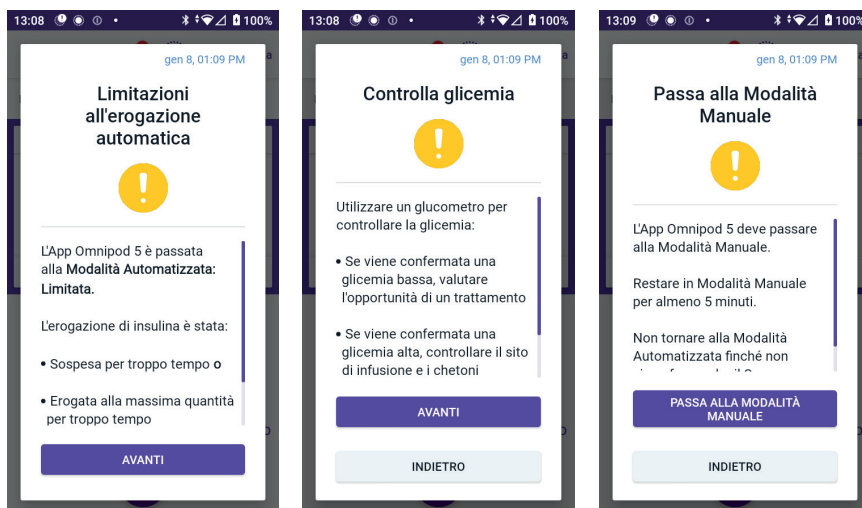

Blocco schermo:

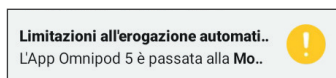

Causa	L'insulina è stata sospesa o è rimasta alla massima erogazione per troppo tempo mentre il Sistema Omnipod 5 era in Modalità Automatizzata.
Segnale acustico (Pod)	<ul style="list-style-type: none"> • Segnale acustico a 6 bip si ripete una volta al minuto per 3 minuti • La sequenza si ripete ogni 15 minuti
Vibrazione/ Segnale acustico (Controller)	<ul style="list-style-type: none"> • Segnale acustico di 3 secondi • Vibrazione di 3 secondi • Vibrazione e segnale acustico si ripetono ogni 15 minuti fino alla conferma dell'utilizzatore
Azione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toccare AVANTI per passare alla schermata successiva. 2. Utilizzare un glucometro per confermare il valore della glicemia. <ul style="list-style-type: none"> • Se si conferma ipoglicemia, potrebbe essere necessario ricorrere a un trattamento. • Se si conferma iperglicemia, controllare il sito di infusione (Pod) e i chetoni. • Se il valore glicemico del sensore non è quello previsto, potrebbe essere necessario sostituire il Sensore. 3. Toccare AVANTI dopo aver confermato la glicemia. 4. Toccare PASSA ALLA MODALITÀ MANUALE, quindi rimanere in Modalità Manuale per almeno cinque minuti.



In Modalità Manuale, è possibile controllare il Grafico sensore per determinare se l'insulina è stata sospesa o è rimasta al massimo per un periodo di tempo prolungato.

Trascorsi almeno 5 minuti in Modalità Manuale, è possibile tornare alla Modalità Automatizzata dopo aver confermato che i valori glicemici del sensore sono accurati.

Per ulteriori informazioni sulla Modalità Automatizzata: Stato Limitata vedere “21.5 Informazioni sulla Modalità Automatizzata: Limitata” a pagina 337.

! Valori glicemici del sensore mancanti

Si verifica solo in Modalità Automatizzata.

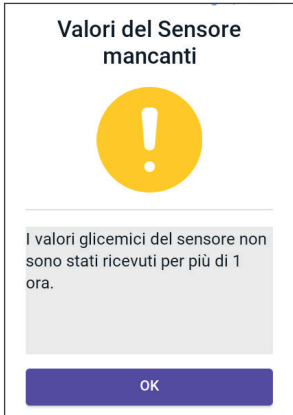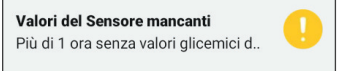Avviso su schermo	Descrizione
<p>App Omnipod 5:</p>  <p>Valori del Sensore mancanti</p> <p>I valori glicemici del sensore non sono stati ricevuti per più di 1 ora.</p> <p>OK</p>	<p>Perché si verifica: il Pod non riceve i valori glicemici del sensore da più di un'ora. Il sistema continuerà a funzionare in Modalità Automatizzata: Stato Limitata fino alla ricezione dei valori glicemici del sensore o fino al passaggio alla Modalità Manuale.</p> <p>Suono del Pod:</p> <ul style="list-style-type: none"> • segnale acustico a 3 bip • si ripete ogni 60 minuti <p>Suono e vibrazione del Controller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • segnale acustico di 3 secondi • vibrazione di 3 secondi • Vibrazione e segnale acustico si ripetono ogni 15 minuti fino alla conferma dell'utilizzatore. • Se i valori glicemici del sensore non sono ancora stati ricevuti dopo 60 minuti, verrà generata una nuova notifica.
<p>Blocco schermo:</p>  <p>Valori del Sensore mancanti Più di 1 ora senza valori glicemici d..</p>	<p>Azione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Toccare OK per confermare l'avviso.

Per ulteriori informazioni sulla Modalità Automatizzata: Stato Limitata, vedere “21.5 Informazioni sulla Modalità Automatizzata: Limitata” a pagina 337.

Se si utilizza Dexcom G6, controllare l'app Dexcom G6 per determinare se sono presenti valori glicemici del sensore o se la causa della perdita di comunicazione è correlata al Sensore. Esempi da cercare nell'app Dexcom G6 includono errore/scadenza del Sensore, errore/scadenza del Trasmettitore, riscaldamento del Sensore o avviso di perdita del segnale.

Se l'app Dexcom G6 riceve i valori glicemici del sensore, potrebbe essere presente un problema di comunicazione temporaneo tra il Pod e Dexcom G6. È possibile decidere di passare alla Modalità Manuale o di

attendere che i valori glicemici del sensore vengano ricevuti in Modalità Automatizzata: Stato Limitata. Se ciò accade spesso, verificare che il Pod e il Sensore siano posizionati sul corpo ad almeno 8 cm (3 pollici) di distanza ed entro la linea di vista. In caso contrario, alla rimozione di un Pod, posizionarne uno nuovo in modo che questo e il Sensore si trovino in linea di vista l'uno con l'altro.

Nota: per informazioni sull'app Dexcom G6, consultare le *Istruzioni per l'uso del sistema CGM Dexcom G6*.

Nota: se si utilizza un Sensore FreeStyle Libre 2 Plus, controllare l'App Omnipod 5 per determinare se sono presenti valori glicemici del sensore o se la causa della perdita di comunicazione è correlata al Sensore. Verificare che il Sensore sia applicato correttamente sul retro della parte superiore del braccio.

Se si utilizza FreeStyle Libre 2 Plus, potrebbe essere presente un problema di comunicazione temporaneo tra il Pod e il Sensore FreeStyle Libre 2 Plus. È possibile decidere di passare alla Modalità Manuale o di attendere che venga ricevuto un valore glicemico del sensore in Modalità Automatizzata: Stato Limitata. Se ciò accade spesso, verificare che il Pod e il Sensore siano posizionati sul corpo ad almeno 2,5 cm (1 pollice) di distanza ed entro la linea di vista. In caso contrario, alla rimozione di un Pod, assicurarsi di posizionarne uno nuovo in modo che questo e il Sensore si trovino in linea di vista l'uno con l'altro.

Nota: per informazioni sul Sensore FreeStyle Libre 2 Plus, consultare il *Manuale d'uso di FreeStyle Libre 2 Plus*.

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

CAPITOLO 25

Studi clinici sul Sistema Omnipod 5

Sommario

25.1 Studi su bambini, adolescenti e adulti con diabete di tipo 1	356
Dati demografici	357
Variazione di A1C analizzata rispetto ad A1C al basale	361
Risultati glicemici rispetto al trattamento al basale	361
Requisiti insulinici	362
Risultati dell'indice di massa corporea	363
Utilizzo del Sistema Omnipod 5	363
Eventi avversi	364
Risultati glicemici in base alle impostazioni del Target Glicemico nello studio pivotal	365
25.2 Studi in bambini molto piccoli con diabete di tipo 1	370
Dati demografici	371
Risultati glicemici	372
Variazione di A1C analizzata rispetto ad A1C al basale	374
Risultati glicemici rispetto al trattamento al basale	374
Requisiti insulinici	375
Risultati dell'indice di massa corporea	376
Utilizzo del Sistema Omnipod 5	376
Eventi avversi	376
Risultati glicemici in base alle impostazioni del Target Glicemico	377

25.1 Studi su bambini, adolescenti e adulti con diabete di tipo 1

Studio pivotal su Omnipod 5 in bambini, adolescenti e adulti (6–70 anni)

L'obiettivo dello studio pivotal del Sistema Omnipod 5 negli Stati Uniti era valutare la sicurezza e l'efficacia del sistema. Questo studio prospettico, multicentrico, a braccio singolo ha arruolato 112 bambini (di età compresa tra 6 e 13,9 anni) e 128 tra adolescenti e adulti (di età compresa tra 14 e 70 anni). Una fase di terapia standard di 2 settimane (regime insulinico abituale) è stata seguita da 3 mesi di utilizzo del Sistema Omnipod 5 in Modalità Automatizzata con un Sensore Dexcom G6. L'analisi primaria consisteva nei risultati relativi ad A1C e Time in Range dei valori glicemici del sensore (da 3,9 a 10 mmol/L, da 70 a 180 mg/dL). Gli endpoint primari di sicurezza includevano una valutazione degli eventi di ipoglicemia grave e chetoacidosi diabetica (DKA). È stata inoltre eseguita un'analisi degli endpoint secondari e di ulteriori metriche. Le tabelle di seguito riportano un'analisi dei risultati primari, secondari e di sicurezza.

Dei 240 partecipanti arruolati, il 98% ha completato lo studio (111 bambini e 124 tra adolescenti e adulti). La popolazione dello studio era costituita da soggetti affetti da diabete di tipo 1 da almeno 6 mesi. Tutti i partecipanti dovevano presentare un valore A1C < 10,0% allo screening. I partecipanti di età inferiore a 18 anni dovevano vivere con un genitore o tutore legale. Non sono stati arruolati partecipanti con le seguenti condizioni:

- anamnesi di ipoglicemia grave o DKA negli ultimi 6 mesi
- anemia falciforme, insufficienza surrenale, disturbi dell'alimentazione, funzionalità renale anomala (eGFR < 45), emofilia o qualsiasi altro disturbo emorragico, malattia tiroidea non trattata
- anamnesi di malattie cardiovascolari, comprese coronaropatie, infarto e intervento cardiaco o intervento di bypass coronarico nell'ultimo anno
- ECG anormale in partecipanti > 50 anni o con diagnosi di diabete > 20 anni
- ricezione di trasfusioni di sangue pianificate durante lo studio
- assunzione di steroidi orali o iniettabili o di farmaci per il diabete diversi da metformina e insulina
- donne in gravidanza o in allattamento

La sicurezza e l'efficacia del Sistema Omnipod 5 in utilizzatori con le condizioni sopra indicate non sono note. Si noti che l'elenco di esclusione

dello studio sopra riportato è una sintesi e non include tutti i criteri di esclusione. Lo studio è stato registrato sulla pagina ClinicalTrials.gov, un database nazionale di studi clinici negli Stati Uniti, con ID numero NCT04196140. I dettagli completi dei criteri dello studio sono disponibili qui.

Dati demografici

Le caratteristiche al basale, comprese le caratteristiche demografiche dei partecipanti all'inizio della fase di trattamento con Omnipod 5 a 3 mesi, sono riportate nella tabella seguente.

Caratteristiche al basale all'inizio della fase di trattamento con Omnipod 5 (N=240)

Caratteristica	Bambini (da 6 a 13,9 anni)	Adolescenti e adulti (da 14 a 70 anni)
n	112	128
Età (anni) ± DS	10,3 ± 2,2	36,9 ± 13,9
Durata del diabete (anni)	4,7 ± 2,6	17,9 ± 11,6
A1C [§]	7,67% ± 0,95%	7,16% ± 0,86%
Dose giornaliera di insulina (U/kg) [‡]	0,85 ± 0,24	0,61 ± 0,22
Indice di massa corporea (IMC)	18,6 ± 3,2	26,6 ± 4,7
Genere femminile	60 (53,6%)	78 (60,9%)
Utilizzo precedente [§] o attuale del sistema di monitoraggio continuo del glucosio (CGM)	108 (96,4%)	126 (98,4%)
Utilizzo precedente [§] o attuale del microinfusore	100 (89,3%)	115 (89,8%)
Razza/Etnia [§]		
Bianca	110 (98,2%)	118 (92,2%)
Ispanica o latina	8 (7,1%)	10 (7,8%)
Nera o afroamericana	5 (4,5%)	5 (3,9%)
Asiatica	3 (2,7%)	2 (1,6%)
Nativi delle Hawaii o di altre isole del Pacifico	1 (0,9%)	0 (0,0%)
Indiani d'America o nativi dell'Alaska	0 (0,0%)	4 (3,1%)

I valori più-meno sono la media ± deviazione standard; i risultati riportati con il numero tra parentesi rappresentano successivamente il numero di partecipanti (% dei partecipanti).

[§] Emoglobina glicata determinata dalla valutazione di laboratorio.

25 Panoramica dello studio clinico pivotal sul Sistema Omnipod 5

^vLa dose di Insulina Totale Giornaliera al basale è stata determinata a partire dai dati raccolti durante la fase di terapia standard.

[†]Per uso precedente si intende l'utilizzo del dispositivo in passato per un qualsiasi periodo di tempo.

[‡]Razza ed etnia sono state riferite dai partecipanti. I gruppi non si escludono a vicenda.

Risultati glicemici

Le tabelle seguenti presentano informazioni sui risultati glicemici primari e secondari della fase di terapia standard rispetto alla fase di trattamento con il Sistema Omnipod 5 di 3 mesi. I risultati primari dello studio comprendevano la variazione media dei valori % di A1C e Time in Range (da 3,9 a 10 mmol/L, da 70 a 180 mg/dL). Adolescenti, adulti e bambini hanno riscontrato miglioramenti complessivi dell'A1C e del Time in Range dopo 3 mesi di utilizzo del Sistema Omnipod 5. Tali miglioramenti sono stati possibili grazie a una riduzione del tempo > 10 mmol/L (> 180 mg/dL) in adolescenti, adulti e bambini, nonché a una diminuzione del tempo mediano < 3,9 mmol/L (< 70 mg/dL) in adolescenti e adulti.

Lo studio presentava alcune limitazioni, tra cui: 1) disegno a braccio singolo senza gruppo di controllo che poteva comportare una sovrastima del miglioramento glicemico; 2) fase di terapia standard più breve della fase con il Sistema Omnipod 5; 3) impiego limitato delle impostazioni di Target Glicemico pari a 7,8 e 8,3 mmol/L (140 e 150 mg/dL) negli adulti e negli adolescenti con conseguente limitazione della valutazione dei risultati glicemici in tali impostazioni e, per tale motivo, mancata inclusione dei risultati di queste impostazioni target nel presente *Manuale d'uso tecnico*.

Risultati glicemici complessivi (24 ore)

Caratteristica	Bambini (da 6 a 13,9 anni) (n=112)			Adolescenti e adulti (da 14 a 70 anni) (n=128)		
	Terapia standard	Omnipod 5	Variazione	Terapia standard	Omnipod 5	Variazione
% A1C media (dev std)	7,67% (0,95%)	6,99% (0,63%)	-0,71%*	7,16% (0,86%)	6,78% (0,68%)	-0,38%*
Tempo % medio da 3,9 a 10 mmol/L, da 70 a 180 mg/dL (dev std)	52,5% (15,6%)	68,0% (8,1%)	15,6%*	64,7% (16,6%)	73,9% (11,0%)	9,3%*
Valori glicemici del sensore medi, mmol/L, mg/dL (dev std)	10,2; 183 (1,8; 32)	8,9; 160 (0,8; 15)	-1,3; -23*	8,9; 161 (1,6; 28)	8,6; 154 (0,9; 17)	-0,4; -8*
Deviazione standard media dei valori glicemici del sensore, mmol/L, mg/dL (dev std)	3,8; 68 (0,7; 13)	3,3; 60 (0,6; 10)	-0,5; -9*	3,2; 57 (0,8; 14)	2,7; 49 (0,6; 11)	-0,4; -8*
Coefficiente medio di variazione dei valori glicemici del sensore, % (dev std)	37,5% (5,1%)	37,0% (3,9%)	-0,4%	35,2% (5,7%)	31,7% (4,7%)	-3,5%*
Time in Range % glucosio						
% mediana < 3 mmol/L, < 54 mg/dL (Q1; Q3)	0,10% (0,00; 0,41)	0,23% (0,08; 0,42)	0,04%	0,22% (0,00; 0,77)	0,17% (0,06; 0,28)	-0,08%*
% mediana < 3,9 mmol/L, < 70 mg/dL (Q1; Q3)	1,38% (0,42; 2,67)	1,48% (0,65; 2,23)	0,06%	2,00% (0,63; 4,06)	1,09% (0,46; 1,75)	-0,89%*
% media > 10 mmol/L, > 180 mg/dL (dev std)	45,3% (16,7%)	30,2% (8,7%)	-15,1%*	32,4% (17,3%)	24,7% (11,2%)	-7,7%*
% media ≥ 13,9 mmol/L, ≥ 250 mg/dL (dev std)	19,1% (13,1%)	9,6% (5,4%)	-9,4%*	10,1% (10,5%)	5,8% (5,5%)	-4,3%*
% media ≥ 16,7 mmol/L, ≥ 300 mg/dL (dev std)	8,5% (8,9%)	3,5% (2,9%)	-5,1%*	3,7% (5,5%)	1,7% (2,5%)	-2,0%*

La maggior parte dei risultati primari e secondari viene presentata come valori medi con i valori di deviazione standard (dev std) tra parentesi. I valori Time in Range < 3,9 mmol/L (< 70 mg/dL) e < 3 mmol/L (< 54 mg/dL) sono riportati come valori mediani con intervalli interquartile tra parentesi (Q1; Q3). Il valore mediano è il numero centrale in un elenco crescente di numeri e l'intervallo interquartile rappresenta il 50% centrale dei valori.

*La variazione tra la fase di terapia standard e la fase con il Sistema Omnipod 5 si è rivelata statisticamente significativa.

25 Panoramica dello studio clinico pivotal sul Sistema Omnipod 5

Risultati glicemici durante la notte (da mezzanotte alle 6:00)

Caratteristica	Bambini (da 6 a 13,9 anni) (n=112)			Adolescenti e adulti (da 14 a 70 anni) (n=128)		
	Terapia standard	Omnipod 5	Variazione	Terapia standard	Omnipod 5	Variazione
Tempo % medio da 3,9 a 10 mmol/L, da 70 a 180 mg/dL (dev std)	55,3% (19,0%)	78,1% (10,8%)	22,9%*	64,3% (19,5%)	78,1% (13,9%)	13,8%*
Valori glicemici del sensore medi, mmol/L, mg/dL (dev std)	9,8; 177 (1,9; 35)	8,3; 149 (0,9; 17)	-1,6; -29*	8,9; 160 (1,9; 34)	8,3; 149 (1,2; 21)	-0,6; -11*
Deviazione standard media dei valori glicemici del sensore, mmol/L, mg/dL (dev std)	3,4; 61 (0,8; 15)	2,7; 48 (0,7; 12)	-0,7; -13*	3,1; 56 (0,9; 17)	2,4; 44 (0,7; 13)	-0,7; -12*
Coefficiente medio di variazione dei valori glicemici del sensore, % (dev std)	34,6% (7,1%)	31,9% (5,6%)	-2,8%*	35,0% (7,9%)	28,9% (5,8%)	-6,2%*
Time in Range percentuale glucosio, %						
% mediana < 3 mmol/L, < 54 mg/dL (Q1; Q3)	0,00% (0,00; 0,30)	0,09% (0,02; 0,32)	0,02%	0,00% (0,00; 1,06)	0,09% (0,02; 0,30)	0,00%*
% mediana < 3,9 mmol/L, < 70 mg/dL (Q1; Q3)	0,78% (0,00; 2,84)	0,78% (0,37; 1,49)	0,01%*	2,07% (0,50; 5,54)	0,82% (0,31; 1,62)	-0,86%*
% media > 10 mmol/L, > 180 mg/dL (dev std)	42,2% (20,0%)	20,7% (10,8%)	-21,5%*	32,1% (20,2%)	20,7% (14,1%)	-11,3%*
% media ≥ 13,9 mmol/L, ≥ 250 mg/dL (dev std)	16,3% (15,0%)	5,4% (5,1%)	-10,9%*	10,6% (12,7%)	4,8% (7,0%)	-5,7%*
% media ≥ 16,7 mmol/L, ≥ 300 mg/dL (dev std)	6,7% (9,1%)	1,8 (2,5%)	-4,8%*	4,2% (8,0%)	1,5% (3,1%)	-2,7%*

*La variazione tra la fase di terapia standard e la fase con il Sistema Omnipod 5 si è rivelata statisticamente significativa.

Variazione di A1C analizzata rispetto ad A1C al basale

La tabella seguente presenta informazioni sulla variazione media % di A1C dal basale alla fine della fase di trattamento con il Sistema Omnipod 5 di 3 mesi analizzata rispetto alla % di A1C al basale in bambini (di età compresa tra 6 e 13,9 anni) e in adolescenti e adulti (di età compresa tra 14 e 70 anni). Adolescenti, adulti e bambini hanno riscontrato una diminuzione di A1C dopo 3 mesi di utilizzo del Sistema Omnipod 5 indipendentemente dalla categoria di A1C al basale < 8% o ≥ 8%.

Analisi per sottogruppi della variazione di A1C (%) media rispetto ad A1C (%) al basale

Adolescenti e adulti	A1C basale < 8% (n = 105)			A1C basale ≥ 8% (n = 23)		
	Basale	Omnipod 5	Variazione	Basale	Omnipod 5	Variazione
% A1C (dev std)*	6,86% (0,59%)	6,60% (0,53%)	-0,27%*	8,55% (0,42%)	7,63% (0,67%)	-0,91%*
Bambini	A1C basale < 8% (n = 73)			A1C basale ≥ 8% (n = 39)		
	Basale	Omnipod 5	Variazione	Basale	Omnipod 5	Variazione
% A1C (dev std)	7,11% (0,50%)	6,69% (0,44%)	-0,45%*	8,73% (0,63%)	7,56% (0,54%)	-1,18%*

*La variazione tra la fase di terapia standard e la fase con il Sistema Omnipod 5 si è rivelata statisticamente significativa.

*I valori medi di A1C sono riportati con i valori di deviazione standard tra parentesi.

Risultati glicemici rispetto al trattamento al basale

La tabella seguente fornisce informazioni sui risultati glicemici medi al basale (o durante la fase di terapia standard) e sulla fase di trattamento del Sistema Omnipod 5 a 3 mesi analizzata rispetto al trattamento al basale (terapia standard). La terapia standard consisteva in iniezioni multiple giornaliere (MDI) di insulina o nell'uso del microinfusore. Il Time in Range (3,9–10 mmol/L, 70–180 mg/dL) e l'A1C hanno mostrato miglioramenti dopo 3 mesi di utilizzo del Sistema Omnipod 5, indipendentemente dal tipo di trattamento al basale. Dopo 3 mesi di utilizzo del Sistema Omnipod 5, il tempo < 3,9 mmol/L (< 70 mg/dL) ha mostrato miglioramenti negli adolescenti e negli adulti, indipendentemente dalla terapia al basale, ma è rimasto invariato nei bambini.

25 Panoramica dello studio clinico pivotal sul Sistema Omnipod 5

Analisi per sottogruppi di risultati glicemici medi rispetto al trattamento al basale nei bambini (di età compresa tra 6 e 13,9 anni)

Caratteristica	MDI (n=13)		Microinfusore (n=99)	
	Terapia standard	Omnipod 5	Terapia standard	Omnipod 5
Time in Range % 3,9–10 mmol/L, 70–180 mg/dL	52%	69%*	53%	68%*
Tempo % < 3,9 mmol/L (< 70 mg/dL)	1,54%	1,41%	1,38%	1,49%
% A1C	7,7%	6,7%*	7,7%	7,0%*

*La variazione tra la fase di terapia standard e la fase con il Sistema Omnipod 5 si è rivelata statisticamente significativa.

* I valori presentati per il tempo % < 3,9 mmol/L (< 70 mg/dL) sono valori mediani, mentre i restanti valori nella tabella sono valori medi.

Analisi per sottogruppi di risultati glicemici medi rispetto al trattamento al basale in adolescenti e adulti (di età compresa tra 14 e 70 anni)

Caratteristica	MDI (n=20)		Microinfusore (n=105)	
	Terapia standard	Omnipod 5	Terapia standard	Omnipod 5
Time in Range % 3,9–10 mmol/L, 70–180 mg/dL	60%	72%*	66%	74%*
Tempo % < 3,9 mmol/L (< 70 mg/dL)	2,38%	0,79%*	1,93%	1,16%*
% A1C	7,6%	7,0%*	7,1%	6,7%*

*La variazione tra la terapia al basale/standard e la fase con il Sistema Omnipod 5 si è rivelata statisticamente significativa.

* I valori presentati per il Tempo % < 3,9 mmol/L (< 70 mg/dL) sono valori mediani, mentre i restanti valori nella tabella sono valori medi.

Un'analisi rispetto alle caratteristiche demografiche al basale, comprese quelle citate nelle analisi per sottogruppi sopra riportate, ha dimostrato un miglioramento glicemico simile a quello della popolazione complessiva dello studio. Si noti che lo studio non è stato progettato per determinare le differenze in termini di beneficio o rischio per ciascun sottogruppo.

Requisiti insulinici

La tabella seguente fornisce informazioni sul fabbisogno medio di insulina durante la fase di terapia standard e la fase con il Sistema Omnipod 5 di 3 mesi. Il fabbisogno di Insulina Totale Giornaliera è aumentato nei bambini e diminuito leggermente negli adolescenti e negli adulti.

Caratteristica	Bambini (da 6 a 13,9 anni) (n=112)			Adolescenti e adulti (da 14 a 70 anni) (n=128)		
	Terapia standard	Omnipod 5	Variazione	Terapia standard	Omnipod 5	Variazione
Insulina Totale Giornaliera media (U) (dev std)	34,4 (17,5)	37,2 (19,6)	2,9*	48,2 (21,0)	46,4 (18,1)	-1,8*
Insulina Totale Giornaliera media, U/kg (dev std)	0,85 (0,24)	0,92 (0,25)	0,07*	0,61 (0,22)	0,59 (0,21)	-0,02*
Insulina basale totale giornaliera media, U/kg (dev std)	0,36 (0,13)	0,47 (0,15)	0,10*	0,31 (0,11)	0,30 (0,11)	-0,01
Bolo di Insulina Totale Giornaliera media, U/kg (dev std)	0,48 (0,18)	0,45 (0,13)	-0,03*	0,31 (0,16)	0,29 (0,12)	-0,01

*La variazione tra la fase di terapia standard e la fase con il Sistema Omnipod 5 si è rivelata statisticamente significativa.

Risultati dell'indice di massa corporea

La tabella seguente fornisce informazioni sull'indice di massa corporea (IMC) medio, che è una misura del peso corretto per l'altezza, e il punteggio z dell'IMC, che è una misura del peso corretto per altezza, genere ed età, durante la fase di terapia standard e la fase con il Sistema Omnipod 5 di 3 mesi nei bambini. Sebbene l'IMC sia aumentato nei bambini, il punteggio z dell'IMC è rimasto invariato.

Caratteristica	Bambini (da 6 a 13,9 anni) n = 112		
	Terapia standard	Omnipod 5	Variazione
IMC, kg/m ² (dev std)	18,6 (3,2)	19,2 (3,6)	0,54*
Punteggio z IMC (dev std)	0,4 (0,8)	0,4 (0,8)	0,03

*La variazione tra la fase di terapia standard e la fase con il Sistema Omnipod 5 si è rivelata statisticamente significativa.

Utilizzo del Sistema Omnipod 5

La tabella di seguito fornisce informazioni sulla % media di tempo durante cui i partecipanti allo studio hanno utilizzato il Sistema Omnipod 5 in Modalità Automatizzata.

25 Panoramica dello studio clinico pivotal sul Sistema Omnipod 5

Percentuale di tempo trascorso in Modalità Automatizzata

	Bambini (da 6 a 13,9 anni) n=112	Adolescenti e adulti (da 14 a 70 anni) n=128
Tempo % è in Modalità Automatizzata (dev std)	95,2% (4,0%)	94,8% (6,0%)

Eventi avversi

La tabella seguente presenta un elenco completo degli eventi avversi che si sono verificati durante la fase di trattamento con il Sistema Omnipod 5 di 3 mesi. Si sono verificati 3 eventi di ipoglicemia grave non attribuibili all'erogazione di insulina automatizzata o a un malfunzionamento del Sistema Omnipod 5 e 1 evento di DKA dovuto a un sospetto problema al sito di infusione. Altri eventi avversi correlati, ma non di natura glicemica, includono infezione o irritazione nel sito di infusione (2 bambini, 2 adolescenti/adulti).

Eventi avversi durante la fase con il Sistema Omnipod 5

Tipo di evento avverso	Bambini (da 6 a 13,9 anni) (n=112)	Adolescenti e adulti (da 14 a 70 anni) (n=128)	Totale (da 6 a 70 anni) (N=240)
Ipoglicemia †	1	0	1
Ipoglicemia grave ‡	1	2	3
DKA	1	0	1
Iperglicemia §	1	2	3
Iperglicemia prolungata **	13	5	18
Altro	8	8	16

Risultati riportati come numero di eventi.

† Ipoglicemia con conseguente evento avverso grave, ma che altrimenti non soddisfa la definizione di ipoglicemia grave.

‡ Ha richiesto l'assistenza di un'altra persona.

§ Iperglicemia che richiede valutazione, trattamento o indicazioni dal sito di intervento, oppure iperglicemia con conseguente evento avverso grave.

** Glucometro che misura valori $\geq 16,7$ mmol/L (≥ 300 mg/dL) e chetoni $> 1,0$ mmol/L.

Risultati glicemici in base alle impostazioni del Target Glicemico nello studio pivotal

Le tabelle seguenti forniscono informazioni sui risultati glicemici a varie impostazioni di Target Glicemico auto-selezionate durante la fase con il Sistema Omnipod 5 di 3 mesi dello studio pivotal. Dei Target Glicemici personalizzabili, il più selezionato è stato 6,1 mmol/L (110 mg/dL)

Risultati glicemici complessivi (24 ore) in base alle impostazioni del Target Glicemico nei bambini (di età compresa tra 6 e 13,9 anni) dello studio pivotal

Caratteristica	Target Glicemico 6,1 mmol/L, 110 mg/dL (n=98)	Target Glicemico 6,7 mmol/L, 120 mg/dL (n=74)	Target Glicemico 7,2 mmol/L, 130 mg/dL (n=47)	Target Glicemico 7,8 mmol/L, 140 mg/dL (n=12)	Target Glicemico 8,3 mmol/L, 150 mg/dL* (n=9)
Tempo % medio 3,9–10 mmol/L, 70–180 mg/dL (dev std)	68,4% (9,1%)	67,5% (9,7%)	64,2% (14,3%)	59,2% (16,9%)	53,3% (18,2%)
Valori glicemici del sensore medi, mmol/L, mg/dL (dev std)	8,8; 159 (0,9; 17)	9,1; 163 (0,9; 16)	9,4; 169 (1,3; 24)	9,9; 178 (1,3; 24)	10,2; 183,6 (1,3; 23,9)
Time in Range % glucosio					
% mediana < 3 mmol/L, < 54 mg/dL (Q1; Q3)	0,22% (0,06; 0,49)	0,18% (0,05; 0,33)	0,09% (0,00; 0,21)	0,04% (0,00; 0,34)	0,00% (0,00; 0,00)
% mediana < 3,9 mmol/L, < 70 mg/dL (Q1; Q3)	1,51% (0,76; 2,38)	1,16% (0,58; 1,94)	0,71% (0,26; 1,63)	0,59% (0,05; 1,52)	0,12% (0,00; 0,21)
% media > 10 mmol/L, > 180 mg/dL (dev std)	29,7% (9,6%)	31,1% (10,0%)	34,5% (14,8%)	39,9% (16,6%)	46,4% (18%)
% media ≥ 13,9 mmol/L, ≥ 250 mg/dL (dev std)	9,7% (5,8%)	10,0% (6,3%)	11,8% (9,0%)	14,6% (11,1%)	13,3% (11,9%)
Numero cumulativo di giorni-persona	6.289	2.716	941	99	73

25 Panoramica dello studio clinico pivotal sul Sistema Omnipod 5

Risultati glicemici complessivi (24 ore) in base alle impostazioni del Target Glicemico in adolescenti e adulti (di età compresa tra 14 e 70 anni) dello studio pivotal

Caratteristica	Target Glicemico 6,1 mmol/L, 110 mg/dL (n=121)	Target Glicemico 6,7 mmol/L, 120 mg/dL (n=54)	Target Glicemico* 7,2 mmol/L, 130 mg/dL (n=9)
Tempo % medio 3,9–10 mmol/L, 70–180 mg/dL (dev std)	75,6% (9,9%)	73,4% (12,1%)	63,6% (25,9%)
Valori glicemici del sensore medi, mmol/L, mg/dL (dev std)	8,4; 151 (0,8; 15)	8,7; 156 (1,0; 18)	9,6; 172 (1,8; 33)
Time in Range % glucosio			
% mediana < 3 mmol/L, < 54 mg/dL (Q1; Q3)	0,16% (0,05; 0,26)	0,11% (0,00; 0,33)	0,00% (0,00; 0,00)
% mediana < 3,9 mmol/L, < 70 mg/dL (Q1; Q3)	0,99% (0,47; 1,67)	0,91% (0,31; 1,68)	0,26% (0,05; 0,63)
% media > 10 mmol/L, > 180 mg/dL (dev std)	23,1% (10,2%)	25,4% (12,3%)	35,9% (26,1%)
% media ≥ 13,9 mmol/L, ≥ 250 mg/dL (dev std)	5,1% (4,6%)	5,8% (6,4%)	9,6% (12,3%)
Numero cumulativo di giorni-persona	9.278	1.827	178

*I risultati relativi alle impostazioni del Target Glicemico 7,8 mmol/L (140 mg/dL) e 8,3 mmol/L (150 mg/dL) (con la Funzione Attività fisica disattivata) negli adulti non sono mostrati in quanto selezionate da un numero insufficiente di partecipanti ($n \leq 2$).

Risultati glicemici pre-pivotal del Sistema Omnipod 5 in base alle impostazioni del Target Glicemico

Risultati glicemici in base alle impostazioni del Target Glicemico nello studio pre-pivotal

L'obiettivo dello studio pre-pivotal del Sistema Omnipod 5 era valutarne la sicurezza e l'efficacia. Questo studio prospettico, multicentrico, a braccio singolo ha arruolato 18 bambini (di età compresa tra 6 e 13,9 anni) e 18 adulti (di età compresa tra 14 e 70 anni) con diabete di tipo 1. Una fase di terapia standard di 2 settimane (regime insulinico abituale) è stata seguita da 2 settimane di utilizzo del Sistema Omnipod 5 in Modalità Automatizzata con un Sensore Dexcom G6. La fase con Omnipod 5 di 2 settimane comprendeva 3 giorni di utilizzo obbligatorio a ciascuna delle impostazioni del Target Glicemico di 7,2 mmol/L (130 mg/dL),

7,8 mmol/L (140 mg/dL) e 8,3 mmol/L (150 mg/dL) per un totale di 9 giorni, seguiti da 5 giorni di scelta libera di un valore del Target Glicemico compreso tra 6,1 e 8,3 mmol/L (110 e 150 mg/dL).

Risultati glicemici complessivi (24 ore) in base alle impostazioni del Target Glicemico nei bambini (di età compresa tra 6 e 13,9 anni) dello studio pre-pivotal

Caratteristica	Target Glicemico 6,1 mmol/L, 110 mg/dL (n=11)	Target Glicemico 6,7 mmol/L, 120 mg/dL (n=3)	Target Glicemico 7,2 mmol/L, 130 mg/dL (n=18) ^a	Target Glicemico 7,8 mmol/L, 140 mg/dL (n=18)	Target Glicemico 8,3 mmol/L, 150 mg/dL (n=18) ^b
Tempo % medio 3,9–10 mmol/L, 70–180 mg/dL (dev std)	71,2% (10,2%)	66,8% (12,9%)	61,5% (7,7%)	64,8% (11,6%)	53,5% (11,0%)
Valori glicemici del sensore medi, mmol/L, mg/dL (dev std)	8,6; 155,2 (1,0; 18,2)	9,4; 170 (0,9; 16)	9,7; 174,1 (0,6; 11,4)	9,6; 172,7 (1,0; 17,2)	10,2; 182,9 (0,9; 15,3)
Time in Range % glucosio					
% mediana < 3 mmol/L, < 54 mg/dL (Q1; Q3)	0,1% (0,0; 0,4)	0,2% (0,0; 0,3)	0,0% (0,0; 0,3)	0,0% (0,0; 0,0)	0,0% (0,0; 0,1)
% mediana < 3,9 mmol/L, < 70 mg/dL (Q1; Q3)	0,9% (0,4; 2,8)	0,3% (0,2; 2,2)	0,5% (0,1; 0,8)	0,1% (0,0; 0,5)	0,5% (0,0; 0,8)
% media > 10 mmol/L, > 180 mg/dL (dev std)	27,1% (11,4%)	32,3% (11,9%)	37,7% (7,9)	34,6% (12,1%)	45,9% (11,0%)
% media ≥ 13,9 mmol/L, ≥ 250 mg/dL (dev std)	6,8% (6,3%)	14,4% (6,2%)	13,2% (5,8%)	10,6% (7,3%)	12,8% (8,1%)
Numero cumulativo di giorni-persona	47,7	8,7	73,3	56,3	61,5

^aTutti i partecipanti hanno avviato il sistema a un valore del Target Glicemico di 7,2 mmol/L (130 mg/dL) per 3 giorni.

^bI risultati glicemici all'impostazione del Target Glicemico di 8,3 mmol/L (150 mg/dL) comprendono i periodi con la Funzione Attività fisica attivata e disattivata, il che significa che i risultati registrati in questo periodo di tempo potrebbero includere quelli in cui i partecipanti hanno percepito una riduzione del fabbisogno insulinico.

25 Panoramica dello studio clinico pivotal sul Sistema Omnipod 5

Risultati glicemici complessivi (24 ore) in base alle impostazioni del Target Glicemico in adolescenti e adulti (di età compresa tra 14 e 70 anni) dello studio pre-pivotal

Caratteristica	Target Glicemico 6,1 mmol/L, 110 mg/dL (n=12)	Target Glicemico 6,7 mmol/L, 120 mg/dL (n=7)	Target Glicemico 7,2 mmol/L, 130 mg/dL (n=18) ^a	Target Glicemico 7,8 mmol/L, 140 mg/dL (n=18)	Target Glicemico 8,3 mmol/L, 150 mg/dL (n=18) ^b
Tempo % medio 3,9–10 mmol/L, 70–180 mg/dL (dev std)	72,5% (9,4%)	70,9% (11,3%)	75,1% (11,6%)	67,6% (9,2%)	63,7% (7,8%)
Valori glicemici del sensore medi, mmol/L, mg/dL (dev std)	8,5; 153,8 (0,8; 14,8)	8,9; 159,7 (0,6; 11)	8,5; 153,8 (0,8; 14,9)	9,2; 165,4 (0,6; 11,5)	9,4; 169,8 (0,5; 9,4)
Time in Range % glucosio					
% mediana < 3 mmol/L, < 54 mg/dL (Q1; Q3)	0,0% (0,0; 0,0)	0,0% (0,0; 0,0)	0,0% (0,0; 0,2)	0,0% (0,0; 0,1)	0,0% (0,0; 0,2)
% mediana < 3,9 mmol/L, < 70 mg/dL (Q1; Q3)	0,5% (0,0; 1,4)	0,4% (0,0; 0,6)	0,9% (0,4; 1,2)	0,1% (0,0; 0,6)	0,2% (0,0; 0,9)
% media > 10 mmol/L, > 180 mg/dL (dev std)	26,4% (10,0%)	28,7% (11,2%)	23,4% (11,4%)	31,7% (9,2%)	35,7% (7,9%)
% media ≥ 13,9 mmol/L, ≥ 250 mg/dL (dev std)	4,1% (3,4%)	5,2% (5,5%)	5,0% (4,6%)	5,1% (4,5%)	6,0% (4,8%)
Numero cumulativo di giorni-persona	41,1	28	58,8	58,4	60,3

^aTutti i partecipanti hanno avviato il sistema a un valore del Target Glicemico di 7,2 mmol/L (130 mg/dL) per 3 giorni.

^bI risultati glicemici all'impostazione del Target Glicemico di 8,3 mmol/L (150 mg/dL) comprendono i periodi con la Funzione Attività fisica attivata e disattivata, il che significa che i risultati registrati in questo periodo di tempo potrebbero includere quelli in cui i partecipanti hanno percepito una riduzione del fabbisogno insulinico.

Studio clinico sul Suggeritore SmartBolus basato sul CGM in bambini, adolescenti e adulti

È stato condotto uno studio su 25 partecipanti affetti da diabete di tipo 1 di età compresa tra 6 e 70 anni per valutare il Suggeritore SmartBolus basato sul Sensore Omnipod 5. Durante la fase 1, i partecipanti hanno utilizzato il Sistema Omnipod 5 in Modalità Manuale per i primi 7 giorni senza un Sensore connesso (Suggeritore SmartBolus standard). Nella fase 2, i partecipanti hanno utilizzato il Sistema Omnipod 5 in Modalità Manuale con un Sensore connesso (Suggeritore SmartBolus basato sul CGM) per 7 giorni. I boli sono stati calcolati utilizzando le impostazioni del microinfusore memorizzate più la quantità del pasto stimata dall'utilizzatore e/o un valore di glucosio inserito manualmente (Suggeritore SmartBolus standard) o un valore glicemico e una tendenza glicemica del sensore correnti importati (Suggeritore SmartBolus basato sul CGM). Entrambe le versioni del Suggeritore SmartBolus hanno tenuto conto dell'Insulina Attiva (IOB) nei calcoli del bolo. Il suggeritore basato sul CGM ha aumentato o diminuito automaticamente la quantità di bolo consigliata in base alla tendenza glicemica del sensore. L'analisi primaria dello studio consisteva nel confrontare la percentuale di tempo trascorso con livelli < 3,9 mmol/L (< 70 mg/dL) e > 10 mmol/L (> 180 mg/dL) per le 4 ore successive a qualsiasi bolo misurato dal Sensore tra le due fasi dello studio. I risultati indicano che l'uso del Suggeritore SmartBolus basato sul Sensore è stato associato a una diminuzione del tempo in ipoglicemia entro 4 ore dall'erogazione del bolo. Lo studio è stato condotto utilizzando un Sensore Dexcom G6.

Confronto delle misurazioni glicemiche della fase 1 (Suggeritore SmartBolus standard) e della fase 2 (Suggeritore SmartBolus basato sul CGM) per le 4 ore successive a qualsiasi bolo (N = 25)

Tempo percentuale nell'intervallo di glucosio misurato dal Sensore	Suggeritore SmartBolus standard	Suggeritore SmartBolus basato sul CGM	Differenza
3,9–10 mmol/L (70–180 mg/dL)	65,1% (15,4)	63,8% (15,7)	-1,3%
< 3,9 mmol/L (< 70 mg/dL)	2,8% (2,7)	2,1% (2,0)	-0,6%*
< 3 mmol/L (< 54 mg/dL)	0,5% (1,0)	0,3% (0,7)	-0,2%
> 10 mmol/L (> 180 mg/dL)	32,1% (15,7)	34,0% (16,0)	1,9%
≥ 13,9 mmol/L (≥ 250 mg/dL)	8,2% (6,9)	9,7% (10,3)	1,4%
≥ 16,7 mmol/L (≥ 300 mg/dL)	2,0% (2,6)	2,6% (3,7)	0,6%

I dati sono presentati come valori medi (deviazione standard). Le differenze significative ($p < 0,05$) sono contrassegnate da un asterisco.

25.2 Studi in bambini molto piccoli con diabete di tipo 1

Studio clinico su Omnipod 5 in bambini molto piccoli

L'obiettivo di questo studio era valutare la sicurezza e l'efficacia del Sistema Omnipod 5 nei bambini affetti da diabete di tipo 1 di età compresa tra 2 e 5,9 anni. Questo studio prospettico, multicentrico, a braccio singolo ha arruolato 80 bambini.

Una fase di terapia standard di 2 settimane (regime insulinico abituale) è stata seguita da 3 mesi di utilizzo del Sistema Omnipod 5 in Modalità Automatizzata con un Sensore Dexcom G6. L'analisi primaria consisteva nei risultati relativi ad A1C e Time in Range dei valori glicemici del sensore (da 3,9 a 10 mmol/L, da 70 a 180 mg/dL).

Gli endpoint primari di sicurezza includevano l'incidenza di ipoglicemia grave e chetoacidosi diabetica (DKA). È stata inoltre eseguita un'analisi degli endpoint secondari e di ulteriori metriche. Le tabelle di seguito riportano un'analisi dei risultati primari, secondari e di sicurezza.

Degli 80 partecipanti arruolati, tutti hanno completato la sperimentazione. La popolazione dello studio era costituita da bambini con diagnosi di diabete di tipo 1 in base al giudizio clinico dello sperimentatore. Tutti i partecipanti dovevano presentare un valore A1C < 10,0% allo screening. I partecipanti dovevano vivere con un genitore o tutore legale. Non sono stati arruolati partecipanti con le seguenti condizioni:

Anamnesi di ipoglicemia grave o DKA negli ultimi 6 mesi

- anemia falciforme, insufficienza surrenale, funzionalità renale anomala (eGFR < 45), emofilia o qualsiasi altro disturbo emorragico, malattia tiroidea non trattata
- ricezione di trasfusioni di sangue pianificate durante lo studio
- assunzione di steroidi orali o iniettabili o di farmaci per il diabete diversi da metformina e insulina

La sicurezza e l'efficacia del Sistema Omnipod 5 in utilizzatori con le condizioni sopra indicate non sono note. Si noti che l'elenco di esclusione dello studio sopra riportato è una sintesi e non include tutti i criteri di esclusione. Lo studio è stato registrato sulla pagina [ClinicalTrials.gov](https://clinicaltrials.gov), un database nazionale di studi clinici negli Stati Uniti, con ID numero NCT04476472. I dettagli completi dei criteri dello studio sono disponibili qui.

Dati demografici

Le caratteristiche al basale, comprese le caratteristiche demografiche dei partecipanti all'inizio della fase di trattamento con Omnipod 5 a 3 mesi, sono riportate nella tabella seguente.

Caratteristiche al basale all'inizio della fase di trattamento con Omnipod 5

Caratteristica	
n	80
Età (anni) \pm dev std	4,7 \pm 1,0
Durata del diabete (anni)	2,3 \pm 1,1
A1C§	7,4% \pm 1,0%
Dose giornaliera di insulina (U/kg) ¥	0,69 \pm 0,18
Indice di massa corporea (IMC) (kg/m ²)	16,7 \pm 1,5
Genere femminile	34 (42,5%)
Utilizzo precedente¶ o attuale del sistema di monitoraggio continuo del glucosio (CGM)	78 (97,5%)
Utilizzo precedente¶ o attuale del microinfusore	68 (85,0%)
Iniezioni multiple giornaliere come metodo di terapia standard	12 (15,0%)
Razza/Etnia‡	
Bianca	67 (83,8%)
Ispanica o latina	5 (6,3%)
Nera o afroamericana	4 (5,0%)
Nera o afroamericana, bianca	3 (3,8%)
Asiatica	3 (3,8%)
Asiatica, bianca	2 (2,5%)
Ispanica o latina	1 (1,3%)
Non ispanica o latina	1 (1,3%)
Altro (dominicana)	1 (1,3%)
Ispanica o latina	1 (1,3%)

I valori più-meno sono la media \pm deviazione standard; i risultati riportati con il numero tra parentesi rappresentano successivamente il numero di partecipanti (% dei partecipanti).

§ A1C determinata dalla valutazione di laboratorio.

¥ La dose di Insulina Totale Giornaliera al basale è stata determinata a partire dai dati raccolti durante la fase di terapia standard.

¶ Per uso precedente si intende l'utilizzo del dispositivo in passato per un qualsiasi periodo di tempo.

‡ Razza ed etnia sono state riferite dai partecipanti. I gruppi non si escludono a vicenda.

25 Panoramica dello studio clinico pivotal sul Sistema Omnipod 5

Risultati glicemici

Le tabelle seguenti presentano informazioni sui risultati glicemici primari e secondari della fase di terapia standard rispetto alla fase di trattamento con il Sistema Omnipod 5 di 3 mesi. I risultati primari dello studio comprendevano la variazione media dei valori % di A1C e Time in Range (da 3,9 a 10 mmol/L, da 70 a 180 mg/dL). I partecipanti hanno riscontrato miglioramenti dell'A1C e del Time in Range complessivo dopo 3 mesi di utilizzo del Sistema Omnipod 5. A questo risultato hanno contribuito una diminuzione del tempo > 10 mmol/L (> 180 mg/dL) e una diminuzione del tempo mediano < 3,9 mmol/L (< 70 mg/dL).

Lo studio presentava alcune limitazioni, tra cui: 1) disegno a braccio singolo senza gruppo di controllo che poteva comportare una sovrastima del miglioramento glicemico; 2) fase di terapia standard più breve della fase con il Sistema Omnipod 5.

Risultati glicemici complessivi (24 ore)

Caratteristica	Terapia standard	Omnipod 5	Variazione
% A1C media (dev std)	7,4% (1,0%)	6,9% (0,7%)	-0,55%*
Tempo % medio 3,9–10 mmol/L, 70–180 mg/dL (dev std)	57,2% (15,3%)	68,1% (9,0%)	10,9%*
Valori glicemici del sensore medi, mmol/L, mg/dL (dev std)	9,5; 171,1 (1,7; 30,5)	8,7; 157,4 (0,9; 16,8)	-0,7; -13,7*
Deviazione standard media dei valori glicemici del sensore, mmol/L, mg/dL (dev std)	3,6; 64,9 (0,7; 13,4)	3,3; 59,6 (0,6; 10,3)	-0,3; -5,3*
Coefficiente medio di variazione della glicemia del sensore, % (dev std)	38,1% (5,5%)	37,7% (4,0%)	-0,4%
Time in Range % glucosio			
% mediana < 3 mmol/L, < 54 mg/dL (Q1; Q3)	0,24% (0,05; 0,84)	0,26% (0,16; 0,60)	0,06%
% mediana < 3,9 mmol/L, < 70 mg/dL (Q1; Q3)	2,19 (0,89; 4,68)	1,94 (1,18; 3,43)	-0,27%*
% media > 10 mmol/L, > 180 mg/dL (dev std)	39,4% (16,7%)	29,5% (9,8%)	-9,9%*
% media ≥ 13,9 mmol/L, ≥ 250 mg/dL (dev std)	14,8% (12,1%)	9,2% (5,6%)	-5,6%*
% media ≥ 16,7 mmol/L, ≥ 300 mg/dL (dev std)	6,0% (7,3%)	3,2% (2,8%)	-2,7%*

La maggior parte dei risultati primari e secondari viene presentata come valori medi con i valori di deviazione standard (dev std) tra parentesi. I valori Time in Range < 3,9 mmol/L (< 70 mg/dL) e < 3 mmol/L (< 54 mg/dL) sono riportati come valori mediani con intervalli interquartile tra parentesi (Q1; Q3). Il valore mediano è il numero centrale in un elenco crescente di numeri e l'intervallo interquartile rappresenta il 50% centrale dei valori.

*La variazione tra la fase di terapia standard e la fase con il Sistema Omnipod 5 si è rivelata statisticamente significativa.

Risultati glicemici durante la notte (da mezzanotte alle 6:00)

Caratteristica	Terapia standard	Omnipod 5	Variazione
Tempo % medio 3,9–10 mmol/L, 70–180 mg/dL (dev std)	58,2% (18,7%)	81,0% (10,0%)	22,8%*
Valori glicemici del sensore medi, mmol/L, mg/dL (dev std)	9,3; 168,1 (1,8; 33,3)	7,8; 140,7 (0,9; 16,4)	-1,5; -27,4*
Deviazione standard media dei valori glicemici del sensore, mmol/L, mg/dL (dev std)	3,2; 58,0 (0,8; 14,0)	2,5; 45,5 (0,6; 10,8)	-0,7; -12,5*
Coefficiente medio di variazione della glicemia del sensore, % (dev std)	34,7% (6,6%)	32,1% (5,2%)	-2,6%*
Time in Range % glucosio			
% mediana < 3 mmol/L, < 54 mg/dL (Q1; Q3)	0,00% (0,00; 0,97)	0,18% (0,06; 0,53)	0,00%
% mediana < 3,9 mmol/L, < 70 mg/dL (Q1; Q3)	1,66% (0,40; 4,21)	1,58% (0,65; 2,89)	-0,44%*
% media > 10 mmol/L, > 180 mg/dL (dev std)	38,4% (20,1%)	16,9% (10,3%)	-21,5%*
% media ≥ 13,9 mmol/L, ≥ 250 mg/dL (dev std)	13,0% (13,2%)	3,9% (3,9%)	-9,1%*
% media ≥ 16,7 mmol/L, ≥ 300 mg/dL (dev std)	4,3% (6,7%)	1,2% (1,6%)	-3,1%*

*La variazione tra la fase di terapia standard e la fase con il Sistema Omnipod 5 si è rivelata statisticamente significativa.

Variazione di A1C analizzata rispetto ad A1C al basale

La tabella seguente presenta informazioni sulla variazione media % di A1C dal basale alla fine della fase di trattamento con il Sistema Omnipod 5 di 3 mesi analizzata rispetto alla % di A1C al basale. I partecipanti hanno riscontrato una diminuzione di A1C dopo 3 mesi di utilizzo del Sistema Omnipod 5 indipendentemente dalla categoria di A1C al basale < 8% o ≥ 8%.

Analisi per sottogruppi della variazione di A1C (%) media rispetto ad A1C (%) al basale

	A1C basale < 8% (n = 55)			A1C basale ≥ 8% (n = 25)		
	Basale	Omnipod 5	Variazione	Basale	Omnipod 5	Variazione
% A1C	6,9%	6,6%	-0,31%*	8,5%	7,5	-1,06%*
(dev std)‡	(0,6%)	(0,6%)		(0,5%)	(0,4%)	

*La variazione tra la fase di terapia standard e la fase con il Sistema Omnipod 5 si è rivelata statisticamente significativa.

‡I valori medi di A1C sono riportati con i valori di deviazione standard tra parentesi.

Risultati glicemici rispetto al trattamento al basale

La tabella seguente fornisce informazioni sui risultati glicemici medi al basale (o durante la fase di terapia standard) e sulla fase di trattamento del Sistema Omnipod 5 a 3 mesi analizzata rispetto al trattamento al basale (terapia standard). La terapia standard consisteva in iniezioni multiple giornaliere (MDI) di insulina o nell'uso del microinfusore. Il Time in Range (3,9–10 mmol/L, 70–180 mg/dL) e l'A1C hanno mostrato miglioramenti dopo 3 mesi di utilizzo del Sistema Omnipod 5, indipendentemente dal tipo di trattamento al basale. Il tempo < 3,9 mmol/L (< 70 mg/dL) ha mostrato un miglioramento nei partecipanti con microinfusore al basale ed è rimasto basso nei partecipanti con MDI al basale.

Analisi per sottogruppi di risultati glicemici medi rispetto al trattamento al basale

Caratteristica	MDI (n=12)		Microinfusore (n=68)	
	Terapia standard	Omnipod 5	Terapia standard	Omnipod 5
Time in Range % 3,9–10 mmol/L, (70–180 mg/dL)	48%	62%*	59%	69%*
Tempo % < 3,9 mmol/L (< 70 mg/dL)‡	1,45%	1,48%	2,44%	2,00%*
% A1C	8,4%	7,5%*	7,3%	6,8%*

*La variazione tra la fase di terapia standard e la fase con il Sistema Omnipod 5 si è rivelata statisticamente significativa.

‡I valori presentati per il tempo % < 3,9 mmol/L (< 70 mg/dL) sono valori mediani, mentre i restanti valori nella tabella sono valori medi.

Requisiti insulinici

La tabella seguente fornisce informazioni sul fabbisogno medio di insulina durante la fase di terapia standard e la fase con il Sistema Omnipod 5 di 3 mesi. Il fabbisogno di Insulina Totale Giornaliera è rimasto invariato, ad eccezione di un aumento dell'insulina basale totale giornaliera.

Caratteristica	Terapia standard	Omnipod 5	Variazione
Insulina Totale Giornaliera media (U) (dev std)	13,7 (4,4)	14,1 (4,0)	0,4
Insulina Totale Giornaliera media, U/kg (dev std)	0,69 (0,18)	0,71 (0,15)	0,02
Insulina Basale Totale Giornaliera media, U/kg (dev std)	0,28 (0,12)	0,32 (0,10)	0,04*
Bolo di Insulina Totale Giornaliera media, U/kg (dev std)	0,41 (0,15)	0,39 (0,10)	-0,02 (0,10)

*La variazione tra la fase di terapia standard e la fase con il Sistema Omnipod 5 si è rivelata statisticamente significativa.

25 Panoramica dello studio clinico pivotal sul Sistema Omnipod 5

Risultati dell'indice di massa corporea

La tabella seguente fornisce informazioni sull'indice di massa corporea (IMC) medio e il punteggio z dell'IMC durante la fase di terapia standard e la fase con il Sistema Omnipod 5 di 3 mesi. L'IMC e il punteggio z dell'IMC non hanno mostrato variazioni tra una fase e l'altra.

Caratteristica	Terapia standard	Omnipod 5	Variazione
IMC, kg/m ² (dev std)	16,7 (1,5)	16,7 (1,4)	0,1
Punteggio z IMC (dev std)	0,74 (0,95)	0,76 (0,89)	0,05

Utilizzo del Sistema Omnipod 5

La % mediana (Q1; Q3) del tempo in cui i partecipanti allo studio hanno utilizzato il Sistema Omnipod 5 in Modalità Automatizzata è stata del 97,8% (95,8; 98,5).

Eventi avversi

La tabella seguente presenta un elenco completo degli eventi avversi che si sono verificati durante la fase di trattamento con il Sistema Omnipod 5 di 3 mesi. Altri eventi avversi correlati, ma non di natura glicemica, comprendevano irritazione cutanea (n=2), cellulite (n=1) e chetosi che non soddisfano la definizione di DKA (n=2).

Eventi avversi durante la fase con il Sistema Omnipod 5

Tipo di evento avverso	Omnipod 5
Ipoglicemia ‡	0
Ipoglicemia grave §	0
DKA	0
Iperglicemia ¶	4
Iperglicemia prolungata **	20
Altro	5

Risultati riportati come numero di eventi.

‡Ipoglicemia con conseguente evento avverso grave, ma che altrimenti non soddisfa la definizione di ipoglicemia grave.

§Ha richiesto l'assistenza di un'altra persona.

¶Iperglicemia che richiede valutazione, trattamento o indicazioni dal sito di intervento o iperglicemia con conseguente evento avverso grave.

--Glucometro che misura valori $\geq 16,7$ mmol/L (≥ 300 mg/dL) e chetoni $> 1,0$ mmol/L.

Risultati glicemici in base alle impostazioni del Target Glicemico

Le tabelle seguenti forniscono informazioni sui risultati glicemici a varie impostazioni di Target Glicemico auto-selezionate durante la fase con il Sistema Omnipod 5 di 3 mesi dello studio pivotal. I valori di Target Glicemico più comunemente selezionati sono stati 6,1 mmol/L (110 mg/dL) e 6,7 mmol/L (120 mg/dL), che sono stati utilizzati rispettivamente nel 33% e nel 42% del tempo.

Risultati glicemici complessivi (24 ore) in base alle impostazioni del Target Glicemico

Caratteristica	Target Glicemico 6,1 mmol/L (110 mg/dL) (n=47)	Target Glicemico 6,7 mmol/L (120 mg/dL) (n=61)	Target Glicemico 7,2 mmol/L (130 mg/dL) (n=47)	Target Glicemico 7,8 mmol/L (140 mg/dL) (n=20)	Target Glicemico* 8,3 mmol/L (150 mg/dL) (n=16)
Tempo % medio 3,9–10 mmol/L, 70–180 mg/dL (dev std)	69,3% (9,5%)	68,3% (11,3%)	67,3% (14,6%)	63,0% (11,9%)	65,0% (15,0%)
Valori glicemici del sensore medi, mmol/L, mg/dL (dev std)	8,5; 153 (1; 18)	8,7; 157 (1,2; 21)	8,9; 161 (1,4; 25)	9,4; 169 (1; 18)	9,4; 169 (1,1; 20)
Time in Range % glucosio					
% mediana < 3 mmol/L, < 54 mg/dL (Q1; Q3)	0,3% (0,2; 0,7)	0,2% (0,1; 0,5)	0,2% (0,05; 0,7)	0,2% (0,03; 0,5)	0,06% (0,0; 0,2)
% mediana < 3,9 mmol/L, < 70 mg/dL (Q1; Q3)	2,4% (1,5; 3,9)	1,6% (1,1; 2,7)	1,4% (0,6; 2,9)	1,4% (0,4; 2,7)	0,8% (0,1; 2,0)
% media > 10 mmol/L, > 180 mg/dL (dev std)	27,6% (10,5%)	29,3% (12,1%)	30,4% (15,4%)	35,4% (12,2%)	33,9% (15,0%)
% media ≥ 13,9 mmol/L, ≥ 250 mg/dL (dev std)	7,7% (5,9%)	8,9% (6,2%)	10,6% (9,4%)	12,6% (6,2%)	11,4% (7,2%)
Numero cumulativo di giorni-persona	2438,4	3083,5	1066,6	404,0	237,0

*Le misure glicemiche riportate all'impostazione del Target Glicemico 8,3 mmol/L (150 mg/dL) comprendevano solo quelle con la Funzione Attività fisica disattivata.

Studio clinico sul Suggeritore SmartBolus basato sul CGM in bambini molto piccoli

È stato condotto uno studio su 5 partecipanti affetti da diabete di tipo 1 di età compresa tra 2 e 5,9 anni per valutare il Suggeritore SmartBolus basato sul CGM Omnipod 5 in Modalità Manuale. Durante la fase 1, i partecipanti hanno utilizzato il Sistema Omnipod 5 in Modalità Manuale per i primi 7 giorni senza un Sensore connesso (Suggeritore SmartBolus standard). Nella fase 2, i partecipanti hanno utilizzato il Sistema Omnipod 5 in Modalità Manuale con un Sensore connesso (Suggeritore SmartBolus basato sul CGM) per 7 giorni. I boli sono stati calcolati utilizzando le impostazioni del microinfusore memorizzate più la quantità del pasto stimata dall'utilizzatore e/o un valore di glucosio inserito manualmente (Suggeritore SmartBolus standard) o un valore glicemico e una tendenza glicemica del sensore correnti importati (Suggeritore SmartBolus basato sul CGM). Entrambe le versioni del Suggeritore SmartBolus hanno tenuto conto dell'Insulina Attiva (IOB) nei calcoli del bolo. Il suggeritore basato sul CGM ha aumentato o diminuito automaticamente la quantità di bolo consigliata in base alla tendenza glicemica del sensore. L'analisi primaria dello studio consisteva nel confrontare la percentuale di tempo trascorso con livelli < 3,9 mmol/L (< 70 mg/dL) e > 10 mmol/L (> 180 mg/dL) per le 4 ore successive a qualsiasi bolo misurato dal Sensore tra le due fasi dello studio. I risultati hanno dimostrato che il Suggeritore SmartBolus basato sul CGM ha fornito risultati glicemici simili a quelli del Suggeritore SmartBolus standard in Modalità Manuale.

Confronto delle misurazioni glicemiche della fase 1 (Suggeritore SmartBolus standard) e della fase 2 (Suggeritore SmartBolus basato sul CGM) per le 4 ore successive a qualsiasi bolo (n = 5)

Tempo percentuale nell'intervallo di glucosio misurato dal Sensore	Suggeritore SmartBolus standard	Suggeritore SmartBolus basato sul CGM	Differenza
3,9–10 mmol/L (70–180 mg/dL)	59,6% (7,1%)	62,8% (15,5%)	3,15%
< 3,9 mmol/L (< 70 mg/dL)	5,16% (4,99%)	4,03% (3,28%)	-1,13%
< 3 mmol/L (< 54 mg/dL)	1,47% (1,88%)	0,81% (0,91%)	-0,66%
> 10 mmol/L (> 180 mg/dL)	35,2% (10,3%)	33,2% (18,5%)	-2,03%
≥ 13,9 mmol/L (≥ 250 mg/dL)	9,4% (5,7%)	7,9% (6,4%)	-1,55%
≥ 16,7 mmol/L (≥ 300 mg/dL)	2,33% (2,69%)	1,99% (2,05%)	-0,34%

I dati sono presentati come valori medi (deviazione standard).

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

26 Domande frequenti e risoluzione dei problemi

Appendice



Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

CAPITOLO 26

Risoluzione dei problemi

Sommario

26.1 Domande frequenti sul microinfusore Omnipod 5	382
Problemi relativi al Pod	382
Come determinare la quantità di insulina erogata	384
Problemi relativi al Controller	385
Problemi relativi all'App Omnipod 5	386
26.2 Domande frequenti sul Suggeritore SmartBolus	388
26.3 Domande frequenti sul Sensore	389
Dexcom G6	389
FreeStyle Libre 2 Plus	391
Problemi di glicemia alta	392
Problemi di glicemia bassa	395
26.4 Domande frequenti relative alla Modalità Automatizzata .	396
26.5 Problemi di comunicazione del Pod – “Riprova”	398
Nessuna comunicazione con il Pod	398
Cosa fare	398
Ulteriori opzioni per la risoluzione dei problemi	399
Riavviare l'App Omnipod 5	399
Scartare il Pod e attivare un nuovo Pod	399
Errore durante l'invio di comandi per l'insulina al Pod	399
Errore durante l'annullamento di un bolo	400
Errore durante l'attivazione di un Pod	401
Errore durante la disattivazione di un Pod	401
26.6 Informazioni su come mantenere il Controller Omnipod 5 nelle vicinanze	401
26.7 Reclami sui dispositivi	402
26.8 Modalità di Fabbrica e Modalità di Avvio	403
Modalità di Fabbrica	403
Modalità di Avvio	404

26.1 Domande frequenti sul microinfusore Omnipod 5

Durante l'uso di Omnipod 5, sono state spesso poste domande sui seguenti argomenti, pertanto di seguito sono elencate le cause principali dei problemi e le azioni consigliate.

Problemi relativi al Pod

Problema	Possibile causa	Possibili azioni
Durante l'attivazione del Pod, non è stato emesso alcun segnale acustico di conferma dopo aver riempito il Pod di insulina	Il Pod non è stato riempito con almeno 85 unità di insulina.	Assicurarsi che il Pod contenga almeno 85 unità di insulina. Se il Pod è stato riempito con almeno 85 unità e non vengono emessi 2 segnali acustici, è necessario scartarlo e avviarne uno nuovo.
L'adesivo intorno al Pod continua a sollevarsi dalla pelle	È importante che il Pod rimanga sul corpo per garantire che la cannula rimanga sotto la pelle per l'erogazione dell'insulina. Se l'area in cui si applica il Pod non è pulita e asciutta, l'adesivo potrebbe non aderire bene.	Assicurarsi che la pelle sia pulita e asciutta prima di applicare il Pod. Evitare l'uso di idratanti, oli, balsami, solari o repellenti per insetti intorno al sito. In presenza di una quantità elevata di peli, potrebbe essere necessario tagliarli o radere l'area 24 ore prima di cambiare il Pod. Assicurarsi di rimuovere residui di adesivi precedenti dalla pelle. Insulet ha prodotto uno speciale nastro chiamato PodPals™ che può aiutare a mantenere il Pod acceso più a lungo.

Problema	Possibile causa	Possibili azioni
Attivazione allarme del Pod	Poiché l'erogazione di insulina è fondamentale per la salute dell'utilizzatore, è importante sapere se il Pod smette di funzionare. Il Pod potrebbe smettere di funzionare per molte ragioni, ad esempio se viene rilevata un'ostruzione (occlusione), una scarica elettrostatica influenza il circuito o viene rilevata un'interferenza.	Questo forte rumore continuo ha lo scopo di avvisare che è necessario rimuovere il Pod e sostituirlo con uno nuovo. È possibile provare a disattivare il Pod con l'App Omnipod 5. Occasionalmente, l'App non sarà in grado di comunicare con il Pod e sarà necessario scartare il Pod. In questo caso, è necessario rimuovere il Pod e disabilitare l'interruttore di allarme. Vedere pagina 190 per indicazioni.

Come determinare la quantità di insulina erogata

Problema	Possibili azioni
<p>Dove vedere la quantità di insulina erogata in Modalità Automatizzata</p>	<p>Il Grafico sensore mostra l'ultimo valore glicemico del sensore ricevuto dal Pod e la modalità di erogazione dell'insulina in cui il sistema è in uso (per visualizzare il grafico, toccare VISUALIZZA nella parte inferiore destra della schermata Home). Il grafico mostra anche quando sono stati erogati gli ultimi boli. Nella legenda del grafico è possibile vedere che la sospensione dell'insulina è visualizzata come barra rossa, mentre l'erogazione massima in Modalità Automatizzata è visualizzata come barra arancione.</p> <p>Per conoscere la quantità esatta di insulina erogata in Modalità Automatizzata, andare a: pulsante Menu (☰) > Dettagli Cronologia > EVENTI AUTOMATICI.</p> <p>In questo modo è possibile visualizzare l'ora, il valore glicemico del sensore e la corrispondente quantità di insulina erogata a ogni intervallo di 5 minuti.</p>
<p>Dove trovare la cronologia delle erogazioni di insulina</p>	<p>L'App Omnipod 5 mantiene la cronologia delle precedenti erogazioni di insulina. È possibile controllare qui: pulsante Menu (☰) > Dettagli Cronologia > Sommario. Scorrere verso il basso e cercare le precedenti erogazioni di insulina. Se si tocca la voce, si vedrà come sono stati eseguiti i calcoli per il bolo se è stato utilizzato il Suggestore SmartBolus.</p>

Problemi relativi al Controller

Problema	Possibile causa	Possibili azioni
Il Controller non si accende o lo schermo non è leggibile	Errore del dispositivo.	<p>Provare a riavviare il Controller tenendo premuto il pulsante di accensione per 10 secondi. Il Controller dovrebbe riavviarsi e ristabilire la comunicazione correttamente. Se il problema non si risolve, contattare l'Assistenza clienti Insulet.</p> <p>È importante conservare le impostazioni registrate o annotate in un luogo sicuro, in modo da poter avviare immediatamente un sistema sostitutivo. Insulet non conserva le impostazioni di erogazione dell'insulina dell'utilizzatore.</p>
Lo schermo diventa nero (timeout) troppo presto	L'impostazione Timeout schermo deve essere regolata.	<p>È possibile modificare l'impostazione dello schermo in modo che rimanga acceso più a lungo. Sul Controller, andare a: pulsante Menu (☰) > Impostazioni > Generale > Timeout schermo.</p> <p>Le possibili impostazioni sono 30 secondi, 1 minuto o 2 minuti.</p>
La ricarica del Controller procede lentamente	Utilizzo di un cavo di ricarica o un adattatore non fornito con il kit di prova.	<p>Utilizzare ESCLUSIVAMENTE il cavo caricabatterie in dotazione nella confezione con il Controller. Evitare l'uso di cavi di ricarica alternativi o altri accessori, in quanto possono danneggiare il Controller o avere effetti sulla ricarica in futuro.</p>

Problemi relativi all'App Omnipod 5

Avvertenza: NON applicare un nuovo Pod finché non si è disattivato e rimosso il precedente. Un Pod non correttamente disattivato può continuare a erogare insulina come programmato, esponendo l'utente al rischio di un'erogazione eccessiva di insulina con conseguente ipoglicemia.

Attenzione: NON reimpostare l'App Omnipod 5 prima di aver consultato l'operatore sanitario di riferimento. Questa operazione cancellerà tutte le impostazioni, la Velocità Basale Adattiva e la cronologia e richiederà la modifica del Pod attivo. Prima di procedere, verificare di disporre di una registrazione aggiornata delle impostazioni e di un nuovo Pod con i materiali di consumo da utilizzare al riavvio dell'app.

Problema	Possibile causa	Possibili azioni
Messaggio "Nuovo dispositivo rilevato" ricevuto all'accesso all'App Omnipod 5	Si è attualmente connessi a un altro Controller con il proprio ID Omnipod.	<p>Nota: se si indossa un Pod attivo quando si accede a un nuovo dispositivo, il Pod in uso continuerà a erogare insulina, ma non sarà possibile gestirlo sul nuovo dispositivo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rimuovere il Pod corrente per interrompere l'erogazione di insulina.2. Dopo aver rimosso il Pod corrente, sarà necessario ripetere la procedura di configurazione, inclusa l'associazione di un nuovo Pod e il reinserimento delle informazioni relative al Sensore.

Problema	Possibile causa	Possibili azioni
<p>L'apertura dell'App Omnipod 5 riavvia il processo di configurazione</p>	<p>I dati dell'App per l'App Omnipod 5 sono stati cancellati. Ciò causa la perdita di tutte le impostazioni e della cronologia dell'insulina.</p>	<p>Se si cancellano i dati per l'App Omnipod 5, il Pod corrente continuerà a erogare insulina, ma non sarà possibile gestirlo con l'App Omnipod 5.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rimuovere il Pod corrente per interrompere l'erogazione di insulina. 2. Dopo aver rimosso il Pod corrente, sarà necessario ripetere la procedura di configurazione, inclusa l'associazione di un nuovo Pod e il reinserimento delle informazioni relative al Sensore. <p>Consiglio: se si utilizza Dexcom G6, è possibile ottenere il Numero di serie (NS) del Trasmettitore dall'app Dexcom G6. Se non si sono annotate le proprie impostazioni, contattare l'operatore sanitario di riferimento per assistenza.</p> <p>Nota: la connessione del Sensore e del Pod può richiedere fino a 20 minuti.</p>

26.2 Domande frequenti sul Suggeritore SmartBolus

Problema	Possibile causa	Possibili azioni
Con i carboidrati inseriti e il valore glicemico del sensore disponibile, il Suggeritore SmartBolus consiglia di non erogare alcun bolo o di erogare un valore di insulina pari a 0.	Si è già ricevuta una quantità elevata di insulina (l'IOB è alta) e la tendenza glicemica del sensore è in calo.	<p>È possibile rimuovere il valore glicemico del sensore in modo che il suggeritore suggerisca solo una quantità di bolo per i carboidrati inseriti.</p> <p>In alternativa, è possibile definire una quantità diversa e immetterla direttamente nel campo Bolo totale nella parte inferiore della schermata.</p> <p>Controllare la schermata Calcoli prima di erogare un bolo per vedere in che modo il suggeritore determina il bolo consigliato. Verificare sempre la quantità di bolo prima dell'erogazione per assicurarsi che il sistema eroghi quanto definito.</p>

Problema	Possibili azioni
Ho intenzione di prendere una seconda porzione di una pietanza durante un pasto. Come devo gestire l'erogazione del bolo?	Dopo i pasti, è normale che il glucosio aumenti. Se è già stato erogato il bolo per i carboidrati ed è stato immesso un valore glicemico del sensore o la lettura della glicemia all'inizio di un pasto, è sufficiente inserire i carboidrati relativi alla seconda porzione. Il Suggeritore SmartBolus suggerisce una quantità di bolo per i soli carboidrati.
Generalmente erogo il bolo dopo il pasto, poiché è difficile prevedere quanti carboidrati mangerà mio/a figlio/a. Qual è il modo migliore per utilizzare il Suggeritore SmartBolus in questo caso?	È difficile, soprattutto per i bambini piccoli, prevedere le quantità di cibo assunte a ogni pasto. In questo caso, è possibile scegliere di utilizzare il Suggeritore SmartBolus per erogare il bolo di correzione toccando USA SENSORE o immettendo la lettura della glicemia per erogare dell'insulina prima del pasto. Quando si è pronti, è possibile inserire separatamente i carboidrati nel Suggeritore SmartBolus per erogare il bolo pasto completo.

26.3 Domande frequenti sul Sensore

Dexcom G6

Problema relativo a Dexcom G6	Possibile causa	Possibili azioni
Ho attivato un Pod e non riesco a visualizzare i valori glicemici del sensore nell'App Omnipod 5	Problema con il Sensore o il Trasmettitore.	Controllare l'app Dexcom G6 e, se non vengono mostrati i valori glicemici del sensore, seguire le istruzioni visualizzate.
	Il Numero di serie (NS) del Trasmettitore non è stato inserito nell'App Omnipod 5.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Andare a: pulsante Menu (☰) > Gestisci Sensore. 2. Verificare di aver immesso il NS corretto. All'inizio della connessione, possono essere necessari fino a 20 minuti prima che i valori vengano visualizzati nell'App Omnipod 5.
	Si sta utilizzando il ricevitore Dexcom G6.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utilizzare l'app Dexcom G6 sul proprio smartphone. Il Sistema Omnipod 5 non è compatibile con il ricevitore Dexcom G6. 2. Quindi, spegnere il ricevitore Dexcom G6.

26 Domande frequenti e risoluzione dei problemi

Problema relativo a Dexcom G6	Possibile causa	Possibili azioni
<p>I valori glicemici del sensore non vengono più visualizzati nell'App Omnipod 5. Sono sostituiti da linee tratteggiate. L'app Dexcom G6 non indica la presenza di problemi.</p>	<p>La causa più probabile di questo problema è un'interruzione della comunicazione tra il Trasmettitore e il Pod.</p>	<p>Per ridurre al minimo il rischio di interruzione, assicurarsi che il Sensore, il Trasmettitore e il Pod siano indossati sullo stesso lato del corpo. Le comunicazioni wireless non vengono trasmesse bene attraverso il corpo. Ad esempio, se il Sensore è indossato sull'addome e il Pod si trova sulla parte posteriore del braccio, il segnale potrebbe essere interrotto. Per trarre il massimo dalla Modalità Automatizzata, cercare di tenere il Pod e il Sensore sullo stesso lato del corpo.</p> <p>Si può anche provare a cancellare il Numero di serie (NS) del Trasmettitore e a reinsertarlo.</p> <p>➤ Andare a: pulsante Menu (☰) > Gestisci Sensore.</p> <p>In questo modo si azzerava la comunicazione tra il Trasmettitore e il Pod.</p>
<p>I valori glicemici del sensore sull'app Dexcom G6 sembrano diversi da quelli dell'App Omnipod 5.</p>	<p>L'app Dexcom G6 riceve i valori glicemici direttamente dal Sensore. L'App Omnipod 5 riceve i valori glicemici del sensore dal Pod. Occasionalmente, si verifica un leggero ritardo prima che il valore venga aggiornato sull'App Omnipod 5.</p>	<p>La differenza dovrebbe essere minima.</p> <p>Per aggiornare il valore, avvicinare il Controller al Pod.</p>

FreeStyle Libre 2 Plus

<p>Problema relativo al Sensore FreeStyle Libre 2 Plus</p>	<p>Possibile causa</p>	<p>Possibili azioni</p>
<p>Ho attivato un Pod e non riesco a visualizzare i valori glicemici del sensore FreeStyle Libre 2 Plus nell'App Omnipod 5.</p>	<p>Problema con il Sensore. Il FreeStyle Libre 2 Plus non è selezionato come Sensore nell'App Omnipod 5.</p>	<p>Controllare l'App Omnipod 5. Se non vengono visualizzati i valori glicemici del sensore, seguire le istruzioni visualizzate.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Andare a: pulsante Menu (☰) > Gestisci Sensore. 2. Assicurarsi che FreeStyle Libre 2 Plus sia selezionato. All'inizio della connessione, possono essere necessari fino a 20 minuti prima che i valori vengano visualizzati nell'App Omnipod 5.
<p>I valori glicemici del sensore FreeStyle Libre 2 Plus non vengono più visualizzati nell'App Omnipod 5. Sono sostituiti da linee tratteggiate.</p>	<p>Potrebbe verificarsi un'interruzione della comunicazione tra il Sensore FreeStyle Libre 2 Plus e il Pod.</p>	<p>Per ridurre al minimo il rischio di interruzione, assicurarsi che il Sensore FreeStyle Libre 2 Plus e il Pod siano indossati sullo stesso lato del corpo. Le comunicazioni wireless non vengono trasmesse bene attraverso il corpo. Ad esempio, se il Sensore FreeStyle Libre 2 Plus è indossato sul retro del braccio destro e il Pod si trova sul lato sinistro dell'addome, il segnale potrebbe essere interrotto. Per trarre il massimo dalla Modalità Automatizzata, cercare di tenere il Pod e il Sensore sullo stesso lato del corpo.</p>

Problemi di glicemia alta

Problema	Possibile causa	Possibili azioni
<p>Dopo un paio di settimane di utilizzo del sistema, i valori glicemici del sensore tendono ad aumentare dopo la colazione. Il Rapporto Insulina/Carboidrati è invariato.</p>	<p>Uno dei vantaggi dell'erogazione di insulina automatizzata è la maggiore capacità di mantenere un valore più vicino al Target Glicemico durante la notte. Ciò spesso significa che prima della colazione, i livelli di insulina nel corpo sono inferiori rispetto alla Modalità Manuale.</p>	<p>È comune avere bisogno di variare il Rapporto Insulina/Carboidrati, in genere di ridurlo per ricevere più insulina prima dei pasti (ad esempio, diminuire il valore dei carboidrati coperto da 1 U di insulina). Un'altra impostazione che è possibile modificare è la Correzione Inversa. Quando l'interruttore è attivo (viola), significa che il suggeritore consiglierà una quantità inferiore di insulina nel caso in cui il valore glicemico del sensore o la lettura della glicemia sia inferiore al Target Glicemico.</p> <p>Consultare il proprio operatore sanitario per stabilire insieme le impostazioni più adatte al proprio caso. Le impostazioni del Suggeritore SmartBolus sono disponibili in: pulsante Menu (☰) > Impostazioni > Bolo.</p>

Problema	Possibile causa	Possibili azioni
<p>Dopo l'utilizzo del sistema in Modalità Automatizzata per alcune settimane, i valori glicemici del sensore sono aumentati.</p>	<p>Potrebbe essere necessario regolare il Target Glicemico. Nella Modalità Automatizzata, il Target Glicemico è l'impostazione principale che è possibile controllare per regolare l'erogazione di insulina automatizzata.</p>	<p>Controllare qui il Target Glicemico: pulsante Menu (☰) > Impostazioni > Bolo.</p> <p>Il Target Glicemico può essere impostato tra 6,1 e 8,3 mmol/L (tra 110 e 150 mg/dL). Se i livelli risultano elevati, è possibile provare a ridurre il Target Glicemico per il periodo in cui tali valori sono più alti del previsto.</p>
	<p>Potrebbe essere necessario regolare altre impostazioni del Suggeritore SmartBolus.</p>	<p>Considerare le impostazioni del Suggeritore SmartBolus: in particolare, potrebbe essere necessario regolare il Rapporto Insulina/Carboidrati, il Fattore di Correzione e il Target Glicemico. Ad esempio, se questi periodi di picco sono dopo pranzo, potrebbe essere necessaria più insulina intorno all'ora di pranzo per ridurre la probabilità di raggiungere livelli elevati nel pomeriggio.</p> <p>La modifica dei Programmi Basale o dell'impostazione Basale massima non inciderà sulla funzione in Modalità Automatizzata. Questa funzione è disponibile solo per la Modalità Manuale.</p> <p>Consultare il proprio operatore sanitario per stabilire insieme le impostazioni più adatte al proprio caso.</p>

26 Domande frequenti e risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Possibili azioni
I valori glicemici del sensore sono alti da diversi giorni.	Sebbene il sistema sia in grado di automatizzare l'erogazione di insulina, il fabbisogno insulinico del corpo può variare giornalmente. Ciò significa che ogni giorno con il diabete è diverso.	<p>Si pensi alla dieta, all'esercizio fisico, al sito di inserimento del Pod, al variare delle esigenze dell'organismo e al modo in cui queste influiscono sul livello di glucosio.</p> <p>Il sistema si adatta a ogni nuovo Pod per fornire la giusta quantità di insulina necessaria a raggiungere il Target Glicemico. Poiché il sistema rileva un fabbisogno insulinico più elevato, si adatta di conseguenza al dosaggio di insulina.</p>


Problemi di glicemia bassa

Problema	Possibile causa	Possibili azioni
I valori glicemici del sensore tendono a calare verso tarda sera; è necessario un trattamento per l'ipoglicemia prima di andare a letto.	Potrebbe essere necessario regolare il Target Glicemico per il periodo di tempo interessato così da evitare bassi livelli di glucosio.	Controllare qui il Target Glicemico: pulsante Menu (≡) > Impostazioni > Bolo.
	Se i cali si verificano subito dopo il bolo della cena, potrebbe essere necessario modificare le impostazioni del Suggeritore SmartBolus in modo tale da ricevere meno insulina per il bolo della cena. Un'altra opzione consiste nel controllare quanto tempo è trascorso dall'ultimo bolo.	Consultare il proprio operatore sanitario per stabilire insieme le impostazioni più adatte al proprio caso. Le impostazioni del Suggeritore SmartBolus sono disponibili qui: pulsante Menu (≡) > Impostazioni > Bolo.

26 Domande frequenti e risoluzione dei problemi

Dopo l'attività fisica pomeridiana, i valori glicemici del sensore tendono a calare.	Durante l'attività fisica, il corpo è spesso soggetto a ipoglicemia.	<p>Per ridurre il rischio di questo livello basso, è possibile utilizzare la Funzione Attività fisica. Grazie a questa funzione, il sistema eroga meno insulina e porta l'erogazione fino a un target di 8,3 mmol/L (150 mg/dL). Si consiglia di attivare questa impostazione almeno 30–60 minuti prima di fare esercizio fisico.</p> <p>L'esercizio fisico quando si convive con il diabete richiede tentativi ed errori. È necessario tenere traccia dell'attività, dei carboidrati consumati e dell'erogazione di insulina per trovare il metodo migliore per il proprio caso. L'operatore sanitario di riferimento può indicare diversi modi per gestire con sicurezza il diabete quando si svolge esercizio fisico.</p>
--	--	--

26.4 Domande frequenti relative alla Modalità Automatizzata

Problema	Possibile causa	Possibili azioni
Pod attivato, impossibile passare alla Modalità Automatizzata (con Dexcom G6)	Non è stato immesso il Numero di serie (NS) del Trasmettitore nell'App Omnipod 5.	Andare a: pulsante Menu () > Gestisci Sensore. Consiglio: verificare sempre che le informazioni del Sensore immesse nell'App Omnipod 5 corrispondano al numero sul Sensore che si ha indosso.
Pod attivato, impossibile passare alla Modalità Automatizzata (con FreeStyle Libre 2 Plus)	Il Sensore indossato non corrisponde a quello avviato e associato all'App Omnipod 5 sul Controller.	Attivare un nuovo Sensore FreeStyle Libre 2 Plus e associarlo al Pod con l'App Omnipod 5 sul Controller.

Problema	Possibile causa	Possibili azioni
<p>La schermata mostra la Modalità Automatizzata: Limitata</p>	<p>Interruzione della comunicazione tra il Trasmettitore e il Pod.</p>	<p>Per ridurre al minimo il rischio di interruzione, assicurarsi che il Pod e il Sensore siano indossati sullo stesso lato del corpo. Le comunicazioni wireless non vengono trasmesse bene attraverso il corpo. Ad esempio, se il Sensore è indossato sull'addome e il Pod si trova sulla parte posteriore del braccio, il segnale potrebbe essere interrotto.</p>
	<p>Problema con il Sensore.</p>	<p>Potrebbe essersi verificato un problema di comunicazione temporaneo tra il Pod e il Sensore.</p> <p>Se si utilizza Dexcom G6, controllare l'app Dexcom G6 per determinare se sono presenti valori glicemici del sensore o se la causa della perdita di comunicazione è correlata al Sensore.</p> <p>Se si utilizza FreeStyle Libre 2 Plus, controllare le schermate Notifiche e Gestisci Sensore nell'App Omnipod 5 per ulteriori dettagli su eventuali problemi relativi al Sensore.</p> <p>È possibile decidere di passare alla Modalità Manuale o di attendere che venga ricevuto un valore glicemico del sensore.</p>
	<p>La Modalità Automatizzata potrebbe aver raggiunto i limiti di erogazione dell'insulina relativamente al valore massimo o al valore minimo.</p>	<p>Seguire le istruzioni sullo schermo per controllare il glucosio. Dopo 5 minuti in Modalità Manuale, una volta certi che il Pod e il Sensore funzionino correttamente, è possibile tornare alla Modalità Automatizzata. Vedere pagina 342.</p>

26.5 Problemi di comunicazione del Pod – “Riprova”

Avvertenza: NON applicare un nuovo Pod finché non si è disattivato e rimosso il precedente. Un Pod non correttamente disattivato può continuare a erogare insulina come programmato, esponendo l'utilizzatore al rischio di un'erogazione eccessiva di insulina con conseguente ipoglicemia.

Avvertenza: contattare l'Assistenza clienti OGNI VOLTA che il Controller del Sistema Omnipod 5 si danneggia e non funziona correttamente. Se è necessario sostituire il Controller, consultare SEMPRE l'operatore sanitario di riferimento per ricevere istruzioni sull'utilizzo di altri metodi di erogazione di insulina alternativi, come ad esempio le iniezioni. Assicurarsi di misurare con frequenza il glucosio.

Nessuna comunicazione con il Pod

A volte, quando si indossa un Pod attivo, il Pod e l'App Omnipod 5 non sono in grado di comunicare. In questo caso, viene visualizzato il messaggio “Nessuna comunicazione con il Pod” nella scheda Info Pod. Nella Dashboard verrà inoltre visualizzato il messaggio “Ricerca Pod in corso”.

Se l'App sta tentando di inviare un'istruzione al Pod (ad esempio un bolo), sullo schermo verrà visualizzato un errore e l'App emetterà un segnale acustico ogni 10 secondi fino alla conferma del messaggio.

Cosa fare

- Portare il Controller o lo smartphone compatibile entro una distanza di 1,5 metri (5 piedi) dal Pod attivo per provare a ripristinare la connessione.
- Assicurarsi che nessun altro Pod precedentemente scartato si trovi entro una distanza di 6 metri (20 piedi) dal Controller o dallo smartphone compatibile.
- Se viene visualizzato un errore nell'App, toccare Riprova (o Controlla stato) e seguire le istruzioni sullo schermo per risolvere il problema.
- Attivare e disattivare il Bluetooth, se si utilizza uno smartphone compatibile, e rimuovere gli altri dispositivi eventualmente connessi al Bluetooth.

Se i passaggi precedenti non risolvono il problema di comunicazione, provare le opzioni riportate di seguito.

Ulteriori opzioni per la risoluzione dei problemi

Riavviare l'App Omnipod 5

Controller: tenere premuto il pulsante di accensione per circa 10 secondi, quindi toccare "Spegni". Lasciare che il dispositivo si spenga completamente, quindi riaccenderlo. Questo processo può richiedere circa 20 secondi.

Smartphone compatibile: riavviare lo smartphone compatibile. Una volta riavviato, aprire l'App Omnipod 5 e toccare Riprova (o Controlla stato); la comunicazione dovrebbe essere ripristinata.

Scartare il Pod e attivare un nuovo Pod

Questa opzione deve essere utilizzata solo quando le precedenti procedure di risoluzione dei problemi non hanno risolto il problema di comunicazione nell'App Omnipod 5.

- Selezionare SCARTA POD.
Nota: l'eliminazione del Pod terminerà la comunicazione tra il Pod e l'App Omnipod 5. Il Pod non è disattivato e può ancora erogare insulina.
- Rimuovere il Pod e assicurarsi che si trovi al di fuori del raggio di comunicazione dell'App (circa 6 metri o 20 piedi).
 - Se in precedenza il Pod scartato è stato connesso al Sensore, sarà necessario spostarlo fuori dal raggio d'azione del Sensore (circa 9 metri o 30 piedi) per consentire al nuovo Pod di stabilire la comunicazione con il Sensore.
- Attivare e applicare il nuovo Pod.

Consiglio: quando si verifica un problema di comunicazione, l'App Omnipod 5 offre diverse opzioni di risoluzione. È nell'interesse dell'utilizzatore lasciare le opzioni SCARTA POD o DISATTIVA POD come ultima scelta dopo aver provato le altre.

Errore durante l'invio di comandi per l'insulina al Pod

Quando l'App Omnipod 5 tenta di inviare comandi per l'erogazione di insulina al Pod, potrebbe verificarsi un errore di comunicazione. Se si verifica un errore di comunicazione quando l'App Omnipod 5 tenta di inviare un comando di erogazione dell'insulina, l'App Omnipod 5 offre diverse opzioni.

Se l'App Omnipod 5 ha inviato il comando al Pod e non ha ricevuto conferma dell'esecuzione, l'App Omnipod 5 offre queste opzioni:

26 Domande frequenti e risoluzione dei problemi

- **CONTROLLA STATO:** spostarsi in una nuova posizione, quindi selezionare questa opzione per ricontrollare che il comando sia stato effettuato.
- **DISATTIVA POD:** questa opzione non deve essere la prima scelta. Quando si seleziona questa opzione, è possibile seguire le istruzioni per la sostituzione del Pod.

Se l'App Omnipod 5 non ha inviato al Pod il comando, l'App Omnipod 5 chiede all'utilizzatore di spostarsi in una nuova posizione e di toccare **RIPROVA** per tentare di nuovo di stabilire la comunicazione. Dopo aver toccato **RIPROVA**, se il successivo tentativo di comunicazione fallisce, l'App Omnipod 5 offre queste opzioni:

- **ANNULLA:** selezionare questa opzione per annullare l'invio del comando. In questo caso, il Pod continua con la precedente modalità di erogazione di insulina. Si può provare a inviare il comando più tardi.
- **RIPROVA:** spostarsi in una nuova posizione, quindi selezionare questa opzione per indicare all'App Omnipod 5 di riprovare a inviare il comando al Pod.
- **DISATTIVA POD:** questa opzione non deve essere la prima scelta. Quando si seleziona questa opzione, è possibile seguire le istruzioni per la sostituzione del Pod.

Errore durante l'annullamento di un bolo

Se si tenta di annullare un bolo quando si verifica un errore di comunicazione, diventano disponibili le seguenti opzioni:

- **ANNULLA:** selezionare questa opzione per interrompere il tentativo di annullare il bolo. Il Pod continua a erogare il bolo.
Nota: se il comando "annulla bolo" è già stato inviato, l'opzione **ANNULLA** non è disponibile.
- **RIPROVA:** spostarsi in una nuova posizione, quindi selezionare questa opzione per indicare all'App Omnipod 5 di continuare a tentare di comunicare con il Pod.
- **DISATTIVA POD:** questa opzione non deve essere la prima scelta. Quando si seleziona questa opzione, è possibile seguire le istruzioni per la sostituzione del Pod.

Se il comando "annulla bolo" è già stato inviato dall'App Omnipod 5 quando si verifica un errore di comunicazione, l'App Omnipod 5 offre le seguenti opzioni:

- **CONTROLLA STATO:** selezionare questa opzione per tentare di ristabilire la comunicazione con il Pod e ottenere lo stato corrente del comando "annulla bolo".

- **DISATTIVA POD:** questa opzione non deve essere la prima scelta. Selezionare questa opzione per disattivare il Pod quando l'operazione **CONTROLLA STATO** non va a buon fine.

Errore durante l'attivazione di un Pod

Se si verifica un errore di comunicazione durante l'attivazione del Pod, diventano disponibili le seguenti opzioni:

- **SCARTA POD:** questa opzione non deve essere la prima scelta. Selezionare questa opzione per interrompere il tentativo di utilizzare questo Pod.
- **RIPROVA:** selezionare questa opzione per tentare di ristabilire la comunicazione.

Errore durante la disattivazione di un Pod

Se si verifica un errore di comunicazione durante la disattivazione del Pod, diventano disponibili le seguenti opzioni:

- **SCARTA POD:** selezionare questa opzione se l'opzione **RIPROVA** non ha risolto il problema. In questo modo, l'abbinamento tra il Sistema Omnipod 5 e quel Pod verrà annullato. L'App Omnipod 5 chiede all'utilizzatore di rimuovere il Pod e di toccare **CONTINUA**.
- **RIPROVA:** selezionare questa opzione per tentare di ristabilire la comunicazione.

Nota: dopo aver selezionato l'opzione per scartare il Pod, è possibile prevenire futuri allarmi dal Pod scartato seguendo le istruzioni in "13.9 Silenziamento degli allarmi non risolti" a pagina 190.

Nota: se è presente un bolo non confermato quando si scarta un Pod, il Sistema Omnipod 5 non può sapere il quantitativo di bolo che è stato erogato. Pertanto, il Sistema Omnipod 5 disattiva temporaneamente il Suggeritore SmartBolus per un periodo pari all'impostazione Durata dell'azione dell'insulina. Se si tocca il pulsante Bolo mentre il Suggeritore SmartBolus è disabilitato, l'App Omnipod 5 visualizza il messaggio "Suggeritore SmartBolus temporaneamente disabilitato". È possibile erogare un bolo manuale quando il Suggeritore SmartBolus è disabilitato.

26.6 Informazioni su come mantenere il Controller Omnipod 5 nelle vicinanze

Il Controller serve per attivare un nuovo Pod ogni 2–3 giorni. Dopo aver attivato un Pod, si inizierà a ricevere insulina in base al Programma Basale attivo in Modalità Manuale, indipendentemente dal fatto che il Controller sia o meno nelle vicinanze. Tuttavia, sarà necessario accedere

26 Domande frequenti e risoluzione dei problemi

all'app per risolvere eventuali avvisi o allarmi che potrebbero provenire dal Pod, per erogare un bolo o per controllare lo stato del sistema e dei livelli di glucosio.

Dopo aver immesso un Numero di serie (NS) del Trasmettitore Dexcom G6 attivo nell'App Omnipod 5 o aver avviato un Sensore FreeStyle Libre 2 Plus con l'App Omnipod 5, è possibile passare dalla Modalità Manuale alla Modalità Automatizzata. In Modalità Automatizzata, il Pod riceve direttamente i valori glicemici del sensore in modalità wireless e automatizza l'erogazione di insulina in base alle esigenze.

Il sistema è progettato per continuare a erogare insulina in assenza del Controller, pertanto non si riceverà alcun avviso che il Pod e il dispositivo di visualizzazione sono fuori distanza di comunicazione qualora il Controller non si trovi nelle vicinanze.

Sebbene il Sistema Omnipod 5 non richieda che il Controller sia nelle vicinanze per continuare l'erogazione di insulina in Modalità Manuale o Modalità Automatizzata, il Controller fornisce importanti informazioni sull'erogazione di insulina recente, sugli avvisi e gli allarmi provenienti dal Pod e consente l'erogazione di boli.

Attenzione: EVITARE di lasciare il Controller in un luogo che impedisce di sentire allarmi e notifiche dell'App Omnipod 5. Se ci si allontana dal Controller, l'erogazione di insulina in Modalità Manuale o Modalità Automatizzata prosegue come da programma.

26.7 Reclami sui dispositivi

Se, durante l'uso di questo dispositivo o in seguito al suo utilizzo si è verificato un incidente grave, segnalarlo al produttore e/o al suo rappresentante autorizzato e all'autorità nazionale.

I recapiti del produttore sono riportati sul retro di copertina di questo documento (vedere "Contatti e informazioni importanti" a pagina i). I recapiti delle autorità nazionali competenti (punti di contatto per la vigilanza) e ulteriori informazioni sono disponibili al sito web della Commissione europea all'indirizzo: https://ec.europa.eu/health/md_sector/contact_en

In caso di problemi con il sistema, contattare l'Assistenza clienti. Può essere richiesto di condividere i dati del dispositivo.

È possibile farlo come segue:

1. Verificare che la connessione Wi-Fi funzioni.


2. Andare a: pulsante Menu (≡) > Informazioni su.
3. Toccare Invia file all'Assistenza clienti.
4. Immettere il PIN fornito dall'Assistenza clienti.

Se viene visualizzato un punto esclamativo (!), avvisare il rappresentante dell'Assistenza clienti. Passare alla schermata Home per cancellare l'icona (!). Se l'icona è ancora visualizzata, riavviare il Controller.

In questo caso: il caricamento dati è in sospeso.



In questo caso: il caricamento dati è completo.

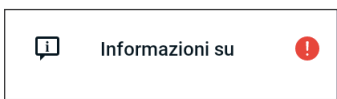

26.8 Modalità di Fabbrica e Modalità di Avvio

Modalità di Fabbrica

La Modalità di Fabbrica può essere visualizzata tenendo premuto il pulsante RIDUCI volume mentre si preme il pulsante di accensione. Ciò si verifica in genere quando si accende il Controller.

Poiché il touchscreen non funziona in questa modalità, è necessario navigare tra le opzioni utilizzando i pulsanti del volume. Utilizzare il pulsante di accensione per selezionare l'opzione evidenziata.

Nel menu Modalità di Fabbrica, le opzioni sono "Versione" e "Riavvia". La selezione viene evidenziata con uno sfondo blu e testo di colore giallo.

1. Premere il pulsante Riduci volume per spostare la barra evidenziata sull'opzione "Riavvia".
2. Premere il pulsante di accensione per selezionare l'opzione "Riavvia".

Nota: se si seleziona per errore l'opzione Versione, premere il pulsante Riduci volume fino a evidenziare l'opzione Indietro nell'angolo in basso a destra dello schermo. Premere il pulsante di accensione per tornare alla schermata Modalità di Fabbrica.

3. Il Controller si riavvia e inizia il normale funzionamento dopo aver selezionato Riavvia.

Modalità di Avvio

La Modalità di Avvio può essere visualizzata tenendo premuto il pulsante AUMENTA volume mentre si preme il pulsante di accensione. Ciò si verifica in genere quando si accende il Controller.

Poiché il touchscreen non funziona in questa modalità, è necessario navigare tra le opzioni utilizzando i pulsanti del volume. Utilizzare il pulsante di accensione per selezionare l'opzione evidenziata.

Nel menu Modalità di Avvio, le opzioni sono “Modalità di Ripristino”, “Modalità di Avvio Rapido” e “Modalità Normale”. La selezione viene evidenziata con il simbolo <<= orientato verso l'opzione.

1. Premere il pulsante Aumenta volume sul Controller fino a quando <<== non punta verso l'opzione di Avvio Normale.
2. Premere il pulsante Riduci volume sul Controller per effettuare la selezione.
3. Il Controller si riavvia e inizia il normale funzionamento dopo aver selezionato Normale.

Nota: se si seleziona per errore “Ripristino” o “Avvio rapido”, è necessario eseguire un Riavvio Forzato. Per eseguire il Riavvio Forzato del Controller, tenere premuto il pulsante di accensione per 7–10 secondi finché lo schermo non si spegne e si riavvia.

Appendice

Riepilogo delle impostazioni e delle opzioni

Le opzioni per le diverse impostazioni Sistema Automatizzato di Erogazione di Insulina Omnipod 5 sono:

Formato ora	Formato 12 o 24 ore
Fuso orario	Dalle 11:00 alle 13:00 GMT
Ora legale	ON oppure OFF. Impostazione predefinita in base alla data e al fuso orario.
Formato data	GG/MM/AAAA
Timeout schermo	30, 60, 120 secondi. L'impostazione predefinita è 30 secondi.
PIN	4 cifre da 0 a 9.
Numero di serie (NS) del Trasmettitore Dexcom G6	6 caratteri.
Velocità basale massima	Selezionare un valore compreso tra 0,05 e 30 U/h con incrementi di 0,05 U/h. L'impostazione predefinita è 3,00 U/h.
Velocità basale	Unità/ora. Intervallo: da 0 U/h alla Velocità basale massima con incrementi di 0,05 U/h.
Programmi Basale	Massimo 12.
Segmenti di velocità basale	24 per Programma Basale.
Funzione Attività fisica	Intervallo: da 1 a 24 ore A incrementi di 1 ora
Basale Temporanea	%, unità/ora oppure OFF. L'impostazione predefinita è OFF. Durata: da 30 min a 12 ore con incrementi di 30 min.
Basale Temporanea (impostata come %)	Intervallo: da diminuzione del 100% (0 U/h) ad aumento del 95% dalla velocità basale corrente con incrementi del 5%. Non può superare la Velocità basale massima.
Basale Temporanea (impostata come U/h)	Intervallo: da 0 U/h a Velocità basale massima con incrementi di 0,05 U/h.

Appendice

Obiettivo glicemico (per cronologia glicemica)	Limiti inferiore e superiore: da 3,9 a 11,1 mmol/L (da 70 a 200 mg/dL) con incrementi di 0,1 mmol/L (1 mg/dL).
Promemoria glicemia	ON oppure OFF. L'impostazione predefinita è OFF. Massimo 4 attivi contemporaneamente. Un promemoria può essere impostato tra 30 minuti e 4 ore dopo l'inizio del bolo, con incrementi di 30 minuti.
Valore Target Glicemico	Massimo 8 segmenti; da 6,1 a 8,3 mmol/L (da 110 a 150 mg/dL) con incrementi di 0,55 mmol/L (10 mg/dL).
Soglia Correggi se superiore a	Massimo 8 segmenti; da Target Glicemico a 11,1 mmol/L (200 mg/dL) con incrementi di 0,1 mmol/L (1 mg/dL).
Glicemia Minima per il Suggeritore di Bolo	da 2,8 a 3,9 mmol/L (da 50 a 70 mg/dL) con incrementi di 0,1 mmol/L (1 mg/dL) L'impostazione predefinita è 3,9 mmol/L (70 mg/dL).
Rapporto Insulina/Carboidrati (IC)	Massimo 8 segmenti; da 1 a 150 g carboidrati/U con incrementi di 0,1 g carboidrati/U.
Fattore di Correzione (di sensibilità)	Massimo 8 segmenti; da 0,1 a 22,2 mmol/L (da 1 a 400 mg/dL) con incrementi di 0,1 mmol/L (1 mg/dL). L'impostazione predefinita è 2,8 mmol/L (50 mg/dL).
Correzione Inversa	ON oppure OFF. L'impostazione predefinita è ON.
Durata dell'azione dell'insulina	Da 2 a 6 ore con incrementi di 30 minuti. L'impostazione predefinita è 4 ore.
Dimensioni del bolo	Intervallo: da 0,05 a 30 U con incrementi di 0,05 U.
Bolo prolungato	%, unità oppure OFF. L'impostazione predefinita è OFF. Da 30 minuti a 8 ore con incrementi di 30 minuti.
Sospendi insulina	Da 30 minuti a 2 ore.
Avviso Insulina nel Pod in esaurimento	Da 10 a 50 unità con incrementi di 1 unità. L'impostazione predefinita è 10,0 unità.
Notifica Scadenza Pod	Da 1 a 24 ore con incrementi di 1 ora. L'impostazione predefinita è 4 ore.
Timer Spegnimento Pod	OFF oppure da 1 a 24 ore con incrementi di 1 ora. L'impostazione predefinita è OFF.
Display schermo Cronologia	Periodo continuo di 90 giorni.
Lingua	Varie lingue

Specifiche del Pod

Dimensioni: larghezza 3,9 cm x lunghezza 5,2 cm x altezza 1,45 cm (1,53" x 2,05" x 0,57")

Peso (senza insulina): 26 grammi (0,92 once)

Intervallo di temperatura di esercizio: ambiente di esercizio del Pod: da 5°C a 40°C (da 41°F a 104°F).

Temperatura di avviamento: superiore a 10°C (50°F)

Intervallo di temperatura di conservazione: da 0°C a 30°C (da 32°F a 86°F)

Tempo di riscaldamento (da 0°C a 20°C [da 32°F a 68°F]): 7 minuti

Tempo di raffreddamento: non è necessario il raffreddamento dalla temperatura di conservazione massima (30°C [86°F]) alla temperatura di esercizio.

Volume del serbatoio (erogabile): 200 unità

Profondità di inserimento della cannula: da 4 a 7 mm (da 0,16" a 0,28")

Profondità dell'infusione di insulina: ≥ 4 mm ($\geq 0,16$ ")

Grado di protezione IP (Ingress Protection) per umidità e polvere: IP28 (protezione dal contatto con dita e oggetti di dimensioni pari o superiori a 12,5 millimetri (0,5")); protezione dall'acqua fino a una profondità di 7,6 metri (25 piedi) per un massimo di 60 minuti)

Concentrazione di insulina: U-100

Tipo di allarme: acustico. Uscita: ≥ 45 db(A) a 1 metro

Agente sterilizzante: sterilizzato con ossido di etilene

Intervallo di umidità relativa di esercizio: dal 20 all'85%, senza condensa

Intervallo di umidità relativa di conservazione: dal 20 all'85%, senza condensa

Pressione atmosferica di esercizio: da 700 hPa a 1.060 hPa

Pressione atmosferica di conservazione: da 700 hPa a 1.060 hPa

Apirogeno: solo passaggio di liquidi

Parte applicata di tipo BF: protezione dalle scosse elettriche

Pressione di infusione massima: 35 psi

Volume di infusione massimo in condizioni di guasto singolo: 0,05 U

Capacità di flusso:

Prime rate: 0,05 unità al secondo

Basale: programmabile dall'utilizzatore con incrementi di 0,05 U fino a 30,0 U all'ora

Velocità bolo: 1,5 unità al minuto. Intervallo dose: da 0,05 a 30,0 unità

Accuratezza erogazione (testata in conformità alla normativa IEC 60601-2-24):


Basale: $\pm 5\%$ a velocità $\geq 0,05$ U/h

Bolo: $\pm 5\%$ per quantità $\geq 1,0$ unità

$\pm 0,05$ unità per quantità $< 1,0$ unità

Nota: quando si imposta la dose di bolo, è necessario tener conto della sua accuratezza. Quando si utilizza la dose di bolo più bassa consentita (0,05 unità), il bolo effettivo erogato può essere compreso tra minimo 0,00 e massimo 0,10 unità.

Risultati del test di accuratezza: il grafico seguente illustra l'accuratezza del flusso del Pod in relazione a determinati periodi di tempo. Le misurazioni sono state effettuate utilizzando un Pod con una velocità basale di 0,5 $\mu\text{L/h}$ (che eroga 0,05 U/h di insulina U-100) a una temperatura di funzionamento elevata. La percentuale media complessiva di errore del flusso è risultata pari a 1,40%.

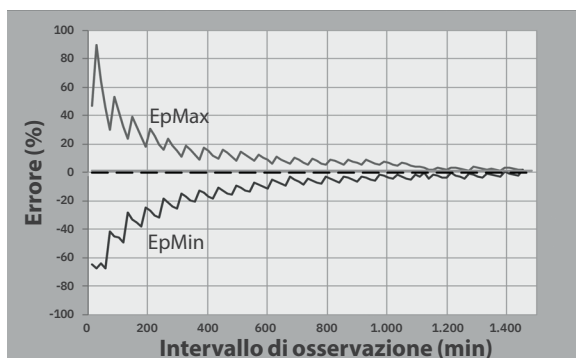

Specifiche del Controller

Dimensioni: altezza 143,92 mm x larghezza 67,57 mm x profondità 12,33 mm (5,67" x 2,66" x 0,49")

Peso: 165 grammi (5,82 onces)

Superficie attiva dello schermo: larghezza 56,16 mm x altezza 120,58 mm (2,21" x 4,75")

Intervallo di temperatura di esercizio: da 5°C a 40°C (da 41°F a 104°F)

Intervallo di temperatura di conservazione: da 0°C a 30°C (da 32°F a 86°F)

Intervallo di umidità relativa di esercizio: dal 20% al 90%, senza condensa

Intervallo di umidità relativa di conservazione: dal 20% al 90%, senza condensa

Pressione atmosferica di esercizio: da 700 hPa a 1.060 hPa

Pressione atmosferica di conservazione: da 700 hPa a 1.060 hPa

Distanza di comunicazione: il Controller e il Pod devono essere disposti:

- All'avvio: uno accanto all'altro e devono essere a contatto, il Pod può trovarsi sia nel vassoio sia fuori, per garantire una corretta comunicazione durante il priming.
- Durante l'uso normale: entro 1,5 metri (5 piedi) l'uno dall'altro. A seconda della posizione, la distanza di comunicazione può arrivare fino a 15 metri (50 piedi).

Tipo di allarme: acustico. Uscita: ≥ 45 db(A) a 1 metro

Grado di protezione IP (Ingress Protection) per umidità e polvere: IP22 (protezione dal contatto con dita e oggetti di dimensioni pari o superiori a 12,5 millimetri; protezione non garantita dall'acqua - evitare il contatto con liquidi)

Tipo di notifica: acustica con vibrazione

Batteria: batteria ricaricabile agli ioni di litio; 3,8 V; 2.800 mAh

Autonomia operativa: la ricarica completa permette circa 36 ore di impiego tipico

Durata del Controller: circa 2 anni (sulla base di 300-500 cicli di ricarica) di impiego tipico

Durata di conservazione (kit di prova): 18 mesi

Tensione di rete del caricabatterie: da 100 a 240 V CA, 50/60 Hz

Con il Controller, utilizzare solo l'adattatore di alimentazione approvato per Noetic (Insulet PN PT-000428).


Specifiche di Dexcom

Per informazioni sulle specifiche di esercizio di Dexcom, consultare le *Istruzioni per l'uso del sistema CGM Dexcom G6*.

Specifiche del Sensore FreeStyle Libre 2 Plus

Per informazioni sulle specifiche di esercizio del Sensore FreeStyle Libre 2 Plus, consultare il *Manuale d'uso di FreeStyle Libre 2 Plus*.


Principio di funzionamento per il sistema di controllo fisiologico a circuito chiuso

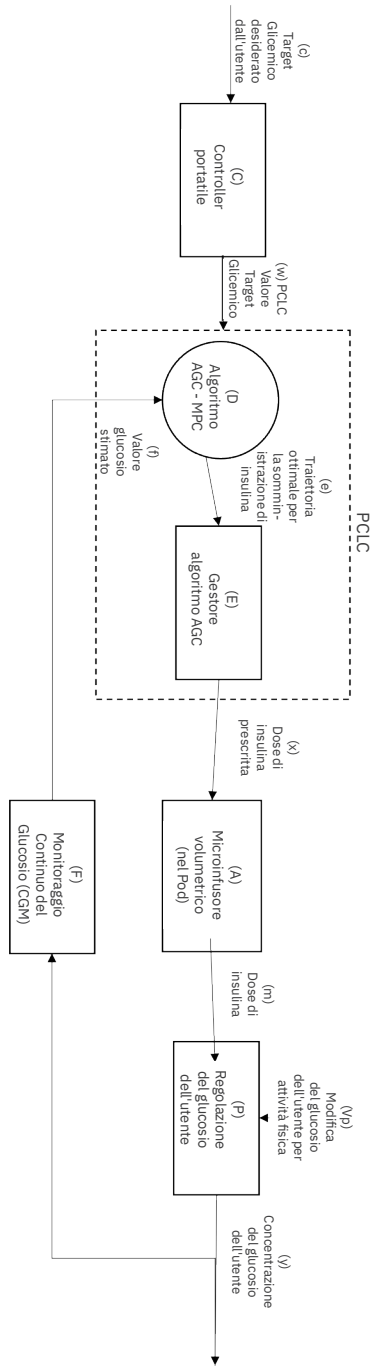

Protezione da infusione eccessiva o insufficiente

Il software del Pod monitora la velocità di infusione. Nel caso venga rilevato un errore che potrebbe esporre a rischio di infusione eccessiva o insufficiente e non sia possibile correggerlo, l'erogazione di insulina viene interrotta e viene emesso un allarme acustico.

Rilevamento di ostruzioni (occlusioni)

Avvertenza: monitorare SEMPRE il glucosio e, quando si interrompe l'erogazione di insulina a causa di un'ostruzione (occlusione), attenersi alle linee guida terapeutiche dell'operatore sanitario di riferimento. Il mancato intervento tempestivo può comportare una somministrazione insufficiente di insulina con conseguente iperglicemia o chetoacidosi diabetica (DKA) (vedere “ Rilevata ostruzione” a pagina 169).

Attenzione: controllare SEMPRE con frequenza il glucosio quando si utilizzano velocità basali molto basse. Il controllo regolare del glucosio può essere utile nel rilevamento della presenza di un'ostruzione (occlusione). Le ostruzioni possono provocare iperglicemia.

Un'ostruzione (occlusione) è un'interruzione dell'erogazione di insulina dal Pod. Se il Sistema Omnipod 5 rileva un'ostruzione, viene emesso un Allarme di Pericolo e si richiede la disattivazione e la sostituzione del Pod.

Quando si verifica una mancata erogazione di una media da 3 a 5 unità di insulina, viene emesso un Allarme di Pericolo di ostruzione. La tabella seguente illustra il rilevamento dell'ostruzione in tre diverse situazioni quando si usa insulina U-100. A titolo di esempio, se la cannula del Pod viene ostruita durante l'erogazione di un bolo di 5 unità, possono trascorrere 35 minuti prima che il Pod emetta un Allarme di Pericolo.

	Tempo tra l'ostruzione e l'allarme del Pod	
	Tempo tipico	Tempo massimo
Bolo di 5,00 U	33 minuti	35 minuti
Basale di 1,00 U/h	3,0 ore	5,5 ore
Basale di 0,05 U/h	51 ore	80 ore (scadenza del Pod)

Se l'ostruzione si risolve spontaneamente, il sistema potrebbe erogare un volume di insulina che in nessun caso può essere superiore al volume di insulina programmato previsto per l'erogazione.

Se il Sistema Omnipod 5 rileva una potenziale ostruzione dell'erogazione di insulina, attiverà un allarme di ostruzione. Se questo è impostato

per essere emesso mentre è in corso un bolo immediato, l'allarme viene posticipato fino al completamento del bolo.

Caratteristiche prestazionali

Il microinfusore Omnipod 5 eroga l'insulina in due modi: erogazione di insulina basale (continua) ed erogazione di bolo di insulina. I seguenti dati sull'accuratezza sono stati raccolti su entrambi i tipi di erogazione negli studi di laboratorio condotti da Insulet.

La Sintesi relativa alla sicurezza e alla prestazione clinica (SSCP, Summary of Safety and Clinical Performance) è disponibile all'indirizzo www.omnipod.com/sscp. L'SSCP è inoltre disponibile nel sito web della banca dati europea dei dispositivi medici (EUDAMED) (<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>) dove è collegata all'UDI-DI di base. L'UDI-DI di base per Omnipod 5 è 038508AIDSH.

Caratterizzazione delle prestazioni di erogazione

Erogazione basale: per valutare l'accuratezza dell'erogazione basale, sono stati testati 12 Pod erogando a velocità basali bassa, media e alta (0,05; 1,00 e 30,0 U/h). L'acqua è stata utilizzata in sostituzione dell'insulina. L'acqua è stata pompata in un contenitore su una bilancia ed è stato utilizzato il peso del liquido in vari punti temporali per valutare l'accuratezza del pompaggio.

Nelle tabelle seguenti sono riportate le prestazioni basali tipiche (mediane) osservate, insieme ai risultati più bassi e più alti osservati per le impostazioni di velocità basale bassa, media e alta per tutti i microinfusori sottoposti a prove senza periodo di riscaldamento. Per ciascun periodo di tempo, è indicato il volume di insulina richiesto nella prima riga e quello erogato misurato dalla scala nella seconda.

Prestazioni di erogazione a velocità basale bassa (0,05 U/h)

Durata basale (numero di unità richieste)	1 ora (0,05 U)	6 ore (0,30 U)	12 ore (0,60 U)
Quantità erogata	0,049 U	0,30 U	0,59 U
[min., max.]	[0,00; 0,12]	[0,13; 0,57]	[0,34; 0,99]

Prestazioni di erogazione a velocità basale media (1,00 U/h)

Durata basale (numero di unità richieste)	1 ora (1,00 U)	6 ore (6,00 U)	12 ore (12,00 U)
Quantità erogata	0,99 U	5,97 U	11,88 U
[min., max.]	[0,65; 1,55]	[5,06; 6,87]	[10,53; 13,26]

Prestazioni di erogazione a velocità basale alta (30,00 U/h)		
Durata basale (numero di unità richieste)	1 ora (30,00 U)	6 ore (180,00 U)
Quantità erogata	29,82 U	179,33 U
[min., max.]	[28,85; 31,39]	[177,49; 181,15]

Nota: una misurazione nel periodo di 12 ore con una velocità basale di 30,0 U/h non è applicabile al Sistema Omnipod 5 poiché il serbatoio si svuota in circa 6 2/3 ore a questa velocità.

Erogazione di bolo: per valutare l'accuratezza dell'erogazione del bolo, sono stati testati 12 Pod erogando una quantità di bolo minima, intermedia e massima (0,05; 5,00 e 30,0 unità). L'acqua è stata utilizzata in sostituzione dell'insulina. L'acqua è stata pompata in un contenitore su una bilancia e il peso del liquido erogato è stato utilizzato per valutare la precisione del pompaggio.

Nella tabella seguente sono riepilogate le prestazioni tipiche del bolo osservate per le dimensioni del bolo minimo, intermedio e massimo richiesto per tutti microinfusori sottoposti a prove. Per ciascuna dimensione target del bolo, viene visualizzato il numero di boli osservati insieme alle unità medie (media), minime e massime erogate, misurate secondo una scala.

Bolo singolo Prestazioni di accuratezza	Bolo target Dimensioni (unità)	Bolo medio Dimensioni (unità)	Bolo minimo Dimensioni (unità)	Bolo massimo Dimensioni (unità)
Prestazioni di erogazione del bolo minimo (n = 5.987 boli)	0,05 U	0,050 U	0,00 U	0,119 U
Prestazioni di erogazione del bolo intermedio (n = 300 boli)	5,00 U	5,01 U	4,49 U	5,37 U
Prestazioni di erogazione del bolo massimo (n = 72 boli)	30,00 U	30,05 U	29,56 U	30,62 U

Le tabelle seguenti mostrano per ogni dimensione di bolo richiesta l'intervallo della quantità di insulina osservata erogata rispetto alla quantità richiesta. Ogni tabella riporta il numero e la percentuale delle dimensioni del bolo erogato osservate nell'intervallo specificato.

Quantità di insulina da erogare per una richiesta di bolo minimo (0,05 U)

Quantità (unità)	< 0,0125	0,0125–0,0375	0,0375–0,045	0,045–0,0475	0,0475–0,0525
(% delle impostazioni)	(< 25%)	(25–75%)	(75–90%)	(90–95%)	(95–105%)
Numero e percentuale di boli nell'intervallo	61/5.987 (1%)	639/5.987 (10,7%)	1.284/5.987 (21,4%)	504/5.987 (8,4%)	1.100/5.987 (18,4%)
Quantità (unità)	0,0525–0,055	0,055–0,0625	0,0625–0,0875	0,0875–0,125	> 0,125
(% delle impostazioni)	(105–110%)	(110–125%)	(125–175%)	(175–250%)	(> 250%)
Numero e percentuale di boli nell'intervallo	504/5.987 (8,4%)	1.192/5.987 (19,9%)	582/5.987 (9,7%)	121/5.987 (2%)	0/5.987 (0%)

Quantità di insulina da erogare per una richiesta di bolo intermedio (5,00 U)









Quantità (unità)	< 1,25	1,25–3,75	3,75–4,50	4,50–4,75	4,75–5,25
(% delle impostazioni)	(< 25%)	(25–75%)	(75–90%)	(90–95%)	(95–105%)
Numero e percentuale di boli nell'intervallo	0/300 (0%)	0/300 (0%)	1/300 (0,3%)	4/300 (1,3%)	287/300 (95,7%)
Quantità (unità)	5,25–5,50	5,50–6,25	6,25–8,75	8,75–12,50	> 12,50
(% delle impostazioni)	(105–110%)	(110–125%)	(125–175%)	(175–250%)	(> 250%)
Numero e percentuale di boli nell'intervallo	8/300 (2,7%)	0/300 (0%)	0/300 (0%)	0/300 (0%)	0/300 (0%)


Quantità di insulina da erogare per una richiesta di Bolo massimo (30,0 U)








Quantità (unità)	< 7,5	7,5–22,5	22,5–27,0	27,0–28,5	28,5–31,5
(% delle impostazioni)	(< 25%)	(25–75%)	(75–90%)	(90–95%)	(95–105%)
Numero e percentuale di boli nell'intervallo	0/72 (0%)	0/72 (0%)	0/72 (0%)	0/72 (0%)	72/72 (100%)
Quantità (unità)	31,5–33,0	33,0–37,5	37,5–52,5	52,5–75,0	> 75,0
(% delle impostazioni)	(105–110%)	(110–125%)	(125–175%)	(175–250%)	(> 250%)
Numero e percentuale di boli nell'intervallo	0/72 (0%)	0/72 (0%)	0/72 (0%)	0/72 (0%)	0/72 (0%)

Simboli sulle etichette del Sistema Omnipod 5

I seguenti simboli sono presenti sul Sistema Omnipod 5 o sulla sua confezione:

Simbolo	Significato	Simbolo	Significato
	Esclusivamente monouso		Non sicuro in ambiente MRI
	Leggere il manuale/ libretto delle istruzioni		Non utilizzare se la confezione è danneggiata e consultare le istruzioni per l'uso
	Sterilizzato con ossido di etilene		Dispositivo medico di tipo BF
	Data di produzione		Produttore
	Numero di lotto		Tenere asciutto
	Data di scadenza		Limiti di temperatura
	Numero di catalogo		Limiti di umidità
	Numero di serie		Limiti di pressione atmosferica
IP28	Protezione delle persone dall'accesso a parti pericolose con le dita e dall'ingresso di corpi estranei solidi di diametro pari o superiore a 12,5 mm (0,5 pollici); immergibile: impermeabile fino a 7,6 metri (25 piedi) per un massimo di 60 minuti	IP22	Protezione delle persone dall'accesso a parti pericolose con le dita e dall'ingresso di corpi estranei solidi di diametro pari o superiore a 12,5 mm (0,5 pollici); evitare il contatto con liquidi
	Via di infusione apirogena		Dispositivo medico
	Smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche separatamente dai normali rifiuti.	RoHS	Conforme alla normativa RoHS

Simbolo	Significato	Simbolo	Significato
	Sistema di barriera sterile singola		Singolo paziente – uso multiplo
	Compatibile solo con insulina U-100		Consultare le istruzioni per l'uso o consultare le istruzioni per l'uso in formato elettronico
FCC ID:	Identificatore con numero della Commissione federale per le comunicazioni	Rx ONLY	Attenzione: la legge federale limita la vendita di questo dispositivo ai soli medici o su prescrizione medica
	Rappresentante autorizzato in Svizzera		Rappresentante autorizzato nella Comunità europea/ Unione Europea
	Marchio di conformità		Importatore
	Conformità per il Regno Unito		Marchio di certificazione di prodotto autorizzato Intertek
	(Francia) Il Triman indica che il prodotto deve essere smistato o restituito a un punto di raccolta.		(Francia) Questo pittogramma indica che il prodotto contiene un oggetto perforante.
	(Francia) Ai fini del riciclaggio, questo prodotto deve essere separato dagli oggetti taglienti DASTRI convenzionali.		(France) All pharmacies distribute and collect DASTRI needle boxes free of charge from self-treatment patients.
	(Francia) I rifiuti elettronici perforanti devono essere conservati nel contenitore viola sicuro DASTRI. Questi contenitori viola sono distribuiti gratuitamente nelle farmacie.		(Francia) I rifiuti a rischio di puntura devono essere collocati in un contenitore per aghi DASTRI. Questi contenitori per aghi sono distribuiti dalle farmacie.

Simbolo	Significato	Simbolo	Significato
	(Francia) Confezione destinata al riciclo		Adattatore di ricarica
	Cavo di ricarica		Pod
	Gruppo di riempimento formato da siringa e ago		Controller Omnipod 5
	Pellicola controller		

Sistema Omnipod 5 Avviso relativo alle interferenze

Attenzione: NON apportare cambiamenti o modifiche ad alcun componente del Sistema Omnipod 5 che non siano stati autorizzati da Insulet Corporation. La manomissione non autorizzata del sistema può revocare il diritto di utilizzarlo.

Il Sistema Automatizzato di Erogazione di Insulina Omnipod 5 è progettato per essere conforme alla Parte 15 delle norme FCC (Federal Communications Commission). L'utilizzo del sistema è subordinato alle due condizioni seguenti:

1. I dispositivi in questione non devono causare interferenze nocive.
2. I dispositivi in questione devono tollerare eventuali interferenze esterne, comprese quelle che possono causare alterazioni nel funzionamento.

Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stati concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che tali interferenze non si verifichino in una data installazione.

Se l'apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio-televisiva, si consiglia all'utilizzatore di provare a correggere l'interferenza adottando una delle seguenti misure:

- Spostare o riposizionare il Sistema Omnipod 5.
- Aumentare la distanza di separazione tra il Sistema Omnipod 5 e il dispositivo che emette o riceve l'interferenza.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per ricevere assistenza.

Qualità del servizio

Il Sistema Omnipod 5 prevede due percorsi di trasmissione wireless. Insulet determina la qualità del servizio del Sistema Omnipod 5 per ciascuno dei due percorsi:

Definizione della comunicazione wireless tra l'App e il Pod Omnipod 5

Corretto trasferimento di comandi, dati e allarmi tra il Controller e il Pod nel raggio di comunicazione, entro 1,5 metri (5 piedi) durante l'uso normale. In caso di esito negativo del trasferimento di comandi, dati e allarmi, l'App Omnipod 5 informa l'utilizzatore. Per i comandi di erogazione dell'insulina, i requisiti prestazionali del sistema dichiarano che la comunicazione tra il Pod e il Controller avviene entro 8 secondi con un tasso di affidabilità del 95%. L'App Omnipod 5 informa l'utilizzatore in presenza di errori di comunicazione tra il Pod e il Controller. Quando si verifica tale errore, l'App Omnipod 5 emette un segnale acustico ogni 10 secondi e l'errore di comunicazione rimane sempre indicato nell'App Omnipod 5 fino a quando non viene risolto.

Definizione della comunicazione wireless tra Pod e sensore

Percentuale di valori glicemici del sensore ricevuti correttamente dal Pod quando tentano di comunicare tra loro ogni 5 minuti. I requisiti prestazionali del sistema dichiarano che il Pod riceverà correttamente almeno l'80% dei valori glicemici del sensore quando quest'ultimo viene indossato entro la linea di vista del Pod. Il sistema informa l'utilizzatore dell'assenza dei valori glicemici del sensore in tempo reale tramite dei trattini nella schermata Home o dei punti mancanti nel Grafico sensore.

Per ulteriori informazioni sugli errori di comunicazione nel Sistema Omnipod 5, consultare il Capitolo 21. Per garantire la qualità del servizio in presenza di altri dispositivi che operano nella banda a 2,4 GHz, il Sistema Omnipod 5 utilizza le funzionalità di coesistenza offerte dalla tecnologia wireless Bluetooth®.

Compatibilità elettromagnetica

Le informazioni contenute in questa sezione (quali le distanze di separazione) riguardano, in linea di massima, specificatamente il Sistema Omnipod 5. I dati forniti non assicurano un funzionamento impeccabile, ma dovrebbero fornire una ragionevole garanzia in proposito. Queste informazioni potrebbero non applicarsi ad altre apparecchiature elettromedicali; le apparecchiature meno recenti potrebbero essere particolarmente soggette a interferenze.

Informazioni di carattere generale

Il Sistema Omnipod 5 è stato testato ed è risultato essere in grado di garantire un'immunità accettabile alle emissioni dai sistemi RFID ed EAS.

Il Sistema Omnipod 5 è progettato per l'uso negli ambienti elettromagnetici specificati di seguito. Il cliente o l'utilizzatore del sistema deve assicurarsi che l'utilizzo avvenga in ambienti conformi alle specifiche.

Le apparecchiature elettromedicali richiedono particolari precauzioni riguardo alla compatibilità elettromagnetica (EMC) e devono essere installate e utilizzate in conformità alle relative informazioni fornite nel presente documento e nelle istruzioni per l'uso. In caso di malfunzionamento del Sistema Omnipod 5 imputabile a interferenze elettromagnetiche, potrebbe essere necessario sostituirlo.

Le apparecchiature di comunicazione in radiofrequenza (RF) portatili e mobili possono interferire con il funzionamento delle apparecchiature elettromedicali.

Attenzione: utilizzare ESCLUSIVAMENTE il cavo caricabatterie e l'adattatore in dotazione nella confezione con il Controller. EVITARE l'uso di cavi di ricarica alternativi o altri accessori, in quanto possono danneggiare il Controller o avere effetti sulla ricarica in futuro. Se è necessario utilizzare un altro tipo di cavo, utilizzare solo cavi di lunghezza inferiore o uguale a 1,2 metri (4 piedi).

Prestare attenzione in caso di utilizzo del Sistema Omnipod 5 nei pressi di altre apparecchiature elettriche; se tale utilizzo è inevitabile (come negli ambienti di lavoro), osservare il Sistema Omnipod 5 per controllare che funzioni come previsto.

Il Sistema Omnipod 5 comunica mediante l'emissione di energia a radiofrequenza di basso livello. Come per tutti i ricevitori RF, esiste comunque un potenziale di interferenza, anche per i dispositivi conformi ai requisiti FCC e CISPR in materia di emissioni radiate.

Il Sistema Omnipod 5 comunica sulla base delle caratteristiche seguenti:

Frequenza: 2,400–2,480 GHz, modulata digitalmente, con una potenza irradiata isotropica effettiva di 1,14 mW

Il Sistema Omnipod 5 supera ampiamente i requisiti di immunità degli standard generali per la compatibilità elettromagnetica IEC 60601-1-2.

Attenzione: NON utilizzare apparecchiature di comunicazione portatili in radiofrequenza (RF) (comprese periferiche come cavi antenna e antenne esterne) a una distanza inferiore a 30 cm (12 pollici) da qualsiasi parte del Sistema Omnipod 5, in quanto in caso contrario tale azione può ripercuotersi sulla comunicazione tra il Controller e il Pod.

Emissioni elettromagnetiche

Questa apparecchiatura è progettata per l'uso negli ambienti elettromagnetici specificati di seguito. L'utilizzatore di questo tipo di apparecchiatura dovrà assicurarsi che l'utilizzo avvenga in ambienti conformi alle specifiche.

Emissioni	Conformità in base a	Ambiente elettromagnetico
Emissioni RF (CISPR11)	Gruppo 1	Per comunicare, il Pod, il Controller e il Trasmettitore emettono energia a radiofrequenza (RF) di basso livello. Per quanto improbabile, le apparecchiature elettroniche circostanti possono subire interferenze.
Classificazione emissioni CISPR B	Classe B	Il sistema è idoneo all'uso in tutti gli ambienti, compresi quelli domestici.
Emissioni armoniche (IEC 61000-3-2)	Classe A	
Fluttuazioni di tensione/ Emissioni flicker (IEC 61000-3-3)	$P_{st} \leq 1,0$ $P_{lt} \leq 0,65$ $d_c \leq 3\%$ $d_{max} \leq 4\%$ $d_{(t)} \geq 200 \text{ ms}$ durante una variazione di tensione deve essere $\leq 3\%$	

Immunità elettromagnetica

L'apparecchio è progettato per l'uso negli ambienti elettromagnetici specificati di seguito. Attenersi ai requisiti indicati durante l'uso del sistema.

Immunità	Livello di test IEC 60601-1-2	Livello di conformità (del dispositivo)	Ambiente elettromagnetico
Scariche elettrostatiche, ESD (IEC 61000-4-2)	a contatto: ± 8 kV in aria: ± 15 kV	± 8 kV ± 15 kV	Se i pavimenti sono rivestiti in materiale sintetico, cercare di evitare le scariche elettrostatiche.
Transiente elettrico veloce/Burst (IEC 61000-4-4)	± 2 kV per le linee di alimentazione ± 2 kV porta di alimentazione CC in ingresso ± 1 kV per le linee di ingresso/uscita	± 2 kV per le linee di alimentazione ± 2 kV porta di alimentazione CC in ingresso ± 1 kV per le linee di ingresso/uscita	La qualità dell'alimentazione di rete deve essere quella tipica di un ambiente domestico, commerciale o ospedaliero.
Sovratensione (IEC 61000-4-5)	± 1 kV modalità differenziale ± 2 kV modo comune	± 1 kV modalità differenziale ± 2 kV modo comune	La qualità dell'alimentazione di rete deve essere quella tipica di un ambiente domestico, commerciale o ospedaliero.
Disturbi condotti indotti da campi RF (IEC 61000-4-6)	3 V da 150 KHz a 80 MHz 6 V in ISM e bande radiofoniche amatoriali tra 150 KHz e 80 MHz	3 V da 150 KHz a 80 MHz 6 V in ISM e bande radiofoniche amatoriali tra 150 KHz e 80 MHz	Compatibile con la maggior parte degli ambienti. Tenere le apparecchiature di comunicazione RF portatili ad almeno 30 cm (12 pollici) di distanza dal Sistema Omnipod 5.

Immunità elettromagnetica

<p>Cali di tensione, brevi interruzioni, variazioni di tensione sulle linee di alimentazione in ingresso (IEC 61000-4-11)</p>	<p>70% UT (30% calo in UT) per 25/30 cicli</p> <p>0% UT (100% calo in UT) per 1 ciclo a 0 gradi</p> <p>0% UT (100% calo in UT) per 0,5 cicli a 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 e 315 gradi</p> <p>0% UT (100% calo in UT) per 250/300 cicli</p>	<p>70% UT (30% calo in UT) per 25/30 cicli</p> <p>0% UT (100% calo in UT) per 1 ciclo a 0 gradi</p> <p>0% UT (100% calo in UT) per 0,5 cicli a 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 e 315 gradi</p> <p>0% UT (100% calo in UT) per 250/300 cicli</p>	<p>La qualità dell'alimentazione di rete deve essere quella tipica di un ambiente domestico, commerciale o ospedaliero. Se l'utilizzatore necessita di un funzionamento continuo durante l'interruzione dell'alimentazione di rete, potrebbe essere necessario utilizzare un gruppo di continuità o una batteria.</p>
<p>Campi magnetici con frequenza di 50/60 Hz (IEC 61000-4-8)</p>	<p>30 A/m</p>	<p>400 A/m</p>	<p>Compatibile con la maggior parte degli ambienti. I campi magnetici con intensità superiore a 400 A/m sono improbabili tranne che in caso di distanza ravvicinata da apparecchiature magnetiche industriali.</p>
<p>RF irradiata (IEC 61000-4-3)</p>	<p>10 V/m a 80 MHz–2,7 GHz</p>	<p>10 V/m</p>	<p>Compatibile con la maggior parte degli ambienti. Tenere le apparecchiature di comunicazione RF portatili ad almeno 30 cm (12 pollici) di distanza dal Sistema Omnipod 5.</p>

La tabella seguente elenca i livelli di immunità a specifiche frequenze di test per testare gli effetti di alcune apparecchiature di comunicazione wireless. Le frequenze e i servizi elencati nella tabella sono esempi rappresentativi di varie collocazioni in cui è possibile utilizzare il sistema.

Frequenza (MHz)	Banda a) (MHz)	Servizio a)	Modulazione b)	Potenza massima (W)	Distanza (m)	LIVELLO TEST DI IMMUNITÀ (V/m)
385	380–390	TETRA 400	Modulazione a impulsi b) 18 Hz	1,8	0,3	27
450	430–470	GMRS 460, FRS 460	FM c) deviazione ± 5 kHz sinusoidale 1 kHz	2	0,3	28
710	704–787	Banda LTE 13, 17	Modulazione a impulsi b) 217 Hz	0,2	0,3	9
745						
780						
810	800–960	GSM 800/900, TETRA 800, ODEM 820, CDMA 850, banda LTE 5	Modulazione a impulsi b) 18 Hz	2	0,3	28
870						
930						
1720	1700–1990	G GSM 1800, CDMA 1900, GSM 1900, DECT, banda LTE 1, 3, 4, 25; UMTS	Modulazione a impulsi b) 217 Hz	2	0,3	28
1845						
1970						
2450	2450–2570	Bluetooth WLAN, 802.11b/g/n, RFID 2450, banda LTE 7	Modulazione a impulsi b) 217 Hz	0,2	0,3	9
5240	5100–5800	WLAN 802.11 a/n	Modulazione a impulsi b) 217 Hz	0,2	0,3	9
5500						
5785						

a) Per alcuni servizi, sono incluse solo le frequenze di uplink.

b) La portante deve essere modulata utilizzando un segnale a onda quadra del ciclo di lavoro al 50%.

c) In alternativa alla modulazione FM, è possibile utilizzare la modulazione a impulsi al 50% a 18 Hz poiché, sebbene non rappresenti la modulazione effettiva, costituirebbe il caso più sfavorevole.

Questa tabella elenca i livelli di immunità a specifiche frequenze di test per l'intervallo dei campi magnetici di prossimità da 9 kHz a 13,56 MHz.

Frequenza di test	Modulazione	Livello test di immunità (A/m)
30 kHz a)	CW	8
134,2 kHz	Modulazione a impulsi b) 2,1 kHz	65 c)
13,56 MHz	Modulazione a impulsi b)	7,5 c)

a) Questo test è applicabile solo alle apparecchiature e ai sistemi ME destinati a un AMBIENTE SANITARIO DOMESTICO.

b) La portante deve essere modulata utilizzando un segnale a onda quadra con ciclo di lavoro al 50%.

c) RMS prima dell'applicazione della modulazione.

Nota: queste linee guida possono non risultare applicabili in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione da parte di strutture, oggetti e persone.

Non è possibile prevedere con precisione, a livello teorico, l'intensità dei campi emessi da trasmettitori fissi, come le stazioni base per telefonia radio (cellulare/cordless) e i sistemi terrestri mobili di radiocomunicazione, le radio amatoriali, le emittenti radiofoniche in AM e FM e le emittenti televisive. Per valutare un ambiente elettromagnetico generato da trasmettitori RF fissi, si consiglia il ricorso a un'indagine sul sito elettromagnetico. Se l'intensità di campo misurata nel luogo di utilizzo dell'apparecchiatura è superiore al corrispondente livello di conformità RF (vedi sopra), è necessario verificarne il normale funzionamento. In caso di funzionamento anomalo, potrebbero rendersi necessarie ulteriori misure, come il riorientamento o lo spostamento dell'apparecchiatura.

Carta dei diritti del cliente

Missione aziendale

Insulet Corporation si dedica alla progettazione, allo sviluppo e alla distribuzione di prodotti che offrono opzioni di trattamento superiori e benefici per la salute per tutta la vita delle persone affette da diabete.

Ambito dei servizi

L'ambito dei servizi di Insulet Corporation è limitato alla fornitura del Sistema Automatizzato di Erogazione di Insulina Omnipod 5.

Il Sistema Omnipod 5 è composto dal Pod e dal Controller wireless portatile, che programma il Pod con le istruzioni per l'erogazione di insulina.

Conformità

Il Sistema Automatizzato di Erogazione di Insulina Omnipod 5 è prodotto e distribuito da Insulet Corporation. L'azienda si impegna a rispettare tutte le normative federali e statali. Per qualsiasi domanda o dubbio in merito alle nostre attività, è possibile contattarci al numero 1-800-591-3455 (al di fuori degli Stati Uniti: 1-978-600-7850).

Richieste

I rappresentanti sono a disposizione per rispondere alle richieste relative ai prodotti 24 ore al giorno al nostro numero verde, 1-800-591-3455 (al di fuori degli Stati Uniti: 1-978-600-7850). Per qualsiasi ulteriore domanda, dubbio o reclamo, è possibile contattarci tra le 8:30 e le 18:00 ET, dal lunedì al venerdì, al numero 1-800-591-3455 (al di fuori degli Stati Uniti: 1-978-600-7850). Risponderemo immediatamente ove possibile; per alcuni problemi la risoluzione potrebbe richiedere fino a 14 giorni.

Certificazione CHAP

Insulet Corporation è certificata dal Community Health Accreditation Program (CHAP) dal 2007. Per ulteriori informazioni sul programma CHAP o per comunicare problemi che non è stato possibile risolvere direttamente con l'azienda, visitare il sito www.chapinc.org o chiamare CHAP al numero 1-800-656-9656.

Carta dei diritti e responsabilità del cliente

Il cliente ha il diritto di:

1. Ricevere un servizio rispettoso e attento.
2. Ricevere assistenza indipendentemente da razza, credo, nazionalità, genere, età, disabilità, orientamento sessuale, stato di salute o affiliazione religiosa.
3. Avere garantita la riservatezza di tutte le informazioni relative alla sua persona, alla sua assistenza medica e al suo servizio. Consultare la nostra Informativa sulla privacy HIPAA più avanti in questa sezione.
4. Ricevere una risposta tempestiva a eventuali richieste di assistenza.
5. Ricevere assistenza continua.
6. Selezionare il fornitore di apparecchiature mediche desiderato.
7. Prendere decisioni informate in merito alla pianificazione delle cure.
8. Comprendere quali servizi verranno forniti.
9. Ottenere una spiegazione delle spese, inclusa la politica di pagamento.
10. Accettare o rifiutare qualsiasi parte del piano di assistenza o di cura.

11. Presentare reclami senza timore di cessazione del servizio o altre ritorsioni.
12. Avere garantito il soddisfacimento delle proprie esigenze di comunicazione.

Il cliente ha la responsabilità di:

1. Porre domande su qualsiasi parte del piano di assistenza o di cura che non ha compreso.
2. Utilizzare l'apparecchiatura per lo scopo per cui è stata prescritta, seguendo le istruzioni per l'uso fornite, prestando attenzione alle operazioni di manipolazione, sicurezza e pulizia.
3. Fornire a Insulet Corporation le informazioni assicurative necessarie per ottenere il pagamento dei servizi.
4. Farsi carico delle spese non coperte dalla propria assicurazione. Il cliente è responsabile dell'intero saldo del proprio conto.
5. Informarci immediatamente di:
 - a. eventuale guasto all'apparecchiatura, danno o necessità di materiali di consumo
 - b. eventuale modifica alla prescrizione medica o cambiamento del medico
 - c. eventuale variazione o perdita della copertura assicurativa
 - d. eventuale variazione di indirizzo o numero di telefono, permanente o temporanea

Garanzia espressa limitata, esclusione di responsabilità e limitazione dei rimedi per Controller e Pod

GARANZIA ESPRESSA LIMITATA, ESCLUSIONE DI GARANZIE IMPLICITE E LIMITAZIONE DEI RIMEDI PER IL CONTROLLER PORTATILE E I POD DEL SISTEMA AUTOMATIZZATO DI EROGAZIONE DI INSULINA OMNIPOD 5

COPERTURA DELLA GARANZIA ESPRESSA LIMITATA

Copertura della garanzia limitata per il Controller portatile del Sistema Automatizzato di Erogazione di Insulina Omnipod 5 ("Controller")

In base ai termini e alle condizioni qui riportati ("Garanzia espressa limitata"), l'ente Insulet che (i) ha fornito il Controller al cliente o (ii) ha reso disponibile il Controller nel Paese in cui il cliente ha ricevuto il prodotto (ciascuno indicato come "Insulet") garantisce al cliente, destinatario originale del Sistema Automatizzato di Erogazione di Insulina Omnipod 5 ("Sistema Omnipod 5"), che, se Insulet determina che, durante il periodo di quattro (4) anni (per tutti i Paesi eccetto il Canada) o di cinque (5) anni (per il Canada) dalla data di acquisto (o dalla ricevuta se l'acquisto è stato effettuato per conto terzi), il Controller incluso nella spedizione presenta un difetto di materiale o

di fabbricazione durante l'utilizzo in condizioni normali, Insulet riparerà o sostituirà, a sua esclusiva discrezione, il Controller. Se Insulet decide di riparare il Controller, può scegliere di farlo implementando un aggiornamento del software, compreso un aggiornamento del software over-the-air, senza ulteriore avviso all'acquirente originale. Se Insulet decide di sostituire il Controller, può scegliere di farlo mediante sostituzione con un Controller aggiornato.

Il periodo di garanzia applicabile si applica solo ai Controller nuovi e, nel caso in cui il Controller venga riparato o sostituito, il periodo di garanzia non verrà esteso o ripristinato. Pertanto, se Insulet procede alla sostituzione di un Controller ai sensi della presente Garanzia espressa

limitata, la copertura della garanzia per il Controller sostitutivo scadrà dopo quattro (4) (per tutti i Paesi eccetto il Canada) o cinque (5) anni (per il Canada) dalla data di acquisto del Controller originale.

Copertura della garanzia limitata per i Pod del Sistema Automatizzato di Erogazione di Insulina Omnipod 5

Ai sensi della presente Garanzia espressa limitata, Insulet garantisce al cliente, acquirente originale del Sistema Automatizzato di Erogazione di Insulina Omnipod 5, che, se Insulet determina, durante il periodo di diciotto (18) mesi dalla data di produzione e settantadue (72) ore dal momento dell'attivazione, che un Pod del Sistema Automatizzato di Erogazione di Insulina Omnipod 5 ("Pod") non scaduto incluso nella spedizione presenta un difetto di materiale o di fabbricazione durante l'utilizzo in condizioni normali, Insulet sostituirà il Pod. Per avere diritto

alla sostituzione, l'attivazione del Pod deve essere avvenuta nel rispetto di entrambi i periodi di tempo (ossia, deve avere avuto luogo entro la data di scadenza stampata sull'etichetta, la quale deve riportare una data di produzione non superiore a diciotto (18) mesi ed entro le settantadue (72) ore precedenti alla notifica del reclamo a Insulet).

Il suddetto periodo di garanzia di diciotto (18) mesi e di settantadue (72) ore si applica esclusivamente ai Pod nuovi. Inoltre, l'eventuale sostituzione di un Pod non comporta estensione o ripristino del periodo di garanzia. Pertanto, se Insulet sostituisce un Pod ai sensi della presente Garanzia espressa limitata, la copertura della garanzia per il Pod sostitutivo scadrà dopo diciotto (18) mesi dalla data di produzione del Pod originale o dopo settantadue (72) ore dall'attivazione del Pod originale, a seconda di quale eventualità si verifichi per prima.

TERMINI E CONDIZIONI DELLA GARANZIA ESPRESSA LIMITATA

La presente Garanzia espressa limitata si applica esclusivamente ai Controller e Pod originariamente venduti per l'utilizzo nel Paese in cui il cliente ha acquistato o ricevuto il prodotto in questione (il "Territorio"). Insulet spedisirà Controller e Pod riparati o sostituiti e fornirà servizi di garanzia esclusivamente all'interno del Territorio.

Procedura di richiesta di intervento

Per usufruire della presente Garanzia espressa limitata è necessario notificare a Insulet il presunto difetto del Controller o del Pod entro il periodo di garanzia applicabile contattando l'Assistenza clienti pertinente al numero indicato sul sito web o nel *Manuale d'uso tecnico* del prodotto. Per richieste di intervento relative al Controller è necessario fornire il numero di serie del dispositivo e una descrizione del presunto difetto. Per richieste di intervento relative a un Pod è necessario fornire il numero di lotto del dispositivo e una descrizione del presunto difetto. Potrebbe essere richiesto, tra l'altro, di fornire prova della data di acquisto (o della ricezione in caso di acquisto per conto terzi) del Controller e/o del Pod e della data di attivazione del Pod.

Qualora il cliente non rispetti uno dei passaggi sopra descritti, la copertura ai sensi della presente Garanzia espressa limitata potrebbe essere invalidata.

A meno che Insulet non scelga di riparare il Pod o il Controller (il che può includere, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, un kit di riparazione o una o più parti di ricambio forniti da Insulet) o designi un riparatore esterno, è necessario ottenere l'autorizzazione di Insulet prima di procedere alla restituzione del Pod o del Controller a Insulet. Il Pod o il Controller deve essere adeguatamente imballato e restituito a Insulet seguendo le istruzioni riportate nel kit di Autorizzazione alla restituzione merci (Return Merchandise Authorization, RMA) che sarà inviato al cliente da Insulet. Previa autorizzazione, Insulet provvederà a farsi carico di tutte le ragionevoli spese di imballaggio e spedizione, laddove applicabile, sostenute per la spedizione del Pod o del Controller a Insulet ai sensi della presente Garanzia espressa limitata. A scanso di equivoci, la presente Garanzia espressa limitata non copre le riparazioni eseguite o le sostituzioni effettuate da persone fisiche o giuridiche diverse da Insulet, a eccezione di quelle eseguite o fornite da terze parti esplicitamente designate da Insulet.

Prova d'acquisto

Al fine di verificare la data di acquisto (o della ricevuta in caso di acquisto per conto terzi), la data di produzione o il momento dell'attivazione e per determinare se la richiesta di intervento ai sensi della presente Garanzia espressa limitata rientra nei periodi di garanzia applicabili, Insulet può richiedere al cliente di fornire una prova valida dell'acquisto, della fabbricazione o dell'attivazione. Qualora il cliente non presenti prova d'acquisto, di fabbricazione o di attivazione valida, come stabilito da Insulet, la copertura della presente Garanzia espressa limitata potrebbe essere invalidata.

Esclusioni

La presente Garanzia espressa limitata copre solo l'acquirente originale e non può essere trasferita o assegnata con la vendita, il noleggio o altro trasferimento del Controller o del Pod a qualsiasi altra persona o entità.

La presente Garanzia espressa limitata si applica solo se il Controller o il Pod in questione è stato utilizzato in conformità al *Manuale d'uso tecnico* del Sistema Automatizzato di Erogazione di Insulina Omnipod 5 e/o con altre istruzioni scritte fornite da Insulet. LA PRESENTE GARANZIA ESPRESSA LIMITATA NON SI APPLICA SE IL CONTROLLER O IL POD È STATO:

- alterato, cambiato o modificato da qualsiasi soggetto fisico o giuridico diverso da Insulet
- aperto, sottoposto a manutenzione o riparato da eventuali soggetti fisici o giuridici diversi da Insulet
- danneggiato da caso fortuito o altro evento di "forza maggiore"
- danneggiato da uso improprio, abuso, negligenza, incidente, uso sconsiderato o manipolazione, cura o stoccaggio non adeguati
- danneggiato da usura e logorio, cause non correlate a materiali o fabbricazione difettosi (comprese a titolo esemplificativo batterie o schede SIM difettose o inadatte) o altre circostanze al di fuori del ragionevole controllo di Insulet

La presente Garanzia espressa limitata non si applica a schede SIM, strisce reattive o batterie che non sono state fornite da Insulet e altri accessori o prodotti correlati forniti da terze parti (ad es., strumenti di gestione dei dati, Sensori).

La presente Garanzia espressa limitata non copre difetti di progettazione (ad es., reclami relativi al fatto che il Controller o il Pod avrebbero dovuto essere progettati diversamente).

ESCLUSIONE DELLE GARANZIE IMPLICITE E LIMITAZIONE DEI RIMEDI

Nella misura massima consentita dalla normativa vigente nel Paese in cui il cliente ha acquistato o ricevuto il Controller e i Pod:

- La presente Garanzia espressa limitata e i rimedi dalla stessa contemplati costituiscono le uniche garanzie e gli unici rimedi offerti da Insulet al cliente in relazione al Controller e ai Pod e tutte le altre garanzie implicite o legali sono espressamente escluse nella massima misura consentita dalla normativa.
- Insulet, i suoi fornitori, distributori, fornitori di servizi e/o agenti non saranno responsabili di danni indiretti, incidentali, speciali o consequenziali risultanti da un difetto del Controller o di un Pod o da una violazione della presente Garanzia espressa limitata, indipendentemente dal fatto che tale rivendicazione si basi su garanzia, contratto, fatto illecito o altro.

Nulla di quanto contenuto nella presente Garanzia espressa limitata è inteso a escludere la nostra responsabilità per morte o lesioni personali derivanti da negligenza, frode o dichiarazione fraudolenta o per violazione dei diritti legali del cliente in relazione al Controller o ai Pod.

Ulteriori disposizioni importanti

La presente Garanzia espressa limitata conferisce al cliente specifici diritti giuridici. Potrebbero sussistere altri diritti che variano a seconda della giurisdizione.

La presente Garanzia espressa limitata non pregiudica i diritti del cliente in base alla legge.

Insulet non garantisce l' idoneità del Controller o dei Pod o del Sistema Omnipod per alcun soggetto specifico, in quanto le cure e i trattamenti sanitari sono un ambito complesso che richiede i servizi di referenti medici qualificati.

La presente Garanzia espressa limitata intercorre tra il cliente e Insulet. Nessun'altra parte ha alcun diritto di far valere alcuno dei suoi termini. Insulet può trasferire i propri diritti e obblighi previsti dalla presente Garanzia espressa limitata a un'altra parte senza previa autorizzazione dell'utente.

Nel caso in cui una disposizione della presente Garanzia espressa limitata dovesse essere giudicata non valida da un tribunale, tale disposizione sarà considerata eliminata dalla presente Garanzia espressa limitata senza influire sulla validità delle rimanenti disposizioni.

Esclusione di ulteriori garanzie o accordi

Tranne in caso di modifica scritta e firmata da Insulet e dal cliente, la precedente Garanzia espressa limitata è da intendersi come l'accordo completo ed esclusivo tra Insulet e il cliente, in sostituzione di eventuali precedenti garanzie o accordi, verbali o scritti, e altre comunicazioni relative a eventuali difetti, guasti o altro malfunzionamento del Controller, di un Pod o del Sistema Automatizzato di Erogazione di Insulina Omnipod 5. Nessun dipendente, agente o altro rappresentante di Insulet o eventuali altre parti sono autorizzati a stipulare alcun accordo o garanzia sul prodotto applicabili al Controller, a un Pod o al Sistema Automatizzato di Erogazione di Insulina Omnipod 5 in aggiunta a quelli descritti nel presente documento.

Consenso all'Esclusione delle garanzie implicite e alla Limitazione dei rimedi

Qualora non accettasse e desiderasse rifiutare l'Esclusione delle garanzie implicite e la Limitazione dei rimedi fornite con il Sistema Automatizzato di Erogazione di Insulina Omnipod 5, il cliente dovrà restituire eventuali prodotti del Sistema automatizzato di erogazione di insulina Omnipod 5 (compresi il Controller e i Pod) a Insulet in cambio di un rimborso completo. La mancata restituzione dei suddetti prodotti del Sistema Automatizzato di Erogazione di Insulina Omnipod 5 costituirà conferma e consenso all'Esclusione delle garanzie implicite e alla Limitazione dei rimedi.

Normativa e competenza giurisdizionale

La presente Garanzia espressa limitata (ed eventuali obblighi extracontrattuali derivanti da o in relazione con la stessa) è disciplinata dalla legge del Paese in cui il cliente ha inizialmente acquistato o ricevuto il Controller o i Pod. Qualsiasi tribunale della giurisdizione competente in tale Paese avrà giurisdizione esclusiva e sarà la sede di decisione per tutte le controversie derivanti da o in relazione alla presente Garanzia espressa limitata.

Rev.: Gennaio 2022

Regolamento relativo ai dispositivi medici

Insulet è conforme al regolamento relativo ai dispositivi medici 2017/745.

Dettagli del Rappresentante autorizzato nell'UE

Referente: Complaints Officer

Indirizzo: Insulet Netherlands B.V., WTC Utrecht Stadsplateau 7,
Suite 7.06,
3521 AZ Utrecht, The Netherlands

TEL.: +31 308 990 670

E-mail: ECRep@insulet.com



Indice

A

- accuratezza della portata 408
- acqua
 - e il Controller 200
 - e il Pod 199
- Adattabilità 335
 - Velocità Basale Adattiva 330–331
- adesivo 94
- allarme di notifica spegnimento Pod.
 - Vedere* Segnali di Notifica:
 - Spegnimento Pod
- allarme di pericolo spegnimento Pod.
 - Vedere* Allarmi di Pericolo:
 - Spegnimento Pod
- allarme Pod scaduto 180
- allarmi
 - controllare o testare 170
 - di notifica 350–353
 - pericolo 170–178
 - Silenziamento 192
- Allarmi di Pericolo
 - Errore App Omnipod 5 172
 - Errore del Pod 174
 - Errore di sistema 178
 - Insulina nel Pod terminata 176
 - Memoria Omnipod 5 danneggiata 173
 - Pod scaduto 175
 - Rilevata ostruzione 171
 - Spegnimento Pod 177
- Alternanza modalità
 - da automatizzata a manuale 343
- annullare
 - bolo 234
- Assistenza prodotto. *Vedere* Assistenza clienti
- avvio erogazione di insulina 130, 182
- azione dell'insulina. *Vedere* Durata

dell'azione dell'insulina

B

- basale temporanea
 - attivare o impostare 111
 - comprensione 113–117
 - impostata a zero 111, 129
 - impostazione 142
 - preimpostazione. *Vedere* basale temporanea preimpostata
- batteria, Controller
 - carica 204
 - risparmiare 135
- batteria del Controller
 - modalità di carica 204
- batteria quasi scarica
 - ricarica 204
- Blocco schermo
 - blocco 47
 - cambiare sfondo 136
 - messaggio 135
 - modificare messaggio 135
 - sbloccare 46
- Bluetooth
 - Controller 134
- bolle d'aria 86
- bolo, immediato
 - annullare 234
 - avanzamento 232
 - erogare 242
 - portata 408
- Bolo massimo
 - comprensione 254
 - impostazione 248
- bolo non confermato 154
- bolo prolungato
 - annullare 234
 - avanzamento 233

- erogare 244
- impostazione 142, 249
- bolo, prolungato
 - annullare 234
 - avanzamento 233
 - erogare 244
 - impostazione 249
- bolo stimato 154

C

- cannula 95, 407
- chetoacidosi diabetica 82, 220
- chetoni 221
- compatibilità elettromagnetica 420
- configurare il Controller 66
- configurare nuovo Pod 82
- connettività di rete 134
- conservazione Controller 199
 - specifiche 408
- conservazione Pod
 - posizione 198
 - specifiche 407
- controllare funzione di allarme 170
- Controller 45
 - caduto o danneggiato 202
 - configurazione 64, 66
 - diagramma 45
 - interferenze elettriche 201
 - PIN del Controller 69
 - sostituzione 202
 - timeout schermo 135
- Controller caduto 202
- Controller danneggiato 202
- controlli aeroportuali 211
- Correzione Inversa 251, 257, 265
- correzione IOB 256, 263
- creare
 - nuovo programma basale 103

D

- Durata dell'azione dell'insulina
 - calcoli campione 263–264
 - impostazione 252

E

- esercizio fisico 222

F

- Fattore di Correzione 251, 256
- forni a microonde 201
- FreeStyle Libre 2 Plus 44, 291
- Funzione Attività fisica
 - abilitare 347
 - annullare 348
- funzioni di diagnostica
 - controlla allarmi 170

G

- garanzia 428
- giorni di malattia 221
- Glucosio
 - avviso di ipoglicemia urgente 183
 - risultati ALTO e BASSO 125, 281
 - Target Glicemico 256–272

I

- immettere Modalità Automatizzata 342
- immissione dati, modalità 36
- immissione di testo 37
- impostare basale temporanea
 - attivazione 111
- impostazione insulina nel Pod in esaurimento 140
- impostazione modalità aereo 134
- impostazione percentuale
 - basale temporanea 114
 - modificare impostazione 249
- impostazione promemoria programma 141
- impostazione Velocità basale massima 142
- impostazione velocità fissa (U/h)
 - basale temporanea 114
 - modificare impostazione 142
- impostazioni
 - basale temporanea 142
 - Bolo massimo 248
 - configurazione bolo prolungato

249
 Correggi se superiore a 249
 Correzione Inversa 251
 Durata dell'azione dell'insulina
 252
 Fattore di Correzione 251
 immagine di blocco schermo 136
 insulina nel Pod in esaurimento
 140
 luminosità schermo 135
 messaggio blocco schermo 135
 modalità aereo 134
 PIN 136
 promemoria programma 141
 Rapporto Insulina/Carboidrati
 (IC) 250
 Scadenza Pod 139
 sommario 405
 Spegnimento Pod 140
 Suggestore bolo 249–252
 timeout schermo 135
 Velocità basale massima 142
 impostazioni predefinite 405
 indicazioni per l'uso 6
 insulina
 ad azione rapida e ad azione pro-
 lungata 220
 conservazione 198
 registri cronologia 148–156
 insulina attiva. *See* insulina attiva
 insulina attiva (IOB) 256
 interferenze elettriche 201
 interrompere (sospendere) l'erogazio-
 ne di insulina 128
 intervento chirurgico 223
 IOB pasto 254, 263
 iperglicemia
 evitare 217
 sintomi 217
 trattamento 219
 ipoglicemia 213–217
 evitare 214
 sintomi 213
 trattamento 216
 Ipoglicemia urgente
 Allarme di Notifica 183

K

kit di emergenza 211
 kit di glucagone 16, 214

L

Limitata 337
 liquido (acqua) e Controller 200
 luminosità, schermo 135

M

malattia 221
 mappa dei siti Pod
 utilizzo 90
 mappa siti Pod 90
 materiali di consumo
 Configurazione del Controller 65
 ottenimento 65
 viaggio 210
 messaggi di conferma 59
 modalità
 attività disponibili in 60
 Modalità Automatizzata
 Allarme Limitazioni all'erogazione
 automatica 350
 immettere 342
 Limitata 337
 passaggio alla modalità manuale
 344
 modalità del sistema. *Vedere* modalità
 Modalità di Avvio 403
 Modalità Manuale
 passaggio alla modalità automa-
 tizzata 342
 modifica di un Programma Basale
 esistente 104

N

navigazione (notazione abbreviata)
 39
 non compatibile
 dispositivo 187
 notazione abbreviata per la navigazio-
 ne 39

Notifiche
 Notifica Elemento di Azione.
 Vedere Notifiche Elemento di Azione
Notifiche Elemento di Azione
 Connetti a rete Wi-Fi 185
 Errore Omnipod 5 187
nuotare 199
nuovo programma basale 103

O

ora legale 186
orientamento, Pod 93
ostruzione (occlusione)
 rilevamento 411

P

PIN
 dimenticato 47
 reimpostare 136
Pod
 accuratezza del flusso 408
 attivazione 82
 conservazione 198
 disattivare 96
 impostazione insulina nel Pod in esaurimento 140
 impostazione scadenza 139
 impostazione spegnimento 140
 orientamento 93
 portata 408
 pulizia 199
 selezione del sito 89, 93
 specifiche 407
pratica sportiva 222
preparare il sito di infusione 92
primo Pod in Modalità Automatizzata 342
Programma Basale
 cambiare 105
 creare nuovo 103
 eliminare 105
 informazioni su 106
 modificare 104
 rinominare 104

promemoria
 Programma 141
promemoria sicurezza
 segnali acustici 167
pulizia
 Controller 201
 Pod 199

Q

quantità massima di insulina 85
quantità minima di insulina 85

R

raggi X 211
rapporto carboidrati/insulina. *Vedere* Rapporto Insulina/Carboidrati (IC)
rapporto insulina/carboidrati. *Vedere* Rapporto Insulina/Carboidrati (IC)
Rapporto Insulina/Carboidrati (IC) 250, 256
registri cronologia
 carboidrati 148–156
 glucosio 148–156
 insulina, basale e bolo 148–156
registri cronologia basale 148–156
riattivare il Controller 46
ricovero ospedaliero 223
RM 223

S

sbloccare
 Controller 46
scadenza, Pod 139, 195
 Allarme di Notifica 180
scansioni TC 223
scheda Dashboard 49
Schermata Informazioni su 58
schermo
 luminosità 135
 protettore 36
 sensibilità 36
 timeout 135

- segmento di basale 106
 - Segnali di Notifica
 - Avvia insulina 182
 - Insulina nel Pod in esaurimento 179
 - Ipoglicemia urgente 183
 - Limitazioni all'erogazione automatica 350
 - Pod scaduto 180
 - Spegnimento Pod 181
 - Valori glicemici del sensore mancanti 352
 - selezione del sito, Pod 89
 - Sensore
 - allarme di notifica valori mancanti 352
 - Errore del Trasmettitore 284
 - FreeStyle Libre 2 Plus 44, 291
 - Rilevato problema di Dexcom 284
 - Trasmettitore non trovato 285
 - sforzo fisico 222
 - sicurezza
 - Controller 69
 - controlli automatici 88
 - elettrica 421-432
 - sicurezza elettrica 421
 - simboli sulle etichette 416
 - sintomi
 - DKA 220
 - iperglicemia 217
 - ipoglicemia 213
 - sito di infusione
 - linee guida per la selezione 89
 - preparazione 92
 - Soglia Correggi se superiore a 249, 256
 - sospendere (interrompere) erogazione di insulina 129
 - sospensione dell'erogazione di insulina 127
 - durante la modifica di un Programma Basale 104
 - sostituire Pod. Vedere attivare Pod
 - specifiche, tecniche
 - Pod 407
 - sport 222
 - Suggeritore bolo
 - calcoli campione 264
 - disabilitato 255
 - utilizzo del Sensore 240
- ## T
- Target Glicemico 249
 - temperatura
 - conservazione del Controller 200
 - insulina 84, 198
 - Pod 84, 407
 - temperatura di esercizio 200, 407
 - testo, immissione 37
 - timeout, schermo Controller 135
 - touchscreen 36
 - luminosità 135
 - sensibilità 36
 - timeout 135
- ## V
- vacanze 211
 - velocità basale 106
 - accuratezza del flusso 408
 - massima, impostazione 142
 - viaggio 211-212
 - vibrazione o segnale acustico
 - notifiche 166

Fattore di Correzione		Rapporto Insulina/Carboidrati (IC)	
Fattore di Correzione per ogni segmento temporale definito	1 unità di insulina riduce il glucosio di	Rapporto Insulina/Carboidrati (IC) per ogni segmento temporale	1 unità di insulina copre
da mezzanotte alle _____ mg/dL	_____ mg/dL	da mezzanotte alle _____ g carboidrati	_____ g carboidrati
_____ alle _____ mg/dL	_____ mg/dL	_____ alle _____ g carboidrati	_____ g carboidrati
_____ alle _____ mg/dL	_____ mg/dL	_____ alle _____ g carboidrati	_____ g carboidrati
_____ alle _____ mg/dL	_____ mg/dL	_____ alle _____ g carboidrati	_____ g carboidrati
_____ alle _____ mg/dL	_____ mg/dL	_____ alle _____ g carboidrati	_____ g carboidrati
_____ alle _____ mg/dL	_____ mg/dL	_____ alle _____ g carboidrati	_____ g carboidrati
_____ alle _____ mg/dL	_____ mg/dL	_____ alle _____ g carboidrati	_____ g carboidrati


Durata dell'azione dell'insulina	
Periodo durante il quale l'insulina rimane "attiva" nel corpo dopo l'erogazione di un bolo	_____ ore

Cibi preferiti	
Nome	Grammi di carboidrati
_____	_____ g carboidrati
_____	_____ g carboidrati
_____	_____ g carboidrati
_____	_____ g carboidrati
_____	_____ g carboidrati
_____	_____ g carboidrati
_____	_____ g carboidrati

Velocità basale massima
Limite superiore per velocità basale in un Programma Basale o una Basale Temporanea _____ U/h

Bolo massimo
Quantità massima di insulina che si può richiedere in un singolo bolo _____ U/h

omnipod[®] 5

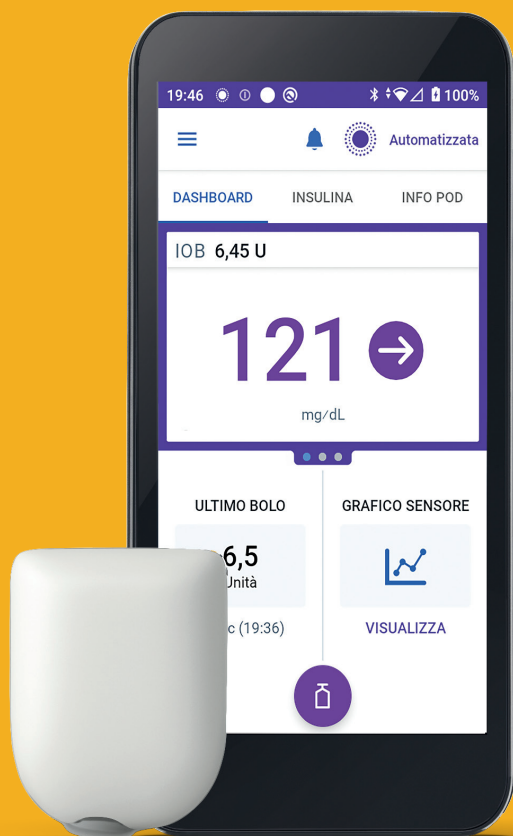

Insulet Corporation
100 Nagog Park
Acton, MA 01720, USA
1-800-591-3455 | 1-978-600-7850
omnipod.com

Pod mostrato senza l'adesivo necessario.



PT-001887

Reference #: PDM-M001-G-MG PT-001887-AW Rev. 01 09/24